



PHILIPS

Lumea

BRI940, BRI944,
BRI945, BRI946,
BRI947, BRI948



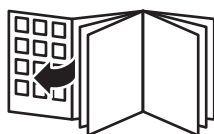

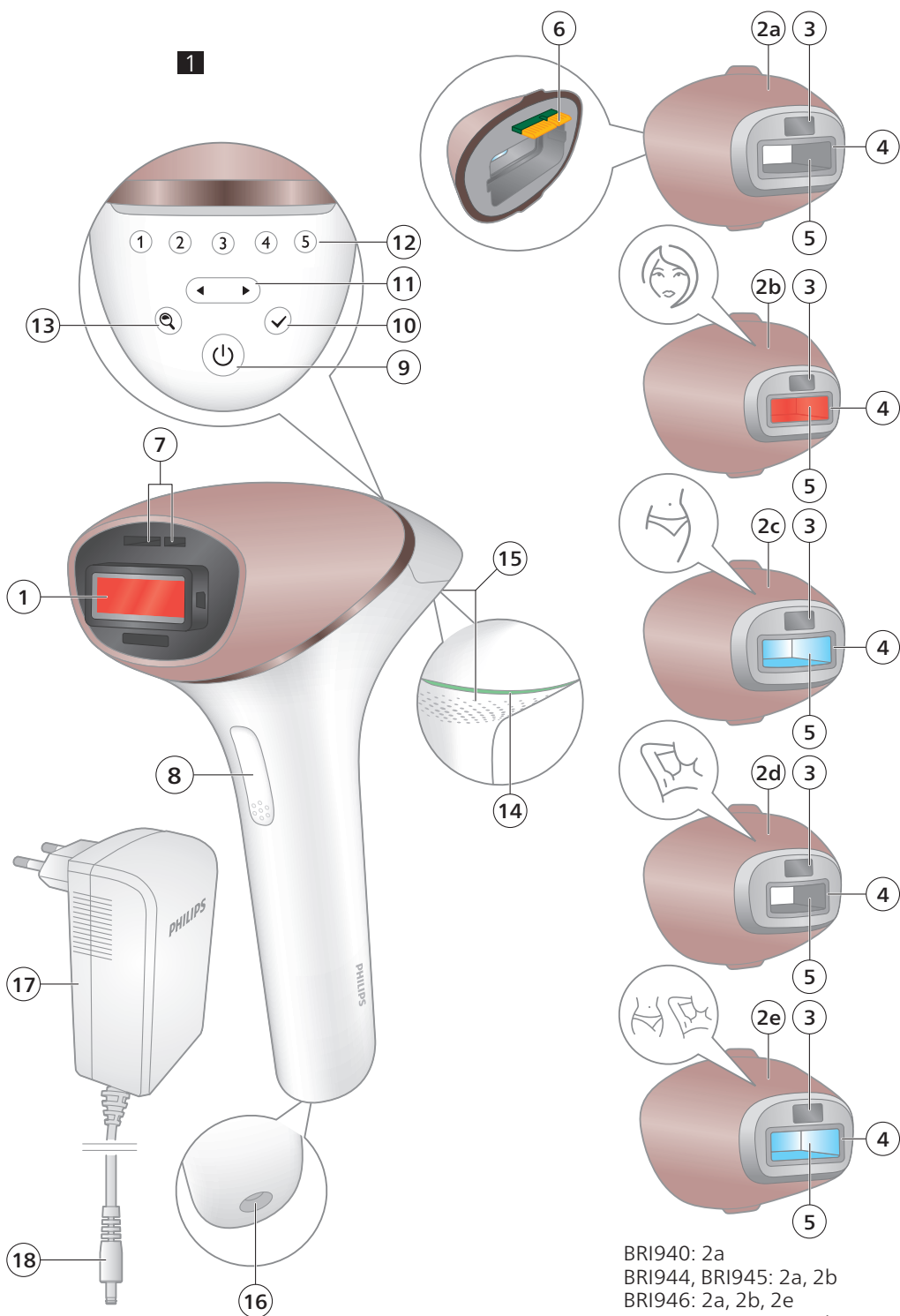

BRI940: 2a
 BRI944, BRI945: 2a, 2b
 BRI946: 2a, 2b, 2e
 BRI947, BRI948: 2a, 2b, 2c, 2d

Відповідні кольори шкіри



Колір волосся на тілі



Українська 6

Зміст

Вітаємо	6
Огляд пристрою	7
Протипоказання	7
Важлива інформація з техніки безпеки	10
Як працює IPL	12
Рекомендований графік застосування	13
Очікувані результати	14
Інструкція з використання	15
Застосування фотоепілятора Lumea	16
Докладніше про фотоепілятор Lumea	21
Насадки	21
Датчик SmartSkin	23
Вибір інтенсивності світла	23
Режими подачі імпульсу світла: з відривом пристрою (Stamp & Flash) та без відриву (Slide & Flash)	25
Використання епілятора Lumea перед прийманням сонячних ванн і засмаги та після них	25
У дорогу з фотоепілятором	26
Після використання	26
Усунення несправностей	27
Гарантія та підтримка	31
Утилізація	31
Технічні характеристики	32
Електромагнітна сумісність — інформація про відповідність	33
Пояснення символів	34

Вітаємо

Вітаємо у світі краси Philips Lumea! Ви лише за кілька тижнів від гладенької шовковистої шкіри.

Фотоепілятор Lumea використовує технологію інтенсивного імпульсного світла (IPL) — один із найефективніших методів, що надовго запобігає росту волосся. Раніше ця технологія використовувалася лише в професійних салонах краси. Разом із провідними вченими й дерматологами ми пристосували її для простого й ефективного використання в комфортних домашніх умовах. Лагідний епілятор Lumea зручний і ефективний, а також гарантує комфорт завдяки широкому вибору інтенсивності світла. Залиште небажане волосся в минулому.

Фотоепілятор Lumea можна використовувати на тілі й на жіночому обличчі (нижче вилиць).

Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/support. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте сайт www.philips.com/Lumea. Тут ви знайдете поради наших експертів, навчальне відео, а також відповіді на часті запитання. Отримайте максимальне задоволення від епілятора Lumea.

Примітка. Фотоепілятор Lumea можна використовувати лише на тілі і, за наявності насадки для обличчя, на жіночому обличчі (нижче вилиць).

Примітка. Завжди тримайте ці інструкції поблизу пристрою.

Огляд пристрою

- | | |
|---|--|
| 1 Віконце для випромінювання світла (із вбудованим УФ-фільтром) | 7 Отвір для електронних контактів |
| 2 Насадки | 8 Кнопка випромінювання |
| a Насадка для тіла | 9 Кнопка "Увімк./Вимк." |
| b Насадка для обличчя (BRI944, BRI945, BRI946, BRI947, BRI948) | 10 Кнопка підтвердження |
| c Насадка для зони бікіні (BRI947, BRI948) | 11 Кнопки перемикання |
| d Насадка для пахв (BRI947, BRI948) | 12 Індикатори інтенсивності |
| e Насадка для точної обробки (BRI946) | 13 Кнопка SmartSkin |
| 3 Датчик SmartSkin | 14 Індикатор «ГОТОВИЙ до випромінювання» |
| 4 Вбудована система безпеки | 15 Вентиляційні отвори |
| 5 Рефлектор всередині насадки | 16 Роз'єм пристрою |
| 6 Електронні контакти | 17 Адаптер |
| | 18 Мала вилка |
| | 19 Футляр (не показано) |
| | 20 Ганчірка для чищення (не показано) |

Протипоказання



Умови використання

Не використовуйте пристрій:

- Якщо вам менше 18 або більше 65 років.
- Якщо ваш колір шкіри позначено символом ☒ у таблиці «Відповідні кольори шкіри» на початку посібника користувача.
- Якщо ви вагітні або годуєте груддю (пристрій не було перевірено на жінках у період вагітності й годування груддю).
- Якщо ви маєте активний імплантат, наприклад кардіостимулятор, нейростимулятор, дозатор інсуліну. Використання пристрою в таких випадках може призвести до серйозних травм.

Лікарські препарати та медичні втручання

У жодному разі не використовуйте пристрій у наведених нижче випадках, пов'язаних із застосуванням лікарських препаратів.

- Якщо вашу шкіру протягом останніх 7 днів було оброблено препаратами, що містять альфа-гідрокислоти (АНА), бета-гідрокислоти (ВНА), третиноїн для місцевого застосування та азелаїнову кислоту.
- Якщо ви приймали будь-яку форму ізотретиноїну, наприклад Аккутан або Роаккутан, протягом останніх шести місяців. Ці препарати можуть спричиняти вразливість шкіри до надривів, ран чи подразнення.
- Якщо ви приймаєте фотосенсибілізуючі препарати, ознайомтеся з інструкцією до них. Не використовуйте пристрій, якщо в інструкції до препарату рекомендовано уникати сонця чи попереджається про можливі фотоалергічні або фототоксичні реакції під час прийому.
- Якщо ви приймаєте антикоагулянти, зокрема великі дози аспірину, і лікування не передбачає можливості зробити однотижневу перерву перед кожним використанням пристрою, щоб вивести препарат з організму.

Не використовуйте пристрій:

- Якщо ви проходили променеве лікування або хіміотерапію протягом останніх 3 місяців.
- Якщо ви вживаєте знеболюючі засоби, які зменшують чутливість шкіри до високих температур.
- Якщо ви приймаєте препарати, які пригнічують імунну систему.

Патології та розлади

Не використовуйте пристрій:

- Якщо ви маєте системне або метаболічне захворювання, як-от діабет або червоний вовчак.
- Якщо ви страждаєте на серцеву недостатність.
- Якщо у вас хвороба, яка спричиняє чутливість до світла, наприклад поліморфний фотодерматоз, сонячна кропив'янка, порфірія тощо.
- Якщо у вас був колагеноз, зокрема утворювалися келоїдні рубці чи спостерігалось погане загоювання ран.
- Якщо ви страждаєте на епілепсію з чутливістю до миготіння світла.
- Якщо шкіра чутлива до світла, і на ній швидко виникають алергічні реакції.
- Якщо у вас захворювання шкіри, наприклад рак шкіри в активній стадії; якщо у вас був рак шкіри чи інші ракові захворювання на ділянках, які потрібно обробити.
- Якщо на ділянках, які потрібно обробити, раніше спостерігалися симптоми судинних захворювань, наприклад варикозного розширення вен або телеангіектазії (судинна сітка).
- Якщо у вас порушення згортання крові.
- Якщо у вас хвороби, які пригнічують імунну систему (включаючи ВІЛ-інфекцію або СНІД).
- Якщо у вас є порушення пігментації, як-от вітиліго.

Захворювання шкіри

Не використовуйте пристрій:

- Якщо ви страждаєте на інфекційні захворювання, екзему, маєте опіки, запалені фолікули, відкриті рани, подряпини, простий (шкірний) герпес, поранення, ураження шкіри або гематоми (синці) на ділянках, які потрібно обробити.
- Якщо шкіра подразнена (має почервоніння або подряпини), ви обгоріли на сонці, засмагали або застосовували засоби для автозасмаги.
- На таких ділянках: родимих плямах, веснянках, бородавках, збільшених венах, потемнілих пігментованих ділянках шкіри, шрамах, аномаліях на шкірі — без консультації лікаря. Це може призвести до опіку чи зміни кольору шкіри й ускладнити виявлення хвороб, пов'язаних зі шкірою.

Ділянки



У жодному разі не використовуйте пристрій на поданих нижче ділянках.

- Навколо очей, на бровах і біля них. Фотоепілятор Lumea можна використовувати лише на тілі і, за наявності насадки для обличчя, на жіночому обличчі (нижче вилиць).
- На губах, ділянці волосся на голові, промежині, сосках, ареолах, малих статевих губах, піхві, анусі та всередині ніздрів і вух.
- На ділянках, для яких використовуються дезодоранти тривалої дії. Це може спричинити шкірні реакції.
- Поверх або біля таких чужорідних тіл, як силіконові імпланти, місця для підшкірних ін'єкцій (введення інсуліну) чи пірсинг.
- На ділянках із татуванням або перманентним макіяжем. Використовуйте пристрій так, щоб відстань між зовнішнім краєм насадки та краєм ділянки з татуванням або перманентним макіяжем становила мінімум 1 см.
- **Чоловікам** заборонено використовувати цей пристрій на обличчі та шиї (зокрема в зоні росту бороди й бакенбардів), а також в усій зоні геніталій. оскільки волосся в цих ділянках має іншу структуру. Використання пристрою в таких випадках може призвести до опіку шкіри, що супроводжуватиметься болем, тривалим почервонінням і зміною пігментації.

Примітка. Це неповний список. Якщо ви не впевнені, чи можете користуватися пристроєм, радимо звернутися до лікаря.

Важлива інформація з техніки безпеки

Попередження



Ознайомтеся з цими інструкціями й дотримуйтесь їх, щоб оптимізувати використання пристрою та запобігти ризику травмування, шкірних реакцій і побічних ефектів чи принаймні мінімізувати його.

- Перед використанням Lumea очистьте шкіру й переконайтеся, що вона повністю суха, на ній немає волосся й лосьйонів чи гелів.
- Зберігайте пристрій і адаптер сухими.
- Пристрій не можна мити. Ніколи не занурюйте зарядний пристрій у воду та не мийте його під краном.
- Поєднання води та електрики становить загрозу. Не використовуйте епілятор у вологому середовищі (наприклад, у ванній кімнаті, біля душі чи басейну). Потрапляння вологи може призвести до пошкодження пристрою та становить потенційну небезпеку.
- Завжди перевіряйте пристрій перед використанням. Не використовуйте пошкоджені пристрій чи адаптер. Завжди замінійте пошкоджену частину пристрою оригінальним відповідником.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не торкайтеся внутрішніх частин зламаного чи пошкодженого пристрою або адаптера, навіть коли їх від'єднано від електромережі.
- Не використовуйте пристрій, якщо УФ-фільтр віконця для випромінювання світла та/або насадка зламані, оскільки за цих обставин не можна гарантувати безпечної експлуатації пристрою.
- Не намагайтеся відкривати чи ремонтувати цей пристрій. Відкриття фотоепілятора Lumea від Philips може спричинити небезпечний контакт з електричними компонентами та імпульсною світловою енергією, що, у свою чергу, може призвести до тілесних пошкоджень та/або травмування очей.
- Перевірку та ремонт пристрою слід проводити виключно в сервісному центрі, уповноваженому Philips. Ремонт, виконаний неспеціалістами, може викликати дуже небезпечну ситуацію для користувача.
- Не намагайтеся модифікувати цей пристрій. Не змінюйте, не коригуйте та не обрізайте жодних частин пристрою (наприклад, адаптер чи його шнур), оскільки це може спричинити небезпечну ситуацію.
- Використовуючи пристрій, не дивіться на спалахи. Використовуйте пристрій у добре освітленій кімнаті, щоб спалах був менш яскравим для очей. Хоча це не належить до обов'язкових заходів безпеки, ви можете для зручності вдягати сонцезахисні або захисні окуляри, якщо світло завдає вам дискомфорт або здається занадто яскравим.
- Не застосовуйте більше одного імпульсу на одній ділянці шкіри. Поверхню насадки слід накладати на частину попередньо обробленої ділянки, щоб охопити всю оброблювану поверхню шкіри. Багаторазова обробка однієї ділянки не допомагає видаляти більше волосся.
- З міркувань гігієни пристроєм має користуватися лише одна особа.
- Не використовуйте креми для видалення волосся на ділянках, де планується застосування пристрою, оскільки хімічні речовини можуть викликати шкірні реакції.


- Не помічайте ділянки шкіри олівцем або ручкою. Це може призвести до опіків шкіри.
- Пристрій працює належним чином лише за умови зберігання та використання згідно з умовами, описаними в розділі «Технічні характеристики». Використання пристрою поза вказаним температурним діапазоном може спричинити опіки на шкірі.
- У деяких людей видалення волосся за допомогою інтенсивного імпульсного світла може прискорити ріст волосся. За останніми даними, найвищий ризик цього мають жінки Середземномор'я, Близького Сходу та Південної Азії в разі обробки обличчя та шиї.
- Якщо після видалення волосся на шкірі з'явилося подразнення або почервоніння, зачекайте доки воно зникне, і лише потім наносьте будь-які засоби. Якщо подразнення з'явилося після того, як Ви нанесли ці засоби, змийте їх водою. Якщо шкірні реакції залишаються, припиніть користування пристроєм і порадьтеся з лікарем.
- Якщо гоління, епіляція воском чи іншими засобами призводять до подразнення шкіри, рекомендуємо не використовувати пристрій, доки ці симптоми не зникнуть.

Порада. Щоб дізнатися, як зменшити ймовірність фолікуліту, прочитайте розділ «Усунення несправностей».


- Особи з послабленими відчуттями, фізичними чи розумовими вадами або без належного досвіду та знань можуть використовувати цей пристрій лише під наглядом чи за вказівками особи, що відповідає за безпеку їхнього життя.
- Тримайте епілятор Lumea подалі від дітей.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм. Щоб уникнути можливих ризиків, таких як опромінення світлом, ураження електричним струмом, задушення кабелями або проковтування насадок, слід користуватися пристроєм лише під наглядом.
- Не засмагайте під сонцем або в солярії 4 тижні перед і 48 годин після використання пристрою Lumea. Для чутливої або засмаглої шкіри збільшується ризик опіків або зміни пігментації. Для захисту шкіри від сонця носіть закритий одяг і наносьте сонцезахисний крем із SPF не менше 50 на відкриті ділянки. Щоб дізнатися, як безпечно використовувати пристрій Lumea, ознайомтеся з указівками в розділі «Використання Lumea до та після прийому сонячних ванн і засмаги».
- Не використовуйте пристрій Lumea принаймні 2 тижні після використання засобів для автозасмаги (кремів, спреїв або капсул). Для шкіри, обробленої такими засобами, збільшується ризик опіків або зміни пігментації. Щоб дізнатися, як безпечно використовувати пристрій Lumea, ознайомтеся з указівками в розділі «Використання Lumea до та після прийому сонячних ванн і засмаги».
- Якщо з часу останньої обробки колір шкіри змінився, рекомендуємо спочатку перевірити реакцію шкіри та зачекати 24 години до наступного сеансу. Якщо після цього періоду шкірна реакція все ще виникає, виберіть нижчу інтенсивність або припиніть користуватися пристроєм, якщо вже використовуєте його на найнижчій інтенсивності (①).

- Завжди перевіряйте пристрій перед використанням. Щоб уникнути неправильної експлуатації (див. «D Очищення та зберігання пристрою після процедури»), забезпечте чистоту віконця сенсора SmartSkin під час застосування пристрою.
- Під час використання віконце для випромінювання світла та внутрішні частини насадки можуть сильно нагріватися ($> 210^{\circ}\text{C}$). Не торкайтеся віконця для випромінювання та внутрішніх частин насадки, доки вони не охолонуть. Після використання від'єднайте пристрій і адаптер від електромережі й дайте їм охолонути протягом 30 хвилин, перш ніж очистити й відкласти для зберігання.
- Цей пристрій оснащено знімним адаптером. Використовуйте лише оригінальний адаптер, що постачається з цим пристроєм. Не використовуйте подовжувальний кабель. Довідковий номер (AD2069x20020HF або S065BRx1950333) вказано на пристрої. У цьому номері «x» позначає тип штекера для вашої країни.
- Дотримуйтесь рекомендованого графіку застосування. Збільшення частоти виконання процедури, особливо в початковій фазі, може підвищити ризик виникнення шкірних реакцій.


Як працює IPL

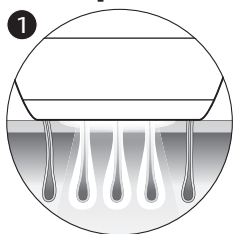

За технологією інтенсивного імпульсного світла (Intense Pulsed Light) шкіра обробляється делікатними імпульсами світла, які поглинаються коренями волосся. Що світліша шкіра та що темніше волосся, то краще поглинаються імпульси світла.

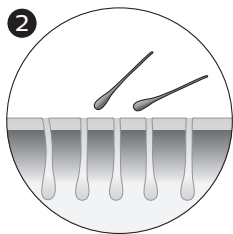

Імпульси світла стимулюють перехід волоссяних фолікул у фазу спокою. Внаслідок цього волосся випадає, а його ріст сповільнюється.

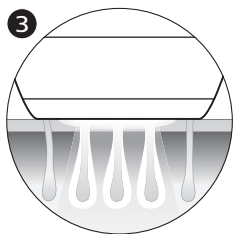

Цикл росту волосся складається з кількох фаз. Технологія IPL ефективна лише у фазі росту волосся. Однак не все волосся перебуває у фазі росту одночасно. Ми рекомендуємо після початкової фази (4 застосування з інтервалом у 2 тижні) дотримуватися-розкладу фази догляду (повторювати процедуру-кожні 4 тижні), щоб обробляти все волосся у фазі росту.

Порада. Щоб ефективно видаляти волосся на тривалий час, рекомендуємо повторювати процедуру кожні 4 тижні.

Колір волосся на тілі

Фотоепілятор Lumea неефективний на світлому, рудому, сивому та позбавленому пігменту волоссі, адже ці кольори поглинають недостатньо світла.

Примітка. Щоб перевірити, чи можна використовувати пристрій із вашим типом волосся на тілі, див. таблицю кольорів волосся на розвороті.

Рекомендований графік застосування

Початкова фаза

Щоб досягти ефективного видалення волосся, дотримуйтеся початкового графіку процедур.



Початковий графік застосування

Щоб забезпечити видалення всього волосся, перші 4 рази використовуйте фотоепілятор Lumea раз на 2 тижні.

- Виконуйте обробку в інтервалі від 3 днів до запланованої дати процедури до 3 днів після неї.
- Якщо обробку не виконано в інтервалі від 3 днів до запланованої дати процедури до 3 днів після неї, розпочніть початкову фазу обробки знову. Заплануйте 4 процедури, 1 процедура кожні 2 тижні.

Примітка. Якщо не розпочати початкову фазу обробки повторно, ефективність видалення волосся може знизитись.

Примітка. Заміна одного сеансу видалення волосся за допомогою інтенсивного імпульсного світла іншим методом (наприклад, восковою чи механічною епіляцією) не допоможе зменшити інтенсивність зростання волосся.

Між застосуваннями Lumea волосся можна видаляти у ваш звичайний спосіб (за винятком використання кремів для видалення волосся).

Фаза догляду



Після початкової фази (4 застосування) рекомендуємо повторювати процедуру один раз на 4 тижні.

Графік застосування у фазі догляду

Виконуйте процедуру кожні 4 тижні. Щоб досягти ефективного видалення волосся, виконайте 8 процедур. Це забезпечить найкращі результати та гладку шкіру протягом місяців.

- Рекомендовано виконувати обробку в інтервалі від 4 днів до запланованої дати процедури до 4 днів після неї.
- Результат може відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей росту волосся й ділянки тіла.
- Якщо після фази догляду залишається необхідність продовжувати обробку (волосся починає відростати), рекомендуємо повторити початкову фазу.

Примітка. Частіше використання пристрою не допомагає видаляти більше волосся.

Порада. Складіть графік обробки у своєму щоденнику, щоб нагадувати собі про заплановані процедури.

Очікувані результати

Протягом початкової фази

- Після першого використання волосся випаде протягом 1–2 тижнів. Протягом перших тижнів після початкових процедур волосся може продовжувати рости. Це відбувається тому, що під час використання не все волосся перебувало у фазі росту.
- Після 2–3 використань ріст волосся має помітно зменшитися. Однак, щоб ефективно видалити все волосся, потрібно продовжувати обробку згідно з рекомендованим графіком.
- Після 4 застосувань зростання волосся на ділянках, які ви обробляєте фотоепілятором Lumea, має суттєво зменшитися. Густота волосся також має зменшитися.

Під час фази догляду

- Повторюйте процедуру кожні 4 тижні, щоб забезпечити найкращий результат.

Інструкція з використання

Прочитайте протипоказання та важливі інструкції з техніки безпеки в цьому посібнику користувача, щоб з'ясувати, чи підходить вам пристрій Lumea. Це допоможе вам скористатися всіма перевагами пристрою.

Перед використанням



1. Підготуйте шкіру до використання пристрою
Видаліть волосся, шкіра має бути чистою й сухою



2. Випробуйте пристрій на шкірі
Виберіть найкомфортніше налаштування для шкіри



3. Через 24 години огляньте шкіру на наявність шкірних реакцій

Використання



4. Виконайте процедуру



5. Очистьте і приберіть пристрій




6. Заплануйте дату наступної процедури



Відскануйте QR-код, щоб подивитися покрокову відеоінструкцію з використання Lumea, а також ролики із загальною інформацією про пристрій.


Застосування фотоепілятора Lumea

А Видалення волосся та очищення шкіри

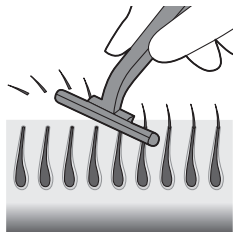


- 1 Доки волосся все ще видно, видаляйте його перед кожною процедурою. Волосся можна поголити або видалити за допомогою епілятора чи воску. Обов'язково починайте процедуру перш, ніж на шкірі стане видно нове волосся. Після епіляції воском користуватися Lumea можна через 24 години.

Примітка. Якщо гоління, епіляція воском чи іншими засобами призводять до подразнення шкіри, рекомендуємо не використовувати пристрій, доки ці симптоми не зникнуть.

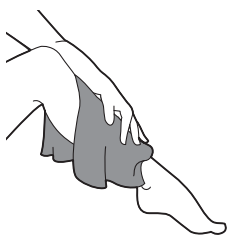

- 2 Очистьте шкіру й повністю її висушіть. Перевірте, чи немає залишків лосьйону або гелю.

В Випробування пристрою за 24 години до видалення волосся

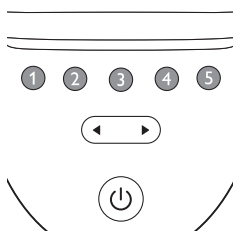



- 1 Випробуйте пристрій на своїй шкірі, щоб визначити найбільший комфортний рівень інтенсивності світла, як зазначено далі.

- На кожній новій ділянці тіла та/або з новою насадкою.
- Перед кожною процедурою. Чутливість вашої шкіри могла змінитися через засмагу, тому рекомендовано виконувати тест на шкірі перед кожною процедурою (див. «Використання епілятора Lumea перед прийманням сонячних ванн і засмаги та після них»).

- 2 Перевірте, щоб Lumea був без пошкоджень і бруду.


- 3 Для випробування пристрою на шкірі (див. «Насадки») виберіть належну насадку.

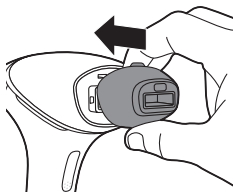

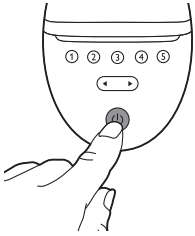

4 Щоб увімкнути фотоепілятор, натисніть кнопку  «Увімк./Вимк.».

5 Виберіть ділянку шкіри для випробування.

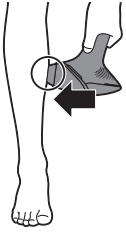


6 Сильно притисніть пристрій до шкіри та утримуйте його.

Вбудована система безпеки запобігає випадковій подачі імпульсів світла без повного контакту зі шкірою.



7 Про повний контакт зі шкірою свідчить те, що індикатор «ГОТОВИЙ до випромінювання» світитиметься білим.

- Якщо індикатор «ГОТОВИЙ до випромінювання» світиться оранжевим, ваша шкіра затемнена для обробки. Випробуйте фотоепілятор Lumea на світліших ділянках тіла.

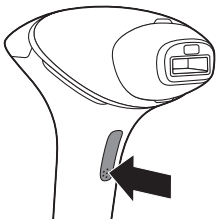

8 Випробуйте кожний рівень інтенсивності на своїй шкірі, від рівня ① до рівня ⑤, щоб знайти комфортний варіант для кожної ділянки тіла.


Якщо спалах спричиняє дискомфорт або біль, зменште інтенсивність.

Якщо у вас досі виникає біль, дискомфорт або подразнення шкіри під час або після використання пристрою Lumea на найнижчому рівні (①), припиніть використання пристрою на цій ділянці тіла. Випробуйте пристрій Lumea на іншій ділянці тіла. Можливо, пристрій Lumea не підходить для вашої шкіри / певної ділянки тіла.

Якщо індикатор «ГОТОВИЙ до випромінювання» світиться білим, натисніть кнопку спалаху на ручці, щоб почати обробку ділянки з налаштуванням ①.


Пристрій видасть м'який звук потріскування. За подачі імпульсу світла ви маєте відчути тепло.

18 Українська

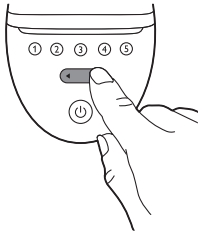

- Ви побачите спалах світла.

Примітка. Налаштування інтенсивності світла можна переключати натисканням кнопки перемикання. Не збільшуйте рівень, якщо випромінювання стало неприємним і ви відчуваєте біль.

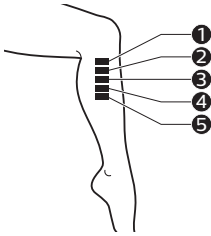

- Перейдіть до наступної ділянки. Обробіть одну ділянку з налаштуванням ②
- Перейдіть до наступної ділянки. Обробіть одну ділянку з налаштуванням ③
- Перейдіть до наступної ділянки. Обробіть одну ділянку з налаштуванням ④
- Перейдіть до наступної ділянки. Обробіть одну ділянку з налаштуванням ⑤



24 hours

9 Почекайте 24 години.

Примітка. Навіть якщо під час випробовування пристрою ви вибрали комфортні налаштування, протягом наступних 24 годин після використання на шкірі можуть з'явитися ознаки реакції.



10 Перевірте шкіру на наявність реакцій, як-от почервоніння, подразнення чи висипання.

Якщо протягом 24 годин не виникло жодних шкірних реакцій, починайте процедуру з максимальним рівнем інтенсивності, який є комфортним для вас.


Якщо за найвищих комфортних налаштувань інтенсивності виникають шкірні реакції, зменште інтенсивність до рівня, який не спричиняє їх.

Якщо ви не випробовували нижчі налаштування інтенсивності, випробуйте пристрій на шкірі ще раз.


С Процедура обробки

ВАЖЛИВО! Спочатку виконайте дії, описані в розділах А («Видалення волосся та очищення шкіри») і В («Випробування пристрою за 24 години до видалення волосся»).


1 Перевірте, щоб Lumea був без пошкоджень і бруду.

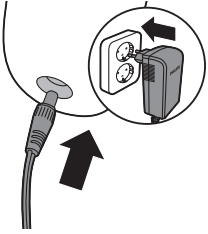


- 2 Під'єднайте адаптер живлення до пристрою та підключіть до мережі.

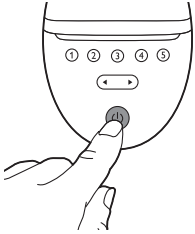


- 3 Щоб увімкнути фотоепілятор, натисніть кнопку ☀ «Увімк./Вимк.».

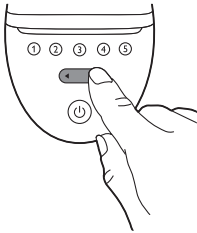

- 4 Установіть налаштування, вибране після випробування пристрою на шкірі (розділ В, етап 9).

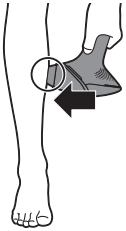


- 5 Сильно притисніть пристрій до шкіри та утримуйте його. Індикатор «ГОТОВИЙ до випромінювання» має світитися білим.

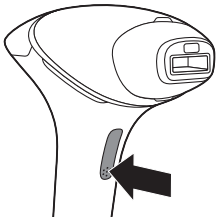

- 6 Натисніть кнопку спалаху для подачі імпульсу світла (спалаху) на шкіру. Спалах обробляє шкіру в заданій ділянці. Пристрій видає м'який звук потріскування. За подачі імпульсу світла ви маєте відчути тепло. Якщо пристрій занадто нагрівається, зверніться до розділу «Усунення несправностей».


Інтервал між подачами імпульсів світла становить до 3,5 секунд. Імпульс світла можна подавати, коли індикатор «ГОТОВИЙ до випромінювання» знову засвітиться білим.

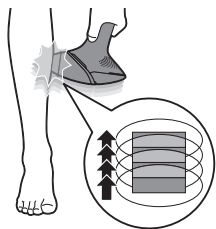


- 7 Перемістіть пристрій на суміжну ділянку шкіри й натисніть кнопку випромінювання ще раз. Поверхня насадки, яка контактує зі шкірою, трохи більша, ніж віконце для випромінювання світла. Не застосовуйте більше одного імпульсу на одній ділянці шкіри. Поверхню насадки слід накладати на частину попередньо обробленої ділянки, щоб охопити всю оброблювану поверхню шкіри. Багаторазова обробка однієї ділянки не допомагає видаляти більше волосся, але підвищує ризик виникнення побічних ефектів.
- 8 Продовжуйте, доки ділянку не буде оброблено повністю. Існує два режими обробки (див. «Режими подачі імпульсу світла: з відривом пристрою (Stamp & Flash) та без відриву (Slide & Flash)»).
- 9 Після закінчення процедури обробки вимкніть пристрій.
- 10 Видаляйте волосся перед кожною наступною процедурою, доки його видно.

Примітка. Не використовуйте пристрій на складних або чутливих ділянках шкіри (щиколотки та костисті ділянки).


D Очищення та зберігання пристрою після процедури

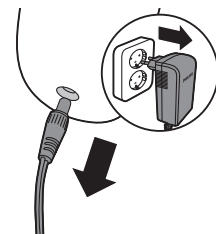


- 1 Від'єднайте пристрій від мережі.
- 2 Дайте пристрою охолонути протягом 30 хвилин, перш ніж очистити його й відкласти для зберігання.

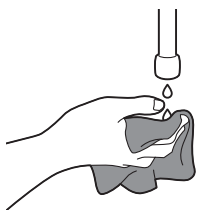


- 3 Змочіть м'яку ганчірку, що входить до комплекту, кількома краплями води.

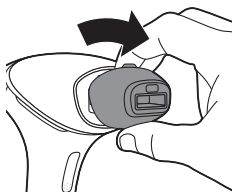

- 4 Зніміть насадку з пристрою.

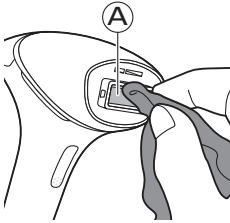

- 5 Очистьте віконце для випромінювання світла на пристрої (А).

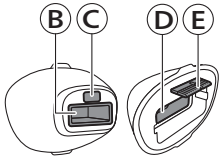

- 6 Очистьте всі поверхні насадки, зокрема металевий рефлектор і віконце насадки (деталі В, С, D, Е). Використовуйте лише суху тканину для очищення електронних контактів (частина Е).
- 7 Дайте всім частинам висохнути.
- 8 Складайте всі компоненти в наданий футляр і зберігайте в місці, де немає вологості й пилу.


Докладніше про фотоепілятор Lumea

Насадки


Задля отримання оптимальних результатів важливо використовувати належну насадку, призначену для конкретної оброблюваної ділянки тіла. Фотоепілятор Lumea призначено для обробки всього тіла й оснащено кількома насадками, розробленими для застосування на конкретних ділянках тіла. Технологія **SenseIQ** дає змогу адаптувати програму обробки в разі під'єднання іншої насадки.

Примітка. Якщо з'єднувач насадки забруднений, пристрій може не працювати або видавати помилку. Якщо це сталося, почистьте контакти насадки.

Щоб встановити насадку, просто притисніть її до віконця для випромінювання світла.

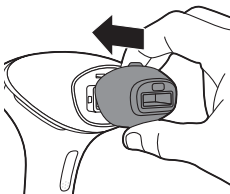

Щоб зняти насадку, потягніть її від віконця для випромінювання світла.

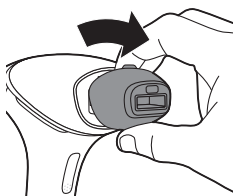

Насадка для тіла:

Насадка для тіла має найбільше віконце для випромінювання світла та вигнуту форму, щоб ефективно охоплювати та обробляти всі ділянки, розташовані нижче шиї, особливо великі ділянки, такі як ноги, руки й живіт. Насадка для тіла не має скляного віконця.

Насадка для обличчя (BRI944, BRI945, BRI946, BRI947, BRI948)



Насадка для обличчя має пласку форму та вбудоване додаткове червоне фільтрувальне скло, що забезпечує точне й безпечне видалення волосся з підборіддя, бакенбардів і чутливої ділянки над верхньою губою. Цей пристрій призначено виключно для видалення небажаного волосся на ділянках тіла нижче вилиць. Під час застосування пристрою на ділянках, контур яких має гострі кути, таких як щелепна дуга й підборіддя, можуть виникнути труднощі зі встановленням повного контакту зі шкірою та подачею імпульсу світла.


Порада. Заведіть язик між верхньою губою й зубами або надуйте щоки, щоб полегшити обробку.

Насадка для пахв (BRI947, BRI948)



Насадка для пахв має особливу вигнуту форму, щоб видаляти труднодоступне волосся під пахвами. Насадка для пахв не має скляного віконця.

Насадка для зони бікіні (BR1947, BR1948)

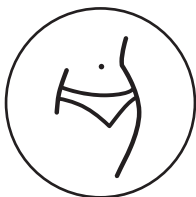

Щоб ефективно обробляти зону бікіні, насадка для зони бікіні має особливу форму. Вона вигнута та випромінює світло вищої інтенсивності порівняно з насадкою для тіла. Волосся в цій зоні міцніше й густіше за волосся на ногах. Насадка для зони бікіні має скляне віконце.

Насадка для точної обробки (BR1946)



Насадка для чутливих зон має вигнуту поверхню для обробки зони бікіні та пахв. Її оснащено віконцем середнього розміру з фільтрувальним склом. Ця насадка спроектована спеціально для точної й ефективної обробки зон бікіні та пахв. Насадка для точної обробки має скляне віконце.

Датчик SmartSkin

Фотоепілятор Lumea оснащено технологією **SenseIQ**, яка дає змогу видаляти волосся з урахуванням індивідуальних особливостей. Вбудований сенсор SmartSkin визначає колір шкіри перед кожною процедурою й час від часу протягом обробки. Він має дві функції:

- 1 Сенсор SmartSkin запобігає обробці ділянок шкіри затемного кольору. Якщо пристрій виявить шкіру, затемну для обробки за допомогою Lumea, індикатор «ГОТОВИЙ до випромінювання» почне блимати оранжевим. У такому разі пристрій не подаватиме імпульсів світла, навіть якщо натискати кнопку випромінювання. Пристрій автоматично вимкнеться. Це допомагає уникнути розвитку шкірних реакцій.
- 2 Датчик SmartSkin визначає колір вашої шкіри й допомагає вибрати комфортний рівень інтенсивності завдяки світловим індикаторам у верхній частині пристрою. Для цього можна скористатися кнопкою SmartSkin .

Вибір інтенсивності світла

Фотоепілятор Lumea пропонує 5 різних рівнів інтенсивності світла, з яких ви завжди можете самостійно вибрати найкомфортніший.

- 1 Щоб увімкнути фотоепілятор, натисніть кнопку  «Увімк./Вимк.».
Пристрій увімкнеться з рівнем інтенсивності світла 1.



Примітка. Щоб змінити налаштування інтенсивності світла вручну, без використання кнопки SmartSkin, використовуйте кнопки перемикання доки не буде вибрано потрібне налаштування. Відповідний індикатор рівня інтенсивності засвітиться білим.

- 2 Натисніть кнопку SmartSkin  і піднесіть пристрій до шкіри.
- 3 Після сканування шкіри індикатори інтенсивності світла почнуть блимати білим, демонструючи, які рівні інтенсивності світла будуть найкомфортнішими відповідно до кольору вашої шкіри.
- 4 Натисніть кнопку підтвердження , щоб підтвердити зазначений параметр.

Фотоепілятор Lumea автоматично вибирає найвищий із зазначених рівень інтенсивності, після чого почне блимати відповідний індикатор. Проте ви завжди можете самостійно вибрати найкомфортніший для вас рівень інтенсивності світла. Чутливість шкіри є індивідуальною характеристикою. Тому випробування пристрою на шкірі є найважливішим фактором для вибору налаштувань інтенсивності світла (див. «В Випробування пристрою за 24 години до видалення волосся»).


- 5 Процедура фотоепіляції з Lumea завжди має бути комфортною та безболісною. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, зменште рівень інтенсивності світла, навіть якщо попередня процедура за того самого рівня було комфортною. Ви можете зробити це за допомогою кнопок перемикання.

Примітка. Якщо ваша шкіра затемна (її колір позначено символом  у таблиці "Відповідні кольори шкіри" на початку посібника користувача), пристрій автоматично вимикається, щоб запобігти появі шкірних реакцій. У такому разі індикатор «ГОТОВИЙ до випромінювання» швидко блимає оранжевим.

- 6 Якщо ви перейшли на нову ділянку шкіри, приймали сонячні ванни, засмагали (див. «Використання епілятора Lumea перед прийманням сонячних ванн і засмаги та після них») або розпочинаєте новий цикл процедури, випробуйте пристрій на шкірі, щоб визначити комфортний рівень інтенсивності світла. Щоб знову скористатися функцією індикації налаштування, натисніть кнопку SmartSkin .


Примітка. Випробуйте пристрій на шкірі, перш ніж видаляти волосся на іншій ділянці тіла, або якщо відтінок вашої шкіри змінився. Визначайте потрібну інтенсивність світла для кожної ділянки тіла окремо.

Режими подачі імпульсу світла: з відривом пристрою (Stamp & Flash) та без відриву (Slide & Flash)

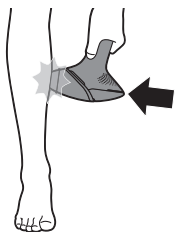

Фотоепілятор Lumea від Philips має два режими подачі імпульсу світла, щоб зручно видаляти волосся з різних ділянок тіла.

- Режим подачі імпульсу світла з відривом пристрою від шкіри (Stamp & Flash) ідеально підходить для малих ділянок і вигинів, наприклад колін або пахв. Просто натисніть і відпустіть кнопку випромінювання, щоб подати одиночний імпульс світла.

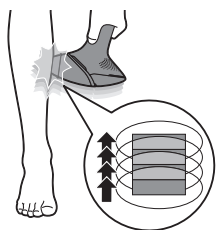

- Режим подачі імпульсу світла без відриву пристрою (Slide & Flash) зручний для обробки більших ділянок тіла, наприклад ніг. Утримуйте натисненою кнопку випромінювання, коли пересуваєте пристрій по шкірі, щоб подавати кілька імпульсів поспіль.

Використання епілятора Lumea перед прийманням сонячних ванн і засмаги та після них

Засмага на сонці або в солярії

Засмага під сонцем або в солярії впливає на чутливість і колір вашої шкіри. Тому дуже важливо дотримуватися наведених нижче порад.

- Під час використання епілятора Lumea необхідно захищати шкіру від сонячного світла. Під час періоду застосування інтенсивного імпульсного світла (особливо в перші 48 годин після процедури) носіть закритий одяг і наносьте сонцезахисний крем із SPF не менше 50 на відкриті ділянки шкіри.
- Не починайте або не продовжуйте використання пристрою Lumea принаймні 4 тижні після засмаги під сонцем або в солярії.
- Не використовуйте фотоепілятор Lumea на ділянках тіла, що обгоріли на сонці.

Використання кремів, спреїв або капсул для засмаги

Якщо ви користувалися засобами для автозасмаги (кремами, спреями або капсулами), почекайте щонайменше 2 тижні, перш ніж використовувати пристрій. Якщо ви використовуєте епілятор Lumea вперше або після паузи,

випробуйте його на шкірі (див. «В Випробування пристрою за 24 години до видалення волосся»).

У дорогу з фотоепілятором

Якщо ви плануєте взяти пристрій у подорож, дізнайтеся в авіаперевізника, чи можна перевозити пристрій у літаку та/або користуватися ним на борту літака.

Після використання

Подальший догляд



Після закінчення процедури ділянки можна обробляти лосьйоном, кремом, дезодорантом та іншими зволожуючими засобами або косметикою.

Обережно! Якщо після видалення волосся на шкірі з'явилося подразнення або почервоніння, зачекайте доки воно зникне, і лише потім наносьте будь-які засоби. Якщо подразнення з'явилося після того, як ви нанесли ці засоби, змийте їх водою. Якщо шкірні реакції залишаються, припиніть користування пристроєм і порадьтеся з лікарем.

Звичайні шкірні реакції

Шкіра може трохи почервоніти та/або може виникнути відчуття поколювання чи тепла. Ця реакція швидко минає.

Гоління або поєднання гоління з обробкою світлом одразу після нього можуть спричинити сухість шкіри та свербіння. Оброблену ділянку можна охолодити, приклавши до неї пакет із льодом або вологу махрову серветку. Якщо сухість не минає, можна скористатися неароматизованим зволожуючим засобом.

Рідкісні побічні ефекти

- Опіки, надмірне почервоніння (наприклад, навколо фолікулів) або пухлини трапляються рідко. Вони з'являються, якщо рівень інтенсивності світла не підходить для кольору вашої шкіри. Якщо ці симптоми не зникають протягом трьох діб, радимо звернутися до лікаря. Почекайте з наступною процедурою, доки подразнення на шкірі повністю не зникне, і наступного разу встановіть нижчу інтенсивність світла.
- Зміна кольору шкіри трапляється дуже рідко. Оброблена ділянка шкіри може потемніти (гіперпігментація) або посвітліти (гіпопігментація). Це відбувається, якщо рівень інтенсивності світла занадто високий для кольору вашої шкіри. Якщо ці симптоми не зникають протягом двох тижнів, радимо звернутися до лікаря. Не обробляйте уражені ділянки, доки симптоми не зникнуть і шкіра не набуде звичного кольору.
- Інфікування шкіри трапляється дуже нечасто. Зазвичай воно спричинене (мікро-) ранами, опіками, подразненнями тощо.

- Перегрів шкіри (чітка коричнева пігментація, яка зазвичай з'являється на темній шкірі й не супроводжується сухістю) трапляється дуже нечасто. Якщо ці симптоми не зникають протягом 1 тижня, радимо звернутися до лікаря. Почекайте з наступною процедурою, доки подразнення на шкірі повністю не зникне, і наступного разу встановіть нижчу інтенсивність світла.
- Пухирі у вигляді маленьких пухирів на поверхні шкіри. трапляється дуже рідко. Якщо ці симптоми не зникають протягом місяця або шкіра інфікована, радимо звернутися до лікаря. Почекайте з наступною процедурою, доки подразнення на шкірі повністю не зникне, і наступного разу встановіть нижчу інтенсивність світла.
- Рубці часто є побічним ефектом від опіків. Можуть залишатися до місяця.
- Фолікуліт (набряк навколо волосяного фолікула з утворенням пустули). Фолікуліт найчастіше виникає після гоління лезом бритви. У тяжкій формі фолікуліту бактерії проникають у пошкоджену шкіру й утворюється пустула. У більшості випадків фолікуліт минає самостійно за тиждень. Якщо симптоми вас непокоять, проконсультуйтеся з лікарем.
- Біль може виникати під час або після видалення волосся, якщо ви: використовуєте пристрій на непоголеній шкірі, встановили надто високий для свого кольору шкіри рівень інтенсивності світла, кілька разів обробили одну ділянку, використовували пристрій на відкритих ранах, запалених та інфікованих ділянках, татуюваннях, опіках тощо.

Усунення несправностей

Проблема	Можлива причина	Рішення
Пристрій або адаптер нагрівається під час використання.	Під час використання пристрій і адаптер нагріваються (але не стають загарячими на дотик). Це нормально.	Використовуйте пристрій у прохолоднішому приміщенні або дайте йому охолонути, перш ніж продовжити обробку.
	Вентилятор не працює.	Перевірте, чи правильно під'єднана насадка. Якщо потрібно, почистьте з'єднувачі на насадці. Якщо насадку під'єднано правильно й ви можете подавати імпульс на шкіру, але вентилятор однаково не працює (ви не чуєте його звук), зверніться до центру обслуговування клієнтів у своїй країні, дилера Philips або сервісного центру Philips.
	Вентиляційні отвори заблоковані руками або рушником.	Переконайтеся, що вентиляційні отвори не заблоковані.
Після прикладання пристрою до шкіри, імпульс світла не подається. Індикатор «ГОТОВИЙ до випромінювання» блимає оранжевим.	Ви маєте занадто темний колір шкіри на ділянці, що обробляється.	Використовуйте Lumea на ділянках зі світлішою шкірою.

Проблема	Можлива причина	Рішення
Індикатор «ГОТОВИЙ до випромінювання» блимає оранжевим, 5 індикаторів інтенсивності також блимають.	Пристрій необхідно перезапустити.	Щоб перезапустити пристрій, від'єднайте адаптер від електромережі й дайте пристрою і адаптеру охолонути протягом приблизно 30 хвилин. Після цього пристрій має нормально працювати. Якщо пристрій досі не працює нормально, зверніться до центру обслуговування клієнтів у своїй країні, дилера Philips або сервісного центру Philips.
Індикатор «ГОТОВИЙ до випромінювання» не світиться білим.	Пристрій неповністю торкається шкіри.	Прикладіть пристрій до шкіри під кутом 90° так, щоб вбудована система безпеки торкалася шкіри.
Пристрій видає дивний запах.	Віконце для випромінювання світла або датчик SmartSkin брудні.	Обережно очистьте віконце для випромінювання світла й датчик SmartSkin.
	Ви недостатньо ретельно видалили волосся з ділянки, що обробляється. Цей запах може спричиняти волосся, що спалахує.	Підготуйте шкіру перед використанням фотоепілятора Lumea.
Пристрій не видає імпульси світла, вентилятор не включається та всі 5 індикаторів рівня інтенсивності світла блимають.	Неправильно під'єднано насадку.	Приєднайте насадку до кінця. Якщо потрібно, почистьте електронні контакти насадки.
Під час видалення волосся шкіра чутливіша, ніж зазвичай. Я відчуваю дискомфорт під час користування пристроєм.	Вибрано надто високий рівень інтенсивності світла.	Перевірте, чи вибрано комфортну інтенсивність світла. За потреби зменште рівень інтенсивності світла, навіть якщо попередня процедура за того самого рівня була комфортною.
	Ви не видалили волосся з ділянок, що обробляються.	Підготуйте шкіру перед використанням фотоепілятора Lumea.
	Пошкоджено УФ-фільтр віконця для випромінювання світла.	Якщо УФ-фільтр віконця для випромінювання світла пошкоджено, не використовуйте пристрій. Зверніться до центру обслуговування клієнтів у своїй країні, дилера Philips або сервісного центру Philips.

Проблема	Можлива причина	Рішення
	Ви видаляли волосся на ділянках, для яких цей пристрій не призначений.	У жодному разі не використовуйте пристрій, якщо шкіра подразнена (має почервоніння або подrażпини), ви обгоріли на сонці, засмагали або застосовували засоби для автозасмаги. У жодному разі не використовуйте пристрій, якщо ви страждаєте на інфекційні захворювання, екзему, маєте опіки, запалені фолікули, відкриті рани, подrażпини, простий (шкірний) герпес, поранення, ураження шкіри або гематоми (синці) на ділянках, які потрібно обробити. У жодному разі не використовуйте пристрій на поданих нижче ділянках: на родимих плямах, веснянках, збільшених венах, потемнілих пігментованих ділянках шкіри, шрамах, аномаліях на шкірі без консультації лікаря. Ніколи не використовуйте пристрій на бородавках, татуюваннях або ділянках із перманентним макіяжем, навколо очей, на бровах і біля брів, на губах, промежині, ділянці волосся на голові, сосках, ареолах, малих статевих губах, піхві, анусі а також всередині ніздрів і вух. Чоловікам заборонено використовувати цей пристрій на обличчі та шиї (зокрема в зоні росту бороди й бакенбардів), а також в усій зоні геніталій. Це може призвести до опіку чи зміни кольору шкіри й ускладнити виявлення хвороб, пов'язаних зі шкірою.
	Дискомфорт під час обробки не зникає навіть при найнижчому рівні інтенсивності (①).	Пристрій Lumea не підходить для вашої шкіри. Зверніться до центру обслуговування клієнтів у своїй країні, дилера Philips або сервісного центру Philips.
Насадка не має скляного віконця.	Це нормально.	Жодних заходів вживати не потрібно. Насадки для тіла й пахв не оснащуються скляними віконцями. Червоним фільтрувальним склом оснащено тільки насадку для обличчя. Насадки для точної обробки та зони бікіні мають прозоре скляне віконце.
Реакція на шкірі після процедури не зникає довше, ніж зазвичай.	Вибрано надто високий рівень інтенсивності світла.	Наступного разу виберіть нижчий рівень інтенсивності світла (див. «В Випробування пристрою за 24 години до видалення волосся»).

Проблема	Можлива причина	Рішення
Спалах заяскравий для моїх очей. Чи потрібно одягати захисні окуляри?	Ні. Світло фотоепілятора Philips Lumea безпечне для очей.	Розсіяне світло, яке випромінює пристрій, безпечне для очей. Використовуючи пристрій, не дивіться на спалахи. Під час використання не потрібно одягати захисні окуляри. Використовуйте пристрій у добре освітленій кімнаті, щоб спалах був менш яскравим для очей. Підтримуйте щільний контакт зі шкірою, щоб уникнути розсіяного світла.
Результати видалення волосся незадовільні.	Вибрано надто низький рівень інтенсивності світла.	Наступного разу оберіть вищий рівень, який вам підійде (див. «В Випробування пристрою за 24 години до видалення волосся»).
	Ви не пройшлися по всій площі, на якій видаляєте волосся.	Поверхню насадки слід накладати на частину попередньо обробленої ділянки, щоб охопити всю оброблювану поверхню шкіри. Багаторазова обробка однієї ділянки не допомагає видаляти більше волосся.
	Використання пристрою неефективне для вашого кольору волосся на тілі.	Якщо волосся дуже світле, сиве або руде, фотоепілятор не забезпечить бажаного ефекту.
	Ви не використовуєте пристрій із рекомендованою частотою.	Щоб ефективно видаляти все волосся, намагайтеся дотримуватися рекомендованого графіка процедур (див. «Рекомендований графік застосування»).
	Ваше волосся може реагувати на застосування інтенсивного імпульсного світла повільніше.	Продовжуйте користуватися пристроєм протягом щонайменше 6 місяців, оскільки протягом цього часу ріст волосся може поступово уповільнюватися.

Проблема	Можлива причина	Рішення
Після застосування інтенсивного імпульсного світла в мене виникли почервоніння й набряки навколо волоссяних фолікулів, свербіж і біль у шкірі, а також кілька пустул.	Фолікуліт — рідкісний побічний ефект. Фолікуліт найчастіше виникає після гоління лезом бритви.	Щоб зменшити ймовірність виникнення фолікуліту, дотримуйтеся наведених далі правил. Змочуйте шкіру та волосся теплою водою перед голінням. Наносьте крем / гель для гоління, щоб полегшити процес гоління. Використовуйте якісну бритву з чистим лезом і голіться в напрямку росту волосся, а не проти нього. Не натискайте надто сильно на шкіру під час гоління, уникайте повторного гоління тієї самої ділянки й після кожного проведення по шкірі промивайте бритву водою, щоб видалити волосся. Після закінчення промивайте бритву та відкладайте для зберігання в сухе місце. Не дозволяйте іншим користуватися вашою бритвою і не користуйтеся бритвою іншої людини. Замінюйте леза або одноразові бритви, коли вони втрачають гостроту. Після гоління уникайте гарячої ванни й тертя шкіри об одяг. Можна наносити зволожувальний лосьйон без ароматів (дотримуйтеся рекомендацій, наведених в описі косметичного продукту). Перед кожною процедурою з інтенсивним імпульсним світлом очищуйте й висушуйте шкіру. Перевірте, чи немає на пристрої залишків лосьйонів чи гелів. Не використовуйте пристрій Lumea на шкірі, яка має ознаки фолікуліту. Якщо симптоми фолікуліту залишаються й викликають у вас занепокоєння, проконсультуйтеся з лікарем.

Гарантія та підтримка

Якщо вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support або прочитайте гарантійний талон.

Утилізація



- Цей символ означає, що поточний виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими відходами (згідно з директивою ЄС 2012/19/EU).
- Дотримуйтеся правил роздільного збору електричних і електронних пристроїв у Вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Технічні характеристики

Умови транспортування та зберігання	Фотоепілятор Lumea залишається придатним до експлуатації ШЛЯХОМ ЗВИЧАЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ в діапазоні зазначених технічних характеристик після транспортування або зберігання за таких умов навколишнього середовища: при температурі від -25 °C до 70 °C за відносної вологості до 90 % (без утворення конденсату) і в діапазоні атмосферного тиску від 700 гПа до 1060 гПа
Умови експлуатації	Фотоепілятор Lumea відповідає зазначеним технічним характеристикам за експлуатації ШЛЯХОМ ЗВИЧАЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ й таких умов навколишнього середовища: при температурі від 5 °C до 35 °C за відносної вологості до 90 % (без утворення конденсату) і в діапазоні атмосферного тиску від 700 гПа до 1060 гПа
Довжина хвиль	Від 565 до 1400 нм
Тривалість імпульсу	1–2,5 мілісекунди, для всіх рівнів інтенсивності
Інтервал між імпульсами	2–2,5 секунди
Інтенсивність світла	Насадка для тіла: 2,5–5,6 Дж/см² Насадка для пахв: 2,5–6,5 Дж/см² Насадка для зони бікіні: 2,5–6,5 Дж/см² Насадка для точної обробки: 2,5–6,5 Дж/см² Насадка для обличчя: 2,4–5,9 Дж/см²
Вхідна потужність адаптера	100–240 В ~ 50/60 Гц, 1,5 А
Вихідна потужність адаптера	19,5 В --- 3,33 А, 65,0 Вт
Ефективність за середньої активності	≥ 88,0 %
Ефективність за невисокого навантаження (10 %)	≥ 79,0 %
Споживання пристроєм енергії в холостому режимі	< 0,2 Вт (адаптер підключено до електромережі, не підключено до пристрою)
Енергоспоживання у вимкненому стані	≤ 0,2 Вт (адаптер підключено до електромережі, підключено до пристрою, пристрій не ввімкнено)

Номер артикула
адаптера

Довідковий номер (AD2069x20020HF) вказано на пристрої. Літера «х» позначає тип штекера. Доступні типи: 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 або Н.

- 0 означає вилку типу С для Європи
- 1 або 9 означає вилку типу І для Австралії, Аргентини
- 2 означає вилку типу G для Великої Британії та Ірландії
- 3 означає вилку типу А для Японії, Мексики

Довідковий номер (S065BRx1950333) вказано на пристрої. Літера «х» позначає тип штекера. Доступні типи: V, S, B, U або А.

- V означає вилку типу С для Європи
- S або А означає вилку типу І для Австралії, Аргентини
- B означає вилку типу G для Великої Британії та Ірландії
- U означає вилку типу А для Японії, Мексики

Електромагнітна сумісність — інформація про відповідність

Цей пристрій відповідає всім чинним стандартам і правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Пояснення символів

Попереджувальні знаки й символи необхідні для забезпечення безпечного та правильного використання виробу, а також для захисту вас і оточуючих від травм. Нижче наведено значення попереджувальних знаків і символів на етикетці й у посібнику користувача.



Цей символ позначає виробника пристрою: Philips Consumer Lifestyle B.V., Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands (Нідерланди).



Цей символ означає, що перш ніж використовувати пристрій, слід прочитати цей посібник користувача. Зберігайте цей посібник користувача для майбутньої довідки.



Цей символ означає, що користувач має переглянути у вказівках із використання важливу інформацію з безпеки, як-от застереження, які з різних причин можуть не міститися безпосередньо на пристрої.



Цей символ означає, що користувач має переглянути у вказівках із використання важливу інформацію з безпеки, як-от протипоказання та попередження, які з різних причин можуть не міститися безпосередньо на пристрої.



Цей символ позначає серійний номер пристрою.



Цей символ позначає номер пристрою за каталогом.



Цей символ означає, що пристрій відповідає вимогам до безпеки для пристроїв класу II.



Цей символ означає, що пристрій працює тільки від джерела постійного струму.



Цей символ означає, що пристрій працює тільки від джерела змінного струму.



Цей символ позначає, що пристрій не можна використовувати навколо очей і на бровах або біля них.



Цей символ означає: Не використовуйте пристрій у ванні, душі чи іншому заповненому водою резервуарі.



Цей символ позначає, що конструкція адаптера передбачає стійкість до короткого замикання.



Цей символ позначає, що адаптер є імпульсним стабілізатором напруги.



Пристрої, позначені цим символом, призначено для використання у приміщенні.



Цей символ позначає максимальну температуру навколишнього середовища, за якої адаптер може працювати безперервно за звичайних умов використання.



Цей символ указує, що пристрій призначений для використання на висоті не більше 3000 м над рівнем моря.



Цей символ переробки відходів використовується для ідентифікації матеріалу, з якого виготовлено виріб, що полегшує сортування для переробки відходів чи іншої повторної переробки. Символ може містити цифри та/або скорочення.



Цей символ позначає перемикач або положення перемикача, за допомогою якого вмикається частина пристрою для його переведення в режим очікування. Цей символ також позначає елемент керування, який дає змогу перевести пристрій у режим низького енергоспоживання або вказує на роботу в такому режимі.

IP22

Цей символ позначає, що пристрій захищено від потрапляння під оболонку твердих сторонніх часток розміром $\geq 12,5$ мм, а також від негативного впливу вертикально падаючих крапель води при нахилі на 15° .

IP30

Цей символ указує, що пристрій захищено від потрапляння твердих сторонніх часток розміром $\geq 2,5$ мм, але не захищено від потрапляння води.



Цей символ позначає рівень енергоефективності.



Цей символ позначає полярність роз'єму постійного струму (мала вилка).



Цей символ позначає Лісову наглядову раду (Forest Stewardship Council). Торговою маркою FSC позначаються продукти, виробники яких підтримують захист лісу, пропонують соціальні пільги й сприяють розвитку лісоводства.



Цей символ позначає, що адаптер живлення не можна використовувати, якщо контакти штекера пошкоджені.



Цей символ позначає, що виріб підлягає вторинній переробці, проте не означає, що виріб було виготовлено з вторинної сировини або що він буде прийнятий на переробку всіма системами збору вторинної сировини.



Цей символ позначає необхідність утилізації виробу відповідно до Директиви щодо відпрацьованого електричного й електронного обладнання (Директива WEEE). Електричні пристрої не підлягають утилізації зі звичайними побутовими відходами. Підлягає вторинній переробці за наявності центра переробки відходів у вашій місцевості. Проконсультуйтеся щодо переробки з місцевим підприємством із переробки відходів або із продавцем виробу (див. розділ «Переробка відходів»).



Вироби, позначені цим символом, відповідають застосовним директивам ЄС щодо охорони здоров'я, безпеки, а також охорони навколишнього середовища.



Вироби, позначені цим символом, відповідають застосовним вимогам із безпеки та електромагнітної сумісності (EMC).

Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 років.



FSC

© 2026 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com
3000.103.7581.3
(2026-06)