

Anleitung für die Benutzung von Sami, dem Seehund mit einem Vernebler


Ein Vernebler verwandelt ein flüssiges Medikament in ein Aerosol (feiner Nebel), sodass Du es tief in Deine Lunge einatmen kannst. Schau Dir an, wie Tucker, die Schildkröte, zu Hause inhaliert und lass Dir von einem Erwachsenen bei der Verwendung und Reinigung des Verneblers helfen.

Vorbereitung


- 1 Stelle Sami, den Seehund auf den Tisch.



- 2 Stecke den Stecker von Sami in eine Steckdose.

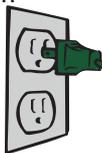

- 3 Verbinde das eine Ende des Schlauches mit dem Vernebler und das andere Ende mit Sami.

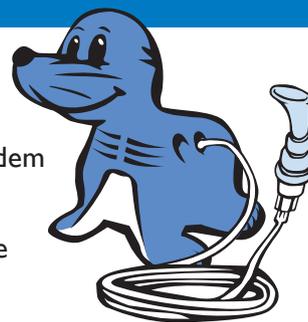


Durchführung der Behandlung

- 4 Fülle den Vernebler mit Deinem Medikament.




- 5 Schalte Sami ein und warte, bis der Nebel aus dem Mundstück auf dem Vernebler strömt.

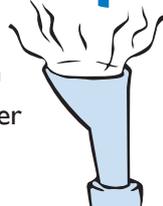

- 6 Setze Dich aufrecht hin. Nimm das Mundstück in den Mund und atme langsam ein und aus. Falls Du eine Maske verwendest, setze diese auf Mund und Nase und atme langsam durch den Mund ein und aus.




- 7 Sobald der Vernebler beginnt, ein stotterndes Geräusch zu machen, ist die Behandlung beendet. Schalte Sami aus.

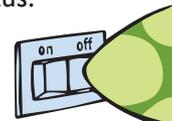

Reinigung von Sami

- 1 Ziehe den Stecker von Sami aus der Steckdose.
- 2 Überprüfe den Filter 1 Mal pro Woche und ersetze ihn, falls er schmutzig ist.

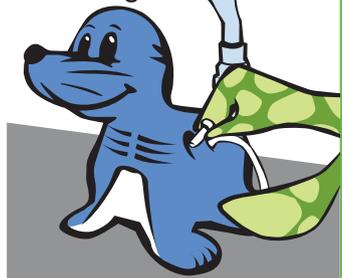


- 3 Wische Sami 1 Mal pro Monat mit einem feuchten Tuch ab.



- 4 Bewahre Sami an einem geschützten, trockenen Ort auf.

Reinigung des Verneblers

- 1 Nimm den Schlauch nach jedem Gebrauch ab und zerlege den Vernebler.

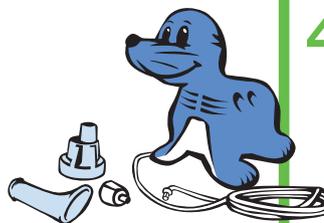

- 2 Wasche die Teile des Verneblers in warmem Seifenwasser.

- 3 Spüle mit klarem Wasser nach und lass die Teile an der Luft trocknen.

- 4 Koche alle Teile (außer Schlauch und Maske) 1 Mal pro Woche 10 Minuten lang in Wasser, in das Du 2 bis 3 Tropfen Geschirrspülmittel gibst. Spüle danach alle Teile mit klarem Wasser nach und lass sie an der Luft trocknen.



PHILIPS

RESPIRONICS

**Philips Healthcare ist ein Unternehmen
der Royal Philips Electronics**

So erreichen Sie uns

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asien
+49 7031 463 2254

Europa, Mittlerer Osten, Afrika
+49 7031 463 2254

Lateinamerika
+55 11 2125 0744

Nordamerika
+1 425 487 7000
800 285 5585 (toll free, US only)

Respironics New Jersey. Inc.
5 Wood Hollow Road
Parsippany, NJ 07054 USA

Kundendienst
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)

Philips Respironics Internationaler
Hauptgeschäftssitz
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Asien-Pazifik
+65 6882 5282

Philips Respironics Australien
+61 (2) 9947 0440
1300 766 488 (toll free, Australia only)

Philips Respironics China
+86 400 828 6665
+86 800 828 6665

Philips Respironics Deutschland
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Frankreich
+33 2 51 89 36 00

Philips Respironics Großbritannien
+44 800 1300 845

Philips Respironics Italien
+39 039 203 1

Philips Respironics Schweden
+46 8 120 45 900

Philips Respironics Schweiz
+41 6 27 45 17 50

Respironics, SideStream, Sami the Seal und Tucker the Turtle sind
Marken von Koninklijke Philips Electronics N.V. und verbundener
Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.



Weitere Informationen findest Du unter www.philips.de/respironics



© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und/oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen und haftet nicht für Folgen, die aus der Verwendung dieser Publikation entstehen.

MCI 4105226 PN448725