

PHILIPS

AVENT

Rintakumi

Muotoilu mahdollistaa
ihokosketuksen

Suojaa arkoja nännejä

Keskikokoinen (21 mm)

2 kpl



SCF153/03



Apu miellyttävään ja pitkäkestoiseen imetykseen*

Vauva saa helposti otteen, hellävarainen iholle*

Rintakumeista on apua silloin, kun imetys ei onnistu nänkien muodon tai vauvan huonon otteen vuoksi. Erittäin ohut ja perhosenmallinen rintakumi mahdollistaa kontaktin saamisen ja edistää kiintymyssuhteen muodostamista imetyksen aikana.

Tuotteen ominaisuudet

- Muotoilu mahdollistaa ihokosketuksen vauvan kanssa
- Muotoiltu sopivaksi

Vauva saa rintakumista helposti otteen*

- Muotoilu auttaa, jos otteen saaminen on vaikeaa

Tutin suojuksen käyttö


- Tarkoitettu aroille tai kipeille nänneille
- Vauvat imevät omaan tahtiinsa
- Rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen

Hygieeninen kotelo

- Helppo puhdistaa hygieenisessä kantokotelossa

Kohokohdat

Ainutlaatuinen perhosenmallinen muoto

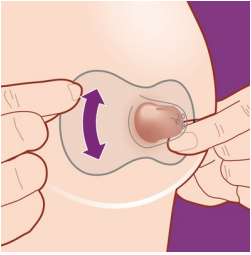


Rintakumin erittäin ohut ja perhosenmallinen muoto mahdollistaa ihokontaktin vauvan kanssa. Sekä nenä että leuka koskettavat rintaa, jolloin vauva voi haistaa äidin tuoksun ja tuntea äidin ihon. Rintakumi asetetaan nänнин keskikohtaan, jotta vauva saa otteen koko nänнинpihasta. Voit muodostaa kiintymyssuhteen vauvaan ja suojata samalla nännejäsi.

Muotoilu edistää otteen saamista*



Rintakumi auttaa vauvoja, joille otteen saaminen on aluksi vaikeaa, jotta voit imettää pidempään*. Rintakumi on tarkoitettu äideille, joiden nännit ovat matalat ja sisäänpäin kääntyneet, ja vauvoille, joilla on huono imemistekniikka tai joilla on suun epämuodostuma. Se säilyttää muotonsa vauvan pitäessä taukoja ruokailusta.

Suojaa nännejä imetyksen aikana

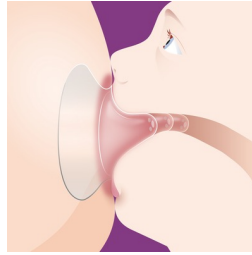

Rintakumit tekevät imettämisestä hellävaraisempaa, jos nänkien iho on arka, halkeileva tai kipeä. Niiden avulla nänneihin ei kohdistu yhtä paljon hankausta ja venymistä, joten imettäminen tuntuu miellyttävältä.

Imetä vauvan tahtiin




Rintakumeista on hyötyä myös silloin, jos äidin maidontuloa on säännösteltävä tai vauva ei jaksa imeä pitkään. Kärjessä on kolme aukkoa, joiden avulla voi säädellä rintamaidon määrää. Siten vauva voi imeä omaan tahtiinsa, jos äidin maidontuotanto on runsasta.

Rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen

Philips Avent -rintakumi on erittäin ohutta ja pehmeää silikonista. Siirtyminen rinta- ja pulloruokinnan välillä onnistuu saumattomasti, kun näitä yhdistellään.

Valitse sopiva kahdesta koosta

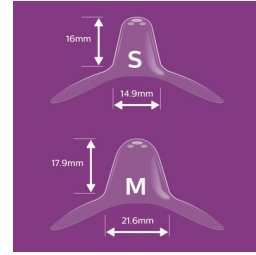

Rintakumeja on saatavana kahta eri kokoa. Pieni rintakumi sopii nännille, jonka halkaisija on vähintään 12 mm, ja keskikokoinen nännille, jonka halkaisija on enintään 21 mm. Sopivan koon löydät sovittamalla rengasta. Kierrä rintakumia myötäpäivään ja ohjaa nänni aukosta. Levitä sitten kantaosaa nänninpihan ympärillä. Koko on sopiva, jos nännin ympärille jää 2 mm:n rako. Vinkki: koko perustuu nänniin, eikä nänninpihaan. Jos et ole varma, pyydä apua terveydenhuollon ammattilaiselta.

Helppo puhdistaa milloin vain



Rintakumien puhdistaminen ennen jokaista käyttöä kestää alle 10 minuuttia. Laita ne kiehuvaan veteen viideksi minuutiksi tai käytä hygieenistä koteloa. Huuhtelet rintakumit hyvin, laita ne koteloon ja lisää 25 ml vettä. Laita sitten rintakumit kolmeksi minuutiksi mikroaaltouuniin teholla 750–1 000 W. Anna niiden jäähtyä viisi minuuttia ja kaada sitten vesi pois. Sen jälkeen rintakumit ovat käyttövalmiita. Hygieeninen kantokotelo on kätevä matkalla, ja se sopii rintakumien säilytykseen ja pitämiseen puhtaina.

Tekniset tiedot

Sisältö

Rintakumit 21 mm: 2 kpl
Hygieeninen kantokotelo: 1 kpl

Muotoilu

Perhosenmallinen muotoilu

Materiaali

Rintakumi: Ei sisällä BPA:ta*, silikonista

