

PHILIPS AVENT

Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten,
The Netherlands / Holandija
www.philips.com/avent


Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V.
© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
5000/045.7039.8 (2022-06-28)

SCF153

Nipple Shield Osonka piersi Štítník za Bradavice

ENGLISH

Intended use - The Philips Avent Nipple Shield is intended to cover the nipples of lactating women to support breastfeeding. The device is intended for a single use.
Indications for use - The Philips Avent Nipple Shield is indicated for use when the mother has sore, sensitive, cracked nipples or suffers from nipple pain. It is also indicated to help the baby develop better latch-on behavior in case of oral anomalies or when the mother has flat/inverted nipples. Moreover, it can be used to alleviate milk supply difficulties when the baby is not transferring the milk well, has an uncommon sucking technique (i.e. weak suck), small/preterm babies) or to help the baby in coping with milk flow.
Contraindications - There are no contraindications.
Side effects - When using the device, undesirable side effects that may occur are mastitis, cessation of breastfeeding, infant thrush and poor infant weight gain. If you or your baby experience any of these symptoms, contact a healthcare professional or breastfeeding specialist.
Important safety information - Read this important information carefully before you use the product and save it for future reference.
⚠ Warnings to avoid choking and swallowing - Never leave the nipple shield and the hygiene case unattended and keep out of reach of children.
- Inspect before each use. Throw away at the first signs of damage or weakness or after 2 months of usage.
⚠ Warning to avoid contamination and to ensure hygiene - Follow the instructions described in the Cleaning and Disinfection sections.
Recommendations - Use the product only in case of breastfeeding problems as described in the indications for use.
- Recommended to be used with advice from healthcare professional. If problems persist, consult your lactation consultant or physician.
- An electronic copy of these instructions can be found at www.philips.com/support.
- Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to Philips via www.philips.com/support and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

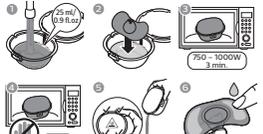

Before usage
Step 1 - Cleaning
⚠ Warning
Do not use abrasive cleaning agents or aggressive chemicals or substances when you clean the nipple shield, as this might cause damage. Clean the nipple shield before first use and after each use.
Manual cleaning
1 Rinse with cold, drinking-quality water (approx. 20°C) for 10-15 seconds.
2 Wash in warm, drinking-quality water (approx. 35°C) with washing-up liquid, preferably without artificial fragrances or coloring.
3 Rinse with cold, drinking-quality water (approx. 20°C) for 10-15 seconds.
4 Dry with a clean cloth or leave to dry on a clean surface.
Dishwasher cleaning
1 Place on top rack of the dishwasher.
2 Run standard program with common household dishwasher detergent.
3 Do not fully dry after dishwasher program, dry with a clean cloth or leave to dry on a clean surface.

Step 2 - Disinfection
⚠ Warning
Disinfect before first use and at least once a week. Be careful: after disinfection, the nipple shields may be very hot. The hygiene case and the water remaining in the case may still be hot. To prevent burns, only use after cooling down for 5 minutes.
⚠ Warnings to avoid contamination and to ensure hygiene
If you use the hygiene case for disinfection:
- Clean the hygiene case before first use.
- Use the correct water level, microwave power and time.
- Do not do so on a lead to reduced disinfection and can damage the hygiene case or nipple shields.
- Only use the hygiene case provided.
Boling
1 Clean as described under 'Cleaning'.
2 Boil the nipple shields in drinking-quality water for 5 minutes.
3 Leave to dry on a clean surface.
Microwave - Alternatively, use only the hygiene case provided according to the instructions below.
1 Clean the hygiene case as described under 'Cleaning'.
2 Add 25 ml (0.9 fl.oz.) of water to the hygiene case.
3 Place the nipple shield(s) in the hygiene case and securely close the lid (Fig. 2).
4 Place the filled hygiene case in the microwave for 3 minutes at 750-1000 W (Fig. 3).
5 Let the hygiene case cool down for 5 minutes (Fig. 4).
6 Drain water from the hygiene case (Fig. 5).
7 Dry the nipple shield(s) with a clean cloth or leave to dry on a clean surface.

Usage
⚠ Warning
Wash your hands and breasts thoroughly with soap and water before you touch the nipple shields to prevent contamination.
Applying the product - Follow the instructions below when placing the device on your breast:
1 Remove the cleaned and disinfected nipple shield from the hygiene case.
2 Place drinking-quality water or breast milk on the skin-facing side of the brim to help the shield stick to your skin (Fig. 6).
3 Hold the shield at the base of the nipple area and press the nipple cavity partly inside out, so that it becomes half way inverted (Fig. 7).
4 Rotate the shield so that the baby can have nose and chin contact with your breast skin (Fig. 8).
5 Center the shield over your nipple and slightly stretch the wings of the shield as you stick the product onto your breast (Fig. 9).
6 With the shield applied, you can now breastfeed as normal.
Storing - Store the clean nipple shield(s) in the hygiene case or in a dry, clean container. Storing the nipple shield(s) in an unclean or wet container could cause contamination.
Explanation of symbols - According to local regulations.
The warning signs and symbols are essential to ensure that you use this product safely and correctly and to protect you and others from injury. Below you find the meaning of the warning signs and symbols on the label and in the user manual.

- This symbol indicates that this medical device is compliant with the general safety and performance requirements of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices.
- This symbol indicates the hygiene case is microwave compatible.
- This symbol indicates to fill the hygiene case with water.
- This symbol indicates to wait 5 minutes before taking the hygiene case out of the microwave.
- The 5 inside this symbol is the recycling code used to identify the material from which the hygiene case is made, which is polypropylene (PP), to facilitate recycling or other reprocessing.
- The Green Dot ("Der Grüne Punkt" in German) is the license symbol of a European network of industry-funded systems for recycling the packaging materials of consumer goods.
- This symbol indicates the manufacturer's catalog number of the nipple shield.
- This symbol indicates to follow the instructions for use.
- This symbol indicates the Forest Stewardship Council.
- This symbol indicates that the device is a medical device.
- This symbol indicates there is a UDI Data Matrix.

Technical specifications
- Two sizes of the nipple shield: small 15 mm (0.6 in.), medium: 21 mm (0.8 in.).
- Materials: silicone (nipple shield), polypropylene (hygiene case)
- Service life: 2 months

POLSKI

Przeznaczenie - osłonki piersi Philips Avent służą do naklejenia na odciski biustu w celu wspierania karmienia piersią. Produkt jest przeznaczony dla jednej użytkownicy.
Wskazania do stosowania - osłonki piersi Philips Avent należy stosować w przypadku obojętnych, wrażliwych, popękanych bradawek sutkowych lub bólu bradawek. Są również wskazane jako pomoc w nauczeniu dziecka prawidłowego chwytu w przypadku nieprawidłowego budowie jamy ustnej lub gdy matka ma płaskie/wklęte bradawki. Ponadto mogą być stosowane do łagodzenia problemów z przesyłaniem pokarmu, jeśli niemowlę nie pobiera mleka prawidłowo, ma nietypową technikę ssania (np. słabe ssanie, małe/przewczesne urzudzenie niemowląt) lub jest małe, małe/pretermialne niemowlę) lub to pomóc dziecku w radzeniu sobie z wpływem pokarmu.
Przeciwwskazania - brak przeciwwskazań.
Skutki uboczne - niepożądane skutki uboczne, które mogą wystąpić podczas stosowania produktu, to m.in.: zapalenie sutka, zaprzestanie karmienia piersią, pęśnięcia i niewieklizacja śliny przyrosty masy ciała niemowlęcia. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek z tych objawów, przerywaj stosowanie i skonsultuj się z lekarzem lub poradnią laktacyjną.
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa - Przed rozpoczęciem karmienia z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi ważnymi informacjami i zachować je na przyszłość.
⚠ Ostrzeżenia dotyczące zapobiegania pośluczeniu i zakażeniu
- Nigdy nie zostawiaj osłonek piersi ani pojemnika higienicznego bez nadzoru i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.
- Obejrzyj przed każdym użyciem. Wyrzuć w przypadku pierwszych oznak uszkodzenia lub zucia albo po 2 miesiącach użytkowania.
⚠ Ostrzeżenia dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu i zakażeniu
- Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w częściach Czyszczenie i Dezynfekcja.
Zalecenia
- Stosu produkt wyłącznie w przypadku problemów z karmieniem piersią opisanych w części Wskazania do stosowania.
- Zalecamy stosowanie po konsultacji z lekarzem. Jeżeli występuje problem lub ból, należy skonsultować się z doradcą laktacyjnym lub położniczką.
- Wersję elektroniczną niniejszych instrukcji można znaleźć na stronie www.philips.com/support.
- Każdy poważny incydent dotyczący tego produktu, w związku z tym produktem, należy zgłosić firmie Philips w pośrednictwem strony www.philips.com/support oraz właściwemu władzom w kraju, w którym mieszka użytkownik/i lub pacjent.

Przed użyciem
Step 1 - Czyszczenie
⚠ Ostrzeżenie
Do czyszczenia osłonek piersi nie należy stosować środków chemicznych ani związków substancji lub środków chemicznych, gdyż może to spowodować uszkodzenie. Umyj osłonki piersi przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu.
Mycie ręczne
1 Wyciśnij zmiłą wodę zdatną do picia (ok. 20°C) przez 10-15 sekund.
2 Umyj w ciepłej wodzie zdatnej do picia (ok. 35°C) z płynem do mycia naczyń, najlepiej bez sztucznych substancji barwiących.
3 Wyciśnij zmiłą wodę zdatną do picia (ok. 20°C) przez 10-15 sekund.
4 Osuś czystą ściereczką lub pozostaw do wyschnięcia na czystej powierzchni.
Mycie w zmywarce
1 Umieść na górnej półce zmywarki.
2 Włącz standardowy program ze zwykłym detergencem do dwojgato zmywarki.
3 Jeżeli produkt jest całkowicie suchy po zakończeniu programu zmywarki, osusz czystą ściereczką lub pozostaw do wyschnięcia na czystej powierzchni.

Krok 2 - Dezynfekcja
⚠ Ostrzeżenie
Dezynfekuj przed pierwszym użyciem, a następnie dezynfekuj co najmniej raz dziennie. Należy zachować ostrożność, po dezynfekcji osłonek piersi mogą być bardzo gorące. Pojemnik higieniczny i woda pozostała w pojemniku mogą być nadal gorące. Aby uniknąć oparzeń, przed zastosowaniem poczekać 5 minut, aż ostygnie całkowicie.
⚠ Ostrzeżenia dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu i zakażeniu wialowej higieny
Jeżeli stosujesz pojemnik higieniczny do dezynfekcji:
- Umieść pojemnik higieniczny przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu.
- Stosuj prawidłowy poziom wody, mok kuchenni mikrofalowy pojemnik. Nieprzeznaczanie tego zalecenia może prowadzić do zmniejszenia skuteczności dezynfekcji i uszkodzenia pojemnika higienicznego lub osłonek piersi.
- Korzystaj zmywarkę z dostarczonego pojemnika higienicznego.
Wygotowanie
1 Wyciśnij w sposób opisany w części „Czyszczenie”.
2 Wylóż osłonki piersi w wodzie zdatnej do picia przez 5 minut.
3 Pozostaw do wyschnięcia na czystej powierzchni.
Kucharka mikrofalowa - alternatywnie zastosuj tylko dostarczony pojemnik higieniczny, przestrzegając poniższych instrukcji.

1 Wyciśnij pojemnik higieniczny w sposób opisany w części „Czyszczenie”.
2 Wlej 25 ml wody zdatnej do picia do pojemnika higienicznego, do zaznaczonej linii (rys. 1).
3 Umieść osłonki piersi w pojemniku higienicznym i dokładnie zamknij pokrywę (rys. 2).
4 Umieść napełniony pojemnik higieniczny w kuchence mikrofalowej i włącz na 3 minuty z mocą 750-1000 W (rys. 3).
5 Odczekaj 5 minut, aż pojemnik higieniczny ostygnie (rys. 4).
6 Wylóż wodę z pojemnika higienicznego (rys. 5).
7 Osuś osłonki piersi czystą ściereczką lub pozostaw do wyschnięcia na czystej powierzchni.
Zastosowanie
⚠ Ostrzeżenie
Dokładnie umyj ręce i piersi wodą z mydłem przed dotknięciem osłonek piersi, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
Nakładanie produktu - umieszczając osłonkę na piersi, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
1 Wyjmij wymiary zdezygnalizowanej osłonek piersi z pojemnika higienicznego.
2 Zwiłk wodę zdatną do picia lub mlekiem z piersi krawędź osłonek piersi.
3 Przytrzymaj osłonkę za podstawę obszaru bradawki i nacisnij zgłębienie na bradawkę, wyciągając je częściowo na lewą stronę w taki sposób, by było w połowie wywrócone na drugą stronę (rys. 7).
4 Obróć osłonkę, aby noski i podbródek dziecka stykały się ze skórą na piersi (rys. 8).
5 Wyrodnij osłonkę nad bradawką sutkową i lekko rozciągnij skrzydełka osłonek, przyklejając produkt do piersi (rys. 9).
6 Teraz z założoną osłonką możesz normalnie karmić piersią.
Przechowywanie - przechowuj czyste osłonki piersi w pojemniku higienicznym lub w innym suchym, czystym pojemniku. Przechowywanie osłonek piersi w zabrudzonym lub mokrym pojemniku może prowadzić do zanieczyszczenia.

Użytkizacja - zgodnie z lokalnymi przepisami.
Objaśnienie symboli
Znaki i symbole ostrzegawcze mają kluczowe znaczenie dla zagwarantowania bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania oraz dla ochrony użytkownika i innych osób przed urazami. Poniżej zamieszczone znaczenie znaków i symboli ostrzegawczych zastosowanych na etykiecie w instrukcji obsługi.
 Ten symbol oznacza, że ten wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa użytkownika określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.
 Ten symbol oznacza, że pojemnik higieniczny nadaje się do stosowania w kuchence mikrofalowej.
 Ten symbol informuje, że należy napełnić pojemnik higieniczny wodą.
 Ten symbol oznacza, że należy odczekać 5 minut przed wycięciem pojemnika higienicznego z kucharki mikrofalowej.
 Cyfra 5 wewnątrz tego symbolu jest kodem recyklingu używanym do identyfikacji materiału, z którego wykonano pojemnik higieniczny (w tym przypadku jest to polipropylen - PP), w celu ułatwienia recyklingu lub innego przetwarzania.
 Zielony Punkt (w języku niemieckim „Der Grüne Punkt”) jest symbolem licencjonowanego europejskiego systemu recyklingu materiałów opakowaniowych artykułów użytkownika oznaczającym finansowanie tych systemów przez producenta.
 Ten symbol oznacza nadany przez producenta numer katalogowy osłonek piersi.
 Ten symbol oznacza nakaz postępowania zgodnie z instrukcją obsługi.
 Ten symbol oznacza Forest Stewardship Council.
 Ten symbol oznacza, że dany produkt jest wyrobem medycznym.
 Ten symbol oznacza obecność kodu UDI Data Matrix.

Dane techniczne
- Dwa rozmiary osłonek piersi: mała 15 mm; średnia: 21 mm
- Materiały: silikon (osłonka piersi), polipropylen (pojemnik higieniczny)
- Okres przydatności do użytku: 2 miesiące

SRPSKI

Nameno - Philips Avent štítník za bradavice namenjen je za pokrivanje i zaštitu bradavice kod žena koje su u laktaciji kako bi se obezbedilo potpuno dojenje. Proizvod je namenjen za jednog korisnika.
Indikacije za upotrebu - Philips Avent štítník za bradavice koristi se kada majka ima bolne, osetljive, ispucale bradavice ili pati od bolnih bradavica. Takođe su namenjene da pomognu bebi da bolje prihvati bradavicu kod oralnih anomalija ili kada majka ima ravan ili savršen bradavice. Štítník, mogu da se koristiti za ublažavanje poteškoća kod nadozajavanja mleka kod bebe i vode dobiti imi ana neobičnu tehniku sisanja (npr. slabu usnu) ili bebe koja beba beba je nedonoščad ili da pomogne bebi kod mteko koja nadozajava.
Kontraindikacije - Nema kontraindikacija.
Strani efekti - Kada se koristi štítník za bradavice, neželjeni efekti korišćenja ovog pomagala su mastitis, prestanak nadozajavanja mleka, pojavnja gljivica kod bebe i slabije dojenje na strani beba. Ali to i beba ima neke od ovih simptoma, ako ili vaša beba iskusi bilo koje od ovih simptoma, kontaktirajte zdravstvenog stručnjaka ili savetnika za dojenje.
Važne bezbednosne informacije
Pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte ove važne informacije i sačuvajte ih za buduću upotrebu.
⚠ Upozorenja za sprečavanje gutanja i gutanja
- Nikada nemojte ostavljati štítník za bradavice i higienisku futrolu bez nadzora i držite ih dalje od dojmaga dece. Pre svake upotrebe proverite proizvod. Bacite ih nakon oštećenja ili znake da će doći do oštećenja ili nakon 2 meseca upotrebe.
⚠ Upozorenje raz sprečavanja kontaminacije i osiguravanja higijenskih uslova
Pratite uputstva koja su opisana u odeljku „Čišćenje i dezinfekcija”.
Preporuke
- Koristite proizvod samo kod problema sa dojenjem, onako kako je opisano u indikacijama za upotrebu.
- Preporučuje se upotreba štítníka za bradavice bez ostrovnog radnika. Ako se jave problemi ili bol, posavetujte se sa savetnikom za dojenje ili lekarom.
- Elektronsku primakovu kopiju ovih uputstava se nalazi na stranici www.philips.com/support.
- Svaki ozbiljan incident od koga Dođe u vezi sa ovim proizvodom mora se prijaviti kompaniji Philips putem stranice www.philips.com/support kao i nadležnom organu države članice u kojoj živi korisnik/i ili pacijent.
Primenite do štítníka Hladu 5 minuta.

1. korak - čišćenje
⚠ Upozorenje
Za čišćenje štítníka za bradavice nemojte da koristite abrazivne sredstva za čišćenje jer mogu da oštete ili oštete ili supstance da ne ba došlo do oštećenja. Štítník za bradavice oštite pre prve upotrebe i nakon svake sledeće upotrebe.
Ručno čišćenje
1 Očistite štítník hladnom vodom (oko 20°C) 10-15 sekund.
2 Operite toplom pićanom vodom (oko 35°C) koristeći tečnost za pranje, po mogućstvu bez veštačkih mirisa i boja.
3 Očistite štítník hladnom vodom (oko 20°C) 10-15 sekund.
4 Osušite čistom krpom ili ostavite da se osuši na čistoj površini.
Primenite u mašini za sudove
1 Stavite štítník za bradavice u mašinu za pranje sudova.
2 Pustite standardni program sa običnim deterdžentom za sudove u mašini za pranje sudova.
3 Ako nakon završenog programa sa običnim deterdžentom nije potpuno suv, osušite ga čistom krpom ili ostavite da se osuši na čistoj površini.
2. korak - dezinfekcija
⚠ Upozorenje
Dezinfekirajte pre prve upotrebe i najmanje jednom dnevno. Ostite pažljivo: nakon dezinfekcije, štítník za bradavice može da bude vrlo vruć. Je li osušite, nanesite mleko pićane vode ili mleka kako bi be štítník za bradavicu zaljepio za kožu i osušite ga čistom krpom ili ih ostavite da se osuše na čistoj površini.
⚠ Upozorenja raz sprečavanja kontaminacije i osiguravanja higijenskih uslova
Ako koristite higienisku futrolu za dezinfekciju:
- Očistite higienisku futrolu pred prvom upotrebom.
- Koristite je na nivo vode u odgovarajućim pećnicama i vremen. Ako ne to uradite, može doći do smanjenje dezinfekcije i oštećenja higieniske futrole ili štítníka za bradavice.
- Koristite samo higienisku futrolu koja se nalazi u kompletu.

Iskuvavanje
1 Očistite štítník za bradavice u mašini za pranje sudova.
2 Štítník za bradavice kuvajte u pićanoj vodi 5 minuta.
3 Ostavite da se osuše na čistoj površini.
Mikrotalovna pećnica - Alternativno, koristite samo higienisku futrolu koja se nalazi u kompletu prema uputstvima u nastavku.
1 Očistite štítník za bradavice u mašini za pranje sudova ili u mašini za pranje sudova kao što je opisano u odeljku „Čišćenje”.
2 Dodajte 25 ml pićane vode u higienisku futrolu, do naznačene linije (slika 1).
3 Stavite štítník za bradavice u higienisku futrolu i čvrsto zatvorite poklopak (slika 2).
4 Stavite punu higienisku futrolu u mikrotalovnu pećnicu na 3 minuta na 750-1000 W (slika 3).
5 Ostavite higienisku futrolu da se ohladi 5 minuta (slika 4).
6 Ocedite vodu iz higieniske futrole (slika 5).
7 Osušite štítník za bradavice čistom krpom ili ih ostavite da se osuše na čistoj površini.

Upotreba
⚠ Upozorenje
Budući da štítník za bradavice i dojkje sapunom i vodom pre nego što dodirnete štítník za bradavice kako ih ne biste kontaminirali.
Primenite proizvod - Pratite uputstva u nastavku kada stavljaite proizvod na dojku:
1 Izvadite očišćeni i dezinficirani štítník za bradavicu iz dojmaga i nanesite mleko pićane vode ili mleka kako bi be štítník za bradavicu zaljepio za kožu i osušite ga čistom krpom ili ih ostavite da se osuše na čistoj površini.
2 Držite štítník za bradavicu iznad bradavice i pritisnite malo bradavicu kako bi se do pola ulovila (slika 7).
3 Obróte štítník za bradavicu tako da beba može doći do dojmaga kada se dojmaga zatvori (slika 8).
4 Okrenite štítník za bradavicu tako da beba može doći do dojmaga kada se dojmaga zatvori (slika 8).
5 Namestite sredinju deo štítníka za bradavicu preko bradavice i bradavice ravnice krak dok stavljaite proizvod na dojku (slika 9).
6 Kada namestite štítník za bradavicu, možete normalno dojaviti dojenje.
Čišćenje
Čiste štítník za bradavice kuvajte u higienisku futrolu ili u suvo, čistoj krpici. Čuvanje veštačkih bradavica u nečistoj ili mokroj krpici može da dovede do kontaminacije. Očistite štítník za bradavice u mašini za pranje sudova ili u mašini za pranje sudova kao što je opisano u odeljku „Primenite proizvod”.
Objaśnienie symboli
Znaci i simboli upozorenja su od suštinskog značaja da bi se obezbedilo korišćenje ovog proizvoda na siguran i ispravan način i da biste zaštitili sebe i druge od povreda. U nastavku je dato značenje znakova i simbola upozorenja na nalepnici i u korisničkom priručniku.

Ovaj simbol ukazuje na to da je ovaj medicinski uređaj usklađen sa opštim zahtevima za bezbednost i performanse Uredbe (EU) 2017/745 Evropskog parlamenta i Saveta od 5. aprila 2017. godine o medicinskim uređajima.
 Ovaj simbol označava da higienisku futrolu može da se stavlja u mikrotalovnu pećnicu.
 Ovaj simbol označava da higienisku futrolu treba da se napuni vodom.
 Ovaj simbol označava da treba da sačekate 5 minuta pre nego što izvadite higienisku futrolu iz mikrotalovne pećnice.
 Broj 5 unutar simbola je šifra za recikliranje koja se koristi za identifikaciju materijala od koga je napravljena higieniska futrola, a to je polipropilen (PP), kako bi se olakšalo recikliranje ili drugi vid prerade.
 Zelena tačka ("Der Grüne Punkt" na nemačkom) je licencni simbol evropske mreže industrijski osnovanih sistema za recikliranje materijala za pakovanje potrošačke robe.
 Ovaj simbol označava kataložni broj štítníka za bradavicu kod proizvođača.
 Ovaj simbol upućuje korisnika da prati uputstva za upotrebu.
 Ovaj simbol označava organizaciju Forest Stewardship Council.
 Ovaj simbol označava da je uređaj medicinski uređaj.
 Ovaj simbol označava da postoji matrica podataka za UDI.

Tehničke specifikacije
- Dve veličine štítníka za bradavice: mali 15 mm; srednja: 21 mm.
- Materijali: silikon (štítník za bradavice); polipropilen (higieniska futrola).
- Trajanje pri upotrebi: 2 meseca