

 Philips Consumer Lifestyle BV,
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands
www.philips.com/avent

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. /
les marques commerciales sont la propriété de
Koninklijke Philips N.V.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved/tous droits réservés
3000.043.7847.2 (29/10/2019)



DEUTSCH

Vorgesehener Verwendungszweck das Philips Avent Brusthütchen dient zur Abdeckung und zum Schutz der Brustwarzen beim Stillen. Das Gerät ist für einen einzelnen Benutzer vorgesehen.

Gebrauchshinweise das Philips Avent Brusthütchen ist zur Verwendung durch Stillende bei Wunden, empfindlichen, aufgesprungenen oder schmerzenden Brustwarzen. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Verbesserung des Anlegeverhaltens bei Mundanomalien des Säuglings oder bei flachen Brustwarzen/Holzwarzen. Ebenso ist die Anwendung zur Erleichterung des Milchflusses möglich, wenn der Säugling die Milch nicht gut aufnimmt, eine ungewöhnliche Saugtechnik hat (z. B. schwach, eugende, kleine/frühgeborene Säuglinge), oder der Säugling bei der Aufnahme des Milchflusses unterstützt werden soll.

Gegenanzeigen es gibt keine Gegenanzeigen.

Nebenwirkungen: Wenn Sie das Gerät verwenden, kann es zu einer Mastitis (Brustentzündung), dem Versiegen des Milchflusses, einer Pilzkrankung des Säuglings und geringer Gewichtszunahme des Säuglings kommen. Wenn Sie oder Ihr Baby eines dieser Symptome haben, wenden Sie sich an einem Gesundheitsexperten oder eine Stillberaterin.

Wichtige Sicherheitsinformationen
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Produkts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

⚠ Warnhinweis zur Vermeidung von Erstickengefahr und Verschlucken

- Lassen Sie Brusthütchen und das Hygieneetui niemals unbeaufsichtigt und halten Sie beide außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Führen Sie vor jeder Benutzung eine Überprüfung durch. Das Produkt ist bei den ersten Anzeichen von Beschädigung oder Materialermüdung sowie nach 2 Monaten Verwendung zu entsorgen.

⚠ Warnhinweis zur Vermeidung von Vergiftung und zur Gewährleistung der erforderlichen Hygiene

- Befolgen Sie die Anweisungen in den Abschnitten zu Reinigung und Desinfektion.

Empfehlungen

- Verwenden Sie das Produkt nur bei den in den Gebrauchshinweisen beschriebenen Stillproblemen.
- Empfohlen für die Verwendung mit Beratung eine medizinische Fachkraft. Bei Problemen oder Schmerzen wenden Sie sich an Ihre Stillberatung oder suchen Sie ärztliche Hilfe auf.
- Eine elektronische Fassung dieser Bedienungsanleitung finden Sie unter www.philips.com/support.
- Alle ernsthaften Zwischenfälle, die im Zusammenhang mit diesem Gerät aufgetreten sind, **sollten** bei Philips über www.philips.com/support und an die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem sich der Benutzer und/oder Patient niedergelassen hat, gemeldet werden.

Vor dem Gebrauch

Schritt 1: Reinigung

⚠ Warnhinweis

Verwenden Sie beim Reinigen des Brusthütchens keine Scheuermittel oder aggressive Chemikalien oder Substanzen. Reinigen Sie das Brusthütchen und das Hygieneetui vor dem ersten Gebrauch und unmittelbar nach jedem weiteren Gebrauch.

Manuelle Reinigung

- 1 Mit Wasser von Trinkwasserqualität für 10–15 Sekunden abspülen.
- 2 In warmem Wasser von Trinkwasserqualität (ca. 35 °C) mit Spülmittel waschen, vorzugsweise ohne künstliche Duft- oder Farbstoffe.
- 3 Mit Wasser von Trinkwasserqualität für 10–15 Sekunden abspülen.
- 4 Mit einem sauberen Tuch trocknen oder auf einer sauberen Oberfläche an der Luft trocknen lassen.

Reinigen in der Spülmaschine

- 1 In den oberen Korb der Spülmaschine stellen.
- 2 Normales Programm mit üblichem Haushaltsmaschinenreiniger laufen lassen.
- 3 Bei Feuchtigkeitsresten nach dem Spülmaschinenprogramm mit einem sauberen Tuch reinigen oder auf einer sauberen Oberfläche an der Luft trocknen lassen.

Schritt 2: Desinfektion

⚠ Warnhinweis

Desinfizieren Sie das Produkt vor der ersten Verwendung und mindestens einmal pro Tag. Reinigen Sie das Produkt vor der Desinfektion.

Vorsicht: Nach der Desinfektion können die Brusthütchen sehr heiß sein. Das Hygieneetui und das darin verbleibende Wasser können noch heiß sein. Um Verbrennungen zu vermeiden, warten Sie eine Abkühlzeit von 5 Minuten ab.

⚠ Warnhinweise zur Vermeidung von Vergiftung und zur Gewährleistung der erforderlichen Hygiene

Wenn Sie das Hygieneetui für die Desinfektion verwenden:

- Das Etui vor der ersten Verwendung reinigen.
- Reinigen mit den richtigen Werten für Wassermenge, Mikrowellenleistung und Zeit. Nichtbeachtung kann die Desinfektion beeinträchtigen und Beschädigungen am Etui oder den Brusthütchen hervorrufen.
- Nur das mitgelieferte Etui verwenden.

Kochen

- 1 Reinigen wie im Abschnitt „Reinigung“ beschrieben.
- 2 Die Brusthütchen für 5 Minuten in Wasser von Trinkwasserqualität kochen.
- 3 Auf einer sauberen Oberfläche trocknen lassen.

Mikrowelle – alternativ, dabei nur das mitgelieferte Hygieneetui gemäß den nachfolgenden Anweisungen verwenden.

- 1 Hygieneetui reinigen (gemäß der Beschreibung im Abschnitt „Reinigung“).
- 2 Geben Sie 25 ml Wasser in Trinkqualität bis zur angegebenen Markierung in das Etui (Abb. 1).
- 3 Brusthütchen in das Hygieneetui einlegen und Deckel sicher verschließen (Abb. 2).
- 4 Gefülltes Hygieneetui für 3 Minuten in die Mikrowelle geben bei 750–1000 W (Abb. 3).
- 5 Hygieneetui für 5 Minuten abkühlen lassen (Abb. 4).
- 6 Wasser aus dem Hygieneetui ablaufen lassen (Abb. 5).
- 7 Brusthütchen mit sauberem Tuch trocknen oder auf einer sauberen Oberfläche an der Luft trocknen lassen.

Anwendung

⚠ Warnhinweis

Waschen Sie sich vor dem Anfassen der Brusthütchen gründlich die Hände mit Wasser und Seife, um Verunreinigungen zu vermeiden.

Anwenden des Produkts – befolgen Sie beim Auflegen des Produkts auf die Brust die nachfolgenden Anweisungen:

- 1 Gereinigtes und desinfiziertes Brusthütchen aus dem Hygieneetui nehmen.
- 2 Wasser von Trinkwasserqualität oder Muttermilch auf die zur Haut weisende Seite oder den Rand auftragen, um die Haftung auf der Haut zu verbessern (Abb. 6).
- 3 Das Hütchen am unteren Bereich des Brustwarzenbereichs festhalten und die Warzenvertiefung teilweise bis zur Hälfte umstülpen (Abb. 7).
- 4 Das Hütchen drehen, um dem Säugling den Nasen- und Kinnkontakt mit ihrer Brusthaut zu ermöglichen (Abb. 8).
- 5 Das Hütchen mittig über die Brustwarze halten und die Flügel beim Aufsetzen auf die Brust leicht dehnen (Abb. 9).
- 6 Mit dem aufgesetzten Hütchen können Sie wie gewohnt stillen.

Aufbewahrung Brusthütchen sauber im Hygieneetui oder in einem trockenen, sauberen Behälter aufbewahren. Die Aufbewahrung von Brusthütchen in einem ungereinigten oder nassen Behälter kann zu Verunreinigung führen.

Entsorgung gemäß den örtlichen Bestimmungen.

Erklärung der Symbole

Um den sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und Verletzungen zu vermeiden, müssen sämtliche Warnzeichen und Symbole beachtet werden. Nachstehend finden Sie eine Erklärung der auf dem Gerät angebrachten und in der Bedienungsanleitung verwendeten Warnzeichen und Symbole.

 Dieses Symbol gibt an, dass das Gerät die Anforderungen der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte erfüllt.

 Dieses Symbol gibt an, dass das Hygieneetui für die Mikrowelle geeignet ist.

 Dieses Symbol gibt an, dass das Hygieneetui mit Wasser gefüllt werden muss.

 Dieses Symbol weist darauf hin, 5 Minuten zu warten, bevor das Hygieneetui aus der Mikrowelle genommen wird.

 Die Ziffer 5 in diesem Symbol bezeichnet den Recycling-Code für das Material des Hygieneetuis (Polypropylen, PP), um das Recycling oder eine andere Art der Wiederverwertung zu erleichtern.

 Der „Grüne Punkt“ ist das Lizenzzeichen eines von der Industrie finanzierten europäischen Netzwerks für das Recycling des Verpackungsmaterials von Konsumgütern.

Technische Daten

- Produkttyp: Zwei Brusthütchengrößen: Klein 15 mm; mittel: 21 mm.
- Materialien: Silikon (Brusthütchen); Polypropylen (Hygieneetui)
- Lebensdauer: 2 Monate

ITALIANO

Usò previsto: i paracapezzoli Philips Avent sono stati ideati per coprire e proteggere i capezzoli delle donne che allattano per agevolare l'allattamento al seno. Il dispositivo è destinato a una singola utente.

Indicazioni per l'uso: i paracapezzoli Philips Avent sono indicati per donne con capezzoli infiammati, sensibili, screpolati o doloranti. Sono indicati anche per aiutare il bambino ad attaccarsi meglio al capezzolo in caso di anomalie del cavo orale o se la madre ha capezzoli piatti o intorlessi. Inoltre, possono essere utilizzati per risolvere problemi legati alla somministrazione del latte, quando il bambino non riesce a succhiare bene o ha una tecnica di suzione non comune, ad esempio debole o nel caso di bambini molto piccoli/prematuri, o anche per aiutare il bambino a ricevere il flusso di latte.

Controindicazioni: non ce ne sono.

Effetti collaterali Durante l'uso del prodotto potrebbero verificarsi effetti collaterali indesiderati, quali mastite, cessazione dell'allattamento al seno, mugugno nel neonato e scarso aumento di peso del neonato. Nel caso in cui la madre o il neonato avverta uno di questi sintomi, è necessario contattare un operatore sanitario o uno specialista in allattamento.

Informazioni di sicurezza importanti

Prima di utilizzare il prodotto, leggete attentamente queste importanti informazioni e conservatele per eventuali riferimenti futuri.

⚠ Avvertenza per evitare soffocamento e ingestione di parti

- Non lasciate mai incustoditi i paracapezzoli e la custodia igienica e teneteli lontano dalla portata dei bambini.
- Ispezionate il prodotto prima dell'uso. Sostituite il prodotto al primo segno di usura o danneggiamento o comunque dopo 2 mesi di utilizzo.

⚠ Avvertenza per evitare contaminazione e garantire l'igiene

- Seguite le istruzioni descritte nelle sezioni Pulizia e Disinfezione.

Raccomandazioni

- Utilizzate il prodotto solo in caso di problemi di allattamento al seno, come descritto nella sezione Indicazioni per l'uso.
- Vi consigliamo di utilizzare il prodotto dietro consiglio di medici professionisti. In caso di problemi o dolori, consultate il vostro medico o il vostro consulente in allattamento.
- Una copia elettronica di queste istruzioni è disponibile all'indirizzo www.philips.com/support
- Qualsiasi incidente deve verificatosi in relazione a questo dispositivo deve essere segnalato a Philips tramite il sito www.philips.com/support e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utente e/o il paziente risiede.

Prima dell'uso

Passaggio 1 - Pulizia

⚠ Avvertenza

Non utilizzate detergenti abrasivi, né prodotti chimici o sostanze aggressive quando pulite i paracapezzoli. Pulite i paracapezzoli e la custodia igienica prima di utilizzarlo per la prima volta e immediatamente dopo ogni utilizzo.

Pulizia manuale

- 1 Risciacquate con acqua potabile per 10-15 secondi.
- 2 Lavate in acqua calda e potabile (circa 35 °C) con detergente per piatti, preferibilmente senza aromi artificiali o coloranti.
- 3 Risciacquate con acqua potabile per 10-15 secondi.
- 4 Asciugate con un panno pulito o lasciate asciugare su una superficie pulita.

Pulizia in lavastoviglie

- 1 Posizionate il prodotto sul ripiano superiore della lavastoviglie.
- 2 Eseguite un programma standard con un detergente per lavastoviglie comune.
- 3 Se il prodotto non è completamente asciutto al termine del programma in lavastoviglie, asciugatelo con un panno pulito o lasciatelo asciugare su una superficie pulita.

Passaggio 2 - Disinfezione

⚠ Avvertenza

Disinfettate il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta e almeno una volta al giorno. Pulite il prodotto prima della disinfezione. Prestate attenzione: Dopo la disinfezione, i paracapezzoli possono essere molto caldi. La custodia igienica e l'acqua residua nella custodia potrebbero essere ancora calde. Per evitare di scottarvi, utilizzate il prodotto solo dopo averlo lasciato raffreddare per 5 minuti.

⚠ Avvertenze per evitare contaminazione e garantire l'igiene

Se utilizzate la custodia igienica per la disinfezione:

- Pulite la custodia prima di utilizzarla per la prima volta.
- Impostate il livello dell'acqua, la potenza del microonde e la durata corretti. In caso contrario, la disinfezione potrebbe essere inefficace e la custodia o i paracapezzoli potrebbero venire danneggiati.
- Utilizzate solo la custodia fornita.

Bollitura

- 1 Pulite il prodotto come descritto nella sezione „Pulizia“.
- 2 Fate bollire i paracapezzoli in acqua potabile per 5 minuti.
- 3 Lasciateli asciugare su una superficie pulita.

Microonde: utilizzate solo la custodia igienica fornita seguendo le istruzioni riportate di seguito.

- 1 Pulite la custodia igienica (come descritto nella sezione „Pulizia“).
- 2 Aggiungete 25 ml di acqua potabile alla custodia, fino all'apposita tacca (Fig. 1).
- 3 Posizionate i paracapezzoli nella custodia igienica e chiudete saldamente il coperchio (Fig. 2).
- 4 Inserite la custodia igienica piena di acqua nel microonde per 3 minuti a 750-1000 W (Fig. 3).
- 5 Lasciate raffreddare la custodia per 5 minuti (Fig. 4).
- 6 Fate sgocciolare l'acqua dalla custodia (Fig. 5).
- 7 Asciugate i paracapezzoli con un panno pulito o lasciateli asciugare su una superficie pulita.

Utilizzo

⚠ Avvertenza

Lavate accuratamente le mani e il seno con acqua e sapone prima di toccare i paracapezzoli per evitare di contaminarli.

Applicazione del prodotto: seguite le istruzioni riportate di seguito quando posizionate il dispositivo sul seno.

- 1 Rimuovete i paracapezzoli puliti e disinfettati dalla custodia igienica.
- 2 Posizionate acqua potabile o latte materno sul lato del bordo rivolto verso la pelle per far meglio aderire i paracapezzoli sul seno (Fig. 6).
- 3 Tenete i paracapezzoli alla base dell'area del capezzolo e premete parzialmente sulla cavità del capezzolo verso l'esterno, in modo che risulti invertito a metà (Fig. 7).

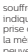
- 4 Ruotate i paracapezzoli in modo che il bambino possa avere naso e mento a contatto con la pelle del seno (Fig. 8).
- 5 Centrate i paracapezzoli sui capezzoli e allungate leggermente i bordi mentre li fate aderire al seno (Fig. 9).
- 6 Con il paracapezzolo applicato, potete ora allattare normalmente.

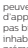
Conservazione: conservate i paracapezzoli puliti nella custodia igienica o in un contenitore asciutto e pulito. Se i paracapezzoli vengono conservati in un contenitore non pulito o umido potrebbero contaminarsi.


Smaltimento: deve essere eseguito in conformità alle normative locali.

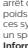
Spiegazione dei simboli


Le icone e i simboli di avviso sono fondamentali per assicurare un utilizzo sicuro e corretto del prodotto e per evitare lesioni. Di seguito è riportato il significato delle icone e dei simboli di avviso sull'etichetta e nel manuale utente.


 Questo simbolo indica che il dispositivo è conforme ai requisiti della Direttiva Europea sui dispositivi medici 93/42/CEE.

 Questo simbolo indica che la custodia igienica è compatibile con il microonde.

 Questo simbolo indica di riempire la custodia igienica con acqua.

 Questo simbolo indica di attendere 5 minuti prima di estrarre la custodia igienica dal microonde.

 Il numero 5 all'interno di questo simbolo è il codice di riciclo utilizzato per identificare il materiale con cui è realizzata la custodia igienica, ovvero polipropilene (PP), per facilitare il riciclo o altro ritrattamento.

 Il Punto Verde (in tedesco "Der Grüne Punkt") è il simbolo utilizzato per identificare una rete europea di sistemi finanziati dal settore per il riciclaggio dei materiali di imballaggio dei beni di consumo.

Specifiche tecniche

- Tipo di prodotto: due dimensioni di paracapezzoli: piccola da 15 mm e media da 21 mm
- Materiali: silicone (paracapezzoli) e polipropilene (custodia igienica)
- Durata: 2 mesi

FRANÇAIS

Application les bouts de sein Philips Avent sont destinés à recouvrir et à protéger les mamelons des femmes qui allaitent afin d'aider à l'allaitement. L'appareil est destiné à être utilisé par une seule personne.

Indications d'utilisation les bouts de sein Philips Avent sont indiqués dans les cas où la mère présente des mamelons endoloris, sensibles ou crevassés ou qu'elle souffre de douleurs aux mamelons. Ils sont également indiqués pour aider le bébé à développer une meilleure prise du sein en cas d'anomalies buccales ou lorsque la mère a des mamelons plats/inversés. En outre, ils peuvent être utilisés pour soulager les problèmes d'alimentation en lait lorsque le bébé ne prend pas bien le lait, qu'il a une technique d'aspiration inhabituelle (c'est-à-dire succion faible, petits bébés/prématurés) ou pour aider le bébé à gérer le flux de lait.

Contre-indications il n'y a pas de contre-indications.

Effets secondaires lors de l'utilisation de l'appareil, les effets indésirables suivants peuvent survenir : mastite, arrêt de l'allaitement, muguet buccal et faible gain de poids du bébé. Si vous ou votre bébé présentez l'un de ces symptômes, contactez un professionnel de santé ou un spécialiste de l'allaitement.

Informations de sécurité importantes

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser le produit et conservez-les pour un usage ultérieur.

⚠ Avertissement pour éviter tout risque d'étouffement ou d'ingestion

- Ne laissez jamais les bouts de sein et l'étui de transport sans surveillance ; tenez-les hors de portée des enfants.
- Avant chaque utilisation, examinez attentivement tous les éléments. Jetez-les au premier signe d'usure ou d'altération ou après 2 mois d'utilisation.

⚠ Avertissement pour éviter les contaminations et pour garantir une bonne hygiène

- Suivez les instructions fournies dans les sections Nettoyage et Désinfection.

Recommandations

- Utilisez le produit uniquement en cas de problème d'allaitement tel que décrit dans les Indications d'utilisation.
- Il est recommandé de demander conseil à un professionnel de santé avant utilisation. Si vous rencontrez des problèmes ou des douleurs, consultez votre médecin ou votre consultant en lactation.
- Vous trouverez une version numérique de ces instructions sur www.philips.com/support.
- Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit être signalé à Philips via www.philips.com/support, ainsi qu'à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Avant utilisation

Étape 1 - Nettoyage

⚠ Avertissement

N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, de substances ou de produits chimiques agressifs lorsque vous nettoyez les bouts de sein. Nettoyez le bout de sein et l'étui de transport avant la première utilisation et juste après chaque utilisation.

Nettoyage manuel

- 1 Rincez à l'eau potable pendant 10 à 15 secondes.
- 2 Lavez dans de l'eau potable chaude (environ 35 °C) avec du liquide vaisselle, de préférence sans colorant ni parfum artificiel.
- 3 Rincez à l'eau potable pendant 10 à 15 secondes.
- 4 Séchez à l'aide d'un linge propre ou laissez sécher sur une surface propre.

Nettoyage au lave-vaisselle

- 1 Placez sur le compartiment supérieur du lave-vaisselle.
- 2 Lancez un programme standard avec un produit pour lave-vaisselle classique.
- 3 Si les bouts de sein ne sont pas totalement secs après le programme du lave-vaisselle, séchez-les avec un linge propre ou laissez-les sécher sur une surface propre.

Étape 2 - Désinfection

⚠ Avertissement

Désinfectez les bouts de sein avant la première utilisation et au moins une fois par jour. Nettoyez les bouts de sein avant la désinfection.

Attention : Après la désinfection, les bouts de sein peuvent être très chauds. L'étui de transport et l'eau qui y reste sont peut-être encore chauds. Pour éviter les brûlures, laissez refroidir pendant 5 minutes avant toute utilisation.

⚠ Avertissements pour éviter les contaminations et pour garantir une bonne hygiène

Si vous utilisez l'étui de transport pour la désinfection :

- Lavez l'étui avant la première utilisation.
- Utilisez le niveau d'eau, la puissance et le temps de chauffe adéquats. Si vous ne le faites pas, cela peut entraîner une désinfection réduite et endommager l'étui ou les bouts de sein.
- Utilisez uniquement l'étui fourni.

Eau bouillante

- 1 Nettoyez les bouts de sein comme indiqué à la section « Nettoyage ».
- 2 Faites bouillir les bouts de sein dans de l'eau potable pendant 5 minutes.
- 3 Laissez-les sécher sur une surface propre.

Four à micro-ondes : vous pouvez également utiliser l'étui de transport fourni conformément aux instructions ci-après.

- 1 Nettoyez l'étui de transport (comme indiqué à la section « Nettoyage »).
- 2 Versez 25 ml d'eau potable dans l'étui, jusqu'à la ligne (Fig. 1).
- 3 Placez le(s) bout(s) de sein dans l'étui de transport et fermez correctement le couvercle (Fig. 2).
- 4 Placez l'étui de transport rempli au four à micro-ondes pendant 3 minutes à 750-1000 W (Fig. 3).
- 5 Laissez l'étui de transport refroidir pendant 5 minutes (Fig. 4).
- 6 Videz l'eau de l'étui de transport (Fig. 5).
- 7 Séchez le(s) bout(s) de sein à l'aide d'un linge propre ou laissez sécher sur une surface propre.

Utilisation

⚠ Avertissement

Lavez-vous soigneusement les mains et les seins à l'eau savonneuse avant de toucher les bouts de sein afin d'éviter toute contamination.

Application du produit : suivez les instructions ci-après lorsque vous placez le dispositif sur votre sein :

- 1 Retirez le bout de sein nettoyé et désinfecté de l'étui de transport.
- 2 Mettez de l'eau potable ou du lait maternel sur le bord côté peau pour aider le bout de sein à coller sur votre peau (fig. 6).
- 3 Tenez le bout de sein à la base du mamelon, puis pressez partiellement sur la cavité du mamelon vers l'extérieur, de manière à ce qu'il soit à moitié inversé (Fig. 7).
- 4 Tournez le bout de sein de façon à ce que le bébé puisse avoir le nez et le menton en contact avec votre peau (Fig. 8).
- 5 Centrez le bout de sein sur votre mamelon et étirez légèrement les pavillons du dispositif lorsque vous collez le produit sur votre sein (Fig. 9).
- 6 Le bouclier étant appliqué, vous pouvez maintenant allaiter normalement.

Rangement rangez le(s) bout(s) de sein propre(s) dans l'étui de transport ou dans un récipient sec et propre. Le rangement de bout(s) de sein dans un récipient sale ou humide peut entraîner une contamination.

Mise au rebut conformément aux réglementations locales.

Explication des symboles

Les symboles et les signes d'avertissement sont indispensables pour garantir une utilisation sûre et correcte de ce produit, ainsi que pour protéger les utilisateurs. Vous trouverez ci-dessous la signification des signes et symboles d'avertissement figurant sur l'étiquette et dans le mode d'emploi.

 Ce symbole indique que cet appareil répond aux exigences de la directive européenne sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE.

 Ce symbole indique que l'étui de transport peut passer au four à micro-ondes.

 Ce symbole indique qu'il faut remplir l'étui de transport avec de l'eau.

 Ce symbole indique d'attendre 5 minutes avant de retirer l'étui de transport du four à micro-ondes.

 Le 5 à l'intérieur de ce symbole est le code de recyclage utilisé pour identifier le matériau dans lequel l'étui de transport est fabriqué, qui est le polypropylène (PP), afin de faciliter le recyclage ou tout autre traitement.

 Le Point vert (« Der Grüne Punkt » en allemand) constitue le symbole de licence d'un réseau européen de systèmes financés par l'industrie pour le recyclage des matériaux d'emballage des produits de consommation.

Caractéristiques techniques

- Type de produit : Deux types de tailles de bout de sein : Petit : 15 mm ; Moyen : 21 mm
- Matériaux : Silicone (bout de sein) ; Polypropylène (étui de transport)
- Durée de vie : 2 mois