

# PHILIPS

## AVENT

### Sutteskjold

Formet til tæt hudkontakt

Beskytter ømme brystvorter

Mellem (21 mm)

2 stk.



SCF153/03



Hjælper dig til at amme i længere tid på en mere behagelig måde\*  
Nemt for dit barn at sutte og skånsom mod huden\*

Sutteskjoldet er designet til at hjælpe dig med at amme, når du oplever problemer med brystvorterne, eller hvis din baby har problemer med at sutte. Det ultratynde sommerfugleformede sutteskjold giver din baby mulighed for at sutte korrekt og fremmer tilknytningen mellem dig og din baby, mens du ammer.

#### Hygiejneetui

- Nem at rengøre i den hygiejniske bæretaske

#### Din baby har nemt ved at få fat\*

- Designet til at hjælpe barnet med at få fat

#### Produktfunktioner


- Designet, så den passer
- Formet, så barnet stadig fornemmer brystet

#### Hvornår skal du bruge et sutteskjold?

- Kombination af amning og madning med flaske
- Spædbørn kan spise i deres eget tempo
- Designet til følsomme, ømme eller smertende brystvorter


# Vigtigste nyheder

## Unik facon som en sommerfugl

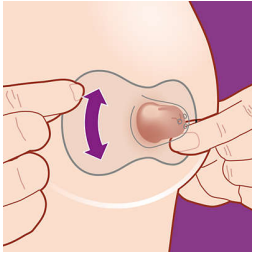


Sutteskjoldet er formet som en ultratynd sommerfugl, så mor og barn har hudkontakt. Formen gør, at det ikke kun er næsen, der rører brystet, men også hagen, og barnet kan lugte mor og røre mors hud. Sutteskjoldet skal blot anbringes over brystvortens midte, så barnet kan få fat om hele areola. Tilknytningen fremmes, mens brystvorten beskyttes.

## Designet til, at barnet kan få fat\*

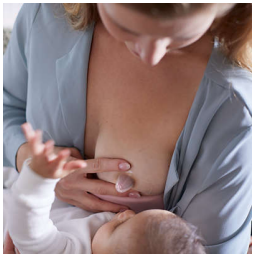

Vi har designet sutteskjoldet som en hjælp til børn, som i starten har problemer med at få fat, og amning er derfor mulig i længere tid\*. Sutteskjoldet er en hjælp til mødre, som har flade eller indadvendte brystvorter, og til børn med en svag sutteteknik. Sutteskjoldet har en form, der gør, at barnet kan få fat, og formen opretholdes, når barnet holder pause i amningen.

## Beskytter brystvorterne under amning

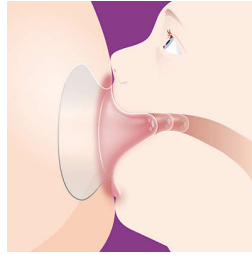

Sutteskjoldet er designet til at yde komfort og resultere i mere skånsom amning i tilfælde af ømme, revnede eller smertende brystvorter. Sutteskjoldet reducerer gnidning og stræk af brystvorterne ved amning, så du kan give dit barn den bedste mælk i ro og mag.

## Lad barnet spise i sit eget tempo




Hvis mors mælketilstrømning skal styres, eller hvis barnet ikke har kræfter nok, er sutteskjoldet også en stor hjælp. De tre huller i spidsen hjælper med at dosere mælkestrømmen, hvis der er for meget mælk. På den måde kan barnet spise i sit eget tempo, hvis mor oplever et kraftigt nedløb.

## Kombination af amning og madning med flaske

Det ultratynde, bløde silikonemateriale på Philips Avent-sutteskjoldet er tættere på vores madningsløsninger til spædbørn, så overgangen mellem amning og madning med flaske bliver problemfri, når begge dele kombineres.

## To størrelser, der passer til dit behov

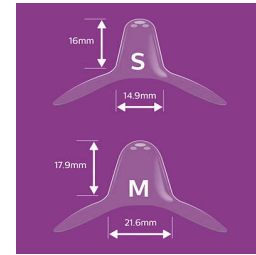

Sutteskjoldet fås i to størrelser, så det passer til dit bryst. De små sutteskjold passer til en diameter på brystvorten fra 12 mm, og den mellemstore passer til en størrelse på op til 21 mm. For at finde din størrelse, skal du sætte dig godt tilrette og anbringe én af ringene over brystvorten. Drej sutteskjoldet med uret, og før brystvorten ind i tunnelen. Stræk derefter bunden af sutteskjoldet rundt om areola. Hvis der er 2 mm mellem brystvorten og silikonen, passer den. Tip: størrelsen er baseret på mamilla og ikke på areola. Er du usikker? Spørg din sundhedsplejerske om hjælp.

## Nem at rengøre når som helst



Du skal rengøre sutteskjoldene før hver brug, hvilket tager mindre end 10 minutter. Læg dem i kogt vand i fem minutter, eller brug hygiejnebeholderen. Sæt begge godt skyllede suttebrikker i beholderen, og tilsæt 25 ml vand. Placer derefter suttebrikkerne i en 750-1.000 W mikrobølgeovn i tre minutter. Lad dem køle af i fem minutter. Hæld derefter vandet ud, og de er klar til brug. Brug den praktiske og bærbare hygiejnebeholder, mens du er på farten og til opbevaring af dine suttebrikker for at holde dem rene.

# Specifikationer

## Design

Facon som en sommerfugl

## Materiale

Sutteskjold: BPA-fri\*, silikone

## Hvad følger med

Sutteskjolde, 21mm: 2 stk.

Hygiejnisk bæretaske: 1 stk.



\* i tilfælde af flade eller indadvendte, ømme, følsomme, revnede og smertende brystvorter og børn, der har svært ved at få fat

\* 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011

\* Dette afsnit indeholder forbrugerudtalelser om produktet. Philips er ikke ansvarlig for det indhold, der indtastes af forbrugerne i dette afsnit, og derfor er tekniske oplysninger og/eller råd om brugen af det produkt, der er indeholdt deri, ikke ment som officielle Philips-oplysninger.