

PHILIPS

AVENT

Bröstvårtsskydd

Utformad för att ge hudkontakt

Skydda såriga bröstvårtor

Medium (21 mm)

2 st



SCF153/03

Hjälper dig att amma längre och bekvämt*

Lätt för barnet att få grepp och är skonsam mot huden*

Bröstvårtsskydd är utformade för att hjälpa dig att amma när du har problem med bröstvårtorna eller om barnet har svårt att få grepp. Det ultratunna fjärilsformade bröstvårtsskyddet gör det möjligt för barnet att få kontakt med bröstet och ser till att ni knyter an under amningen.

Hygienförpackning

- Enkel att rengöra i det hygieniska fodralet

Barnet kan enkelt komma åt

- Utformad för att hjälpa barnet att få grepp

Produktfunktioner


- Utformad för att passa
- Utformad för att ge hudkontakt med barnet

När du bör använda ett bröstvårtsskydd

- Kombinera amning och flaskmatning
- Barn kan dricka i sin egen takt
- Gjorda för känsliga, ömma eller smärtande bröstvårtor


Funktioner

Unik fjärilsform

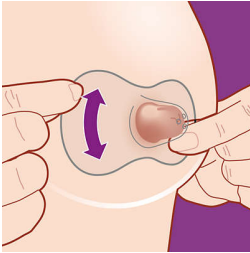


Vårt bröstvårtsskydds extra tunna fjärilsform är utformad för hud-mot-hudkontakt för barnet. Tack vare formen är det inte bara näsan som har kontakt med bröstet utan även hakan, vilket gör att barnet kan känna mammans doft och beröring. Placera bara skyddet på bröstvårtans mitt för att se till att barnet får ett ordentligt grepp om hela vårtgården. Nu kan du knyta an till ditt barn samtidigt som du skyddar dina bröstvårtor.

Utformad för att stödja barnets grepp*

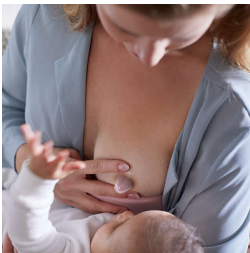

Vi har utformat våra bröstvårtsskydd för att hjälpa barn som har svårt att få grepp och hjälpa dig att amma längre*. För mammor med plana eller indragna bröstvårtor och barn med dålig sugteknik eller munavvikelser kan bröstvårtsskyddet ge en bröstvårtsform som ger bra grepp och bibehåller bröstvårtans utskjutna läge under barnets matpauser.

Skyddar bröstvårtorna vid amning

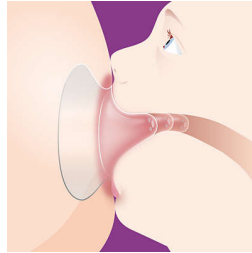

Bröstvårtsskydd är utformade för att ge behaglig och skonsammare amning för mammor med ömma, spruckna eller smärtande bröstvårtor. De kan hjälpa till att minska friktion samt att bröstvårtorna tänjs ut vid amning, så att du kan amma barnet på ett behagligt sätt.

Mata i barnets takt




Bröstvårtsskydd är även ett fantastiskt stöd om mammans mjölkflöde måste kontrolleras eller om barnet inte har tillräckligt med sugkraft. De tre hålen längst ut på skyddet kan hjälpa till att reglera bröstmjölksflödet för barnet om det kommer ut för mycket mjölk. På så sätt kan barnet dricka i sin egen takt.

Kombinera amning och flaskmatning

Det extra tunna, mjuka silikonmaterialet på Philips Avent-bröstvårtsskyddet liknar våra spädbarnsmatningslösningar och möjliggör en smidig övergång mellan amning och flaskmatning när du kombinerar båda.

Två storlekar som passar dina behov

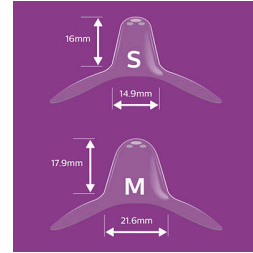

Bröstvårtsskydden finns i två storlekar för att passa ditt bröst bättre. Små skydd passar bröstvårtor med en diameter från 12 mm och de medelstora skydden passar bröstvårtor med en diameter på upp till 21 mm. Hitta rätt storlek för dig genom att först och främst sitta bekvämt och sedan placera skyddet över bröstvårtan. Vrid skyddet medurs och vägled bröstvårtan in i kanalen. Sträck sedan ut skyddets bas runt vårtgården. Om det finns 2 mm utrymme mellan bröstvårtan och silikonet är det rätt passform. Tips: Storleken baseras på bröstvårtan och inte på vårtgården. Är du osäker? Be sjukvårdspersonal och hjälp.

Enkel att rengöra när som helst



Du måste rengöra bröstvårtsskydden före varje användning, vilket tar mindre än 10 minuter. Lägg dem i kokande vatten i fem minuter eller använd hygienfodralet. Placera båda de välavsköljda bröstvårtsskydden i det och håll i 25 ml vatten. Placera sedan bröstvårtsskydden i en mikrovågsugn på 750–1 000 W och kör i tre minuter. Låt dem svalna i fem minuter. När du har hållt bort vattnet är de redo att användas. Använd det praktiska hygieniska fodralet när du är på språng samt för att förvara bröstvårtsskydden och hålla dem rena.

Specifikationer

Design

Fjärilsformad design

Consumer Trade Item

Height: 12.4 cm

Width: 7.8 cm

Length: 4.8 cm

Net weight: 0.023 kg

Gross weight: 0.027 kg

GTIN: 8710103907701

Country of origin: IT

Harmonized system code: 39269097

Ytterförpackning

Height: 13.9 cm

Width: 8.8 cm

Length: 18.8 cm

Net weight: 0.138 kg

Gross weight: 0.202 kg

GTIN: 18710103907708

Material

Bröstvårtsskydd: BPA-fri *, silikon

Vad medföljer?

Bröstvårtsskydd 21 mm: 2 delar

Hygieniskt fodral: 1 delar

Pallet Layer

Height: 13.9 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

