

PHILIPS

AVENT

Spenelio gaubtelis

Speciali forma išlaiko sąlytį su oda

Apsaugo skaudančius spenelius

Mažas dydis (15 mm)

2 vnt.



SCF153/01



Padedą ilgiau ir patogiai maitinti krūtimi*

Kūdikiu lengva apžiūti ir švelnu jūsu oda*

Spenelių gaubteliai sukurti taip, kad padėtų jums maitinti krūtimi, kai susiduriate su spenelių problemomis arba apžiojimo iššūkiu. Dėl itin plono, drugelio formos gaubtelio krūtis liečiasi prie kūdikio ir padeda toliau megzti ryšį maitinant krūtimi.

Higienišką dėklą

- Paprasta išplauti įdėjus į higienišką, nešioti skirtą dėklą

Lengva kūdikiu apžiūti*

- Sukurta taip, kad padėtų susidoroti su tinkamo apžiojimo iššūkiu

Produkto savybės


- Sukurta taip, kad tiktų
- Speciali forma leidžia išlaikyti odos sąlytį su kūdikiu

Kada naudoti spenelio apsaugą?

- Maitinimo krūtimi ir iš buteliuko derinimas
- Kūdikiai geria savo tempu
- Skirta jautriems, pažeistiems ar skausmingiems speneliams


Ypatybės

Unikali drugelio forma

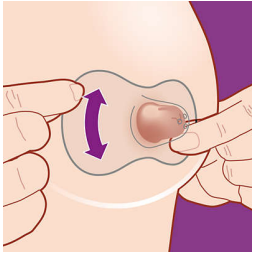


Mūsų spenelių apsaugos yra itin plonos, drugelio formos. Jos sukurtos taip, kad palaikytumėte odos sąlytį su kūdikiu. Dėl formos ne tik nosis, bet ir skruostas liečiasi su krūtimi ir kūdikis gali užuosti mamos kvapą bei paliesti mamos odą. Tiesiog uždėkite apsaugą ant spenelio vidurio ir įsitikinkite, kad kūdikis gali tinkamai apžioti visą areolę. Mėgaukitės kurdama ryšį su mažyliu ir kartu apsaugodama spenelius.

Sukurta taip, kad būtų lengva apžioti*

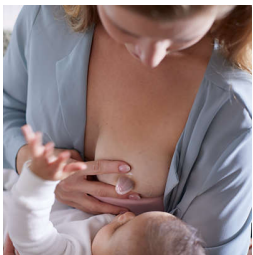

Sukūrėme spenelių apsaugas taip, kad padėtume kūdikiams įveikti ankstyvuosius apžiojimo iššūkius ir padėtume jums ilgiau maitinti krūtimi*. Spenelių apsauga skirta moterims, kurios turi plokščius ar įdubusius spenelius, ir kūdikiams, kurių čiulpimo refleksai silpni arba kurie turi bumos anomalijų. Spenelių apsauga suteikia speneliui tinkamą apžioti formą ir išlaiko stačią padėtį kūdikio maitinimosi pertraukų metu.

Apsaugo spenelius maitinant

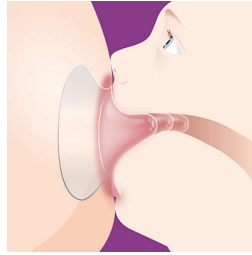

Spenelių apsaugos skirtos tam, kad maitinimas būtų patogus ir švelnesnis, kai speneliai pažeisti, suskilę ar skausmingi. Jos padeda sumažinti spenelių trynimą ir tempimą maitinant krūtimi, tad galite patogiai maitinti kūdikį geriausiu savo pienu.

Maitinkite kūdikio tempu




Jei reikia kontroliuoti mamos pieno srovę arba kūdikiui trūksta jėgų, spenelių apsaugos taip pat yra puiki pagalbinių priemonė. Trys skylutės apsaugos galiuke padeda reguliuoti motinos pieno srovę kūdikiui, jei yra pieno perteklius. Tokiu būdu kūdikis geria savo tempu, jei iš mamos krūties per aktyviai bėga pienas.

Maitinimo krūtimi ir iš buteliuko derinimas

Itin plona, silikoninė „Philips Avent“ spenelio gaubtelio medžiaga yra artimesnė mūsų kūdikių maitinimo sprendimams, nes padeda sklandžiai derinti maitinimą krūtimi ir iš buteliuko.

Du dydžiai jūsų poreikiams patenkinti

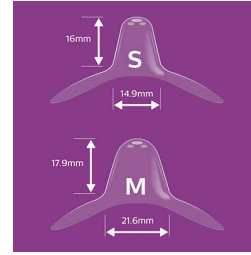

Spenelių apsaugos yra dviejų dydžių, kad geriau tiktų jūsų krūtimis. Mažos apsaugos tinka speneliams nuo 12 mm skersmens, o vidutinio dydžio – iki 21 mm. Norėdama sužinoti savo dydį, patogiai įsitaisykite ir uždėkite vieną žiedą su skylute ant spenelio. Pasukite apsaugą pagal laikrodžio rodyklę ir nukreipkite spenelį į tunelį. Tuomet ištempkite apsaugos pagrindą aplink areolę. Jei tarp spenelio ir silikono yra 2 mm erdvė, jis tinkamas. Patarimas: dydis nustatomas pagal spenelį, o ne pagal areolę. Nesate įsitikinusi? Paprašykite sveikatos priežiūros specialisto pagalbos.

Paprasta bet kada išplauti



Prieš kiekvieną naudojimą turite nuplauti spenelių gaubtelius. Tai užtruks mažiau nei 10 min. Penkioms minutėms įdėkite juos į verdantį vandenį arba naudokite higienišką dėklą. Įdėkite abu gerai nuskalautus spenelių gaubtelius į dėklą ir įpilkite 25 ml / 0,9 sk. unc. vandens. Tuomet trims minutėms įdėkite spenelių gaubtelius į 750–1000 W galios mikrobangų krosnelę. Palikite juos penkias minutes atvėsti. Nupilkite vandenį ir jie jau paruošti naudoti. Naudokite patogų, higienišką, nešiti skirtą dėklą keliaudama ir laikykite jame spenelių gaubtelius, kad jie būtų švarūs.

Specifikacijos

Medžiaga

Spenelio gaubtelis: Be BPA*, silikonas

Kas pridama

15 mm spenelių gaubteliai: 2 pcs
Higieniškasis, nešti skirtas dėklas: 1 pcs

Konstruktija

Drugelio formos dizainas: Yes

