

# PHILIPS

## AVENT

### Štitnik za bradavice

Oblik omogućuje kontakt s kožom

Zaštita bolnih bradavica

Srednji (21 mm)

2 komada



SCF153/13



## Pomaže vam da dojite duže i ugodnije\*

Lako zahvaćanje za bebu i ugodno na koži\*

Štitnici za bradavice oblikovani su kako bi vam pomogli dojiti kada imate problema s bradavicama ili beba ne može dohvatiti bradavicu. Iznimno tanak štitnik za bradavicu u obliku leptira bebi omogućuje kontakt s dojkom i pomaže pri povezivanju tijekom dojenja.

#### Higijenska torbica

- Jednostavno pranje u higijenskoj kutijici za nošenje

#### Lako zahvaćanje za bebu\*

- Dizajn pomaže s poteškoćama prilikom dojenja

#### Značajke proizvoda


- Prilagodljiv dizajn
- Oblik bebi omogućuje kontakt s kožom

#### Kada upotrebljavati štitnik za bradavice

- Kombinacija dojenja i hranjenja na bočicu
- Bebe mogu piti svojim tempom
- Za osjetljive ili bolne bradavice


# Istaknute znač.

## Jedinstven oblik leptira

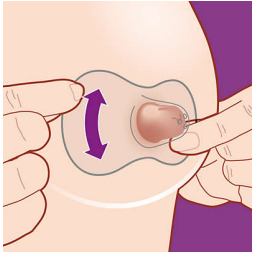


Izuzetno tanak oblik leptira štitnika za bradavice omogućava kontakt s kožom djeteta. Zahvaljujući obliku, u dodir s dojkom ne dolazi samo nos, već i brada, tako da beba može mirisati majku i dodirivati joj kožu. Jednostavno centrirajte štitnik preko bradavice kako bi beba mogla pravilno obuhvatiti čitavu areolu. Uživajte u povezivanju sa svojom bebom, a istovremeno štitite bradavice.

## Dizajn potpomaže dojenje\*

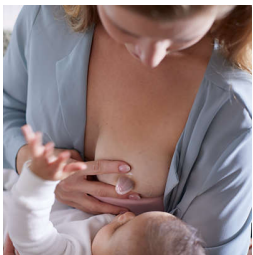

Štitnike za bradavice dizajnirali smo kako bismo bebama pomogli s početnim poteškoćama prilikom dojenja i kako bismo vama pomogli da dojite duže\*. Majkama s ravnim ili uvučenim bradavicama i bebama koje ne sisaju dovoljno jako ili imaju poteškoća s usnom šupljinom štitnik za bradavice pruža oblik bradavice za olakšano dojenje te omogućava uspostavljanje i održavanje ispuščenja bradavice u pauzama između dojenja.

## Zaštitite bradavice tijekom dojenja

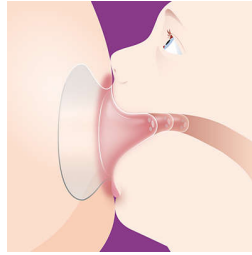

Štitnici za bradavice dizajnirani su tako da pružaju zaštitu osjetljivim, ispucanim ili bolnim bradavicama. Smanjuju trljanje i rastezanje bradavica tijekom dojenja kako biste svoju bebu mogli udobno dojiti.

## Hranite bebu njenim tempom




Štitnici za bradavice odlično će vam poslužiti i ako vam treba dodatna kontrola protoka mlijeka ili bebi nedostaje snage. Tri rupe na vrhu štitnika mogu pomoći u kontroli brzine protoka u slučaju ako iz dojke curi previše mlijeka. Tako beba može piti mlijeko svojim tempom.

## Kombinacija dojenja i hranjenja na bočicu

Iznimno tanak, meki silikonski materijal štitnika za bradavicu Philips Avent sličan je našim proizvodima za hranjenje dojenčadi što omogućava jednostavniji prelazak s dojenja na hranjenje na bočicu, kada kombinirate obje metode.

## Dvije veličine

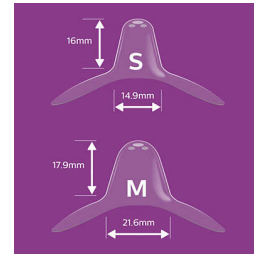

Štitnici za bradavice dolaze u dvije veličine. Mali štitnici odgovaraju promjerima bradavica od 12 mm, a srednji bradavicama do 21 mm. Kako biste utvrdili svoju veličinu, udobno se smjestite i postavite jedan prsten preko bradavice. Okrenite štitnik udesno i uvucite bradavicu u tunel. Zatim raširite bazu štitnika preko areole. Ako između bradavice i silikona ima 2 mm razmaka, štitnik vam pristaje. Savjet: Veličine se temelje na bradavicama, a ne areolama. Niste sigurne? Zatražite pomoć zdravstvenog stručnjaka.

## Jednostavno pranje u bilo kojem trenutku



Štitnike za bradavice morate oprati prije svake upotrebe, za što vam je potrebno manje od 10 minuta. Stavite ih u kipuću vodu na pet minuta ili kao dodatnu opciju, upotrijebite higijensku kutijicu. Dobro isperite oba štitnika za bradavice, stavite ih u higijensku kutijicu i ulijte 25 ml / 0,9 fl.oz. vode. Potom stavite štitnike za bradavice na tri minute u mikrovalnu pećnicu od 750 – 1000 W. Pričekajte pet minuta da se ohlade. Nakon izlivanja vode spremni su za upotrebu. Praktičnu higijensku kutijicu koristite na putu te za spremanje i zaštitu štitnika za bradavice od zaprljanja.

# Specifikacije

## Dizajn

Dizajn u obliku leptira

## Materijal

Štitnik za bradavice: Bez BPA\*, silikon

## Što se nalazi u paketu

Štitnici za bradavice od 21mm: 2 kom.

Higijenska kutijica za nošenje: 1 kom.

