


Philips BlueTouch
Patch anti-douleur
BlueTouch

Pour les douleurs dorsales
musculaires
Avec sangle lombaire

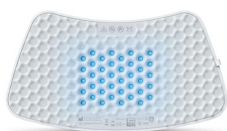

PR3733/00

Soulage les douleurs dorsales musculaires

Traitement par lumière bleue, cliniquement prouvé*

Philips BlueTouch utilise la luminothérapie à lumière bleue innovante pour un double résultat : soulager la douleur grâce à la chaleur et stimuler la libération de monoxyde d'azote dans le corps pour augmenter localement la circulation sanguine, tout en participant au processus de récupération naturel du corps.

Confortable et discret sous les vêtements

- Sangle dorsale taille unique pour un confort optimal
- Portable et discret : à intégrer aux habitudes quotidiennes
- Nettoyage simple

Augmente la circulation sanguine locale pour soulager la douleur

- Utilise la chaleur et l'effet récupérateur naturel de la lumière bleue
- Solution non médicamenteuse

Technologie innovante de lumière LED bleue

- Solution unique utilisant une lumière LED bleue pour augmenter la circulation sanguine locale
- Chaleur apaisante soulageant les douleurs dorsales
- Informations relatives aux contre-indications dans le manuel d'utilisation


Peut être utilisé 30 min 2 fois par jour pendant 1 à 2 semaines

- Courtes durées de traitement, trois niveaux d'intensité
- Essayez-le : délai de rétractation de 30 jours

PHILIPS

Points forts


40 LED bleues optimisées

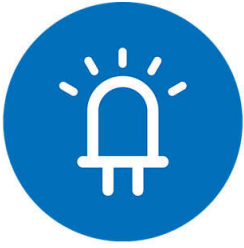

40x

Le patch BlueTouch contient 40 LED bleues produisant une lumière thérapeutique. Cette lumière bleue produit de la chaleur et stimule la libération par le corps d'oxyde nitrique, ce qui permet d'augmenter la circulation sanguine et par conséquent l'apport en oxygène ainsi que l'élimination des métabolites, afin d'encourager le processus de récupération des muscles dans la zone ciblée.

Une agréable chaleur

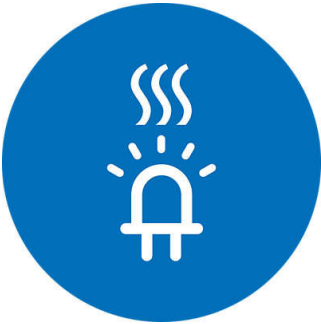

Le patch BlueTouch produit également une chaleur bienfaisante qui détend les muscles afin de soulager les douleurs dorsales et d'apporter à l'utilisateur une sensation de bien-être.

Contre-indications

N'utilisez pas le BlueTouch si l'une des contre-indications indiquées dans le manuel d'utilisation vous concerne. Consultez leur présentation complète dans le manuel d'utilisation. Sont notamment comprise les conditions suivantes : - allergie connue au soleil - prise de stéroïdes (ces médicaments rendent la peau plus sensible aux irritations) - dispositif médical implanté (vis, etc.) dans ou à proximité de la zone ciblée, ou dispositif médical implantable actif n'importe où dans le corps (par exemple, stimulateur cardiaque,

défibrillateur, neurostimulateur, implant cochléaire ou dispositif actif de délivrance de médicament) - grossesse.

Effet anti-douleur sans médicaments

Le BlueTouch de Philips produit de la chaleur et stimule le processus de récupération naturel du corps au moyen de lumière bleue, afin de soulager les douleurs dorsales sans médicaments.

Effet anti-douleur naturel

Le principal avantage de la photothérapie à la lumière LED bleue est qu'il est naturel. La lumière bleue stimule les processus internes du corps. Lorsque la lumière LED bleue atteint la peau, les réserves de molécules d'oxyde nitrique (NO) du corps sont libérées et transportées vers le muscle siège de la douleur. Cette petite molécule a un grand effet : les douleurs dorsales sont soulagées de manière naturelle.

Avec une sangle lombaire



Grâce à sa sangle taille unique confortable et individuellement réglable pour le bas du dos, le BlueTouch Philips peut être porté sous des vêtements en toute discrétion. Fabriquée avec des textiles de qualité supérieure, elle a été spécialement développée pour le bas du dos. Insérez simplement le BlueTouch dans l'ouverture de la sangle dorsale fournie, puis placez-la contre votre corps, et attachez-la. Ainsi, le port de votre BlueTouch est confortable à tout moment, à la maison comme en déplacement. La sangle est conçue pour convenir aux personnes de toutes tailles.

Portable et discret

Intégrez facilement le traitement de vos douleurs dorsales à vos habitudes quotidiennes

avec le BlueTouch Philips. L'appareil fonctionne avec des piles, et donc sans câbles, ce qui vous permet de vous déplacer en toute liberté pendant qu'il soulage vos douleurs dorsales. D'une taille compacte, le BlueTouch peut être porté discrètement sous les vêtements. Ainsi, vous pourrez vaquer à vos activités quotidiennes, que ce soit au bureau, à la maison ou dans la rue, pendant votre traitement.


Nettoyage simple

Le BlueTouch Philips est facile à nettoyer : essuyez simplement la surface avec un chiffon doux humidifié, ou une brosse très douce. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne le placez pas sous l'eau courante. La sangle dorsale passe à la machine à laver à 30 °C.

Utilisation recommandée

Utilisation recommandée : jusqu'à 30 min deux fois par jour. Des résultats en une à deux semaines.

Durée du traitement

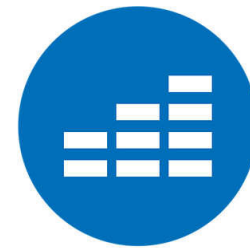

3x

Vous pouvez utiliser le BlueTouch Philips jusqu'à deux fois par jour. La durée de chaque séance dépend du niveau d'intensité sélectionné. En Mode 1 (léger), utilisez l'appareil pendant 30 minutes maximum, en Mode 2 (moyen), pendant 20 minutes, et en Mode 3 (intense), pendant 15 minutes. Sélectionnez le niveau d'intensité en fonction de vos préférences. Les différents niveaux offrent une intensité lumineuse et une température ajustable. Grâce à l'action de la lumière LED bleue, le BlueTouch peut soulager efficacement les douleurs dorsales, lorsqu'il est utilisé tous les jours.

Caractéristiques

Poids et dimensions

- Poids du BlueTouch: 0,168 kg
- Dimensions du patch (l x H x P):
280 x 155 x 12,5 mm

Inclus

- Patch anti-douleur BlueTouch
- Adaptateur
- Sangle lombaire

Zones d'application

- Pour les douleurs dorsales musculaires
- Région lombaire

Spécificités

- Tension nominale: 100-240 V

- Puissance nominale: 15 W
- Fréquence nominale: 50-60 Hz
- Classe: Dispositif médical de classe IIa
- Classification: Groupe de risque 1
- Pénétration par l'eau: IP22
- Dose quotidienne maximale: < 108,5 J/cm²
- Type de batterie: Li-Ion
- Longueur d'ondes de la lumière émise par les LED bleues: 453 nm

Utilisation

- Mode 1 (léger): Deux fois par jour pendant 30 min
- Mode 2 (moyen): Deux fois par jour pendant 20 min
- Jusqu'à deux fois par jour
- Mode 3 (élevé): Deux fois par jour pendant 15 min



Date de publication
2022-09-14

Version: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Prof. Dr. Hubert J. Bardenheuer (University Clinic Heidelberg, Allemagne), 24e Congrès interdisciplinaire sur le traitement de la douleur et les soins palliatifs, Francfort/Main, Allemagne, conférence du 7 mars 2013 sur l'utilisation du BlueTouch pour traiter les douleurs dorsales musculo-squelettiques chroniques.