

PHILIPS

AVENT

SCF293



Kasutusjuhend

Tähtis!	3
Oht!	3
Hoiatus!	3
Ettevaatust!	4
Tutvustus	6
Üldine kirjeldus	6
Märkused	7
Seadistusega tutvumine	9
Enne esimest kasutamist	10
Kasutamiseks valmistumine	12
Steriliseerimiseks valmistumine	12
Sterilisaatori kokkupanek	12
Seadme kasutamine	13
Steriliseerimine	13
Automaatrežiim: steriliseerimine ja kuivatamine	14
Kuivatamine	16
Puhastamine	17
Filtri puhastamine	18
Katlakivi eemaldamine	19
Tarvikute tellimine	20
Jäätmekäitlus	20
Tugi	20
Veaotsing	21

Tähtis!

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolega läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht!

- Ärge kastke alust, toitekaablit või pistikut kunagi vette või mis tahes teise vedelikku.
 - Katlakivi eemaldamise juhiste eiramine võib põhjustada korvamatut kahju.
 - Elektrilöögilohu vältimiseks ärge võtke alust kunagi lahti.
-

Hoiatus!

- Seda seadet võivad kasutada füüsilise, sensoorse või vaimse puudega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on järelevalve all või neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seda seadet kasutada. Hoidke seade ja selle toitekaabel lastele kättesaamatus kohas.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitekaabel või seade ise on kahjustatud.
- Kui toitekaabel on kahjustada saanud, tuleb ohtlike olukordade vältimiseks lasta toitekaabel vahetada Philipsil, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.
- Seadme sees ei ole komponente, mis vajavad hooldamist. Ärge avage seadet ega üritage seda ise hooldada või parandada.
- Seade muutub töötamise ajal väga kuumaks ja võib katsumisel põletushaavu tekitada.

- Olge ettevaatlik kuuma auruga, mis väljub kaane avausest või kaane eemaldamisel. Aur võib põhjustada põletushaavu.
- Ärge puudutage seadme töötamise ajal ega kohe pärast kasutamise lõppu seadme alust, korve ega kaant, kuna need on väga kuumad. Tõstke kaant ainult selle käepidemest.
- Ärge kunagi liigutage ega avage seadet, kui see on kasutusel või kui vesi selles on veel kuum.
- Ärge kunagi asetage esemeid seadme peale, kui see on kasutuses.
- Kasutage seadmes ainult puhast vett.
- Ärge lisage seadmesse valgendajat ega teisi kemikaale.
- Ärge valage veenõusse rohkem vett, kui on lubatud (130 ml).
- Steriliseerige ainult lutipudeleid ja teisi esemeid, mida seadmes kasutada võib. Seda, kas eset võib seadmes kasutada või mitte, saate kontrollida vastavast kasutusjuhendist.
- Töö lõpetamiseks ja seadme väljalülitamiseks vajutage toitenuppu.
- Seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamises.
- Võimalike vigastuste vältimiseks kasutage seadet ainult otstarbekohaselt.

Ettevaatust!

- Ärge kasutage kunagi tarvikuid või osi, mis on teiste tootjate omad või mida Philips ei ole konkreetselt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.
- Ärge jätke seadet väga kuuma kohta või otsese päikesepaiste kätte.
- Laske seadmel alati enne selle liigutamist või hoiustamist maha jahtuda.
- Seadme pinnad võivad kasutuse käigus kuumeneda.
- Ärge steriliseerige väga väikeseid esemeid, mis võivad läbi korvi põhjas olevate aukude kukkuda.
- Ärge kunagi asetage esemeid otse kütteelemendile samal ajal, kui seade on sisse lülitatud.



- Ärge kasutage mingil juhul seadet, mis on kusagilt alla kukkunud või muul moel kahjustatud. Viige see volitatud Philipsi teeninduskeskusesse parandamisele.
- Asetage seade alati kuivale, kindlale, tasasele ja horisontaalsele pinnale ja kasutage seda seal.
- Ärge asetage seadet kuumale pinnale.
- Ärge laske toitekaablil rippuda üle laua või tööpinna serva, millel seade seisab.
- Pärast kasutamist ja siis, kui seade on maha jahtunud, valage seadmest sinna jäänud vesi alati välja.
- Enne tarvikute vahetamist või kasutamise ajal liikuvatele osadele lähenemisel lülitage seade välja ja eemaldage toitekaabel seinakontaktist.
- Keskkonnatingimused, nagu temperatuur ja kõrgus merepinnast, võivad mõjutada selle seadme tööd.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada.
- Ühendage seade alati seinakontaktist lahti, kui see jääb järelevalveta.


Elektromagnetväljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetväljaga kokkupuudet käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Tutvustus


Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoote eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil www.philips.com/welcome.

Üldine kirjeldus

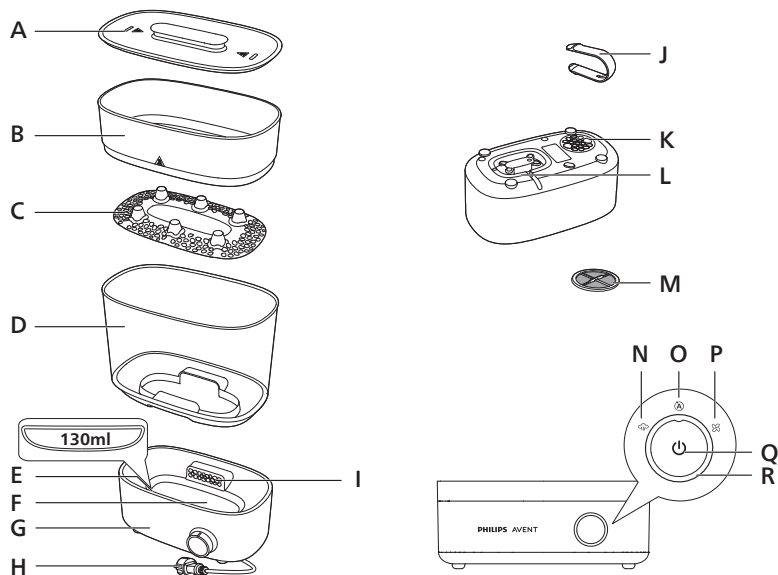

A	Käepidemega kaas	J	Tangid
B	Väike korv	K	Filtrikate
C	Suure korvi alumine plaat	L	Toitekaabli hoiustamispesa
D	Suur korv koos tilgakogujaga	M	Filter
E	Maksimaalse veetaseme näidik	N	Steriliseerimisrežiim
F	Veenõu koos küttelemendiga	O	Automaatrežiim
G	Alus	P	Kuivatusrežiim
H	Toitekaabel	Q	Toitenupp
I	Õhu väljalaskeava	R	Juhtnupp koos edenemist näitavate tuledega


Märkused

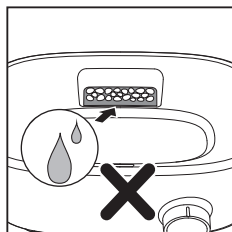

- Ärge valage vett läbi õhuava.



- Ärge kastke alust vette.

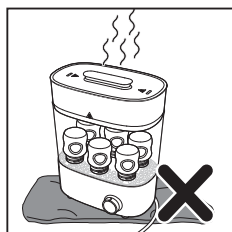


- Kasutamise ajal ärge pange aluse alla ühtegi eset (nt rätik, puhastuslapp jne).



- Kasutage 130 ml vett.




- Puhastage elemendid enne, kui need seadmesse panete.

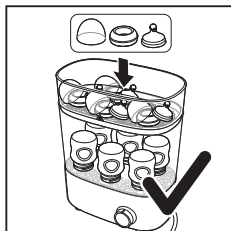

- Eraldage pudeli kõik komponendid ja asetage need seadmesse nii, et avaused jäävad allapoole; nii takistate nende veega täitumist.



- Tühjendage suurt korvi pärast iga kasutuskorda.

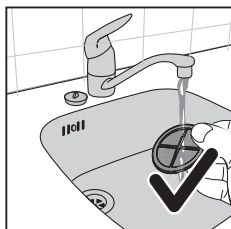

- Puhastage filtrit iga nelja nädala tagant.



- Puhastage seade katlakivist iga kahe nädala järel.

Seadistusega tutvumine

Märkus. Enne steriliseerimist puhastage pudelid ja muud esemed.

Sterilisaatoris võib kasutada ainult neid esemeid, mis steriliseerimiseks sobivad. Ärge steriliseerige esemeid, mis sisaldavad vedelikku (nt beebi närimisrõngad).



Steriliseerimisrežiim 	• Steriliseerimisrežiim on mõeldud beebiasjade steriliseerimiseks. • Steriliseerimistsükkel kestab umbes 10 minutit. • Soojenemiseks kulub umbes 4 minutit ja steriliseerimiseks umbes 6 minutit. • Valage aluse veenõusse täpselt 130 ml vett.
Automaatrežiim 	• Automaatrežiim on mõeldud beebiasjade steriliseerimiseks ja kuivatamiseks. • Automaatrežiimi tsükkel kestab umbes 40 minutit. • Automaatrežiimi valimisel käivitab seade esmalt steriliseerimistsükli ja seejärel automaatselt kuivatustsükli. Steriliseerimistsükkel kestab umbes 10 minutit ja kuivatustsükkel umbes 30 minutit. • Valage aluse veenõusse täpselt 130 ml vett.
Kuiv 	• Kuivatusežiim on mõeldud beebiasjade kuivatamiseks. • Kuivatustsükkel kestab umbes 30 minutit. • Ärge lisage beebiasjade kuivatamisel veenõusse vett.

Enne esimest kasutamist


Seadme esmakordsel kasutamisel soovitame sooritada ühe steriliseerimisprotsessi tühjade korvidega.

- 1 Kasutage puhast lutipudelit ja valage aluse veenõusse täpselt 130 ml vett.


Nõuanne. See seade on mõeldud kraaniveega kasutamiseks. Kui elate kareda veega piirkonnas, võib seadmesse kiiresti tekkida katlakivi. Seetõttu on seadme kasutusea pikendamiseks soovitatav kasutada mineraalaineteta vett, näiteks destilleeritud või puhastatud vett. Kui soovite katlakivi kohta lisateavet saada, lugege peatükki „Katlakivi eemaldamine”.

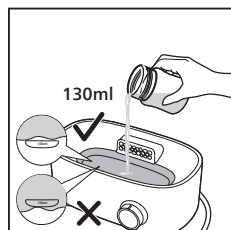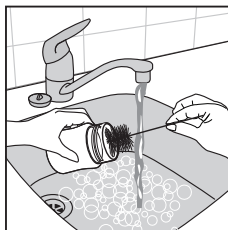


- 2 Pange suur korv alusele.

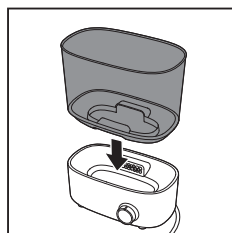


- 3 Asetage alumine plaat suure korvi sisse.

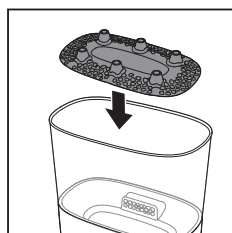


- 4 Asetage väike korv suurde korvi.

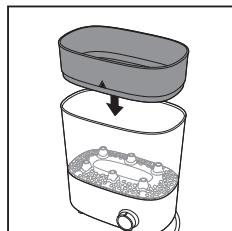

5 Asetage kaas väikesele korvile.

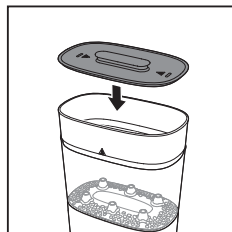


6 Sisestage pistik pistikupessa.

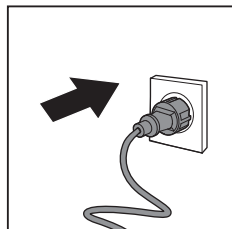

7 Keerake toitenupp steriliseerimisrežiimile. Seejärel vajutage toitenuppu, et seade sisse lülitada.

Ettevaatust! Alus, korvid ja kaas lähevad kasutamise ajal või vahetult pärast seda kuumaks.

- Kui seade alustab steriliseerimist, hakkavad edenemist näitavad tuled vilkuma.
- Kui steriliseerimisprotsess on lõppenud, siis tuled kustuvad ja seade lülitub automaatselt välja.
- Seadme kuivatamiseks võite keerata toitenupu kuivatusrežiimile. Kuivatustsükli läbimiseks kulub umbes 30 minutit.

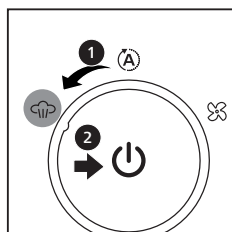

8 Kui seade on täiesti maha jahtunud, eemaldage kaas, väike korv, alumine plaat ja suur korv ning kuivatage need rätikuga.

Märkus. Olge suure korvi aluselt eemaldamisel ettevaatlik, kuna tilgakogujasse võib olla kogunenud vett.

9 Laske seadmel enne uuesti kasutamist umbes 10 minutit jahtuda.

Märkus. Pärast steriliseerimistsükli ei saa seadet 10 minutit kasutada. See peab enne jahtuma.


Steriliseerimiseks valmistumine

Enne steriliseerimist peske esemed nõudepesumasinas või vee ja nõudepesuvahendiga põhjalikult puhtaks.


Sterilisaatori kokkupanek

Sterilisaatori kokkupanemiseks on mitu võimalust.


- 1 Väikeseid esemeid, nagu lutid, steriliseeritakse alusel asuvas väikeses korvis.

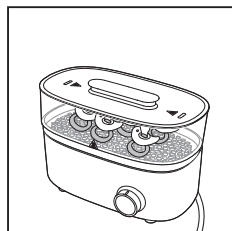

- 2 Keskmise suurusega esemeid, nagu rinnapumba osad, väikelaste taldrikud või nende noad-kahvlid, steriliseeritakse ainult alusel asuvas suures korvis.

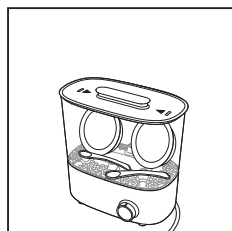


- 3 Kuni kuue 330 ml lutipudeli puhul asetatakse alusele suur korb ja selle peale omakorda veel väike korb. Asetage pudelid tagurpidi suurde korvi ning pudeli korgid, keermerõngad ja lutid väikesesse korvi.

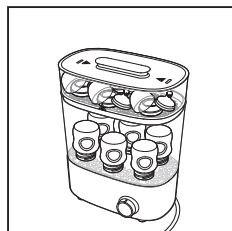

Märkus. Väikest korvi täites pange keermerõngad kõige alla ning lutid ja korgid nende peale.


Märkus. Kontrollige, et kõik steriliseeritavad osad oleksid täielikult lahti võetud, ja asetage need korvi avausega allapoole, et vältida nende veega täitumist.

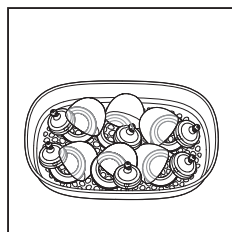


Steriliseerimine

Sterilisaatori põhjalik ja kemikaalivaba puhastamine hoiab selle sisu suletud kaane all steriilsena kuni 24 tundi. Pärast steriliseerimist on beebiesemetesse jäänud vesti steriilne ega kogu baktereid.

- 1 Valage vesi otse aluses olevasse veeanumasse (vt ptk „Enne esimest kasutamist“).
- 2 Pange sterilisaator kokku (vt ptk „Sterilisaatori kokkupanek“) ja asetage steriliseeritavad esemed sinna sisse.
- 3 Asetage kaas väikesele või suurele korvile.

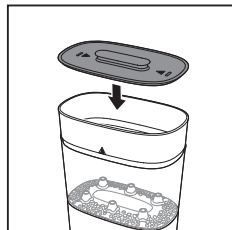

- 4 Sisestage pistik pistikupessa.

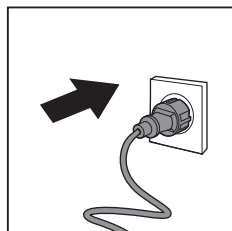

- 5 Keerake toitenupp steriliseerimisrežiimile. Seejärel vajutage toitenuppu, et seade sisse lülitada.

Ettevaatust! Alus, korvid ja kaas lähevad kasutamise ajal või vahetult pärast seda kuumaks.


Märkus. Seadme väljalülitamiseks vajutage väljalülitamisnuppu.

- Kui seade alustab steriliseerimist, hakkavad edenemist näitavad tuled vilkuma.
- Kui steriliseerimisprotsess on lõppenud, siis tuled kustuvad ja seade lülitub automaatselt välja.

- 6 Eemaldage kaas.

Oodake enne kaane eemaldamist, kuni seade on jahtunud.

Olge ettevaatlik. Sterilisaatorist võib tulla kuuma auru.

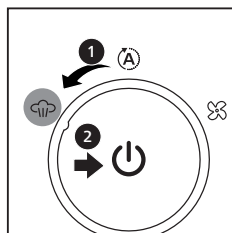

- 7 Eemaldage korvist pudelid ja muud esemed. Väiksemate esemete eemaldamiseks kasutage tange.

Olge ettevaatlik. Steriliseeritud esemed võivad olla kuumad.

Märkus. Enne steriliseeritud esemete puudutamist peske oma käed põhjalikult puhtaks.

- 8 Eemaldage seade vooluvõrgust ja oodake, kuni seade on täielikult jahtunud.

- 9 Eemaldage väike korv ja suur korv.

Märkus. Olge suure korvi eemaldamisel ettevaatlik, kuna tilgakogujasse võib olla kogunenud vett.

Märkus. Tilgakoguja eesmärk on koguda piima- või toidujääke, et need ei satuks aluses olevasse veenõusse. See on vajalik steriliseerimisjõudluse optimeerimiseks ja kütteelemendi puhastamise lihtsustamiseks.

- 10 Eemaldage alumine plaat suure korvi küljest. Kallake suure korvi tilgakogujasse kogunenud vesi välja ja tehke see puhtaks (vt ptk „Puhastamine“).

- 11 Kallake ka veenõusse jäänud vesi välja ja pühkige see kuivaks.

Märkus. Pärast steriliseerimistsükli ei saa seadet 10 minutit kasutada. See peab enne jahtuma.

Automaatrežiim: steriliseerimine ja kuivatamine


- 1 Valage vesi otse aluses olevasse veeanumasse (vt ptk „Enne esimest kasutamist“).

- 2 Pange sterilisaator kokku (vt ptk „Sterilisaatori kokkupanek“) ja asetage steriliseeritavad esemed sinna sisse.


Märkus. Veenduge, et kõik esemed oleksid täielikult lahti võetud, ja asetage need korvi avausega allapoole, et kiirendada nende kuivamist.

Olge ettevaatlik. Kuivatamisel tuleb sterilisaatorist kuuma auru.

- 3 Asetage kaas väikesele või suurele korvile.

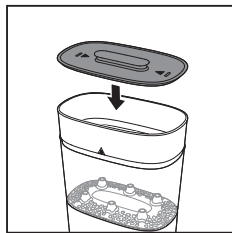


- 4 Sisestage pistik pistikupessa.

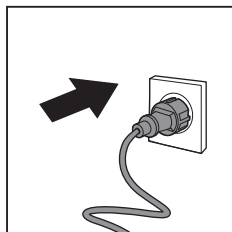

5 Keerake toitenupp automaatrežiimile. Seejärel vajutage toitenuppu, et seade sisse lülitada.

- Esmalt käivitub steriliseerimistsükkel. Kui seade alustab steriliseerimist, hakkavad edenemist näitavad tuled vilkuma.
- Seejärel käivitub automaatselt kuivatustsükkel. Selle peale hakkavad edenemist näitavad tuled vilkuma ja seejärel vaikselt kustuma.
- Kui kuivatusprotsess on lõppenud, siis tuled kustuvad ja seade lülitub automaatselt välja.

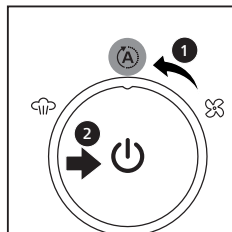

Ettevaatust! Alus, korvid ja kaas lähevad kasutamise ajal või vahetult pärast seda kuumaks.

6 Eemaldage kaas.

7 Eemaldage korvist pudelid ja muud esemed. Väiksemate esemete eemaldamiseks kasutage tange.

Olge ettevaatlik. Steriliseeritud esemed võivad olla kuumad.

Märkus. Enne steriliseeritud esemete puudutamist peske oma käed põhjalikult puhtaks.

Märkus. Kuivamistulemus oleneb ümbritseva keskkonna temperatuurist, niiskustasemest ja sellest, kuidas esemed sterilisaatorisse laaditud on. Vajaduse korral võite käivitada veel ühe kuivatustsükli.

8 Eemaldage seade vooluvõrgust ja oodake, kuni seade on täielikult jahtunud.

9 Eemaldage väike korv ja suur korv.

Märkus. Olge suure korvi eemaldamisel ettevaatlik, kuna tilgakogujasse võib olla kogunenud vett.

10 Eemaldage alumine plaat suure korvi küljest. Kallake suure korvi tilgakogujasse kogunenud vesi välja ja tehke see puhtaks (vt ptk „Puhastamine“).


Kuivatamine

- 1 Pange sterilisaator kokku (vt ptk „Sterilisaatori kokkupanek“) ja asetage kuivatavad esemed sinna sisse.


Märkus. Veenduge, et kõik esemed oleksid täielikult lahti võetud, ja asetage need korvi avausega allapoole, et kiirendada nende kuivamist.

Olge ettevaatlik. Kuivatamisel tuleb sterilisaatorist kuuma auru.

- 2 Asetage kaas väikesele või suurele korvile.

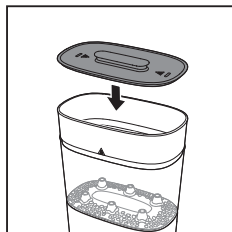


- 3 Sisestage pistik pistikupessa.

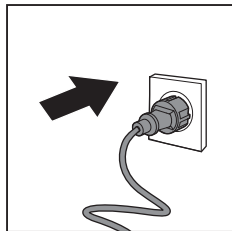

- 4 Keerake toitenupp kuivatusrežiimile. Seejärel vajutage toitenuppu, et seade sisse lülitada.

- Kuivatustsükkel käivitub umbes 30 sekundi pärast. Kõigepealt hakkab seade soojenema, et toota kuivatamiseks sooja õhku.
- Selle peale hakkavad edenemist näitavad tuled vilkuma ja seejärel vaikselt kustuma.
- Kui kuivatustsükkel on lõppenud, siis tuled kustuvad ja seade lülitub automaatselt välja.

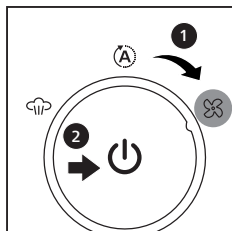

Ettevaatust! Alus, korvid ja kaas lähevad kasutamise ajal või vahetult pärast seda kuumaks.

- 5 Eemaldage kaas.

- 6 Eemaldage korvist pudelid ja muud esemed. Väiksemate esemete eemaldamiseks kasutage tange.

Olge ettevaatlik. Kuivatatud esemed võivad olla kuumad.

Märkus. Peske enne kuivatatud esemete katsumist oma käed hoolikalt puhtaks.

Märkus. Kuivamistulemus oleneb ümbritseva keskkonna temperatuurist, niiskustasemest ja sellest, kuidas esemed sterilisaatorisse laaditud on. Vajaduse korral võite käivitada veel ühe kuivatustsükli.

- 7 Eemaldage seade vooluvõrgust ja oodake, kuni seade on täielikult jahtunud.

Puhastamine



Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrasiivseid või söövitavaid puhastusvahendeid (nt valgendit) ega küürimiskäsna.

Ärge kastke alust ega toitekaablit vette ega mis tahes teise vedelikku.

Märkus. Sterilisaator ei ole nõudepesumasinakindel. Korve, alumist plaati ja kaant võib pesta kuuma vee ja nõudepesuvahendiga.

- 1 Enne hoiustamist võtke alati pistik seinakontaktist välja ja laske seadmel jahtuda.
- 2 Puhastage alus niiske lapiga.
- 3 Eemaldage alumine plaat suure korvi küljest.
Valage suure korvi tilgakogujasse kogunenud vesi välja.

Märkus. Vesi koguneb suure korvi tilgakogujasse pärast iga steriliseerimistsükli. Tühjendage suurt korvi pärast iga kasutuskorda.

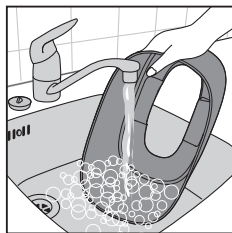
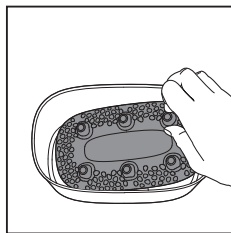


- 4 Puhastage kaas, väike korv, alumine plaat ja suur korv, kasutades kuuma vett ja nõudepesuvahendit.


Märkus. Pärast puhastamist hoidke sterilisaatorit puhtas ja kuivas kohas.

Filtri puhastamine

1 Eemaldage filter aluse küljest.



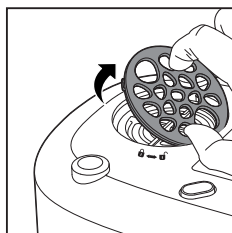
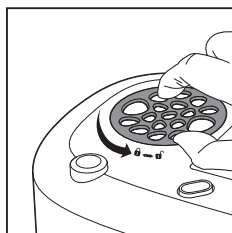


2 Võtke filter välja ja peske seda voolava vee all.

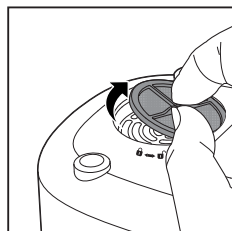

3 Laske filtril täielikult ära kuivada. Pange see alusele tagasi ja sulgege filtri kate.

Märkus. Puhastage filtrit vähemalt iga nelja nädala tagant, et tagada filtri tõhus töö.

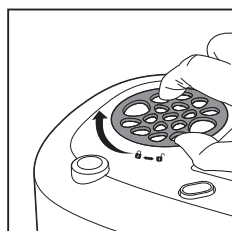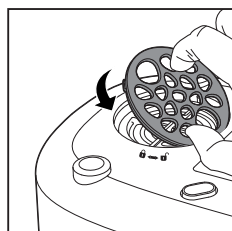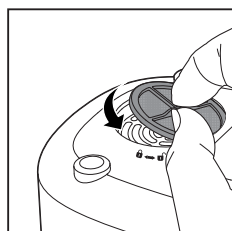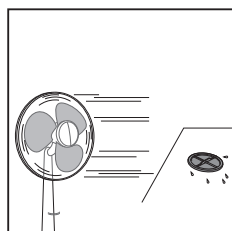


Katlakivi eemaldamine

Beebiasjade hügieeniliste standardite tagamisel on steriliseerimisprotsess ülimalt oluline. Katlakivi võib aga steriliseerimistsükli aeglasemaks muuta või isegi selle tõhusust vähendada.


Katlakivi näol on tegemist kõva ja kriidise settega. Olenevalt teie vee kvaliteedist võib katlakivi olla nii lumivalge kui ka pruunikas. Mida karemad on vesi, seda kiiremini katlakivi tekib. See koguneb seadmetesse vees looduslikult sisalduvate ja vee keetmisel aurustumata jäänud mineraalide jääkidena. Kuigi katlakivi ei ole kahjulik, on see ebameeldiv, raskesti puhastatav ja võib kahjustada seadmete tööd või nende osasid, kui sel lastakse koguneda.

Puhastage sterilisaatorit katlakivist vähemalt iga kahe nädala tagant, et tagada selle tõhus töö.


- 1 Valage veenõusse 12 ml äädikat (5%) ja 120 ml vett.**

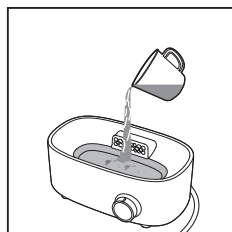


- 2 Oodake 6 tundi/üleöö või seni, kuni kogu katlakivi on lahustunud.**

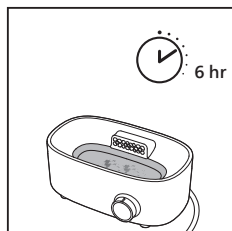

- 3 Tühjendage veenõu ja loputage seda põhjalikult.**

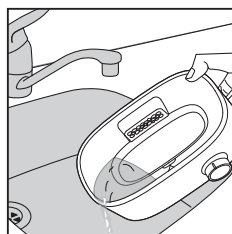

- 4 Kui näete jätkuvalt katlakivijääke, siis eemaldage need nuustikuga. Loputage veenõud uuesti ja pühkige seda niiske lapiga.

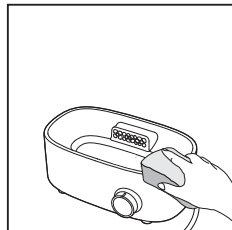

Märkus. Võite kasutada ka sidrunhappel põhinevaid katlakivieemaldajaid.

Märkus. Ärge kasutage muud tüüpi katlakivieemaldajaid.

Tarvikute tellimine

Tarvikute või varuosade ostmiseks külastage veebisaiti **www.philips.com** või pöörduge oma Philipsi edasimüüja poole. Võite samuti ühendust võtta oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (vt kontaktandmeid üleilmselt garantiilehel).

Jäätmekäitlus

See sümbol tähendab, et elektritooteid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka. Järgige oma riigi elektritoodete lahuskogumist reguleerivaid eeskirju.



Tugi

Kogu tootetoetuse koos korduma kippuvate küsimustega leiате aadressilt **www.philips.com/support**.

Märkus. Optimaalse jõudluse säilitamiseks tuleb seadet regulaarselt katlakivist puhastada. Kui te seda ei tee, võib seade lõpuks töötamise lõpetada. Sellisel juhul EI KATA garantii teie seadme parandamist.

Märkus. Energiatarve (ooterežiim): <0,3 W (aeg automaatse ooterežiimi: < 1 min)

Veaotsing

See peatükk annab ülevaate üldistest probleemidest, mis võivad selle seadmega seoses tekkida. Kui te ei suuda probleemi alltoodud teabe abil lahendada, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Lahendus
Millal peaksin sterilisaatorit katlakivist puhastama?	Võite märgata, et sterilisaatori kasutamisel tekivad kuumutusplaadile väikesed valged või pruunikad plekid. Sellisel juhul vajab teie sterilisaator katlakivist puhastamist. Igal juhul tuleb sterilisaatorit puhastada vähemalt iga kahe nädala tagant, et tagada selle tõhus töö.
Miks steriliseerimisaeg nii lühikeseks jäi?	Te ei lisanud seadmesse piisavalt vett. Valage veenõusse täpselt 130 ml vett.
Miks pärast steriliseerimist kuumutusplaadil nii palju vett on?	Katlakivi võib kuumutusplaadi tööd takistada. Sterilisaatorit tuleb katlakivist puhastada vähemalt iga kahe nädala tagant. Vaadake peatükki „Katlakivi eemaldamine“.
Miks tuleb aluselt põlemise lõhna ja miks seal põlemise märgid on?	See juhtub siis, kui te ei vala pärast kasutamist suure korvi tilgakogujat veest tühjaks. Vesi koguneb suure korvi tilgakogujasse pärast iga steriliseerimistsükli. Tühjendage suurt korvi pärast iga kasutuskorda. 1 Eemaldage alumine plaat suure korvi küljest. Valage suure korvi tilgakogujasse kogunenud vesi välja. 2 Puhastage alumine plaat ja suur korv, kasutades kuuma vett ja nõudepesuvahendit. Võimalik, et te ei ole esemeid enne steriliseerimist korralikult puhtaks pesnud. Enne steriliseerimist peske esemed nõudepesumasinas või vee ja nõudepesuvahendiga põhjalikult puhtaks.
Kuumutusplaadilt koorub kate maha. Kas see mõjutab töötamist?	See ei mõjuta sterilisaatori tööd. Ärge kasutage kuumutusplaadi puhastamiseks abrasiivseid või söövitavaid puhastusvahendeid (nt valgendit) ega küürimiskäsna. Vältige külma vee valamist kuumutusplaadile kohe pärast kasutamist, sest see võib mittenakkuva katte kiire jahtumise tõttu kattesse praod tekitada.
Miks mu sterilisaator enam ei tööta?	Katlakivi võib kuumutusplaadi tööd takistada. Sterilisaatorit tuleb katlakivist puhastada vähemalt iga kahe nädala tagant. Vaadake peatükki „Katlakivi eemaldamine“.

Probleem	Lahendus
Esemed on pärast kuivatamist ikka märjad.	Esemed võivad märjad olla erinevatel põhjustel. • Keskkonna temperatuur või niiskus • Sterilisaatori täitmine • Esemed on asetatud seadmesse liiga tihedalt Veenduge, et kuum õhk saaks esemete vahel vabalt ringi liikuda. See tagab tõhusama kuivatuse. Vajaduse korral võite käivitada veel ühe kuivatustsükli.

