

PHILIPS

AVENT

Protector de pezones

Permite el contacto con la piel

Protección contra las irritaciones

Mediano (21 mm)

2 piezas



SCF153/03



La ayuda a prolongar la lactancia de una forma cómoda*

Fácil enganche para el bebé y suave con su piel*

Los protectores de pezones están diseñados para ayudarla a amamantar cuando padece molestias en los pezones o problemas con el enganche. La forma de mariposa ultracompacta permite que el bebé tenga contacto con el pecho y ayuda a mantener el vínculo.

Funda higiénica

- Limpieza fácil en la funda de transporte higiénica

Sujeción fácil para el bebé*

- Diseñado para ayudar con las dificultades para sujetarse

Funciones del producto


- Diseñado para adaptarse
- Diseñado para permitir el contacto de la piel con el bebé

¿Cuándo se debe utilizar un protector de pezón?

- Cómo combinar la alimentación con pecho y mamadera
- Los bebés amamantan a su propio ritmo
- Diseñado para pezones sensibles, irritados o adoloridos


Destacados

Forma de mariposa exclusiva

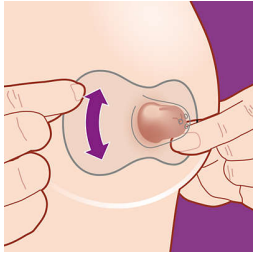


La forma de mariposa ultradelgada de los protectores de pezones se diseñó para permitir el contacto del bebé con su piel. Gracias a su forma de mariposa, tanto la nariz como la barbilla del bebé quedan en contacto con su pecho, así el bebé puede oler el aroma de su madre y tocar su piel. Solo coloque el protector sobre el centro del pezón para asegurarse de que su bebé pueda agarrarse correctamente de toda la areola. Disfrute del vínculo con su pequeño mientras protege sus pezones.

Diseñado para fortalecer la sujeción*

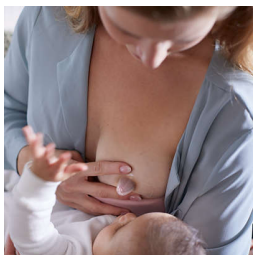

Diseñamos los protectores de pezones para ayudar a los bebés con dificultades para sujetarse y para ayudarla a usted a amamantar durante más tiempo*. Para las madres que tienen pezones planos e invertidos y para los bebés con una técnica de succión débil o anomalías orales, el protector de pezones puede proporcionar una tetina diseñada para la sujeción a fin de mantener una posición voluminosa durante las pausas de lactancia del bebé.

Protege los pezones durante la alimentación

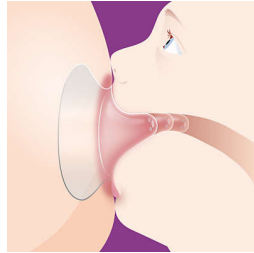

Los protectores de pezones están diseñados para proporcionar comodidad y una alimentación más delicada cuando la madre tenga los pezones irritados, agrietados o adoloridos. Ayudan a reducir el roce o estiramiento de los pezones durante el amamantamiento para que pueda alimentar al bebé con su mejor leche y de manera cómoda.

Amamante al bebé a su ritmo




Si la madre necesita controlar el flujo de leche o el bebé no tiene la fuerza suficiente para succionar, los protectores de pezones también brindan un gran apoyo. Los tres agujeros en la punta del protector pueden ayudar con el rango de flujo de la leche materna en el caso de que haya un exceso de leche. De esta forma, el bebé puede amamantar a su propio ritmo cuando la madre experimente un flujo excesivo.

Combina la lactancia materna y el biberón

El material de silicona ultrafino y suave del protector de pezones Philips Avent prácticamente forma parte de nuestras soluciones de alimentación para lactantes, ya que les ayuda a realizar una transición perfecta entre el pecho y la alimentación con biberón al combinar ambos.

Dos tamaños que se ajustan a sus necesidades

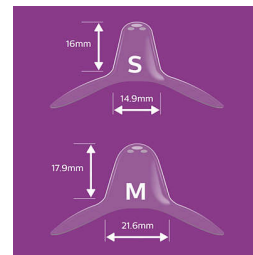

Los protectores de pezones están disponibles en dos tamaños a fin de adaptarse mejor a su pecho. Los protectores pequeños se adaptan al diámetro de un pezón de 12 mm y los medianos a 21 mm. Para encontrar su tamaño, póngase cómoda y coloque uno de los anillos con el agujero sobre su pezón. Gire el protector hacia la derecha y dirija el pezón hacia el túnel. Luego estire la base del protector alrededor de la areola. Si hay una separación de 2 mm entre el pezón y la silicona, esto significa que se ajusta correctamente. Consejo: El tamaño varía según el pezón y no la areola. ¿No está segura? Consúltelo a su profesional del cuidado de la salud para obtener asistencia.

Limpieza fácil en cualquier momento



Debe limpiar los protectores de pezones antes de cada uso. Para ello tardará menos de 10 minutos. Colóquelos en agua hirviendo durante cinco minutos o utilice la funda higiénica. Coloque los protectores de pezones bien enjuagados en la funda y agregue 25 ml (0.9 fl.oz) de agua. A continuación, coloque los protectores de pezones en un microondas con una potencia de entre 750 y 1000 W durante tres minutos. Deje que se enfríen durante cinco minutos. A continuación, escurra el agua y estarán listos para su uso. Utilice la cómoda funda de transporte higiénica en cualquier parte, así como para guardar los protectores de pezones y mantenerlos limpios.

Especificaciones

Diseño

Diseño con forma de mariposa

Material

Protector de pezones: Libre de BPA*, silicona

Qué se incluye

Protectores de pezones de 21 mm: 2 piezas
Funda de transporte higiénica: 1 piezas

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Fecha de publicación
2023-06-05
Versión: 1.0.1

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

EAN: 87 10103 90776 3

www.philips.com



* en caso de pezones planos o invertidos, irritados, sensibles, agrietados o adoloridos, y algunos bebés con dificultades para sujetarse

* No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

* En esta sección, se incluyen opiniones del consumidor acerca del producto. Philips se desvincula del contenido que ingresaron los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto que se incluya en el presente documento no se considera como información oficial de Philips.