

PHILIPS

AVENT

SCF291



Kullanım kılavuzu

İçindekiler

Önemli.....	3
Tehlike.....	3
Uyarı.....	3
Dikkat	4
Giriş	6
Genel açıklamalar.....	6
Dikkate Alınması Gerekenler	7
Ayarları tanıma.....	8
İlk kullanımdan önce.....	8
Cihazı kullanıma hazırlama.....	10
Cihazı birleştirme.....	10
Cihazın kullanımı	11
Temizlik.....	12
Kirecin temizlenmesi.....	13
Aksesuarların sipariş edilmesi.....	14
Geri dönüşüm	14
Destek	14
Sorun giderme	15

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Tabanı, elektrik kablosunu ya da elektrik fişini suya veya başka bir sıvıya asla batırmayın.
- Kireç temizleme talimatlarına uyulmazsa onarımı mümkün olmayan hasar oluşabilir.
- Elektrik çarpması riski nedeniyle tabanı kesinlikle sökmeyin.

Uyarı

- Bu cihazın fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya bu kişilere güvenli kullanım talimatlarının sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazı prize takmadan önce cihazın üstünde yazılı olan gerilimin evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazın fişi, güç kablosu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın.
- Cihazın elektrik kordonu hasar görürse tehlikeli bir duruma yol açmamak için mutlaka yetkili bir Philips servisi veya Philips tarafından yetki verilmiş bir servis tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazın içinde onarılabilecek hiçbir parça bulunmamaktadır. Cihazı açmaya, bakım veya onarımını yapmaya kalkışmayın.
- İşlem sırasında cihaz aşırı derecede ısınır ve dokunulduğunda cildin yanmasına neden olabilir.

- Kapaktaki buhar deliğinden gelen veya kapağı kaldırdığınızda ortaya çıkan sıcak buhara dikkat edin. Buhar, yanıklara neden olabilir.
- İşlem sırasında veya bu işlemten kısa süre sonra çok sıcak oldukları için tabana, sepetlere ve kapağa dokunmayın. Yalnızca tutma yerini kullanarak kapağı kaldırın.
- Cihaz kullanımdayken veya içindeki su hâlâ sıcakken cihazı asla taşımayın veya açmayın.
- Cihaz kullanılırken üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Herhangi bir ek madde olmadan yalnızca su kullanın.
- Cihaza kesinlikle çamaşır suyu veya başka kimyasal maddeler koymayın.
- Haznedeki göstergeyi aşacak kadar veya 130 ml'den fazla su eklemeyin.
- Bu cihazı sadece biberonları ve uygun diğer gereçleri hijyenik olarak temizlemek için kullanın. Hijyenik olarak temizlemek istediğiniz gereçlerin kullanıcı kılavuzlarını kontrol ederek buharlı hijyenik biberon temizleme cihazına uygun olduklarından emin olun.
- İşlemi durdurmak istiyorsanız güç açma kapatma düğmesine basarak cihazı kapatın.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Olası yaralanmaları önlemek için cihazı amacı dışında kullanmayın.

Dikkat

- Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuarlar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuarlar veya parçalar kullanırsanız garantiniz geçerliliğini yitirir.
- Cihazı çok sıcak ortamlarda ya da doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın.
- Cihazı taşımadan veya saklamadan önce mutlaka soğumasını bekleyin.
- Kullanım sırasında açık yüzeyler ısınabilir.



- Sepetin altındaki deliklerden düşebilecek çok küçük gereçleri hijyenik olarak temizlemeyin.
- Cihaz açıkken doğrudan ısıtma elemanının üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Düşüyse veya başka bir şekilde hasar gördüyse cihazı kullanmayın. Onarım için yetkili bir Philips servis merkezine götürün.
- Cihazı daima kuru, sabit, düz ve yatay bir yüzeyde bulundurun ve kullanın.
- Cihazı sıcak bir yüzey üzerine koymayın.
- Güç kablosunun, cihazın yerleştirildiği masa ya da tezgahın sarkmamasına dikkat edin.
- Kullanımdan sonra ve cihaz soğuduğunda kalan suyu mutlaka boşaltın.
- Cihazı kapatın ve aksesuarları değiştirmeden ya da kullanım sırasında hareket eden parçalara yaklaşımadan önce güç kaynağı bağlantısını kesin.
- Sıcaklık ve yükseklik gibi çevresel koşullar, bu cihazın çalışmasını etkileyebilir.
- Temizleme işlemi ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Cihazı gözetimsiz bırakmanız durumunda her zaman cihazın güç kaynağı bağlantısını kesin.


Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Giriş

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, Philips Avent'e hoş geldiniz! Philips Avent'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Genel açıklamalar

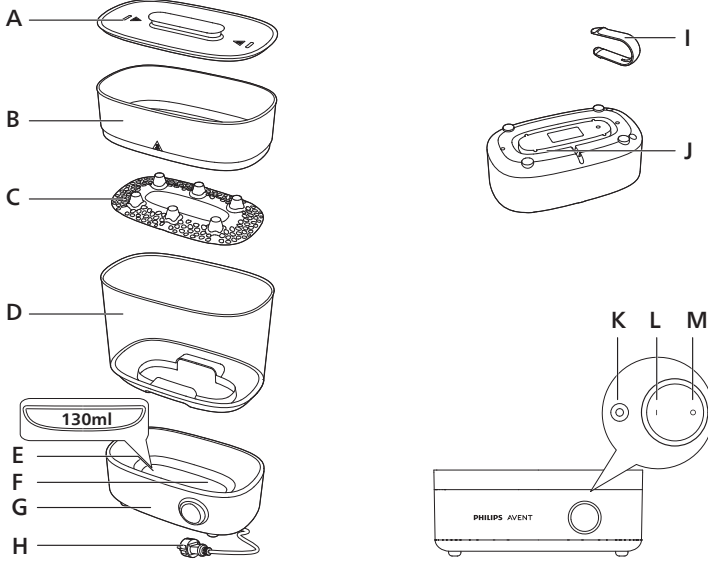

A	Kapak ve tutma yeri	H	Güç kablosu
B	Küçük sepet	I	Maşa
C	Büyük sepet için alt plaka	J	Kablo saklama bölmesi
D	Damlama tepsisi büyük sepet	K	Gösterge ışığı
E	Maksimum su seviyesi göstergesi	L	Açma düğmesi
F	Su hazneli ısıtma elemanı	M	Kapatma düğmesi
G	Taban ünitesi		


Dikkate Alınması Gerekenler




- Tabanı suya batırmayın.



- 130 ml su kullanın.

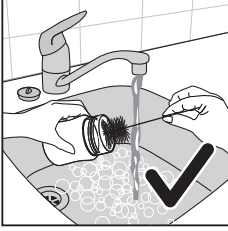

- Gereçleri cihaza koymadan önce temizleyin.

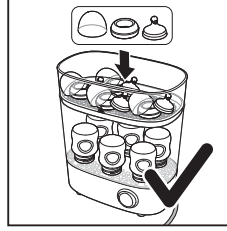

- Tüm biberon parçalarını tamamen sökün ve su birikmesini önlemek için ağızları aşağı bakacak şekilde cihaza yerleştirin.



- Her kullanımdan sonra büyük sepette kalan suyu dökün.




- Cihazın kirecini 2 haftada bir temizleyin.

Ayarları tanıma

Not: Biberonları ve diğer gereçleri hijyenik olarak temizlemeden önce normal şekilde temizleyin.

Cihaza sadece hijyenik temizliğe uygun gereçleri yerleştirin. Sıvı dolu gereçleri (ör. soğutucu sıvı dolu diş kaşığı) hijyenik olarak temizlemeyin.

Hijyenik temizleme

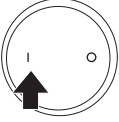



- Hijyenik temizleme modu, bebek gereçlerini temizlemek için kullanılır.
- Hijyenik temizleme işlemi yaklaşık 10 dakika sürer.
- Isınma yaklaşık 4 dakika, hijyenik temizleme ise yaklaşık 6 dakika sürer.
- Doğrudan tabanın su haznesine tam olarak 130 ml su doldurduğunuzdan emin olun.

İlk kullanımdan önce


Cihazı ilk kullanışınızda, sepetler boşken bir kez hijyenik temizleme yapmanızı öneririz.

- 1 Temiz bir biberon kullanın ve tabandaki su haznesine tam olarak 130 ml su doldurun.


İpucu: Bu cihaz, musluk suyuyla kullanım için tasarlanmıştır. Suyun sert olduğu bir bölgede yaşıyorsanız hızlı kireç oluşumu görülebilir. Bu nedenle, cihazınızın ömrünü uzatmak için saf su veya arıtılmış su gibi mineral içermeyen sular kullanmanız tavsiye edilir. Kireç hakkında daha fazla bilgi için "Kirecin temizlenmesi" bölümüne bakın.

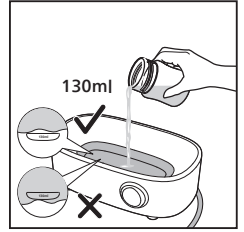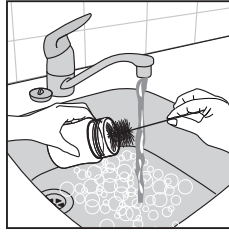


- 2 Büyük sepeti tabana yerleştirin.

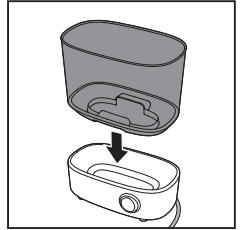


3 Alt plakayı büyük sepetin içine yerleştirin.

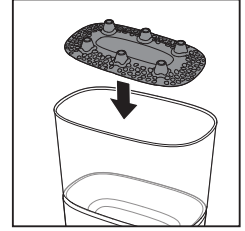


4 Küçük sepeti büyük sepetin üzerine yerleştirin.

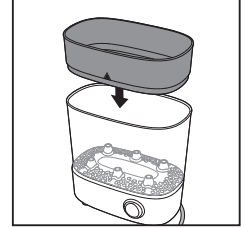

5 Kapağı küçük sepetin üstüne yerleştirin.

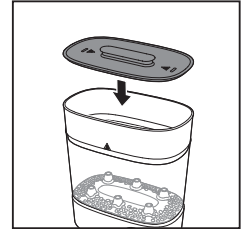

6 Fişi prize takın.

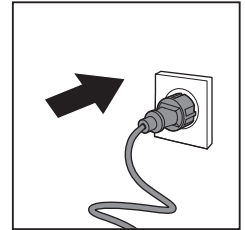


7 Cihazı çalıştırmak için açma düğmesine basın.

Not: Açma düğmesine bastıktan sonra cihazı fişe takarsanız cihaz hemen çalışmaya başlar. Güç kapatma düğmesine basarak cihazı kapatabilirsiniz.

Dikkat: Taban, sepetler ve kapak işlem sırasında ve işlemden kısa bir süre sonra çok sıcak olur.

- Gösterge ışığı, cihazın hijyenik temizlemeye başladığını göstermek için yanar.
- Hijyenik temizleme işlemi tamamlandığında ışık söner ve cihaz otomatik olarak kapanır.

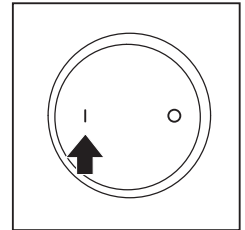

- 8 Cihaz tamamen soğuduktan sonra kapağı, küçük sepeti, alt plakayı ve büyük sepeti çıkarın ve silerek kurulayın.
Not: Büyük sepeti tabandan çıkarırken taban damlama tepsisinde kalan suya dikkat edin.
- 9 Tekrar kullanmadan önce cihazın yaklaşık 10 dakika tamamen soğumasını bekleyin.
Not: Cihaz, hijyenik temizleme programından sonra 10 dakika boyunca çalışmaz. Önce soğuması gerekir.




Cihazı kullanıma hazırlama

Gereçleri cihaza yerleştirmeden önce bulaşık makinesinde yıkayarak ya da sıcak su ve sıvı bulaşık deterjanıyla elde yıkayarak iyice temizleyin.

Cihazı birleştirme


Cihazı birleştirmenin çeşitli yolları vardır.

- 1 Emzik gibi küçük gereçleri hijyenik olarak temizlemek için tabanda yalnızca küçük sepetin bulunmasını sağlayın.
- 2 Göğüs pompası parçaları, bebek tabakları veya bebek çatal bıçağı gibi orta büyüklükteki gereçleri hijyenik olarak temizlemek için tabanda yalnızca büyük sepetin bulunmasını sağlayın.
- 3 En fazla altı adet 330 ml biberonu hijyenik olarak temizlemek için tabanda büyük ve küçük sepetin bulunmasını sağlayın. Biberonları ters şekilde büyük sepete ve biberon kapaklarını, sabitleme halkalarını ve emzikleri küçük sepete yerleştirin.

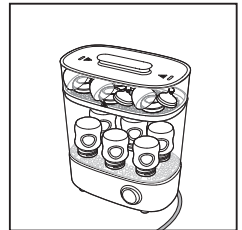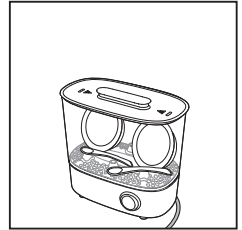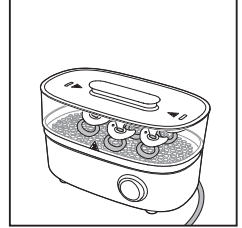

Not: Küçük sepeti doldururken sabitleme halkalarını aşağı yerleştirin, emzikleri ve biberon kapaklarını ise dağınık şekilde sabitleme halkalarının üstüne yerleştirin.


Not: Hijyenik olarak temizlenmesi gereken bütün parçaların tamamen sökülmüş olduğundan ve suyla dolmalarını önlemek için ağız kısmı aşağıya bakacak şekilde sepete yerleştirildiğinden emin olun.

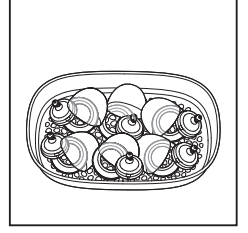


Cihazın kullanımı

Cihazın derinlemesine şekilde kimyasal madde kullanılmadan temizlenmesi, kapak açıkken içindekilerin 24 saate kadar hijyenik kalmasını sağlar. Hijyenik temizlikten sonra bebek gereçlerinin üzerinde kalan su hijyeniktir.

- 1 Suyu doğrudan tabandaki su haznesine dökün ("İlk kullanımdan önce" bölümüne bakın).
- 2 Cihazı birleştirin ("Cihazı birleştirme" bölümüne bakın) ve hijyenik olarak temizlenecek gereçleri içine yerleştirin.
- 3 Kapağı küçük veya büyük sepetin üstüne yerleştirin.

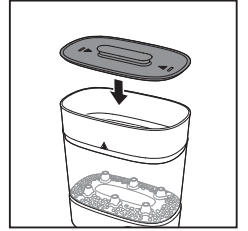

- 4 Fişi prize takın.

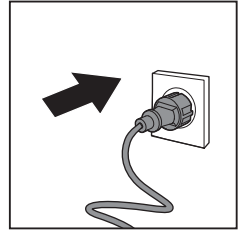


- 5 Cihazı çalıştırmak için açma düğmesine basın.

Dikkat: Taban, sepetler ve kapak işlem sırasında ve işlemden kısa bir süre sonra çok sıcak olur.

Not: Güç kapatma düğmesine basarak cihazı kapatabilirsiniz.

- Gösterge ışığı, cihazın hijyenik temizlemeye başladığını göstermek için yanar.
- Hijyenik temizleme işlemi tamamlandığında ışık söner ve cihaz otomatik olarak kapanır.

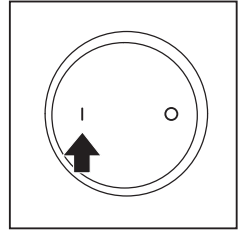

6 Kapağı çıkarın.

Kapağı çıkarmadan önce cihazın soğumasını bekleyin.

Dikkatli olun. Cihazdan sıcak buhar çıkabilir.

7 Biberonları ve diğer gereçleri sepetten çıkarın. Küçük gereçleri çıkarmak için maşayı kullanın.

Dikkatli olun. Hijyenik olarak temizlenmiş gereçler hâlâ sıcak olabilir.

Not: Hijyenik olarak temizlenmiş gereçlere dokunmadan önce ellerinizi iyice yıkadığınızdan emin olun.

8 Cihazın fişini çekin ve cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

9 Küçük ve büyük sepeti çıkarın.

Not: Büyük sepeti çıkarırken taban damlama tepsisinde kalan suya dikkat edin.

Not: Damlama tepsisi, gereçlerde kalan süt veya yiyecek artıklarının tabandaki su haznesine girmesini önlemek üzere tasarlanmıştır. Bunun amacı, hijyenik temizlik performansını optimize etmek ve ısıtma elemanının temizlenmesini kolaylaştırmaktır.

10 Alt plakayı büyük sepetten ayırın. Büyük sepetin damlama tepsisinde kalan suyu dökün ve bunu temizleyin ("Temizlik" bölümüne bakın).

11 Su haznesinde kalan suyu boşaltın ve bunu silerek kurulayın.

Not: Cihaz, hijyenik temizleme programından sonra 10 dakika boyunca çalışmaz. Önce soğuması gerekir.

Temizlik

Cihazı temizlemek için aşındırıcı veya zarar verici temizlik maddeleri (çamaşır suyu gibi) veya temizleme lifi kullanmayın.

Tabanı ve güç kablosunu hiçbir zaman suya ya da başka bir sıvıya batırmayın.

Not: Cihaz, bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Sepetler, alt plaka ve kapak sıcak su ve sıvı bulaşık deterjanı ile temizlenebilir.



1 Cihazı temizlemeden önce mutlaka fişini çekin ve soğumasını bekleyin.

2 Tabanı nemli bir bezle silerek temizleyin.

3 Alt plakayı büyük sepetten ayırın.

Büyük sepetin damlama tepsisinde kalan suyu dökün.

Not: Her hijyenik temizleme programının ardından büyük sepetin damlama tepsisinde su birikir. Her kullanımdan sonra büyük sepette kalan suyu dökün.

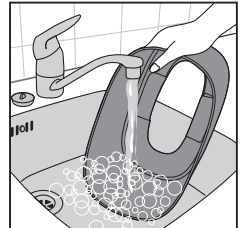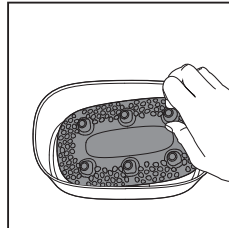

- 4 Kapağı, küçük sepeti, alt plakayı ve büyük sepeti sıcak su ve sıvı bulaşık deterjanı ile temizleyin.

Not: Temizledikten sonra cihazı temiz ve kuru bir alanda saklayın.


Kirecin temizlenmesi

Hijyenik temizleme, bebeğinize en iyi hijyen standartlarını sağlamak için çok önemli bir işlemdir. Kireç birikmesi, hijyenik temizleme programını yavaşlatabilir ve hatta verimliliğini etkileyebilir.


Kireç, sert ve tebeşirimsi bir birikimdir. Bölgenizdeki su türüne bağlı olarak kireç, kar beyazı tozdan kahverengimsi lekeler kadar farklı görünümde olabilir. Su sertlik derecesi ne kadar yüksekse kireçlenme o kadar hızlı olur. Suyun içinde bulunan ve ısıtıldığında buharlaşamayan doğal mineral artığı olarak cihazların içinde birikir. Sağlığa zararlı olmasa da, temizlenmesi zordur ve göze hoş görünmez. Cihazların içinde birikmesi sonucunda cihaz bileşenlerini bozabilir veya cihazın çalışmasına hasar verebilir.

Etkili şekilde çalıştığından emin olmak için cihazın kirecini en az 2 haftada bir temizleyin.


- 1 Su haznesini 12 ml beyaz sirke (%5 asetik asit) ve 120 ml su ile doldurun.

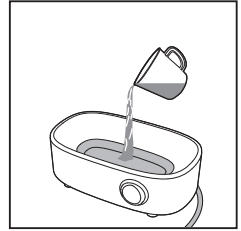


- 2 6 saat/bir gece veya tüm kireç çözülene kadar bekleyin.

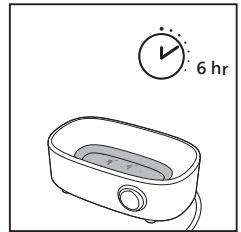

- 3 Su haznesini boşaltın ve iyice durulayın.

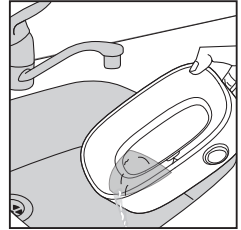

- 4 Hâlâ kireç kalıntıları bulunuyorsa bunları bir sünger ile temizleyin. Tekrar durulayın ve tabanı nemli bir bezle silin.

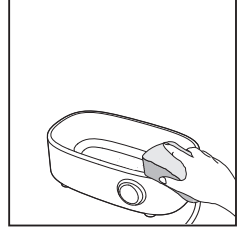

Not: Sitrik asit bazlı kireç çözücüler de kullanabilirsiniz.

Not: Diğer türlerde kireç çözücüler kullanmayın.

Aksesuarların sipariş edilmesi

Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.philips.com adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri Merkezi ile de iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında geçerli garanti belgesine göz atın).

Geri dönüşüm

Bu simge, elektrikli ürün ve pillerin normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Ülkenizde elektrikli ürün ve pillerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin yürürlükte olan yönetmelikleri izleyin.



Destek

Sık sorulan sorular gibi ürünle ilgili tüm destek konuları için lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

Not: En iyi performans için bu cihazın kirecinin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Bunu yapmazsanız cihaz çalışmayı bırakabilir. Bu durumda onarım, garantinizin kapsamında OLMAZ.

Not: Güç tüketimi (kapalı mod): <0,3 W (otomatik kapanmaya geçiş süresi: <1 dk.)

Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Aşağıdaki bilgiler sorunu çözenize yardımcı olmazsa ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi'yle iletişime geçin.

Sorun	Çözüm
Cihazımın kirecini ne zaman temizlemeliyim?	Cihazı kullandığınızda ısıtma plakasında kar beyazından kahverengimsi renge kadar küçük noktaların bulunduğunu fark edebilirsiniz. Bu, cihazınızın kirecinin temizlenmesi gerektiğine işaret eder. Cihazın verimli bir şekilde çalıştığından emin olmak için her koşulda cihazın kirecinin 2 haftada bir temizlenmesi gerekir.
Hijyenik temizleme işlemi neden çok kısa sürüyor?	Hijyenik temizleme için yeterli miktarda su eklememişsinizdir. Tam olarak 130 ml suyu doğrudan tabanın su haznesine dökün.
Hijyenik temizlemeden sonra ısıtma plakasında neden bu kadar çok su kalıyor?	Isıtma plakası kireç nedeniyle tıkanmış olabilir. Cihazın kirecinin en az 2 haftada bir temizlenmesi gerekir. "Kirecin temizlenmesi" bölümüne bakın.
Neden yanık kokusu ve tabanda yanık izleri var?	Büyük sepetin damlama tepsisinde kalan suyu düzenli olarak dökmemiş olabilirsiniz. Her hijyenik temizleme programının ardından büyük sepetin damlama tepsisinde su birikir. Her kullanımdan sonra büyük sepette kalan suyu dökün. 1 Alt plakayı büyük sepetten ayırın. Büyük sepetin damlama tepsisinde kalan suyu dökün. 2 Alt plakayı ve büyük sepeti, sıcak su ve sıvı bulaşık deterjanı ile temizleyin. Gereçler hijyenik temizlemeden önce iyice temizlenmemiş olabilir. Hijyenik olarak temizlenecek gereçleri cihaza yerleştirmeden önce bulaşık makinesinde yıkayarak ya da sıcak su ve sıvı bulaşık deterjanıyla elde yıkayarak iyice temizleyin.

Sorun	Çözüm
Isıtma plakasının üzerindeki kaplama soyuluyor. Bu durum cihazın işlevini etkiler mi?	Bu durum cihazın işlevini etkilemez. Isıtma plakasını temizlemek için aşındırıcı veya zarar verici herhangi bir temizlik maddesi (çamaşır suyu gibi) veya temizleme lifi kullanmamaya dikkat edin. Yapışmaz kaplamanın hızlı soğuması nedeniyle çatlamalara yol açabileceği için kullandıktan hemen sonra ısıtma plakasının üzerine soğuk su dökmemeye dikkat edin.
Cihaz neden çalışmayı bırakıyor?	Isıtma plakası kireç nedeniyle tıkanmış olabilir. Cihazın kirecinin en az 2 haftada bir temizlenmesi gerekir. "Kirecin temizlenmesi" bölümüne bakın.
Hijyenik temizleme sonrasında bebek ürünlerini kurutmam gerekiyor mu?	Cihazın derinlemesine şekilde kimyasal madde kullanılmadan temizlenmesi, kapak açıksa içindekilerin 24 saate kadar hijyenik kalmasını sağlar. Hijyenik temizlikten sonra bebek gereçlerinin üzerinde kalan su hijyeniktir, bu nedenle kurutmanız gerekmez.

