



請在以下網站連接中了解詳情

[www.philips.com](http://www.philips.com)

本手冊內容與實物可能存在差異，請以實物為準，如產品有任何更新恕不另行通知。

©2022 AquaShield

All rights reserved

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of HongKong AquaShield Health Technology Company Limited and HongKong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

水護膚是飛利浦淨飲水解決方案、熱水解決方案、衛浴解決方案、水杯及個人按摩器唯一品牌官方授權運營主體。

Rev A JUL 22



**PHILIPS**

按摩槍

運動按摩槍

PPM7502



User Manual  
使用說明書

# Contents

1	Instructions for User	1
	Symbol Description	1
	Precautions for Use	3
	Precautions for Maintenance	4
2	Product Function	5
3	Parts Name	5
4	How to Use	7
	Preparations for Use	7
	Operation	8
	Charging method	9
5	Description of Indicator Lights	10
6	Maintenance	11

7	Fault Diagnosis	12
8	Main Technical Parameters	13
9	Service Guideline for Warranty	14
	Warranty and Service	14
	Warranty Card	15
10	Packing List	15

# 1 Instructions for User

---

Please read this manual carefully before using the product and keep this manual properly.

## Symbol Description

To avoid personal injury or property damage, be sure to observe the following.

- The following symbols respectively illustrate the items that you must observe.



Indicate prohibition



Indicate that you should do as instructed

---



Important Information

- This product should not be used under any of the following circumstances without the prior consent of the doctor.
- Pregnant women, people suffering from diabetic complications (such as neuropathy or retinal damage), epilepsy or migraine, disc herniation, spondylolisthesis, vertebral disconnection, or spondyloarthritis and those who wear a pacemaker, have recently undergone a surgery, like joint replacement surgery, or have an IUD, needle, or nickelclad inside the body for any health-related problems, are not allowed to use this product. These contraindications do not mean that you cannot use this product. We recommend that you consult your doctor before use.

- The ongoing research is about the impact of vibration training on specific medical diseases. This is likely to reduce the above contraindications. Practical experience shows that in many cases, incorporating vibration training into a treatment regimen is also a form of therapy. However, such method should be suggested or accompanied by doctor, expert or therapist.



The following groups are prohibited from using the product

- Minors are prohibited from using this product to prevent from being injured. Consult your doctor before using this device in case of muscle injury. Do not apply on wet or filthy skin surface. You can use the device with your clothes on. Gently press and move it on your skin and stay at each part for about 60 s. Do not use the product above your neck and in parts with less muscle coverage. Applying the product to your bones is also discouraged. Always use the product to soft tissues of the body under the premise of no pain or discomfort. When you get bruised, feel pain or discomfort, stop using the product. Do not put any articles in the vent hole of the product. Do not immerse the product in water or allow water to enter the ventilation hole of the product.
- Do not throw the product in fire or keep it close to fire source.
- Do not fall off the product deliberately. Do not use a charger above 9 V to charge the product.
- Do not dismantle the product in any method.
- Do not put your fingers, hair or other parts of your body near the shaft and back of the massage head as there is a risk of being caught.
- 
-

- Those who cannot express their will or cannot operate the device by themselves are prohibited to use the product.
- Children are not allowed to use or get close to the operating product.
- If you experience abnormal body reactions such as back pain, dizziness, vomiting, throbbing, etc. during use, please stop the product immediately.
- This product is timed for 10 min operation at a time. Please do not use it for more than 20 min each time. Leave the device rest for 30 min after each use to prolong its service life.
- Use is prohibited under the following circumstances:
  - When you are severely tired
  - Within an hour before and after meals
  - When you are drunk

## Precautions for Use

- ❗ Do not wear too much to use the product.
- ❗ Keep away from liquids or heat sources and keep vents free of dust.
- ❗ Do not use accessories other than the original charging base and DC charger. The product cannot be used during charging.
- ❗ After charging, please disconnect the power supply in time.
- ❗ If the product cannot work normally or you feel any abnormality, please stop using it immediately.

- ❗ Please apply this product according to the User Manual.
- ❗ Before each use, carefully check whether the product can be used normally according to the operation methods in the manual.
- ⊘ Do not apply load to the power cord or cause damage to the power cord. Do not stand on the product or use the product as a toy to avoid accidents.
- ⊘ Never disassemble, modify or repair the product by yourself. Do not use this product when your body is wet.
- ⊘

## Precautions for Maintenance

- ❗ During maintenance, be sure to disconnect the power supply.
- ⊘ Do not drop the product and charging base, or hit them with strong force. Do not spray water on the product.
- ⊘ Do not use the product in bathrooms or places with high humidity.
- ⊘ If the product has not been used for a long time, you have to check in advance whether the switch is normal prior to re-use.
- ❗ During maintenance, do not clean the product with volatile oil, diluent, alcohol, strong alkaline detergent, bleach and other cleaning agents. Simple shockproof facilities are provided for the product so that it can be transported by air, rail, road and ship. Avoid rain and snow, inversions and collisions during transport.
- ❗ Keep this product out of the reach of children;
- ❗ When storing, make sure the product cools down.
- ❗ Frequently check the product for signs of wear or damage. If there are such signs or the product has been misused, you must return the product to the supplier before reuse.


## 2 Function of Product

---

This product relaxes the soft tissue of the body through high-frequency impact, which can help relax tense muscles and release pain and fatigue after exercise. The product can be used with different massage heads to massage muscles all over the body. It is equipped with a portable storage bag for the purpose of convenient carrying.

## 3 Parts Name

---

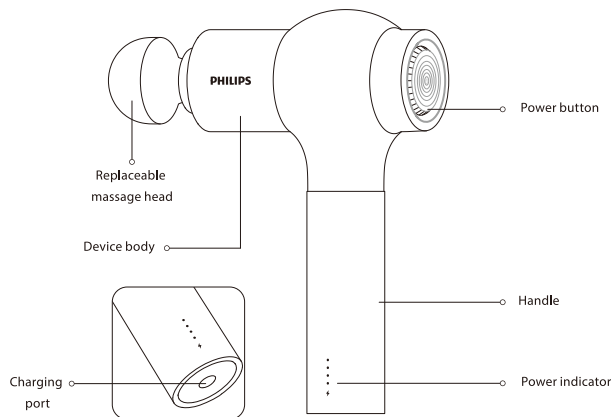

Rubber spherical head  
Suitable for daily massage and relaxation

---



Titanium flat head  
Suitable for muscular relaxation after high intensity exercise

---



Flat air cushion head  
Designed with air cushion for relaxation and activation of all parts of the body

---



Curved air cushion head  
Up to 4 contact points to meet the needs of large-area massage

---



Pointed tip  
Used to impact deep tissue and quickly relieve muscle soreness

---



U-shaped head  
Suitable for centralized massage of specific sore points

---



Wedge-shaped head

Suitable for shaping massage of large muscle groups



Sponge head


Designed with super soft elastic surface for warm-up and relaxation massage

## 4 How to Use

### Preparations for Use


1. Check that the product and accessories are complete.
2. Always remove the pendant and decorations before use to avoid affecting the massage part.
3. Please install the massage head in place.

Installation method: select a massage head according to the massage demand, and insert it into the front round hole of the fascial gun until the head is aligned with the mark line. The proper installation is shown in the figure.

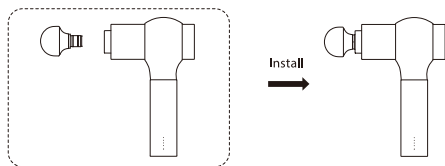


### Operation

1. Press and hold the power button to turn on the device in level 1 as default. Each time you press the button, the gear will increase by 1 level until reaching level 5. If you press the button in level 5, the device will enter the standby mode (level 0). To start again, press the button directly to enter level 1. The product operates circularly in this way.
2. When you hold the button in any level, the device will shut down.
3. You can shut down the device in standby mode directly by holding the power button. In case of no operation within 15 s, the device will shut down automatically.
4. The device will turn off automatically after continuous use for 10 min. If you need to use again, please restart it.
5. The massage head will not output power if it is installed. This is to protect the device against abnormal operation and make it switch from operation mode to standby mode. Shot press the button to restart the device.
6. After powering on and pressing the power button, the light ring will display the current level in sections. If there is no operation within 3s, the whole light ring will be illuminated to intelligently display the current massage pressure.

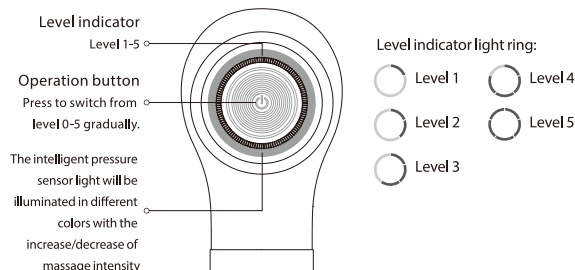

## Charging method

1. Before initial use, fully charge your device for 4 hours.
2. When charging, connect the DC terminal of the supplied 26 V adapter to the battery charging port, and plug the AC side cable into the 100~240 V power socket.
3. The LED indicator on the device flashes regularly to display the battery power, indicating that it is charging.
4. The battery can be charged at any time and under any power level. Do not start the device when charging.
5. The battery needs to be charged when it is exhausted to less than 10% power and the light ring is flashing in red.
6. The fully charged device can generally operate for about 2-3 hours, depending on the working level and intensity.

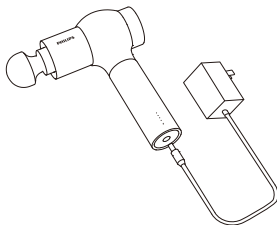

## 5 Description of Indicator Lights

Level indicator	Status	Description
Light ring illuminating in 1 section	Remain on	Level 1
Light ring illuminating in 2 section	Remain on	Level 2
Light ring illuminating in 3 section	Remain on	Level 3
Light ring illuminating in 4 section	Remain on	Level 4
Light ring illuminating in 5 section	Remain on	Level 5

Pressure feedback light ring	Status	Description
Blue light	Remain on	0-2 kg
Green light	Remain on	2-4 kg
Yellow light	Remain on	4-6 kg
Orange light	Remain on	>6 kg

Power indicator	Status	Description
Indicator ON in 1 bar	Flashing	Current power 0%
Indicator ON in 1 bar	Remain on	Current power 20%-50%
Indicator ON in 2 bar	Remain on	Current power 50%-75%
Indicator ON in 3 bar	Remain on	Current power 75%-99%
Indicator ON in 4 bar	Remain on	Current power 100%

Charging power indicator	Status	Description
Red breathing light	Flashing	Current power 20%
Orange breathing light	Remain on	Current power 20%-50%
Yellow breathing light	Remain on	Current power 50%-75%
Green breathing light	Remain on	Current power 75%-99%
Green LED indicator	Remain on	Current power 100%

## 6 Maintenance

- 1.Clean the surface of the device with a slightly wet towel and dry it with a soft cloth.
- 2.When storing or carrying, put the device in the supplied portable bag.
- 3.The device should be stored in a dry, well ventilated place without corrosive gas.
- 4.In case of long-term out of service, the device should be packaged and stored after cleaning. It is recommended to charge the device every 1 month.
- 5.The product can be transported by truck, train, ship and aircraft. During transportation, the product should be fixed to prevent violent vibration, collision, rolling and falling, and it should be placed upward, handled lightly, and protected against rain.
- 6.Do not discard the product at random. Please scrap it according to the disposal method for each part to protect the environment.



Be sure to unplug the power cord without using wet hands during maintenance.

## 7 Fault Diagnosis

This chapter lists the most common problems to the product. If the problems you encounter are not included in the following tables, please call our service hotline or contact the authorized service center at the region where you are located.

Fault Description	Troubleshooting
Massage head slipping out or falling	Check whether the massage head is installed in place
Start-up failure	Check whether the power is sufficient (if the device is not used for a long time, charge it for more than 8 hours first)
Charging failure	1. Check whether the voltage and current of the charging plug meet the product requirements. 2. Check whether the charging connector and power supply are plugged in place.
Sudden stop after continuous operation for 10 minutes	This phenomenon is a normal phenomenon, which is set for long-time operation protection. It indicates that the device switches from operation mode to standby mode. Press the button, you can restart the device.
Massage head stopping to output power after being installed	This is a normal phenomenon, which is set to protect the device against abnormal operation and make it switch from operation mode to standby mode. Press the button, you can restart the device.
Reasonable use of the product can effectively prolong its service life. It is recommended: 1. Do not throw or drop the device during use. 2. The maximum continuous use time is recommended not to exceed 30 minutes. Keep away from the humid environment when using or storing the product. 3. In case of long-term out of service, please charge the device every 1 month.	



If the product has been left unused for a long time, be sure to confirm that its function is normal before using it again.		
Regular check	Check for the following faults	In case of the above faults, stop using the product immediately and cut off the power supply to avoid accidents. Please send the defective product to Philips service center.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Whether the power cord or plug is hot</li> <li>Whether the power cord is deeply scratched or deformed, and has a burnt smell</li> <li>Whether there is abnormal sound or vibration during work</li> <li>Whether the product cannot operate properly after the power button is held for 2 s</li> <li>Whether there are other abnormalities or faults</li> </ul>	

Note:

If the fault cannot be eliminated or the product still cannot be operated satisfactorily, contact the after-sales service personnel. Do not disassemble or attempt to repair by yourself.

## 8 Main Technical Parameters

Product Name	Philips Sports Massage Gun
Product Model	PPM7502
Input voltage/frequency	100-240V-50/60HZ
Interface Type	DC, 26V $\approx$ 0.9A
Power Supply Method	Rechargeable lithium battery
Battery Capacity	1600mAh x6
Charging Time	4 h
Level Adjustment	5-level adjustment
Net weight	980g
Product Dimensions	78x142x48 mm
Production date	See product certificate

## 9 Service Guideline for Warranty

### Warranty and Service

The product is a household appliance with exquisite design and high-quality component. Within two years from the date of purchase, you will receive free warranty service for any damage caused by the manufacturing process or components under normal operation confirmed by our maintenance service.

The warranty service does not include consumable components, transportation fee and door-to-door service. Please show the proof of purchase to the service personnel during maintenance.

You cannot receive free warranty service under the following conditions:

1. Damage by improper operation, such as improper components connection, improper installation, deprived of manual use, mis-operation.
2. Negligence and damage because of transportation or other accident.
3. Maintenance and modification without approval.
4. Other damage caused by force majeure (such as natural disaster, abnormal voltage, etc.).
5. Damage caused by general use outside home (e.g. industrial and commercial use).
6. Aging, wearing and tearing caused by normal operation of the product without affecting normal operation of the product.

This statement serves as a publicity for free maintenance within the specified time limit and conditions, and does not limit the legal rights of consumers.

Please contact our local maintenance service center for any information or difficulties or you can consult through the hotline.

HongKong

Hotline: 852-3188-4987

Service Email: Philips.Massage.hk@centuryfield.com

Taiwan

Hotline: 0800-661-600

Service Email: Philips.Massage.hk@centuryfield.com

## Warranty Card

Product Model		Customer Name	
Seller		Contact Number	
Date of Purchase		Serial Number	
Service Center		Customer Address	
Maintenance Content		Date	service personnel

## 10 Packing List

Main Unit	1×	Portable bag	1×
Massage head	8×	User Manual	1×
DC charger	1×	Certificate	1×

## 目录

1	用戶必讀	16	8	主要技術參數	25
	符號描述	16			
	使用注意事項	18	9	產品保修服務指南	26
	保養注意事項	18		保修及服務	26
				保修條例	27
2	產品功能	19			
			10	裝箱清單	27
3	部件名稱	19			
4	使用方法	20			
	使用前準備事項	20			
	使用操作	21			
	充電方式	22			
5	指示燈說明	22			
6	保養維護	23			
7	故障診斷	23			

# 1 用戶必讀

產品使用前請仔細閱讀並妥善保管本說明書。

## 符號描述

為避免造成人身危害或財產損失，請務必遵守以下內容。

· 用以下圖示來分別說明希望遵守的內容。



表示禁止



表示需要根據指示去做

## ! 重要資訊

- 未獲得醫生事先同意，不能在以下任何一種情況下使用本產品。
- 懷孕、糖尿病併發症（比如神經病變或視網膜損傷）、佩帶起搏器、近期做過手術、癱瘓或偏頭痛、椎間盤突出、脊椎前移、椎骨脫離、或脊椎關節僵硬、近期做過關節置換手術或IUD、金屬針或鋼板任何與您身體健康相關的問題。這些禁忌症並不意味著您無法使用本產品，我們建議您在使用前諮詢醫生。
- 目前正在進行的研究是關於振動訓練對特定醫學疾病的影響。這很有可能減少上述各項禁忌症。實踐經驗表明，在許多情況下，將振動訓練結合到治療方案也是一種治療方式。這必須在醫生、專家或治療師的建議下，或其陪同下進行。

## ! 以下人士/情況禁止使用

- 禁止未成年人使用，如果已受傷，禁止使用本產品。在肌肉損傷時使用本設備前，請諮詢您的醫生。

- 禁止在非乾燥、非潔淨皮膚表面上使用，可以隔著衣服使用，輕輕在皮膚上按壓、移動，每個部位大約60秒。
- 禁止在頸部以上和肌肉覆蓋較少的部位使用，禁止在骨頭上使用，在不產生疼痛或不適的情況下，只在身體的軟組織上使用本產品。
- 禁止在產生淤青，出現疼痛或不適的跡象時使用。
- 禁止將任何物體放置在產品的通風孔中。
- 禁止將產品浸入水中，也不要讓水進入產品的通風孔。
- 禁止將產品投入火中或靠近火源。
- 禁止故意摔落本產品。
- 禁止使用電壓超過9V的充電器對產品充電。
- 禁止以任何方式拆卸本產品。
- 禁止手指、頭髮或身體其他部位靠近按摩頭的軸和背面，因為有可能被夾住。
- 禁止無法表達自己意志的人，或者自己無法操作機器的人使用。
- 禁止兒童使用，在使用的時候也不要讓兒童靠近。
- 使用過程中，感覺腰疼，頭暈，嘔吐，悸動等身體異常反應的時候，請立即停止。
- 本產品單次定時10分鐘，每次使用請不要超過20分鐘，使用後請讓機器休息30分鐘以確保機器壽命的延長。
- 下列的情況禁止使用：
  - 劇烈疲勞的時候
  - 飯前、飯後一小時之內
  - 醉酒之後

## 使用注意事項

- ❗ 使用時，不要穿太厚的衣服。
- ❗ 遠離液體或熱源，保持通風口沒有灰塵。
- ❗ 不要使用除原裝充電底座、DC充電器以外的產品。
- ❗ 充電中產品無法使用。
- ❗ 在充電完成後，請及時斷開電源。
- ❗ 產品無法正常運行，或者感覺異常的時候請立即停止使用。
- ❗ 請按照使用說明資料使用本產品。
- ❗ 每次使用前按照本書操作方法仔細檢查產品是否能正常使用。
- ⊘ 不要對電源線進行負荷壓載，或者導致電源線受損。
- ⊘ 不要站在本體上面，也不要將產品作為玩具，避免發生意外。不要分解、改造或者自己修理產品。
- ⊘ 身體在有水的狀態下不要使用該產品。


## 保養的注意事項

- ❗ 保養的時候，務必先斷開電源。
- ⊘ 不要摔落產品本體及充電底座，也不要強烈的敲打。
- ⊘ 不要在產品上淋水。
- ⊘ 不要在浴室或者濕氣很大的場所使用。
- ❗ 長期沒有使用，再次使用的時候，務必事先確認開關等是否正常。
- ⊘ 保養的時候，請不要使用揮發油，稀釋劑，酒精，強鹼性洗滌劑，漂白劑等清潔。
- ❗ 產品設有簡易的防震設施，適合航空鐵路、公路及輪船運輸。運輸過程中應避免雨雪淋濺、倒置和碰撞。
- ❗ 請將本產品放在兒童接觸不到的地方。
- ❗ 存放器具時，先讓器具冷卻下來。
- ❗ 經常檢查器具上是否有磨損或損壞的跡象，如果有這種跡象，或如果此器具已經被誤用，則應在再次使用前聯繫供應商進行檢修。

## 2 產品功能

本產品通過高頻率衝擊放鬆身體的軟組織，可以幫助放鬆緊張肌肉，釋放運動後酸痛和疲憊。搭配不同的按摩頭使用，可用於身體各處肌肉按摩，配置便攜收納包，便於外出攜帶。

## 3 部件名稱

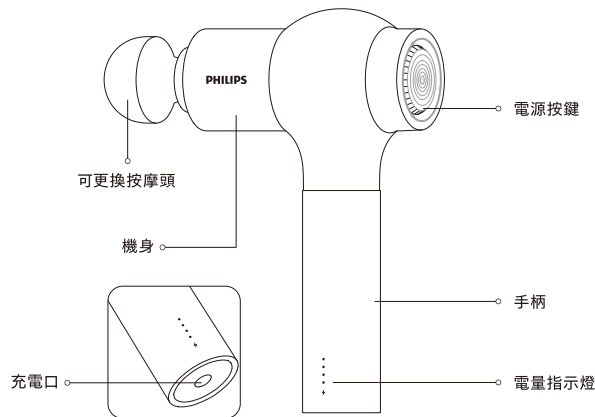



橡膠球形頭  
適合日常按摩放鬆



鈦金扁平頭  
適用於高強度運動  
後的肌肉放鬆



扁平氣墊頭  
氣墊緩衝設計，適  
合全身各個部位  
的放鬆啟動



弧形氣墊頭  
多達4個接觸點，  
滿足大面積按摩  
需求



尖頭  
用於衝擊深層組  
織，快速緩解肌  
肉酸痛



U形頭  
適用於集中按摩特  
定的酸痛點



楔形頭  
適用於大肌肉群  
的塑形按摩




海綿頭  
超柔軟彈性表  
面，用於熱身及  
放鬆按摩

## 4 使用方法

### 使用前的準備事項


1. 請檢查機器及配件完整。
2. 使用時請除去個人飾物，以避免影響按摩部位。
3. 請將按摩頭安裝到位。

安裝方法：根據按摩需求，選擇按摩頭插入按摩槍前方圓孔內，直至對位線對齊，如圖所示，表示安裝到位

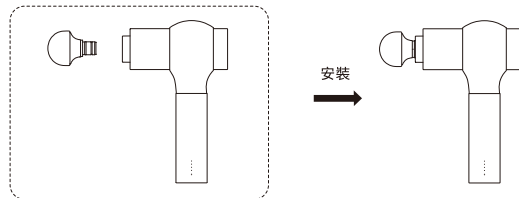


### 使用操作

1. 開機，長按電源鍵開機，開機預設1段，每按一次按鍵則擋位遞增1段，直到5段。5段時按按鍵進入待機模式（0擋），如需再次啟動，可直接按按鍵進入1段，如此循環使用。
2. 任意段位下，長按開機。
3. 待機狀態下，長按可直接開機，15秒後無操作將自動關機。
4. 連續使用10分鐘後將自動關閉，如需再次使用，請重新啟動機器。
5. 按摩頭堵轉後停止出力，為運行異常保護功能設定，由運行轉為待機模式，短按按鍵可重新啟動。
6. 開機和按鍵後燈圈將分段顯示當前段位，無操作3s後將整圈亮起智能顯示當前按摩壓力。

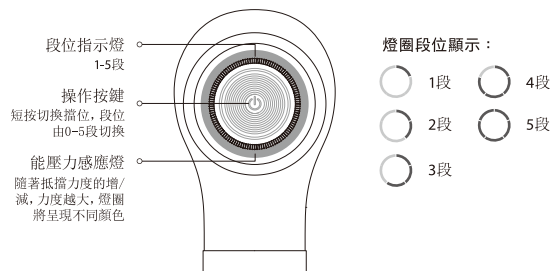

## 充電方式

1. 初次使用之前，充電4個小時，將電充滿。
2. 充電時，將提供的26V充電器的直流端連接到電池充電口，並將交流側電線插到100~240V的電源插座上。
3. 設備上的LED燈有規律地閃爍，顯示電池電量，表示正在充電。
4. 電池可以在任何時間，在任何電量水準下進行充電，充電時不可以開機使用本產品。
5. 電池電量耗盡到小於10%，同時燈圈閃爍紅燈顯示需充電。
6. 產品充滿電平均運行時間約2-3小時，擋位和力度不同有一定差異。

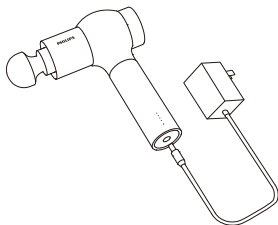

## 5 指示燈說明

擋位指示燈	狀態	描述
燈圈亮起1段	常亮	一段
燈圈亮起2段	常亮	二段
燈圈亮起3段	常亮	三段
燈圈亮起4段	常亮	四段
燈圈亮起5段	常亮	五段

壓力回饋燈圈	狀態	描述
藍色燈光	常亮	0-2kg
綠色燈光	常亮	2-4kg
黃色燈光	常亮	4-6kg
橙色燈光	常亮	>6kg

電量指示燈	狀態	描述
1 顆燈亮	閃爍	當前電量20%
1 顆燈亮	常亮	當前電量20%-50%
2 顆燈亮	常亮	當前電量50%-75%
3 顆燈亮	常亮	當前電量75%-99%
4 顆燈亮	常亮	當前電量100%

充電電量指示燈	狀態	描述
紅色漸變燈	閃爍	當前電量20%
橙色漸變燈	常亮	當前電量20%-50%
黃色漸變燈	常亮	當前電量50%-75%
綠色漸變燈	常亮	當前電量75%-99%
綠色燈	常亮	當前電量100%

## 6 保養維護

1. 用微濕的毛巾清潔設備表面，然後用軟布擦乾。
2. 在存放或出門旅行時，放在配套的收納袋中。
3. 應存放於乾燥、通風良好，無腐蝕性氣體的地方。
4. 長時間不使用應清潔後包裝儲存，建議每隔1個月充電一次。
5. 本產品適用於汽車、火車、輪船、飛機運輸方式。運輸中應固定好本產品，防止劇烈振動、碰撞、翻滾和跌落，並向上、輕放和防雨。
6. 為了保護環境，不要隨便廢棄，請根據各個地區的廢棄方法進行廢棄。

❗ 保養的時候，不要濕手去拔除電線。

## 7 故障診斷

本章列出了關於本產品最常見的問題。如果您無法在其中找到您所遇問題的答案，請聯繫服務熱線或您所在地區的授權服務中心。

故障描述	故障排除
按摩頭滑出或掉落	檢查按摩頭是否安裝到位
產品無法開機	檢查電量是否充足 (若長時間未使用先充電8小時以上)
產品無法充電	1. 檢查充電頭電壓和電流是否與產品要求匹配 2. 檢查充電連接口和電源是否插到位
連續運行10分鐘後突然停止	此現象為長時間運行保護功能設定，由運行轉為待機模式，短按按鍵可重新啟動，屬於正常現象
按摩頭堵轉後停止出力	此現象為運行異常保護功能設定，由運行轉為待機模式，短按按鍵可重新啟動，屬於正常現象
合理使用產品可有效延長使用壽命，建議： 1. 使用過程中請勿扔摔。 2. 最長連續使用時間建議不要超過 30 分鐘，使用或存放時遠離潮濕環境。 3. 長時間不使用請每隔 1 個月充一次電。	

長時間未使用後，務必先確認功能正常，才能再次使用。		
定期檢查	有无以下故障	若出現上述故障，為了防止引發事故，請立刻停止使用，並切斷電源。並送往本公司維修點。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 電源線或者插頭發熱</li> <li>• 電源線有深深的傷痕或者變形、有焦味</li> <li>• 工作中有異常的聲音或者震動</li> <li>• 長按電源按鍵2秒後，不正常運作</li> <li>• 有其他異常或者故障</li> </ul>	

注意：

如果無法排除故障或產品仍無法理想操作，請與售後服務人員聯繫，切勿自行拆卸或嘗試維修。

## 8 主要技術參數

產品名稱	飛利浦運動按摩槍
產品型號	PPM7502
輸入電壓/頻率	100-240V~50/60Hz
介面類型	DC, 26V == 0.9A
供電方式	可充電鋰電池
電池容量	1600mAh × 6
充電時間	4小时
段位調節	5段調節
產品淨重	980g
產品尺寸	78×142×48mm
生產日期	見產品合格證

## 9 產品保修服務指南

### 保修及服務

此產品是一件設計精良，用高品質元件製造之家用電器，在正常使用及保養下應能發揮其優越性能。在購買日期後起計兩年內，凡經本公司特約維修站人員確認為正常使用情況下，因製作工藝或原配件造成之損壞，您都將獲得免費保修服務。此免費服務不包括需時常更換的消耗品，運輸費及維修人員上門服務費，維修時請提供有效購買憑證。

以下情況將不能獲得免費服務

1. 使用不當引起的人為損壞，例如接入不適當配件、不適當之安裝、不依說明書使用、錯誤使用或疏忽而造成損壞等。
2. 因運輸及其他意外而造成之損壞。
3. 非經本公司認可之維修和改裝。
4. 其他因不可抗力（如自然在乎，電壓異常等）造成的損壞。
5. 一般家庭以外使用（如工業、商業用等）而造成的損壞。
6. 正常使用引起的產品老化，磨損等，但不影響產品使用。

該說明作為在規定期限及條件之內進行免費維修的宣貫，並不限製消費者的法定權力。

若您需諮詢相關資訊，或遇困難事項時，請聯絡本公司當地維修服務中心，或向服務熱線諮詢。

香港：

服務熱線：852-3188-4987

服務郵箱：Philips.Massage.hk@centuryfield.com

臺灣：

服務熱線：0800-661-600

服務郵箱：Philips.massager@xander.com.tw

### 保修卡

產品型號		用戶姓名	
銷售單位		聯繫電話	
購買日期		出廠編號	
技術服務站		用戶地址	
維修內容		時間	保修人員

## 10 裝箱清單

主機	1×	收納袋	1×
按摩頭	1×	說明書	1×
DC充電器	1×	合格證	1×