

PHILIPS

按摩槍


運動按摩槍

PPM7502




Quick Start Guide 快速入門指南


1. It is recommended to charge the device for 6 hours before first use. Do not start the device while charging.

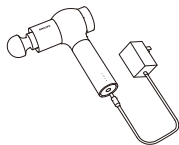


2. When the fourth power indicator remains on, it indicates that the device is fully charged. When the first indicator flashes (indicating the remaining power is less than 10%), please charge in time.

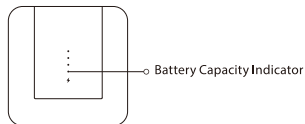


3. To install the massage head, insert it into the front round hole of the massage gun until the head is aligned with the mark line.

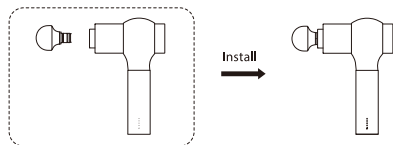


4. Hold the button to turn on the device, the light ring will light up in a section and enter level 1. Each time you press the button, the gear will increase by 1 level. If you continue pressing the button at level 5, the device will turn off.

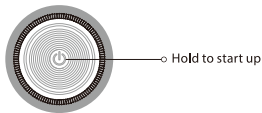


5. Intelligent intensity sensor indicator: 3 seconds after key operation, the light ring will enter into intensity indication mode and the color changes with the intensity; the light changes with the intensity. The blue indicator indicates a pressure of 0-2 kg, the green indicator indicates a pressure of 2-4 kg, the yellow indicator indicates a pressure of 4-6 kg and the orange indicator indicates a pressure of >6 kg.

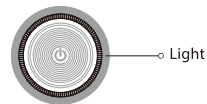

6. The device will shut down automatically after continuous use for 10 minutes. If you need to use again, please restart it.

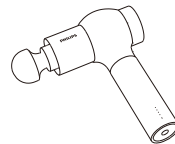

7. The massage head will not output power if it is stalled. This is to protect the device against abnormal operation and switch from operation mode to standby mode. Short press the button to restart the device.

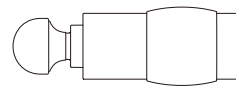

! Please choose the massage intensity reasonably according to your own physical condition, and each single use should not exceed 10 minutes.



請在以下網站連接中了解詳情

www.philips.com

本手冊內容與實物可能存在差異，請以實物為準，如產品有任何更新恕不另行通知。

©2022 AquaShield
All rights reserved

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.


This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Hong Kong AquaShield Health Technology Company Limited and Hong Kong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

水護盾是飛利浦淨飲水解決方案、熱水解決方案、衛浴解決方案、水杯及個人按摩器唯一品牌官方授權運營主體。


Rev A JUL 22




1.首次使用前，建議充電6小時。充電時，請勿開機使用本產品。

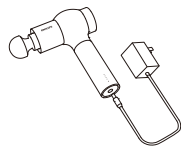


2.當第四個電量指示燈常亮時表示已充滿。當第一個指示燈閃爍時（電量小於10%），請及時充電。

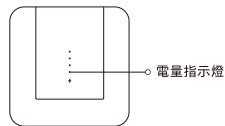


3.安裝按摩頭時，將按摩頭插入按摩槍前方圓孔內，直至對位線對齊表示安裝到位。

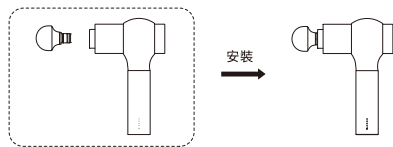


4.長按按鍵開機，燈圈亮起一段，進入1段，每按一次按鍵則檔位遞增1段。5段後再按按鍵，機器關閉。

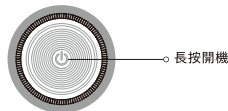


5.智能力矩感應燈：燈光隨力度不同而變化。藍色0-2kg，綠色2-4kg，黃色4-6kg，橙色>6kg。

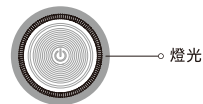

6.連續使用10分鐘後將自動關機，如再使用請重新開啟。

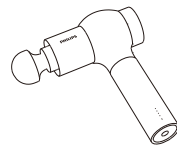

7.按摩頭堵轉後停止出力，為運行異常保護功能設定，由運行轉為待機模式，短按按鍵可重新啟動。

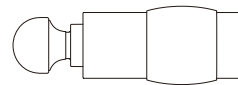

❗ 請根據自身情況合理選擇按摩力度，單次使用請不要超過10分鐘。