



請在以下網站連接中了解詳情

[www.philips.com](http://www.philips.com)

本手冊內容與實物可能存在差異，請以實物為準，如產品有任何更新恕不另行通知。

©2023 AquaShield  
All rights reserved

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.  
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of HongKong AquaShield Health Technology Company Limited and HongKong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

水護盾是飛利浦淨飲水解決方案、熱水解決方案、衛浴解決方案、水杯及個人按摩器唯一品牌官方授權運營主體。

Rev A APR 23



**PHILIPS**

腰背按摩器

腰部按摩器

PPM4721



**User Manual**  
**使用說明書**

# Contents

---

## 1 Readme

Symbol Description

People Suitable to Use

Precautions for Use

Precautions for Maintenance

---

## 2 Product Features

---

## 3 Components

---

## 4 How to Use

Operation

Charging

Indicator Description

---

## 5 Maintenance

Cleaning

Storage

Disposal

---

---

## 6 Troubleshooting

---

## 7 Technical Parameters

---

## 8 Service Guide for Product Warranty

Warranty and Service

Warranty Card

---

## 9 Packing List

---

# 1 Readme

---

Please read this manual carefully and keep it properly before using the product. The manual is available at [www.philips.com](http://www.philips.com)

## Symbol Description

To avoid personal injury or property damage, be sure to observe the contents below.

- The following symbols are used to illustrate what you should observe.

---

 Indicates prohibition

 Indicates the actions that need to be subject to instructions

---

## People Suitable to Use

 The product should be used with caution by the following groups

- People suffering from malignant tumors.
- People suffering from heart disease.
- People who have disturbance of skin sensation.
- People who have a wound in the waist and are unhealed.
- People who are under medical treatment at medical institutions.

- People identified as having lost temperature sensation.
- People with a body temperature above 38°C (fever).
- People who have perceptual impairment caused by diabetes.
- People who are pregnant or shortly after giving birth.
- People who need quietness and people who are in poor health.
- People who have lumbar sequelae due to traffic accidents.
- People who have metal, silicon or plastic materials injected into their bodies as a result of bone fractures or plastic surgery.
- People who have medical electronic devices in their bodies that are susceptible to the electromagnetic failures like heart pacemakers.
- People suffering from osteoporosis, severe fractures, sprain, muscle ache, acute (head) pain.
- People having the acute inflammatory symptoms, feebleness, aversion to cold, blood pressure changes and other symptoms and being in an intense or weak state.
- Do not use the product and other medical electronic instruments at the same time, such as cardiac pacemaker, artificial heart and lung and other life-sustaining medical electronic instruments, as well as electrocardiograph and other medical electronic instruments, otherwise it is likely to cause danger;
- If the high-frequency surgical equipment and this product are used on the user at the same time, burns may be caused at the electrode position of the massager, or the massager is likely to be damaged;
- Pregnant women and women during menstruation, patients having sensitive skin and suffering from heart disease, abnormal blood pressure, malignant tumors, cerebrovascular disease, and acute diseases, or other people under medical treatment should consult a doctor before using this product.

## Precautions for Use

- ⚠ The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- ⚠ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- ⚠ Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- ⚠ If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- ⚠ This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- ⚠ Must be only supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- ⚠ Do not move the massager during use. If you want to change the position to be massaged, please turn it off first, otherwise there will be a strong stimulation;
- ⚠ It is recommended not to overuse the massage function.
- ⚠ It is recommended to select the first level of intensity at the beginning of the use of the product.
- ⚠ If you feel pain in the waist or around the waist or abdomen, stop using the product immediately.
- ⚠ If you feel uncomfortable during use, please stop using this product immediately and consult a doctor.
- ⚠ The default massage time of each use is 30 minutes. Adjust the number of use according to the status of your waist and abdomen.
- ⚠ Your waist may turn red for a short time when using the product. This doesn't mean there is a problem. If this symptom persists and cannot be relieved, please consult a surgeon.

- ⊘ Do not use the product in places with high temperature, flammables, electromagnetic radiation and humidity;
- ⊘ Do not use it while sleeping.
- ⊘ Do not cover with a quilt or blanket when using it.
- ⊘ Do not lie or sit on the product.
- ⊘ Do not bring huge impact and load to the product.
- ⊘ Do not use the product in a bathroom or a shower.
- ⊘ Do not exercise violently while wearing the product.

---

## Precautions for Maintenance

- ⚠ Please properly dispose of the packaging bag of the product and keep it away from the infants.
- ⚠ Be sure to unplug the adapter from the socket before cleaning.
- ⊘ This product cannot be washed with water. Do not wipe it with corrosive chemicals or contact it with sharp objects. Just wipe and clean with a wet cloth.
- ⊘ The product has built-in lithium batteries. Do not disassemble or modify the product by yourself, immerse the product (controller) in water or toss it into the fire, otherwise the product is likely to be damaged.
- ⊘ Do not damage, modify, bend or pull the power cord with force. Do not place heavy objects on the power cord or squeeze the power cord.



## 2 Product Features

---

This product can promote blood circulation in the waist and relieve the muscle soreness and other symptoms through vibration massage and warm compress. Its built-in 3D support bar can stabilize the waistline, support the lumbar spinal cord and prevent the waist from excessive bending. This product is equipped with cold gel ice pack, which has a calming and relieving effect on muscle sprain injury. There are multiple modes, levels and temperatures available for choice. It is suitable for different people to use for waist massage and relaxation.

## 3 Components

---

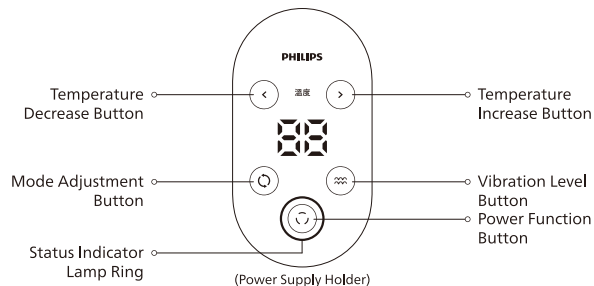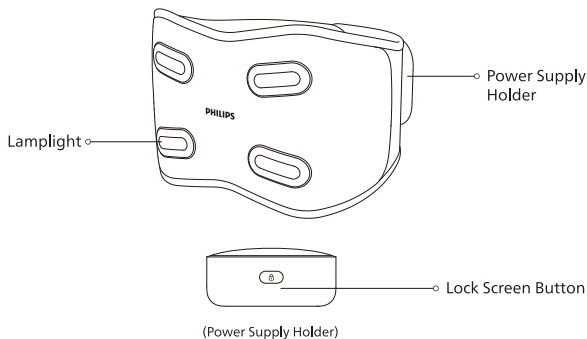


## 4 How to Use

---

### Preparations Before Use

1. Check whether the device and accessories are complete.
2. Remove the accessories on the waist or abdomen.
3. Wear the massager on the waist and adjust it to a comfortable state.

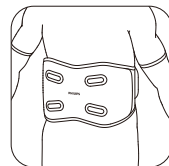

## Operation

### Power Function Button

1. Press and hold the power function button for 2 seconds to turn on/off. After power-on, the massager will enter the wake-up mode, vibration level 1 and warm compress at 40°C by default, and the buzzer will make a long sound of “drip ~”. The status indicator turns orange, and the middle of screen displays the current temperature.
2. Press the power function button to turn on/off the heating function, and the buzzer makes a sound “drip ~”. When the heating is turned on, the status indicator lamp ring turns orange; when the heating is off, the status indicator lamp ring turns blue.
3. The default timing of the product is 30 minutes. It is set to shut down automatically after 30 minutes of operation and enter the power-off state, and the buzzer will make a long sound of “drip ~”.

### Mode Adjustment Button

Press the button to switch the massage modes (wake-up mode - energizing mode - relaxing mode - soothing mode - massage off) circularly. During the adjustment, the corresponding mode display lamp will turn white, and the buzzer will make a sound of “drip ~” for each adjustment.

### Vibration Level Button

Press the button to adjust the vibration (level 1 - level 2 - level 3) circularly. During the adjustment, the corresponding mode display lamp will turn white, the display screen will display the vibration level (L1-L2-L3), and then automatically switch to temperature display 2 seconds later. The buzzer will make a sound of “drip ~” for each adjustment.

### Temperature Adjustment Button


Press the temperature “<”, “>” buttons to adjust the temperature (40°C, 45°C, 50°C, 55°C) circularly, and the display screen in the middle will display the current selected temperature. The buzzer will make a sound of “drip ~” for each adjustment.

### Lock Screen Button

1. When the device is working normally, press and hold the button for 2 seconds to lock / unlock the screen. The buzzer will make a sound of “drip ~” for each adjustment.
2. If the hot compress function is turned on when the device screen is locked, the lamp ring will flash orange slowly.
3. If the hot compress function is turned off when the device screen is locked, the lamp ring will flash blue slowly.

## Charging

1. Insert the charging plug into the charging port on the side of the battery holder;
2. Plug the charger plug into a 100-240V~, 50/60Hz power socket;
3. When charging, the indicator lamp ring flashes blue like breathing until the massager is fully charged, then the blue lamp remains on;
4. It takes about 4.5 hours to fully charge the product.

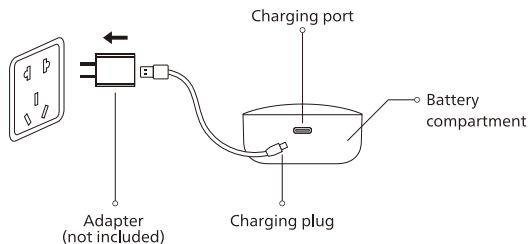

- ❗ When the battery remaining capacity is lower than 10%, the indicator lamp ring will flash blue quickly for 5 seconds. The buzzer will make a long sound of “drip ~”, and the product will be powered off.
- ⊘ Power off the product before charging. Do not use the product while charging it.

## Indicator Description

Power Indicator	State	Description
Orange	Remain on	Heating on
Blue	Remain on	Heating off
Orange	Flash slow	Heating on, screen locked
Blue	Flash slow	Heating off, screen locked
Blue	Flash quickly	Battery lower than 10%
Blue (power-off state)	Flash slow	Charging
Blue (power-off state)	Remain on	Fully charged

## 5 Maintenance

### Cleaning

1. Maintenance of controller: Wipe the massager with a dry soft cloth or a dry towel when it is dirty.
2. Maintenance of the fabric area: The fabric area should not be washed. Sterilize the fabric and remove the sweat stains with alcohol or wipe it with a clean wet towel for cleaning and maintenance.



- ❗ During maintenance, be sure to unplug the power cord, but do not unplug the cord with wet hands.

## Storage

- Keep out of reach of children.
- Do not put it in places with direct sunlight, high temperature and humidity.
- Keep it in a dry and ventilated place.

## Disposal

The lithium-ion battery used in this product is a valuable resource that can be recycled. Take out the lithium-ion battery when it is used up and discarded, and then hand it over to a professional institution that can recycle the rechargeable batteries for disposal.

Steps to remove the battery:

Pry open the transparent cover with an appropriate tool, unscrew the four screws with a cross screwdriver, and then take out the digital light bracket.

Pick up the electronic board assembly, and then take out the battery pack (users are prohibited from replacing the battery by themselves).

- ❗ It is prohibited to replace the battery by users themselves;
- ❗ Be sure to remove the battery from the device before disposal;
- ❗ The product must be powered off before the battery is removed;
- ❗ The battery must be disposed of in a safe manner.

## 6 Troubleshooting

This chapter lists the most common problems to the product. If the problems you encounter are not included in the following tables, please call our service hotline or contact the authorized service center in your region.

Fault Description	Troubleshooting
Startup Failure	Low battery, please charge it in time
	Check whether the Type-C charging cable is inserted in place. The indicator light will flash when it is correctly connected.
Normal display, but the user feels nothing at the time of massage	The default state is at intensity level 1 after power-on. Increase the levels appropriately for intensity adjustment
	Touch the four massage areas with your hands in the power-on state. If there is vibration, it is normal; if there is no vibration, please contact the after-sales service
Normal display, but the user feels nothing at the time of warm compress	Adjust the massager position to fit the body to the heating area
	After power-on, wait half a minute and then touch the heating areas on both sides with your hands. If there is a heating feeling, it is normal; if there is no heating feeling, please contact the after-sales service for disposal
	The default state is at warm compress level 1 after power-on. Try to turn the warm compress temperature up appropriately.



If the product has been left unused for a long time, be sure to confirm that its functions are normal before using it again

Check for the following faults	
Regular check	<ul style="list-style-type: none"><li>· Whether the power cord is hot</li><li>· Whether the power cord is deeply scratched or deformed, or has a burnt smell</li><li>· Whether there is abnormal sound or vibration during work</li><li>· Whether the product can work properly after switch on</li><li>· Whether there are other abnormalities or faults</li></ul>
	In the event of the above faults, stop using the device immediately and cut off the power supply to prevent accidents. Please send it to our maintenance center.

**Note:**

If the fault cannot be eliminated or the product still cannot operate satisfactorily, contact the after-sale service personnel, and do not disassemble or attempt to repair it by yourself.

## 7 Technical Parameters

Product Name	Philips Waist Massager
Product Model	PPM4721
Operating Voltage	3.7V $\equiv$
Operating Power	9.5W
Charging Voltage	5V $\equiv$
Charging Current	2A
Product Dimension	1100x220x35mm
Net Weight	About 1.1kg
Battery Capacity	3200mAh
Interface Type	Type-C

## 8 Service Guideline for Warranty

### Warranty and Service

The product is a household appliance with exquisite design and high-quality component. Within two years from the date of purchase, you will receive free warranty service for any damage caused by the manufacturing process or components under normal operation confirmed by our maintenance service.

The warranty service does not include consumable components, transportation fee and door-to-door service. Please show the proof of purchase to the service personnel during maintenance.

You cannot receive free warranty service under the following conditions:

1. Damage by improper operation, such as improper components connection, improper installation, deprived of manual use, mis-operation.
2. Negligence and damage because of transportation or other accident.
3. Maintenance and modification without approval.
4. Other damage caused by force majeure (such as natural disaster, abnormal voltage, etc.).
5. Damage caused by general use outside home (e.g. industrial and commercial use).
6. Aging, wearing and tearing caused by normal operation of the product without affecting normal operation of the product.

This statement serves as a publicity for free maintenance within the specified time limit and conditions, and does not limit the legal rights of consumers.

Please contact our local maintenance service center for any information or difficulties or you can consult through the hotline.

HongKong

Hotline: 852-3188-4987

Service Email: Philips.Massage.hk@centuryfield.com

Taiwan

Hotline: 0800-661-600

Service Email: Philips.massager@xander.com.tw

## Warranty Card

Product Model		User Name	
Sales Agency		Phone Number	
Date of Purchase		Serial Number	
Special Technical Service Center		User Address	
Items of Maintenance	Date	Service Personnel	

## 9 Packing List

Massager	1x	Cold Gel Ice Pack	1x
Type-C Charging Cable	1x	User Manual	1x
Quick Start Guide	1x	Product Certificate	1x

## 目錄

- 
- |  |          |
|--|----------|
| 1 用戶必讀<br>符號描述<br>適用人群<br>使用注意事項<br>保養注意事項 | 7 主要技術參數 |
|--|----------|
- 
- |        |                            |
|--------|----------------------------|
| 2 產品功能 | 8 產品保修服務指南<br>保修及服務<br>保修卡 |
|--------|----------------------------|
- 
- |        |        |
|--------|--------|
| 3 部件名稱 | 9 裝箱清單 |
|--------|--------|
- 
- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 4 使用方法<br>使用操作<br>充電方法<br>指示燈說明 |  |
|---------------------------------|--|
- 
- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 5 保養維護<br>清潔方式<br>保管存放<br>廢棄方式 |  |
|--------------------------------|--|
- 
- |        |  |
|--------|--|
| 6 故障診斷 |  |
|--------|--|
-


# 1 用戶必讀

產品使用前請仔細閱讀並妥善保管本說明書。本說明書可在[www.philips.com](http://www.philips.com)上獲取。

## 符號描述

為避免造成人身危害或財產損失，請務必遵守以下內容。

用以下圖示來分別說明希望遵守的內容

 表示禁止

 表示需要根據指示去做












## 適用人群

 以下人群應謹慎使用

- 有惡性腫瘤的人。
- 患有心臟病的人。
- 皮膚感覺障礙的人。
- 腰部有傷未痊癒的人。
- 其他在醫療機構治療的人。
- 被認定失去溫度感覺的人。
- 體溫38°C(發燒)時的人。
- 糖尿病引起有知覺障礙的人。
- 懷孕期間或者生完孩子後不久的人。
- 需要安靜的人和身體狀況不佳的人。
- 因交通事故等而存在腰部後遺症的人。

- 因骨折或整形手術而在體內注入金屬、矽或塑膠材質的人。
- 容易受到心臟起搏器等電磁故障影響的體內植入型醫療電子儀器的人。
- 患有骨質疏鬆症的人、劇烈骨折、扭傷、肌肉疼痛、急性(頭)疼痛的人。
- 具有急性炎症症狀、倦怠感、惡寒、血壓變動等症狀的強烈、衰弱的時候的人。
- 切勿與其它醫療電子儀器同時使用，如心臟起搏器、人工心肺等維持生命用醫療電子器械、心電圖儀等醫療電子器械，否則會導致危險。
- 如果使用者身上同時使用高頻手術設備和本按摩器時，在按摩器電極位置可能引起燒傷，也可能損壞按摩器。
- 孕婦及婦女月經期、皮膚敏感者、心臟病、血壓異常、惡性腫瘤、腦血管患者、急性病患者或其他正在接受醫生治療者，須先諮詢醫生後方可使用本產品。

## 使用注意事項

-  電器表面會發熱。對熱不敏感的人群使用時必須小心。
-  本電器不適用於身體、感官或智力能力下降或缺乏經驗和知識的人員(包括兒童)使用，除非由負責他們安全的人員對他們的使用進行監督或指導。
-  應監督兒童，確保他們不玩弄電器。
-  如果電源軟線損壞，必須用專用軟線或從其製造商或維修部買到的專用組件來更換。
-  本電器含有的電池，應由技術人員更換電池。
-  電器只能在器具上標示的安全特低電壓內供電。
-  在使用過程中不可將按摩器移動，在改變按摩部位時，應先關機後再使用，否則會有強烈刺激。
-  建議不要過度使用按摩功能。
-  建議在剛開始使用本產品階段採用1擋力度。
-  如果感覺腰部或腰腹周圍疼痛，請立即停止使用本產品。
-  如果在使用過程中感到身體不適，請立即停止使用本產品並向醫師諮詢。

- ❗ 每次使用預設時長為30分鐘，請檢查自己的腰部和腹部狀況，然後適當調整使用次數。
- ❗ 使用本產品時，您的腰部可能短時間變紅。這並不表示存在問題。如果這一症狀持續得不到緩解，請向外科醫生諮詢。
- ⊘ 禁止在高熱、易燃、輻射、潮濕的場所使用本產品。
- ⊘ 禁止睡覺時使用。
- ⊘ 禁止蓋上被子或毛毯使用。
- ⊘ 禁止在產品上躺著，坐著。
- ⊘ 禁止給產品帶來巨大的衝擊和負荷。
- ⊘ 請勿在浴室內或淋浴間內使用產品。
- ⊘ 佩戴機身時請勿進行劇烈運動。


### 保養注意事項


- ❗ 請妥善處理本產品的包裝袋，使其遠離嬰幼兒。
- ❗ 進行清潔時，請務必從家用電源插座上拔掉適配器的插頭。
- ⊘ 本產品不可水洗，不可用帶腐蝕性化學品擦拭或接觸尖銳物品。只需濕布擦拭清潔即可。
- ⊘ 本產品內含鋰電池，請勿自行拆卸、改裝、水浸產品(控制器)或投擲火中，否則可能導致產品損壞。
- ⊘ 請勿損壞或改裝、或用力彎曲、拉拔電源線。另外，請勿在電源線上面放置重物或擠壓電源線。

## 2 產品功能

本產品通過振動按摩和熱敷功能，可促進腰部血液迴圈，緩解肌肉酸痛等症狀，內置3D立體支撐條，可以穩固腰身支撐腰背，防止腰部過度彎曲。本產品配備冷凝膠冷敷袋，對於肌肉扭傷損傷有鎮定緩解作用，內設多種模式、擋位和溫度可供選擇，適合不同人群用於腰部按摩放鬆。

## 3 部件名稱

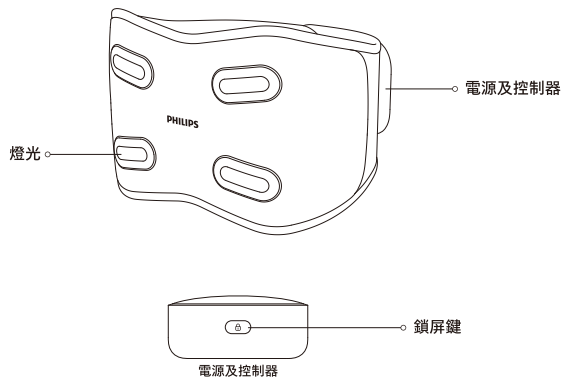


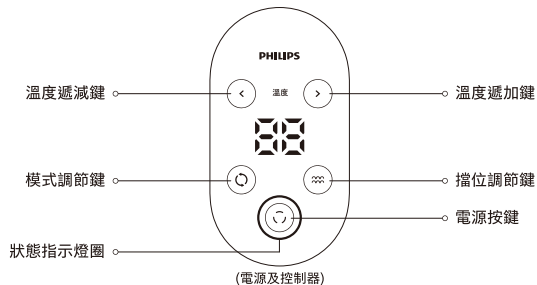

## 4 使用方法

### 使用前的準備事項

1. 請檢查機器及配件完整。
2. 去除腰部或腹部的裝飾物。
3. 將按摩器佩戴在腰部 並調整至舒適狀態。

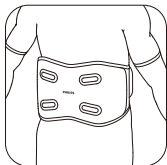

## 使用操作

### 電源功能按鍵

1. 長按2秒操作按鍵開機/關機，開機預設進入喚醒模式，振動1擋，熱敷40°C擋位，蜂鳴器長鳴“滴~”一聲。狀態指示燈呈現橙色燈光，中間顯示幕顯示當前溫度。
2. 短按開關鍵可開啟/關閉加熱功能，蜂鳴器發出“滴~”一聲。開啟加熱時狀態指示燈圈呈現橙色燈光，關閉加熱時狀態指示燈圈呈現藍色燈光。
3. 機器默認定時30分鐘，運行30分鐘後自動關機，進入關機狀態，蜂鳴器長鳴“滴~”一聲。

### 模式調節按鍵

短按模式鍵調節按摩模式（喚醒模式-活力模式-放鬆模式-舒緩模式-關閉按摩）循環切換，調節時對應的模式顯示燈亮起白光，每次調節蜂鳴器發出“滴~”一聲。

### 振動擋位調節按鍵

短按振動鍵調節振動(1擋-2擋-3擋)循環切換，調節時對應的模式顯示亮起白光，顯示幕顯示振動擋位(L1- L2- L3)，2秒後自動切換為溫度顯示；每次調整蜂鳴器發出“滴~”一聲。

### 溫度調整按鍵


短按溫度“<”、“>”鍵調節溫度(40°C、45°C、50°C、55°C)循環切換，中間顯示幕顯示當前選擇溫度；每次調整蜂鳴器發出“滴~”一聲。

### 鎖屏按鍵

1. 當機器正常工作時，長按2秒按鍵可以關閉/開啟螢幕。每次調整蜂鳴器發出“滴~”一聲；
2. 當機器出於熱敷狀態時進入鎖屏介面，指示燈圈顯示橙色呼吸燈；
3. 當機器出於關閉熱敷狀態時進入鎖屏介面，指示燈圈顯示藍色呼吸燈。

## 充電方法

1. 將充電插頭插入電池倉側面的充電孔內；
2. 將充電器插頭插入100~240V~，50/60Hz 的電源插座上；
3. 充電時指示燈圈呈現藍色呼吸燈狀態，直至充滿電常亮藍色燈；
4. 充滿電約需4.5小時。

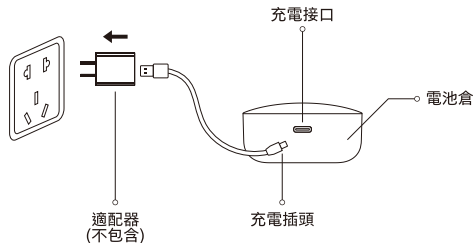

- ❗ 當電量少於10%時，指示燈圈顯示藍色頻閃5秒提示，蜂鳴器長鳴“滴~”一聲，並機器關機。
- ⊘ 請關機後再充電，請勿邊充電邊使用。

## 指示燈說明

電源指示燈	狀態	描述
橙色	常亮	加熱開啟
藍色	常亮	加熱關閉
橙色	閃爍(慢)	開啟加熱，鎖屏中
藍色	閃爍(慢)	關閉加熱，鎖屏中
藍色	快速閃爍	電量少於10%
藍色(關機狀態下)	閃爍(慢)	充電中
藍色(關機狀態下)	常亮	電量已充滿

## 5 保養維護

### 清潔方式

1. 控制器護理：當按摩器污穢時，可用乾軟布或乾毛巾進行擦拭。
2. 布料區域護理：布料區域不支持水洗。需要清潔保養時，請用酒精殺菌除汗漬或用潔淨濕毛巾擦拭



- ❗ 保養的時候，一定要把充電線拔掉，但是不要用濕手去拔除電線。

### 保管存放

- 請放在兒童觸摸不到的地方。
- 請勿放在陽光直射、高溫、潮濕的地方。
- 請放在乾燥、通風的地方保管。

## 廢棄方式

本產品所用的鋰離子電池是可回收再生的貴重資源，請在使用完畢廢棄之時，將鋰離子電池取出，交給可進行充電式電池回收再生處理的專業機構進行處理。

電池拆除步驟：

用適當的工具撬開透明面殼，然後用十字螺絲刀取出4顆螺絲取出數字燈光支架，拿起電子板組件，可取出裏面電池包(用戶不能自行更換電池)。

- ❗ 用戶不能自行更換電池；
- ❗ 廢棄器具前，必須將電池從器具中取出；
- ❗ 在取出電池時器具必須斷電；
- ❗ 電池應安全地處理。

## 6 故障診斷

本章列出了關於本產品最常見的問題。如果您無法在其中找到您所遇問題的答案，請 聯繫服務熱線或您所在地區的授權服務中心。

故障描述	故障排除
無法開機	電池電量不足，請及時充電
	檢查Type-C 充電線是否插到位，正確連接後，按摩器充電指示燈會閃爍。

故障描述	故障排除
顯示正常，按摩無感覺	按摩器開機默認狀態是 1 擋強度，若需要調節力度，請適當加大力度。
	開機狀態用手觸碰四個按摩區，若有震動，則正常，若無震動，請聯繫售後處理。
顯示正常，熱敷無感覺	調整腰帶位置使身體貼合發熱區
	開機後靜待半分鐘用手感受兩側發熱區，若有發熱感，則正常，若無熱感，請聯繫售後處理。
	按摩器開機後默認狀態 1 擋熱敷，請嘗試適當加大熱敷溫度。

長時間未使用後，務必先確認功能正常，才能再次使用。		
定期檢查	無有以下故障	若出現上述故障，為了防止引發事故，請立刻停止使用，並切斷電源。請送往本公司維修點。
	<ul style="list-style-type: none"><li>· 電源線發熱</li><li>· 電源線有深深的傷痕或者變形、有焦味</li><li>· 工作中有異常的聲音或者振動</li><li>· 開啟開關後，不正常工作</li><li>· 有其他異常或者故障</li></ul>	

注意：

如果無法排除故障或產品仍無法理想操作 與售後服務人員聯繫 切勿自行拆卸或嘗試維修。

## 7 主要技術參數

產品名稱	飛利浦腰部按摩器
產品型號	PPM4721
工作電壓	3.7V==
工作功率	9.5W
充電電壓	5V==
充電電流	2A
產品尺寸	1100×220×35mm
產品淨重	約 1.1kg
電池容量	3200mAh
接口類型	Type-C

## 8 產品保修服務指南

### 保修及服務

此產品是一件設計精良，用高品質元件製造之家用電器，在正常使用及保養下應能發揮其優越性能。在購買日期後起計兩年內，凡經本公司特約維修站人員確認為正常使用情況下，因製作工藝或原配件造成之損壞，您都將獲得免費保修服務。此免費服務不包括需時常更換的消耗品，運輸費及維修人員上門服務費，維修時請提供有效購買憑證。

以下情況將不能獲得免費服務

1. 使用不當引起的人為損壞，例如接入不適當配件、不適當之安裝、不依說明書使用、錯誤使用或疏忽而造成損壞等。
2. 因運輸及其他意外而造成之損壞。
3. 非經本公司認可之維修和改裝。
4. 其他因不可抗力（如自然災禍，電壓異常等）造成的損壞。
5. 一般家庭以外使用（如工業、商業用等）而造成的損壞。
6. 正常使用引起的產品老化，磨損等，但不影響產品使用。

該說明作為在規定期限及條件之內進行免費維修的宣傳，並不限製消費者的法定權力。

若您需諮詢相關資訊，或遇困難事項時，請聯絡本公司當地維修服務中心，或向服務熱線諮詢。

香港：

服務熱線：852-3188-4987

服務郵箱：Philips.Massage.hk@centuryfield.com

臺灣：

服務熱線：0800-661-600

服務郵箱：Philips.massager@xander.com.tw



## 保修卡

產品型號		用戶姓名	
銷售單位		聯繫電話	
購買日期		出廠編號	
維修內容		用戶地址	
特別技術服務站	時間	保修人員	

## 9 裝箱清單

---

按摩器	1 ×	冰敷袋	1 ×
Type-C 充電線	1 ×	說明書	1 ×
快速入門指南	1 ×	合格證	1 ×