



1. It is recommended to charge the device for 4 hours before first use. Do not turn it on when charging.




2. When the battery indicator is always green, it indicates that the battery is fully charged. When the indicator flashes red (the battery remaining capacity is lower than 5%), please charge it in time.

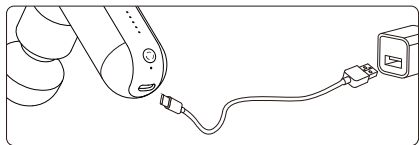


3. After continuous use of the device for 10 minutes, it will automatically switch off. Restart the device if you need to use it again.

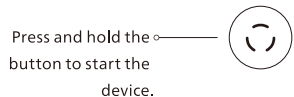


4. When installing the massage head, insert it into the front round hole of the massage gun, and then press it firmly to the end.

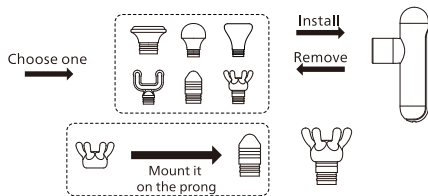

5. Press and hold the operation button to start the device, then the device will enter default level, and the level indicator will have 5 lights on and flash. The massage head does not move when it is in default level. If the hot compress massage head is inserted, the hot compress function is enabled. Press the button once to increase one level. Press the button at Level 5 to enter default level again, and repeat in this way.

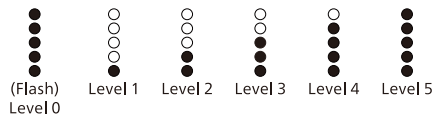

6. The massage head is suspended after being blocked. This is to protect the device against abnormal operation and make it switch from operation mode to standby mode. Press the button to restart the device.

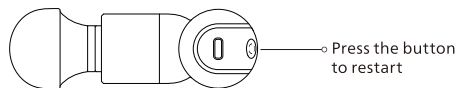

⚠ Please choose the massage intensity reasonably according to your own situation. Do not use the device for more than 10 minutes at a time.



請在以下網站鏈接中了解詳情

[www.philips.com](http://www.philips.com)

本手冊內容與實物可能存在差異，請以實物為準，如產品有任何更新恕不另行通知。

©2023 AquaShield

All rights reserved

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.


This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Hongkong AquaShield Health Technology Company Limited and Hongkong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

水護盾是飛利浦淨飲水解決方案、熱水解決方案、衛浴解決方案、水杯及個人按摩器唯一品牌官方授權運營主體。

Rev A SEP 23  
Made in China



1. 首次使用前，建議充電4小時。充電時，請勿開機使用。

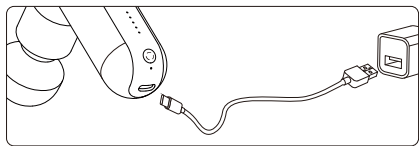

2. 當電量指示燈常亮綠色，表示電量已充滿。當指示燈呈紅色閃爍(電量低於5%)，請及時充電。




電量指示燈。

3. 連續使用10分鐘後，將自動關機。如再使用，請重新開機。




長按開機。

4. 安裝按摩頭時，將按摩頭插入筋膜槍前方圓孔內，用力按壓到底。

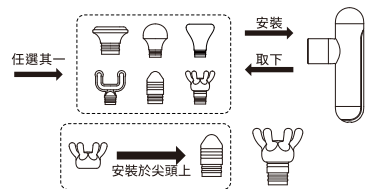

5. 長按開機，進入默認擋位，擋位指示燈亮起5顆，閃爍。在默認擋位時按摩頭不運動，若插入金屬發熱平頭則熱敷功能開啟。每按一次按鍵則擋位遞增1擋，5擋後再按按鍵再次進入默認擋位，依次迴圈。

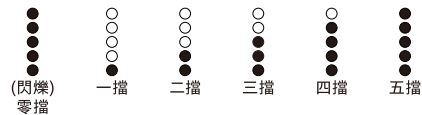

6. 按摩頭堵轉後停止出力，為運行異常保護功能設定，由運行轉為待機模式，短按按鍵可重新啟動。



⚠ 請根據自身情況合理選擇按摩力度，單次使用請不要超過10分鐘。

PHILIPS

按摩槍

迷你按摩槍

PPM7303



Quick Start Guide  
快速入門指南