



請在以下網站鏈接中了解詳情  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

本手冊內容與實物可能存在差異，請以實物為準，如產品有任何更新恕不另行通知。


© 2024 AquaShield  
All rights reserved  
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.  
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Hong Kong AquaShield Health Technology Company Limited and Hong Kong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.  
Made in China

水護盾是飛利浦飲水解決方案、熱水解決方案、衛浴解決方案、水杯、個人按摩器及運動器材唯一品牌官方授權營運主體。



7. 長按音樂鍵 2 秒，語音提示「搜索新藍牙設備」，用戶可在電子設備上連接對應藍牙設備。

如需斷開當前藍牙設備、搜索新設備，可長按音樂鍵 2 秒。開機後，若此前已連接藍牙，則默認進入藍牙音樂模式。如未連接藍牙，則自動播放預設音樂。

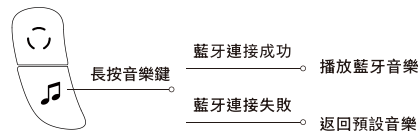

a. 電子設備成功連接本機藍牙後，語音提示「藍牙連接成功」。

b. 若連接失敗，語音提示「藍牙連接失敗」，隨即將自動返回預設音樂。

8. 短按音樂鍵 0.5 秒，可切換下一首音樂曲目。1 秒內雙擊音樂鍵，可關閉/開啟音樂，語音提示「關閉音樂」或「開啟音樂」。



9. 當產品電池電量少於 10% 時，指示燈紅色閃爍，同時產品語音提示「電池電量低，請及時充電」。充電過程中，指示燈緩慢閃爍。充電完成後指示燈為綠色。



- 紅色閃爍：0-9%
- 橙色閃爍：10-50%
- 綠色閃爍：51-99%
- 綠色常亮：100%

10. 默認按摩定時 15 分鐘，15 分鐘後自動關機，語音提示「按摩結束」，【睡眠模式】下，關機無語音提示。



- ! 1. 首次使用時建議從低檔位開始，避免刺激。
- 2. 使用產品時請閉目，使用完取下產品後可能會出現視力模糊的情況，閉目 1-3 分鐘即可緩解。
- 3. 使用完後，可使用濕布擦拭清潔產品外表。切勿直接用水沖洗。

PHILIPS

眼部按摩器

按摩眼罩

PPM2321




Quick Start Guide  
快速入門指南


1. Remove contact lenses, frame glasses and pendants around the eyes.




2. Adjust the elastic headband, ensuring that the product fits comfortably around the eyes.

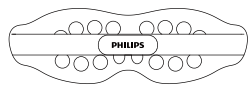


3. Press and hold the power function button for 1.5 seconds to turn on/off the device, with voice prompts of "massage on/ massage off".

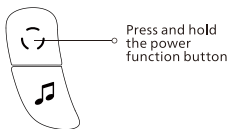


4. Press and hold the button for 1.5 seconds to turn on the product. It will be in [Energizing Mode] by default with vibration and hot compress on. After the voice announces "Energizing Mode", the preset music will automatically play.

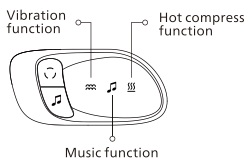

5. Press the button for 0.5 seconds to cycle through the massage modes in an order of [Energizing Mode], [Eye Care Mode], [Sleep-aid Mode], [Relaxing Mode] and [Eye Warming Mode].

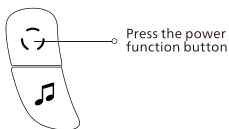


6. Double click the button within 1 second to turn off/on the hot compress function, with the voice prompt of "turn off heating" or "turn on heating".

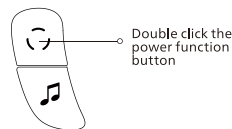

1


7. Press and hold the music button for 2 seconds, there will be a voice prompt of "search for new bluetooth device". Users can connect accordingly Bluetooth device on electronic devices.

To disconnect the current Bluetooth device and search for a new one, press and hold the music button for 2 seconds. After turning on the product, if Bluetooth is connected previously, it enters Bluetooth music mode by default. If Bluetooth is not connected, it returns to play the preset music.

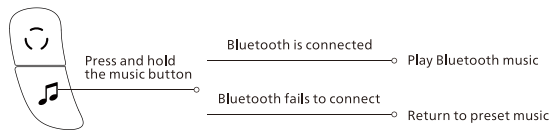


a. After the electronic device successfully connects to Bluetooth, there will be a voice prompt "the bluetooth device is connected successfully".  
b. If the connection fails, there will be a voice prompt "the bluetooth device fails to connect", and the product will automatically return to play the preset music.

8. Press the button for 0.5 seconds to switch to the next music track. Double click the music button within 1 second to turn off/on music, with the voice prompt of "turn off music" or "turn on music".

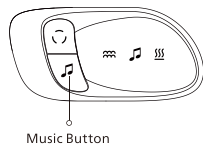

9. When battery power is less than 10%, the indicator of the product will flash quickly in red, with a voice prompt "the battery power is low, please charge it in time". When charging, the indicator will flash slowly. After charging is completed, the indicator turns green.

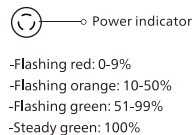

2

10. The preset message time is 15 minutes, and the product will automatically shut down after 15 minutes, with the voice prompt of "massage off". There is no voice prompt when shutting down in [Sleep-aid Mode].




1. It is recommended to use the low level during the first use to avoid irritation.  
2. Close your eyes when using the product. After use and removal of the product, blurred vision may occur. Closing your eyes for 1-3 minutes can relieve the symptoms.  
3. After use, wipe and clean the surface of product with a damp cloth. Do not rinse it directly with water.

3


1. 摘下隱形眼鏡、框架眼鏡及眼睛周圍的飾物。




2. 調整鬆緊頭帶，將產品舒適佩戴至眼部。

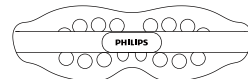


3. 長按電源功能鍵1.5秒開機/關機，語音提示「按摩開啟」/「按摩結束」。

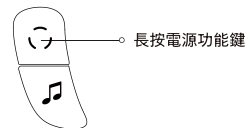


4. 長按開機後，默認進入【活力模式】，振動開啟，熱敷開啟。語音提示「活力模式」後，預設音樂自動播放。

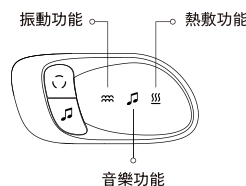

5. 短按電源功能鍵0.5秒可循環切換模式，按摩模式切換順序為：【活力模式】、【護眼模式】、【睡眠模式】、【舒緩模式】、【暖眼模式】。

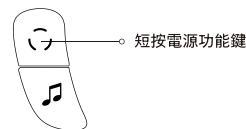

6. 1秒內雙擊電源功能鍵，關閉/開啟熱敷功能。語音提示「關閉加熱」或「開啟加熱」。

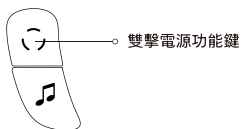

4