



請在以下網站鏈接中了解詳情

www.philips.com

本手冊內容與實物可能存在差異，請以實物為準，如產品有任何更新恕不另行通知。

©2023 AquaShield

All rights reserved

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Hongkong AquaShield Health Technology Company Limited and Hongkong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

水護盾是飛利浦淨飲水解決方案、熱水解決方案、衛浴解決方案、水杯及個人按摩器唯一品牌官方授權運營主體。

Rev A DEC 23



PHILIPS

腿部按摩器

膝蓋按摩器

PPM5521



User Manual
使用說明書

User Manual

1 Readme

Symbol Description

People Suitable to Use

Precautions for Use

Precautions for Maintenance

2 Product Features

3 Components

4 How to Use

Preparations Before Use

Operation

Charging

Indicator Description

5 Maintenance

Cleaning

Storage

Disposal

6 Troubleshooting

7 Technical Parameters

8 Environmental Protection Description

9 Service Guide for Product Warranty

Warranty and Service

Warranty Card

10 Packing List

1 Readme

Please carefully read the operation manual before use and keep it properly. The manual is available at www.philips.com

Symbol Description


To avoid personal injury or property damage, be sure to observe the contents below.

- The following symbols are used to illustrate what you should observe.

 Indicates prohibition


 Indicates the actions that need to be subject to instructions

People Suitable to Use

 The product should be used with caution by the following groups/ under the following circumstances

- People who have a pacemaker or other related medical electrical products implanted in their bodies
- People who have metal, silicone or plastic materials injected into their bodies as a result of bone fractures or plastic surgery
- People who have ever had skin trauma
- People whose body temperature is above 38 degrees Celsius

- People who are easy to suffer from numbness of body
- People who have difficulty with respirators
- People suffering from hypertension
- People having acute symptoms such as visceral diseases (gastritis, hepatitis, gastroenteritis)
- People who have disturbances of skin sensation
- People suffering from body paresthesia
- People suffering from lumbar disc herniation, spondylitis
- People suffering from deformed arthritis, arthritis, and gout
- People suffering from spinal fractures and swelling of bones

 The product is not allowed to be used by the following groups/ under the following circumstances

- People who are unable to express their will or who cannot operate the machine themselves to use the product
- This product is not suitable for people who have physical, sensory or mental capacity decline and lack experience and knowledge (including children)
- Please stop using immediately when you feel lower back pain, dizziness, vomiting, palpitation and other abnormal body reactions during use.
- This product is set for 15-minute timing at a time. Do not use it for no more than 30 minutes each time. After each use, stop the device for 15 minutes to ensure the extension of its service life.
- Do not use the product under the following circumstances:
 - When you are severely tired
 - Within one hour before and after meals
 - When you are drunk

Precautions for Use

- ❗ The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- ❗ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- ❗ Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- ❗ If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- ❗ This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- ❗ Must be only supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- ❗ Check whether the product is intact before use. If any damage is found, regardless of its extent, stop using the product immediately.
- ❗ Remove the dust on the charger on a regular basis. The accumulated dust on the plug is likely to cause poor insulation due to humidity, and eventually lead to fire.
- ❗ If you cannot use it or feel abnormal, stop using it immediately
- ❗ In case of power cut, please unplug the USB charging cable.
- ❗ When the product is not in use, the USB charging cable must be unplugged.
- ⊘ Do not disassemble, modify or repair the product by yourself, nor unzip the product by yourself.
- ⊘ Do not use the device when your body is wet, otherwise it is easy to get an electric shock.
- ⊘ Do not pull the product with force, nor stab it with a knife or a sharp object.

Precautions for Maintenance

- ❗ Be sure to unplug the charging cable during maintenance.
- ❗ Please properly dispose of the packaging bag of the product and keep it away from the infants.
- ⊘ The product has built-in lithium batteries. Do not disassemble or modify the product by yourself, immerse the product (controller) in water or toss it into the fire, otherwise the product is likely to be damaged.
- ⊘ Do not damage, modify, bend or pull the power cord with force. Do not place heavy objects on the power cord or squeeze the power cord.
- ⊘ Do not use volatile oil, thinner, alcohol, strong alkaline detergent, bleach or other cleaning agents for maintenance.
- ⊘ Keep the product out of reach of children and infants. Do not let them touch or operate the product, otherwise it is likely to lead to burns, electric shocks or personal injuries.
- ❗ Make the device cool down before storing.



Class III appliance




R3A020
RoHS

2 Product Features

Through the airbag and warm compress functions, and equipped with multiple optional massage modes and levels, this product is suitable for different people for knee relaxation.

3 Components

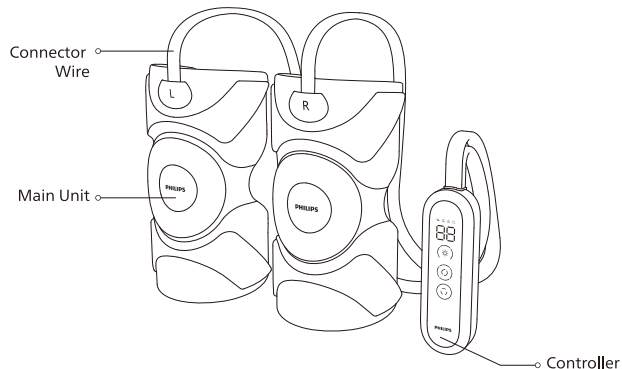


4 How to Use

Preparations Before Use

1. Check whether the device and its accessories are complete.
2. Wear the massager on the knees and adjust it to a comfortable state.

! Since everyone has different sensitivity to temperature, it is recommended to wear clothes when the temperature is above 45°C to avoid burns.

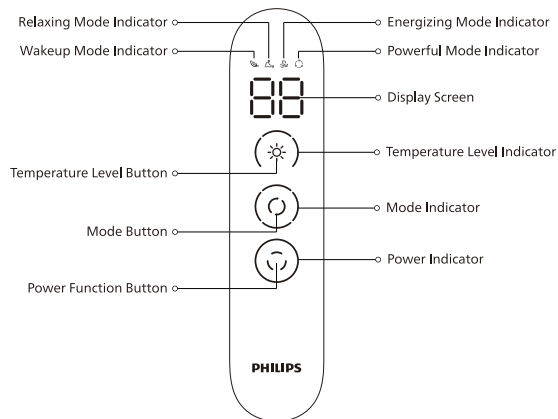

Operation

Power Function Button

1. Press and hold the power function button for 2 seconds to turn on/off the massager. After power-on, the massager will enter the wakeup mode by default, enabling the warm compress at 40°C with a voice prompt "Massage On".
2. Double click the power function button to lock/unlock the screen with the voice prompts "Lock screen" and "Turn on screen". After the screen is locked, the status indicator is in the state of the orange breathing lamp, the screen displays the current warm compress temperature (it displays 00 when the warm compress is off), and the mode lamp turns on to indicate the current mode. Press and hold the power function button to turn off the massager.
3. The default timing of the product is 15 minutes. It is set to shut down automatically after 15 minutes of operation and enter the standby state with the voice prompt: "Turn off massage".

Mode Button

Press the mode button to switch the massage mode (Wakeup Mode - Relaxing Mode - Energizing Mode - Powerful Mode - Turn off air pressure) circularly. During adjustment, the mode level indicator turns blue progressively, the corresponding mode indicator lights on, and there is a voice prompt of the corresponding mode for each adjustment.

Temperature Level Button

Press the temperature level button to switch the temperature (40°C, 45°C, 50°C, heating off) circularly, and the display screen in the middle will display the current selected temperature. When adjusting, the corresponding temperature indicator is illuminated progressively (orange), and there is a voice prompt (40°C, 45°C, 50°C) of the corresponding temperature for each adjustment.

Low Battery Reminder

When the battery remaining capacity is less than 10%, the indicator lamp ring flashes orange for 5 seconds to prompt, and then the massager shuts down. At the same time, there is a voice prompt "The battery power is low, please charge it in time".

Charging State

The indicator lamp ring flashes blue slowly when charging, and stays on blue when fully charged.

Charging

1. Insert the charging plug into the charging port on the side of the battery holder.
2. Plug the charger plug into a 100-240V~, 50/60Hz power socket.
3. The indicator lamp ring flashes blue slowly when charging, and stays on blue when fully charged.
4. It takes about 5 hours to fully charge the product.

Indicator Description

Indicator Type	State Indication	Voice Prompt
Power indicator	It turns orange by default after power-on. If the battery is low, it flashes quickly for 5 seconds to prompt and then shuts down. While charging, it flashes blue slowly, and remains blue after fully charged.	Massage On / Turn off massage / The battery power is low, please charge it in time (No voice prompt while charging)
Temperature level indicator	Display in orange for three levels, the first level light on by default after power-on. Press the button again, the second level light will turn on.	40°C/45°C/50°C/ Turn off heating
Wakeup mode indicator	Enter this mode by default after power-on, the first green icon light on. Press the mode button to switch to the next mode.	Corresponding voice prompts of Wakeup Mode/ Relaxing Mode/ Energizing Mode/ Powerful Mode/ Turn off air pressure
Relaxing mode indicator	Press the mode button to enter relaxing mode, and the second icon turns blue.	
Energizing mode indicator	Press the mode button to enter energizing mode, and the third icon turns orange	

Indicator Type	State Indication	Voice Prompt
Powerful mode indicator	Press the mode button to enter powerful mode, and the fourth icon turns red	Corresponding voice prompts of Wakeup Mode/ Relaxing Mode/ Energizing Mode/ Powerful Mode/ Turn off air pressure
Digital tube display	The set temperature is displayed in the heating state, and 00 is displayed after the heating is off	/

5 Maintenance

Cleaning

- 1.Remove the dust from the cloth cover of the product with a vacuum cleaner rather than by patting.
- 2.Wipe off the dirt on the surface with a clean rag.
- 3.For the heavy dirt, dampen a rag with the neutral detergent and then gently wipe it. Prevent the water from entering the product. Let it air dry.

! During maintenance, be sure to unplug the power cord, but do not unplug the cord with wet hands.

Storage

- Keep out of reach of children.
- Do not put it in places with direct sunlight, high temperature and humidity.
- Keep it in a dry and ventilated place.

Disposal

The lithium-ion battery used in this product is a valuable resource that can be recycled. Take out the lithium-ion battery when it is used up and discarded, and then hand it over to a professional institution that can recycle the rechargeable batteries for disposal.

1. Do not replace the battery by yourself during normal use.
2. The battery must be removed from the appliance before the it is discarded.
3. The appliance must be powered off before the battery is removed.
4. The battery must be disposed of in a safe manner.

Steps:

1. Pry open the cover with a tool and then unscrew with a screwdriver;
2. Take out the PCB screws on the lamp board support and main control board, and remove all the corresponding terminals;
3. Remove the screws on the cover with a screwdriver, and take out the cover;
4. Remove the battery from the lower case for safe disposal.

6 Maintenance

This chapter lists the most common problems to the product. If the problems you encounter are not included in the following tables, please call our service hotline or contact the authorized service center in your region.

Fault Description	Possible Cause	Solution
Startup Failure	Low battery	Connect the charger and use the product after charging
	The power function button is not on	Press and hold the power function button to power on
	Short circuit of the circuit board	Contact the service center
Stop working during use	The battery is low	Connect the charger and use the product after charging
	The 15-minute timed massage ends, and it shuts off.	Press and hold the power function button to power on
There is a sound coming from the product	The sound of air in u ation and bleeding of the internal air pump, which is a normal working state	No treatment required

Fault Description	Possible Cause	Solution
Product smokes	Short circuit of internal wires	Stop using it immediately and contact the service center

If the product has been left unused for a long time, be sure to confirm that its functions are normal before using it again

Are there any of the following faults?		
Regular check	<ul style="list-style-type: none"> Whether the power cord or the plug is hot Whether the power cord is deeply scratched or deformed, or has a burnt smell Whether there is abnormal sound or vibration during work Whether the product can work properly after switch on Whether there are other abnormalities or faults 	In the event of the above faults, stop using the device immediately and cut off the power supply to prevent accidents. Please send it to our maintenance center.

Note:

If the fault cannot be eliminated or the product still cannot operate satisfactorily, contact the after-sale service personnel, and do not disassemble or attempt to repair it by yourself.

7 Technical Parameters

Product Name	Philips Knee Massager
Product Model	PPM5521
Operating Voltage	3.7V
Operating Power	15W Max
Charging Voltage	5V
Charging Current	2A
Battery Capacity	4800mAh
Interface Type	Type-C
Charging Time	≤5hours
Net Weight	About 0.78kg
Product Dimension	1020x543x40mm
Date of manufacture	See the product certificate

8 Environmental Protection Description

Equipment name: Philips knee massager, type designation (type): PPM5521						
Unit	Restricted substances and its chemical symbols					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr+6)	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
Circuit board	—	○	○	○	○	○
Cover	○	○	○	○	○	○
Motor	○	○	○	○	○	○
Power cable	○	○	○	○	○	○

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

9 Service Guideline for Warranty

Warranty and Service

The product is a household appliance with exquisite design and high-quality component. Within two years from the date of purchase, you will receive free warranty service for any damage caused by the manufacturing process or components under normal operation confirmed by our maintenance service.

The warranty service does not include consumable components, transportation fee and door-to-door service. Please show the proof of purchase to the service personnel during maintenance.

You cannot receive free warranty service under the following conditions:

1. Damage by improper operation, such as improper components connection, improper installation, deprived of manual use, mis-operation.
2. Negligence and damage because of transportation or other accident.
3. Maintenance and modification without approval.
4. Other damage caused by force majeure (such as natural disaster, abnormal voltage, etc.).
5. Damage caused by general use outside home (e.g. industrial and commercial use).
6. Aging, wearing and tearing caused by normal operation of the product without affecting normal operation of the product.

This statement serves as a publicity for free maintenance within the specified time limit and conditions, and does not limit the legal rights of consumers.

Please contact our local maintenance service center for any information or difficulties or you can consult through the hotline.

Hong Kong Importer: Century Field International Ltd.

Address: Room 505, 5/F, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street,
Sheung Wan, Hong Kong

Hotline: 852-3188-4987

Service Email: philips.massage.hk@centuryfield.com

Taiwan Importer: Xander International Corp.

Address: No. 5-2, Section 2, Fenliao Road, Linkou District, New Taipei City,
Taiwan

Hotline: 0800-661-600

Service Email: philips.massager@xander.com.tw

Warranty Card

Product Model		Customer Name	
Seller		Contact Number	
Date of Purchase		Serial Number	
Service Center		Customer Address	
Maintenance Content		Date	Service Personnel

10 Packing List

Massager	1x	USB Charging Cable	1x
User Manual	1x	Quick Start Guide	1x

目錄

-
- | | |
|---|--------|
| 1 用戶必讀
符號描述
適用人群
使用注意事項
保養的注意事項 | 6 故障診斷 |
|---|--------|
-
- | | |
|--------|----------------------------|
| 2 產品功能 | 9 產品保修服務指南
保修及服務
保修卡 |
|--------|----------------------------|
-
- | | |
|--------|---------|
| 3 部件名稱 | 10 裝箱清單 |
|--------|---------|
-
- | | |
|---|--|
| 4 使用方法
使用前的準備事項
使用操作
充電方法
指示燈說明 | |
|---|--|
-
- | | |
|--------------------------------|--|
| 5 保養維護
清潔方式
保管存放
廢棄方式 | |
|--------------------------------|--|
-


1 用戶必讀


產品使用前請仔細閱讀並妥善保管本說明書。本說明書可在www.philips.com上獲取。

符號描述

為避免造成人身危害或財產損失，請務必遵守以下內容。

· 用以下圖示來分別說明希望遵守的內容。

 表示禁止

 表示需要根據指示去做

適用人群

 以下人群/情況應謹慎使用







- 體內有植入起搏器，或相關醫用電器產品的人群
- 因骨折或整形手術而在體內注入金屬、矽或塑膠材質的人群群
- 皮膚受過創傷的人群
- 體溫38°C以上的人群
- 身體容易麻木的人群
- 對呼吸器有障礙的人群
- 患有高血壓的人群
- 患有內臟疾病(胃炎，肝炎，腸胃炎)等急性症狀的人群
- 皮膚感覺障礙者

- 身體感覺異常的人群
- 腰椎盤突出、脊椎炎人群
- 變形性關節炎、關節炎、痛風人群
- 脊椎骨折、骨腫大人群

 以下人群/情況禁止使用

- 無法表達自己意志的人，或者自己無法操作機器的人。
- 使用過程中，感覺腰疼，頭暈，嘔吐，悸動等身體異常反應的時候，請立即停止。
- 本產品單次定時15分鐘，每次使用請不要超過30分鐘，使用後請讓機器休息15分鐘以確保機器壽命的延長。
- 下列的情況不要使用
 - 劇烈疲勞的時候
 - 飯前、飯後一小時之內
 - 醉酒之後

使用注意事項

-  器具具有發熱表面。對熱不敏感的人使用時必須注意。
-  本電器不適用於身體、感官或智力能力下降或缺乏經驗和知識的人員(包括兒童)使用，除非由負責他們安全的人員對他們的使用進行監督或指導。兒童應受監督，以確保他們不會玩電器。
-  如果電源軟線損壞，必須用專用軟線或從其製造商或維修部買到的專用組件來更換。
-  本電器含有的電池，應由技術人員更換電池。
-  電器只能在器具上標示的安全特低電壓內供電。
-  在使用前，請務必確認產品是否完好，若發現破損，無論大小，請立即停止使用。

- ❗ 請定期清理充電器上的灰塵，插頭上灰塵堆積容易因為濕氣引發絕緣不良，最終導致火災。
- ❗ 無法使用，或者感覺異常的時候請立即停止使用。
- ❗ 停電時，請拔掉充電線。
- ❗ 不使用的時候請務必關閉電源。
- ⊘ 絕對不要分解、改造或者自己修理產品，也不要自己打開拉鏈。
- ⊘ 身體有水的狀態下請不要使用產品，容易引發觸電。
- ⊘ 不要用力拉扯產品，也不要用刀或者尖銳的物品去刺產品。

保養的注意事項

- ❗ 保養的時候，務必關閉電源。
- ❗ 請妥善處理本產品的包裝袋，使其遠離嬰幼兒。
- ⊘ 本產品內含鋰電池，請勿自行拆卸、改裝、水浸產品(控制別器)或投擲火中，否則可能導致產品損壞。
- ⊘ 請勿損壞、改裝、用力彎曲或拉拔充電線。另外，請勿在充電線上面放置重物或擠壓電源線。
- ⊘ 保養的時候，請不要使用揮發油、稀釋劑、酒精、強鹼性洗潔劑、漂白劑等進行清潔。
- ⊘ 請勿存放在兒童和嬰幼兒的接觸範圍之內。此外，請勿讓他們接觸或操作本產品。否則，可能會引起灼傷、觸電或人身傷害。
- ❗ 存放產品時，先讓產品冷卻下來。



本產品為三類器具




R3A020
RoHS

2 產品功能

本產品通過氣囊和熱敷功能，內置多種按摩模式與擋位可選，適用不同人群用於膝蓋放鬆。

3 部件名稱

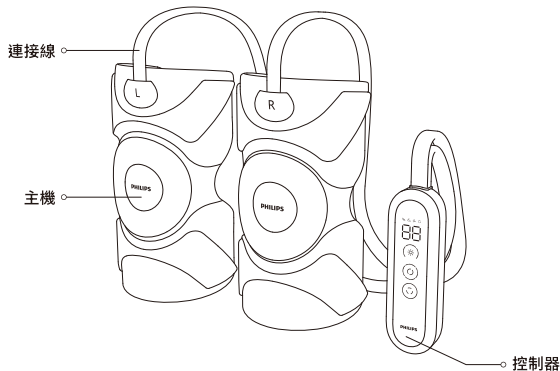


4 使用方法

使用前的準備事項

1. 請檢查機器及配件完整。
2. 將按摩器佩戴在膝蓋處，並調整至舒適狀態。

❗ 因每個人對溫度的敏感度不同，45°C及以上建議隔著衣服使用，謹防燙傷。

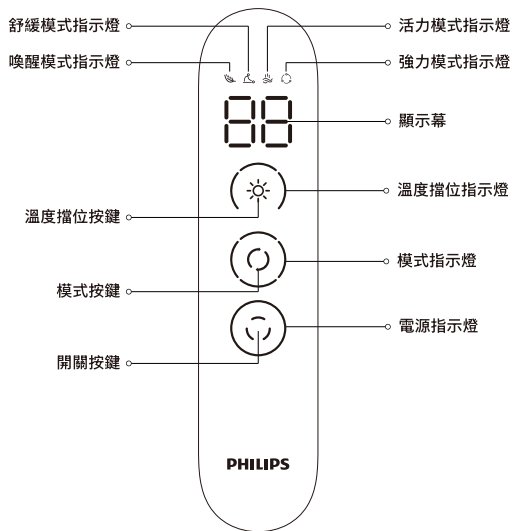

使用操作

開關按鍵

1. 長按2秒操作按鍵開機/關機，開機默認進入喚醒模式，熱敷40°C，語音提示“按摩開啟”。
2. 雙擊開關按鍵可鎖定/開啟螢幕，語音提示“鎖定螢幕”/“開啟螢幕”。鎖屏後狀態指示燈呈橙色緩慢閃爍，螢幕顯示當前熱敷溫度（熱敷關閉時顯示00），以及當前模式對應的指示燈。長按開關按鍵可關閉按摩器。
3. 機器默認定時15分鐘，運行15分鐘後自動關機，進入待機狀態。語音提示“關閉按摩”。

模式按鍵

短按溫度擋位按摩模式（喚醒模式-舒緩模式-活力模式-強力模式-關閉氣壓），迴圈切換。調節時模式指示燈遞增亮起藍色燈光，對應模式的指示燈亮起，每次調整均有語音提示當前模式。

溫度擋位按鍵

短按溫度擋位按鍵調節溫度（40°C-45°C-50°C-關閉加熱），迴圈切換。中間顯示幕顯示當前選擇溫度。調節時溫度指示燈遞增遞增亮起橙色燈光，每次調整均有語音提示當前溫度。

低電量提示

當電量少於10%時，指示燈顯示橙色燈光閃爍5秒提示並關機，同時語音提醒“電池電量低，請及時充電”。

充電狀態

充電時指示燈顯示藍色緩慢閃爍，直至充滿電常亮藍色燈。

充電方法

1. 將充電插頭插入電池倉側面的充電孔內;
2. 將充電器插頭100-240~, 50/60Hz的電源插座上;
3. 充電時指示燈圓藍色緩慢閃爍, 直至充滿電常亮藍色燈;
4. 充滿電約需5小時。

指示燈說明

指示燈類型	狀態指示	語音提示
電源指示燈	開機默認亮橙色, 低電量閃爍5秒提示後關閉; 充電中藍色緩慢閃爍, 充滿時藍色常亮	按摩開啟/關閉按摩/電池電量低, 請及時充電/充電中無語音
溫度擋位指示燈	共3段橙色燈光, 開機默認亮1段, 再次按下此鍵亮2段	40°C/45°C/50°C/關閉加熱
喚醒模式指示燈	開機默認進入, 亮第一個綠色圖示。按下模式鍵切換下一模式	
舒緩模式指示燈	在喚醒模式下按模式鍵進入, 第二圖示亮藍色	語音對應播報, 喚醒模式/舒緩模式/活力模式/強力模式/關閉氣壓
活力模式指示燈	在舒緩模式下按模式鍵進入, 第三圖示亮橙色	
強力模式指示燈	在活力模式下按模式鍵進入, 第四圖示亮紅色	
數碼管顯示	在加熱狀態下常顯溫度設定值, 加熱擋位關閉後顯示00	/

5 保養維護

清潔方式

1. 產品布套上的灰塵, 不要拍打, 用吸塵器去除。
2. 表面髒汙可用乾淨的抹布去除。
3. 比較深的髒汙, 用中性洗潔劑沾濕抹布, 然後輕輕的擦除, 不要讓水進入到產品內部, 放置自然乾燥。

❗ 保養的時候, 一定要把電源線拔掉, 但是不要用濕手去拔除電線。

保管存放

- 請放在兒童觸摸不到的地方。
- 請勿放在陽光直射、高溫、潮濕的地方。
- 請放在乾燥、通風的地方保管。

廢棄方式

本產品所用的鋰離子電池是可回收再生的貴重資源, 請在使用完畢廢棄之時, 將鋰離子電池取出, 交給可進行充電式電池回收再生處理的專業機構進行處理。

1. 正常使用期間請勿自行更換電池。
2. 在廢棄器具前, 必須將電池從器具中取出;
3. 在取出電池時, 器具必須要斷電;
4. 電池應安全地處置。

操作步驟:

1. 用工具將面蓋撬開, 取螺絲刀擰下螺釘;
2. 取出燈板支架及主控板PCB螺釘, 拔掉對應的所有端子;
3. 用螺絲刀取出封蓋上面的螺釘, 並把封蓋取出;
4. 找到下殼中的電池, 進行安全的處置。

6 故障診斷

本章列出了關於本產品最常見的問題。如果您無法在其中找到您所遇問題的答案，請聯繫服務熱線或您所在地區的授權服務中心。

故障描述	可能原因	解決方式
無法啟動	產品電池電量不足	連接充電器，產品充電後再使用
	開關按鍵沒有開啟	長按開關按鍵開機
	線路板短路	請與此產品指定服務中心聯繫
使用過程中停止工作	產品電池電量不足	連接充電器，產品充電後再使用
	15分鐘定時按摩結束，進入關機狀態	長按開關按鍵開機
有聲音從產品傳出	內部氣泵充、放氣聲音，屬於正常工作狀態	無需處理
產品冒煙	內部導線短路	立即停止使用，並與此產品指定服務中心聯繫

長時間未使用後，務必先確認功能正常，才能再次使用。

有無以下故障		
定期檢查	<ul style="list-style-type: none">· 充電線或者插頭發熱· 充電線有深深的傷痕或者變形、有焦味· 工作中有異常的聲音或者震動· 開啟開關後，不正常工作· 有其他異常或者故障	若出現上述故障，為了防止引發事故，請立刻停止使用，並切斷電源。請送往本公司維修點。

注意：
如果無法排除故障或產品仍無法理想操作，與售後服務人員聯繫，切勿自行拆卸或嘗試維修。

7 主要技術參數

產品名稱	飛利浦膝蓋按摩器
產品型號	PPM5521
操作電壓	3.7V ==
操作功率	15W Max
充電電壓	5V ==
充電電流	2A
產品尺寸	1020×543×40mm
產品淨重	約0.78kg
電池容量	4800mAh
充電時間	≤5小時
電源介面	Type-C
生產日期	見產品合格證

8 環保說明

設備名稱：飛利浦膝蓋按摩器，型號(型式)：PPM5521						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六价鉻 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.“—”係指該項限用物質為排除項目。

9 產品保修服務指南

保修及服務

此產品是一件設計精良，用高品質元件製造之家用電器，在正常使用及保養下應能發揮其優越性能。在購買日期起計兩年內，凡經本公司特約維修站人員確認為正常使用情況下，因製作工藝或原配件造成之損壞，您都將獲得免費保修服務。此免費服務不包括需時常更換的消耗品，運輸費及維修人員上門服務費，維修時請提供有效購買憑證。

以下情況將不能獲得免費服務

1. 使用不當引起的人為損壞，例如接入不適當配件、不適當之安裝、不依說明書使用、錯誤使用或疏忽而造成損壞等。
2. 因運輸及其他意外而造成之損壞。
3. 非經本公司認可之維修和改裝。
4. 其他因不可抗力（如自然在乎，電壓異常等）造成的損壞。
5. 一般家庭以外使用（如工業、商業用等）而造成的損壞。
6. 正常使用引起的產品老化，磨損等，但不影響產品使用。

該說明作為在規定期限及條件之內進行免費維修的宣貫，並不限製消費者的法定權力。

若您需諮詢相關資訊，或遇困難事項時，請聯絡本公司當地維修服務中心，或向服務熱線諮詢。

香港進口商：升科國際有限公司

地址：香港上環永樂街 148 號南和行大廈 5 樓 505 室

服務熱線：852-3188-4987

服務郵箱：philips.message.hk@centuryfield.com

台灣進口商：建建國際股份有限公司

地址：台灣新北市林口區粉寮路二段 5-2 號

服務熱線：0800-661-600

服務郵箱：philips.massager@xander.com.tw

保修卡

產品型號		用戶姓名	
銷售單位		聯繫電話	
購買日期		出廠編號	
維修內容		用戶地址	
特別技術服務站	時間	保修人員	

10 裝箱清單

主機	1 ×	說明書	1 ×
快速入門指南	1 ×	USB充電綫	1 ×
合格證	1 ×		