



Visit us

www.philips.com

There may be certain differences between the content of this manual and your product. Please refer to the actual product. We reserve the right to update the product at any time without prior notice.

©2023 AquaShield

All rights reserved

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong Deerma Technology Company Limited and Guangdong Deerma Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

Rev A MAR 23



PHILIPS

Neck and Shoulder
Massager

Neck Massager

PPM3304



Quick Start Guide

1. Wrap the U-shaped neck pillow around your neck (or other parts that need to be massaged) and fix it with the lock catch.



2. Press and hold the power function button for 2 seconds to start the device (voice: "Massage on"), then the device will enter the soothing mode by default with hot compress function on. The Mild Mode begins to work, and the indicator turns orange.



Press and hold the button for 2 seconds to start the device

3. Press the power function button to turn off the hot compress function (voice: "Turn off heating"), and the indicator lamp turns blue; Press the button again to turn on hot compress function (voice: "Turn on heating"), and the indicator lamp turns orange. Circle in this way.



Press the button to turn on /off heating

4. Press the mode button to switch to the Energizing Mode (voice: "Energizing Mode") in turn. Press the button again to switch to the Kneading Mode (voice: "Kneading Mode"). Circle in this way.



Press the button to switch the modes

5. Press the intensity button to switch to the Mild Mode (voice: "Mild Mode"), and Powerful Mode (voice: "Powerful Mode") in turn. Press and hold the intensity button for 2 seconds to pause the massage (voice: "Stop massage"). Press this button again for 2 seconds to start the massage (voice: "Turn on massager");



Press the button to switch the intensity level

6. The product will be automatically powered off after working for 15 minutes. To discontinue halfway, press and hold the power button to turn it off.




7. At the time of charging, the indicator lamp flashes blue, and the blue light remains on when the device is fully charged. Reminder of low power capacity: The indicator lamp flashes blue for 5 seconds as an alarm (voice: "The battery power is low, please charge it in time").




- ! 1. If you feel uncomfortable during the massage, please stop the device immediately.
- 2. When not using the massager, please turn it off and let it stop working. In case of failure, turn off the power to avoid accidents.

1. 将U型颈枕环绕于颈部（或其他需要按摩部位），并利用锁扣固定。

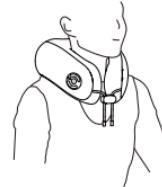

2. 长按开机键2秒开机（语音：“按摩开启”），默认舒缓模式，热敷开启，轻揉挡运转，指示灯亮橙色。

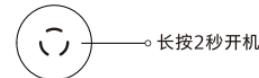

3. 短按开机键，关闭热敷（语音：“关闭加热”），指示灯亮蓝色；再次短按可开启热敷（语音：“开启加热”），指示灯亮橙色，依次循环。



4. 短按模式键依次切换为活力模式（语音“活力模式”），再次短按切换为揉捏模式（语音：“揉捏模式”），依次循环。



5. 短按力度键依次切换为轻柔挡（语音：“轻柔”），强力挡（语音：“强力”），长按力度键2秒可暂停按摩（语音：“暂停按摩”），再次短按2秒可开启按摩（语音：“开启按摩”）。



6. 产品工作15分钟后自动关机。若需要中途停止，请长按电源键关机。



7. 充电时，指示灯呈蓝灯呼吸闪烁，满电后蓝灯常亮。低电量提醒：指示灯亮蓝色闪烁5秒报警（语音：“电池电量低，请及时充电”）。



! 1. 若在按摩过程中感到不适请立即停止操作。

2. 按摩器不用时，请将按摩器停止工作，关闭机器。若发生机器故障，请关闭电源，以免发生意外。

1. Balutkan bantal leher U-shaped pada leher (Atau bahagian lain yang perlu diurut), dan betulkan dengan kunci yang telah disediakan.




2. Tekan lama butang kuasa selama 2 saat untuk menghidupkan (Suara: "Pengurut dihidupkan"), mod penenang lajai, kompres panas dihidupkan, uli ringan dihidupkan dan lampu penunjuk yang berwarna oren.



3. Tekan sejenak butang kuasa untuk mematikan pemanas (Suara: "Matikan pemanas"), lampu penunjuk berwarna biru: Tekan sejenak sekali lagi untuk menghidupkan kompres panas (Suara: "Hidupkan pemanas"), lampu penunjuk berwarna oren secara bergilir



4. Tekan sejenak butang mod untuk beralih ke Mod Vitality (Suara "Mod Vitality"), tekan sejenak sekali lagi untuk beralih ke mod menguli (Suara: "Mod menguli") secara bergilir

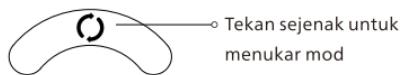

5. Tekan sejanak butang kelajuan untuk bertukar kepada gear lembut secara bergilir-gilir (Suara: "Gear lembut"), gear kuat (Suara: "Gear kuar"), tekan dan tahan butang kelajuan selama 2 saat untuk menjeda urutan (Suara: "Jeda mengurut"), tekan butang sekali lagi pada 2 saat untuk menghidupkan perangkat mengurut (Suara: "Mengurut telah dihidupkan")



6. Produk akan dimatikan secara automatik selepas 15 minit beroperasi. Jika Anda perlu berhenti di tengah jalan selama menggunakan, sila tekan dan tahan butang kuasa untuk mematikan perangkat.



7. Apabila sedang mengecas, lampu penunjuk berkelip dalam cahaya biru, dan lampu biru sentiasa menyala selepas dicas dengan sepenuhnya. Peringatan kuasa bateri lemah: Lampu penunjuk bertukar menjadi warna biru dan berkelip selama 5 saat untuk penggera (Suara: "Bateri lemah, sila mengecas tepat pada masanya").



- ! 1. Jika semasa Anda mengurut berasa sihat, sila hentikan operasi dengan segera.
- 2. Jika perangkat pengurut tidak digunakan, sila matikan pengurut dan matikan perangkatnya. Bila perangkat terdapat masalah, sila matikan bekalan kuasa demi mengelakkan kemalangan.