

PHILIPS

AVENT


Single/Double
Electric Breast
Pump

Tire-lait
électrique
simple/double


Tiralatte
elettrico
singolo/doppio

Hands-free
Mains libres
Indossabile

SCD553, SCF531,
SCF532, SCF543,
SCF547

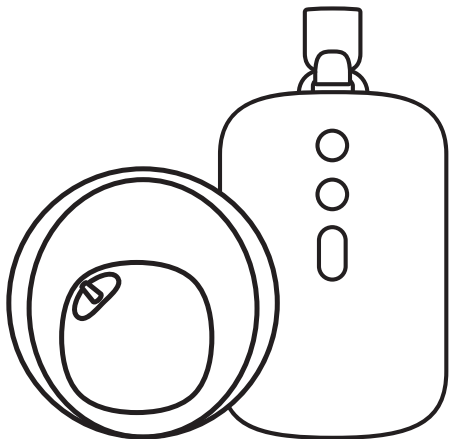

www.philips.com/support

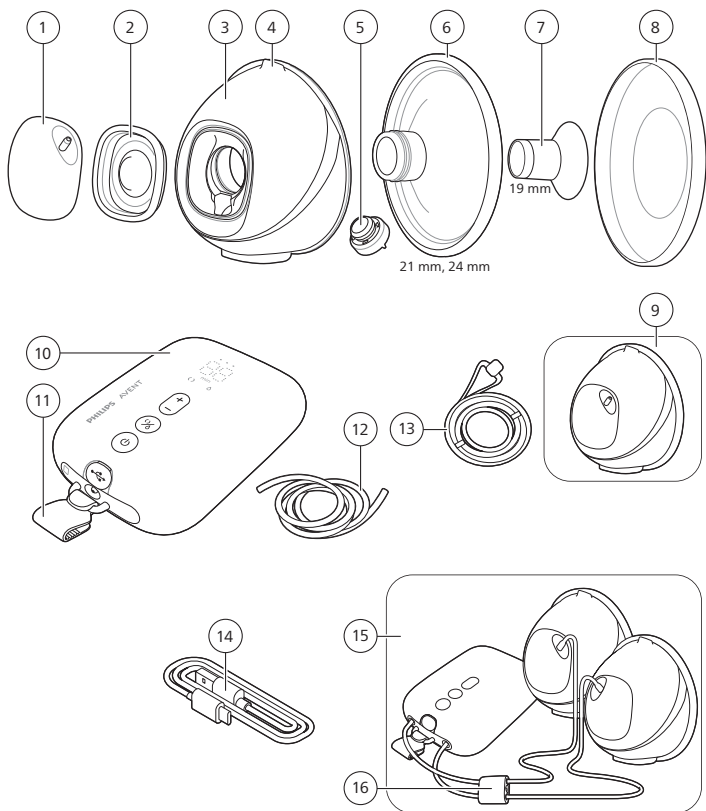

Giriş

Philips Avent'e hoş geldiniz! Bu ürün veya Philips Avent ürün serisi hakkında daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun üzerindeki QR kodunu tarayın veya **www.philips.com/support** adresinden bizi ziyaret edin. Bu web sitesinde ayrıca tam kullanım kılavuzunu, videoları ve sıkça sorulan soruları bulabilirsiniz.

Genel açıklama (Şek. 1)

❗ Not: Aşağıda belirtilen sayılar, bu kullanım kılavuzunun ön kısmındaki katlanabilir sayfasında bulunan şekildeki sayıları göstermektedir.

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Ön kapak | 10 Motor ünitesi |
| 2 Membran | 11 Klips (çıkartılabilir) |
| 3 Kap | 12 Silikon hortum |
| 4 Dökme ağzı | 13 Taşıma kablosu |
| 5 Valf | 14 USB kablosu |
| 6 Göğüs kalkanı (21 mm, 24 mm) | 15 Çiftli göğüs pompası (SCD553, SCF532, SCF547) |
| 7 Aparat (19 mm) | 16 Hortum bağlantı parçası |
| 8 Göğüs kalkanı (toz) kapağı | |
| 9 Toplama kabı (takılmış) | |

Kullanım amacı

Philips Avent Eller Serbest Tekli/Çiftli Elektronik Göğüs Pompası, emzirme dönemindeki annenin göğsünden süt sağlamak ve bu sütü saklamak için tasarlanmıştır. Cihaz yalnızca tek bir kullanıcı tarafından kullanım için tasarlanmıştır.

Önemli güvenlik bilgileri

Göğüs pompasını kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Tam kullanım kılavuzuna çevrimiçi olarak şu adresten ulaşabilirsiniz:

www.philips.com/support.

⚠ Uyarı

- Pompalama doğum sancısına neden olabileceğinden hamileyken göğüs pompasını kesinlikle kullanmayın.

Boğulma ve yaralanmaları önlemek için uyarılar:

- Dikkatinizin dağılması sonucu kazaları önlemek için araç kullanırken göğüs pompasını asla kullanmayın.
- Çocukların ve evcil hayvanların motor birimi, ambalaj malzemeleri veya aksesuarlarla oynamadığından emin olun.
- Silikon hortumu, taşıma kablosunu ve USB kablosunu dikkatli kullanın; boğulma riskine karşı gerekli önlemleri alın.

- Bu göğüs pompası düşük fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerilere sahip veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır. Bu kişiler, bu emzirme pompasını yalnızca kendilerinden sorumlu bir kişi nezaretinde veya cihazın kullanımı ile ilgili olarak uygun talimat almışlarsa kullanabilirler.

Bulaşıcı hastalıkların bulaşmasını önlemek için uyarılar:

- Hepatit B, Hepatit C veya İnsan Bağışıklık Yetmezliği (HIV) taşıyıcısı bir anne iseniz, sütün sağılması virüsün anne sütünüz yoluyla bebeğinize geçmesi riskini azaltmaz ya da ortadan kaldırmaz.

Elektrik çarpmalarını önlemek için uyarılar:

- Şarj için (pakete dahil olmayan) bir güç adaptörü kullanılıyorsa yalnızca çift yalıtımlı sertifikalı bir USB güç adaptörü kullanın. Adaptörün üzerinde çift yalıtım sembolünün bulunduğunu kontrol edin: . Göğüs pompanız için 5 V doğru akım/1,8 A veya 9 W değerinde USB bağlantı noktasına sahip bir güç kaynağı (adaptör veya taşınabilir şarj cihazı) kullanın.
- Göğüs pompasını şarj etmek veya çalıştırmak için (pakete dahil olmayan) bir USB güç adaptörü kullanıyorsanız: adaptörü şarj etmeden önce hasar belirtileri açısından kontrol edin. Adaptör hasarlıysa veya dış kabı gevşemiş ya da ayrılmaya başlamışsa kullanmayın. Dış kabın ayrılması elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Göğüs pompasını her kullanımdan önce veya düşürülmüşse hasar belirtileri açısından kontrol edin. Hasar görmüşse düzgün çalışmıyorsa veya suya daldırılmışsa göğüs pompasını kullanmayın.
- Arıza durumunda daima cihazın elektrik bağlantısının kesilmesinin kolay olmasını sağlayın.

Kontaminasyonu önlemek ve hijyen sağlamak için uyarılar:

- Hijyenik nedenlerden dolayı göğüs pompası, yalnızca bir kullanıcı tarafından tekrarlanan kullanım için tasarlanmıştır.
- İlk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra göğüsle ve anne sütüyle temas eden tüm parçaları temizleyin ve dezenfekte edin. Sağım sırasında farklı boyutlarda aparat ve/veya göğüs kalkanı kullanıyorsanız bu parçaların tamamını temizleyip dezenfekte ettiğinizden emin olun.
- Süt toplama kabını göğüs kalkanı (toz) kapağıyla birlikte saklayın ve taşıyın.

Ağrılar da dâhil olmak üzere göğüs ve göğüs ucu sorunlarını önlemek için uyarılar:

- Membran hasarlı veya yırtılmış görünüyorsa göğüs pompasını kullanmayın. Yedek parçaları nasıl temin edebileceğiniz hakkında bilgi almak için "Aksesuarların ve yedek parçaların sipariş edilmesi" bölümüne bakın.
- Sadece Philips Avent tarafından önerilen aksesuarları ve parçaları kullanın.
- Göğüs pompasında herhangi bir değişiklik yapılması yasaktır. Aksi takdirde garantiniz geçersiz olur.

- Kullanım sırasında dikkat eksikliğini önlemek için uykuluyken göğüs pompasını kesinlikle kullanmayın.
- Vakum rahatsızlık veriyor veya ağrıya neden oluyorsa motor birimini kapatın ve toplama kabını göğsünüzden çıkarın.
- Yeterli süt gelmiyorsa veya göğsünüz ağrılı, sıcak, şiş ya da kızarık görünüyorsa sağlık uzmanınıza veya emzirme danışmanınıza başvurun.

Göğüs pompasında hasar oluşmasını ve arızalanmasını önlemeye yönelik uyarılar:

- Taşınabilir radyo frekansı (RF) iletişim ekipmanı (cep telefonları ve anten kabloları ile harici antenler gibi çevre birimleri dahil), göğüs pompasının harici güç kaynağı da dahil olmak üzere herhangi bir yerine 30 cm'den (12 inç) daha yakın kullanılmamalıdır. Bu durum göğüs pompasının performansını olumsuz etkileyebilir.
- Hatalı çalışmasına neden olabileceğinden bu ekipmanın diğer ekipmanlara bitişik veya bunlarla birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Pil güvenlik talimatları

Ürünü sadece kullanım amacına göre kullanın. Ürünü, pillerini ve aksesuarlarını kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. Yanlış kullanım, tehlikelere veya ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere göre farklılık gösterebilir.

- Ürünü, bu kullanım kılavuzundaki teknik özellikler bölümünde belirtilen sıcaklık aralıklarında şarj edin, kullanın ve saklayın.
- Ürün ve pilleri ateşten uzak tutun, doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Ürün aşırı ısınır veya üründen koku gelirse, renk değiştirirse ya da şarj işlemi her zamankinden daha uzun sürerse ürünü kullanmayı ve şarj etmeyi bırakıp Philips ile iletişime geçin.
- Ürünleri ve pillerini mikrodalga fırına ya da endüksiyonlu pişiricilerin üstüne koymayın.
- Pillerin ısınmasını veya zehirli ya da tehlikeli madde açığa çıkarmasını önlemek için ürünü veya pili açmayın, delmeyin, sökmeyin, değişiklik yapmayın veya hasar görmemesini sağlayın. Pillere kısa devre, aşırı yüklemeye veya tersine yüklemeye yapmayın.
- Pil ile çalışan cihazın veya pilin uçlarının metal nesnelerle kısa devre yapma riskine karşı dikkatli olun.
- Hasarlı veya sızdıran pillerin cilde ya da gözlere temas etmemesine dikkat edin. Bu durumda, hiç vakit kaybetmeden temas yerini suyla iyice yıkayın ve bir doktora başvurun.

⚠ Dikkat

Göğüs pompasında hasar oluşmasını ve arızalanmasını önlemek için önlemler:

- USB güç adaptörünün (pakete dahil değildir), USB kablosunun ve motor biriminin suyla temas etmemesine dikkat edin.
- Aşırı ısınmayı ve parçaların deformasyonunu önlemek için tüm parçaları sıcak yüzeylerden uzak tutun.


İlk kullanımdan önce

Göğüs pompasını ilk defa kullanmadan önce ve her kullanımdan sonra göğüsle ve anne sütüyle temas eden tüm parçaları sökün, temizleyin ve dezenfekte edin.


Cihaz ilk kez kullanılacaksa veya uzun süre kullanılmamışsa cihazı tam olarak şarj edin.

Temizlik ve dezenfeksiyon

- İlk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra şu parçaları sökün, temizleyin ve dezenfekte edin: membran, kap, valf, göğüs kalkanı, aparat (kullanılıyorsa), göğüs kalkanı (toz) kapağı.

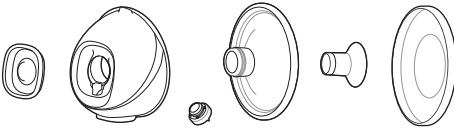

- Çiftli göğüs pompası ile birlikte gelen silikon hortumu, hortum bağlantı parçasını, taşıma kordonunu, USB kablosunu, motor birimini (klips dahil) ve ön kapağı gerektiğinde temizleyin. Temiz, nemli bir bezle ve hafif bir deterjanla silin.

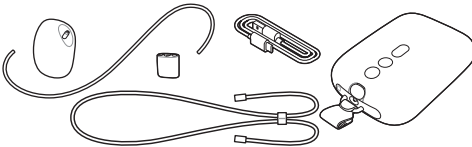

Adım 1: Sökülmesi

Göğüsle ve anne sütüyle temas eden tüm parçaları tamamen sökün. Şunları yaptığınızdan emin olun:

- Valfi kaptan çıkarın.
- Membran ile ön kapağı birbirinden ayırın.
- Aparatı (kullanılıyorsa) göğüs kalkanından çıkarın.

Adım 2: Temizlik

⚠ Uyarı: Hasara neden olabileceği için göğüs pompasının parçalarını temizlerken antibakteriyel veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.

⚠ Dikkat: Kalıcı hasara neden olabileceğinden motor ünitesini asla suya veya bulaşık makinesine koymayın.

İlk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra şu parçaları temizleyin: membran, kap, valf, göğüs kalkanı, aparat (kullanılıyorsa), göğüs kalkanı (toz) kapağı. Bu parçaları elle veya bulaşık makinesinde temizleyebilirsiniz.

Manuel temizleme

⚠ Dikkat: Valfi çıkarırken ve temizlerken dikkatli olun. Zarar görürse, göğüs pompanız düzgün çalışmaz. Valfi temizlemek için ılık sabunlu suda biraz bulaşık deterjanı ile parmaklarınız arasında hafifçe ovun. Hasara neden olabileceğinden valfe herhangi bir cisim sokmayın.

- 1 Parçaları, akan bir musluğun altında ılık suyla durulayın.
- 2 Parçaları, ılık suyla ve hafif bir bulaşık deterjanında 5 dakika bekletin.
- 3 Parçaları temizlik fırçası, ılık su ve hafif bulaşık deterjanıyla temizleyin.
- 4 Parçaları içme suyu kalitesinde akan su altında iyice durulayın.
- 5 Parçaları temiz bir bez veya kurutma rafı üzerinde kurumaya bırakın.

Bulaşık makinesinde yıkama

ⓘ Not: Gıda boyaları, parçaların renginin solmasına neden olabilir.

- 1 Tüm parçaları bulaşık makinesinin üst rafına yerleştirin. Küçük parçalar için bir bulaşık makinesi sepeti kullanın.
- 2 Makineye deterjan veya bulaşık tableti koyun ve standart bir programı çalıştırın.
- 3 Parçaları temiz bir bez veya kurutma rafı üzerinde kurumaya bırakın.

Adım 3: Dezenfeksiyon

⚠ Dikkat: Kaynar suda parçaları dezenfekte ederken parçaların tencere kenarlarına ve dibine temas etmesini önleyin. Bu, geri dönüşü olmayan ürün deformasyonuna veya Philips'in sorumlu tutulamayacağı hasarlara neden olabilir.

İlk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra şu parçaları sökün, temizleyin ve dezenfekte edin: membran, kap, valf, göğüs kalkanı, aparat (kullanılıyorsa), göğüs kalkanı (toz) kapağı.

- 1 Evdeki bir tencereye içine koyduğunuz bu parçaları kaplayacak kadar su doldurun ve tüm parçaları tencereye yerleştirin. Suyu 5 dakika kaynatın. Parçaların tencerenin kenarlarına ve tabanına temas etmediğinden emin olun.
- 2 Suyun soğumasını bekleyin.
- 3 Parçaları yavaşça sudan çıkarın. Parçaları temiz bir bez veya kurutma rafı üzerinde kurumaya bırakın.
- 4 Kuru eşyaları gerekene kadar temiz ve korunaklı bir yerde güvenli bir şekilde saklayın. Parçalar üzerinde mikrop ve küf gelişmesini engellemeye yardımcı olmak için temiz parçaların havayla tamamen kurduğundan emin olun.

Süt toplama kabı parçaları mikrodalga sterilizatör ve buharlı sterilizatör ile kullanılmaya uygundur. Sterilizatör üreticisinin talimatlarını izleyin.

Göğüs pompasını kullanma

ⓘ Not: Aşağıda belirtilen sayılar, bu kullanım kılavuzunun arka kısmındaki katlanabilir sayfalarında bulunan şekildeki sayıları göstermektedir.

Göğüs pompasının şarj edilmesi

Göğüs pompasını ilk kez kullanmadan önce ve pil azaldığında pili tamamen şarj edin. Pilin tam olarak şarj edilmesi yaklaşık 1,5 saat sürer.

Göğüs pompanız için 5 V doğru akım/1,8 A veya 9 W değerinde USB bağlantı noktasına sahip bir güç kaynağı (adaptör veya taşınabilir şarj cihazı) kullanın. Daha düşük özelliklere sahip bir güç kaynağı kullanılması, şarjın yavaşlamasına veya cihazın prize bağlıyken çalışmamasına neden olabilir.

- 1 Cihazı kapatın (Şek. 2).
- 2 USB kablusunun küçük ucunu motor birimine, diğer ucunu ise bir USB güç kaynağına (örneğin adaptör veya dizüstü bilgisayar) takın.
- 3 Pil göstergesi ışıkları sırayla yanıp söner ve ardından tümü söner: pil şarj oluyor (Şek. 3).
- 4 Üç ışığın tümünün sürekli yanması: pil tamamen şarj edilmiştir (Şek. 4).

- 5 USB kablosunu güç kaynağından çıkarın ve küçük fişi motor biriminden ayırın.

Pil göstergesi ışığı açıklaması

Pil göstergesi ışıkları, pil kapasitesini gösterir:

- Üç ışığın sürekli yanması: Pil tamamen doludur ve yaklaşık 5 sağımlı seansı için yeterlidir.
- İki ışığın sürekli yanması: Pil 2–3 sağımlı seansı için yeterlidir.
- Bir ışık yavaşça yanıp sönüyor: Pil en fazla 1 sağımlı seansı için yeterlidir. Yakında şarj edilmelidir.
- Birinci ışık hızlı yanıp sönüyor: Pil seviyesi çok düşüktür; cihaz kısa süre içinde duracaktır. Şarj edilmesi gerekir.

Bir sağımlı oturumu, çiftli göğüs pompasında 15 dakika, tekli göğüs pompasında 30 dakika sürer.

Göğüs kalkanı ve aparat boyutları

Philips Avent Eller Serbest Göğüs Pompası, tek başına veya daha fazla konfor için esnek silikon aparatla birlikte kullanılabilen yumuşak bir göğüs kalkanına sahiptir. Birden fazla boyut seçeneği mevcuttur.

Uygun göğüs kalkanını ve gerekirse aparat boyutunu bulmak için meme ucunuzu ölçün.

- 1 Paketin içinde yer alan meme ucu ölçüm kartını kullanın veya ölçüm için www.philips.com/support adresine başvurun.
- 2 Ölçümden önce meme ucunuzu uyarın.
- 3 Meme ucu ölçüm kartını meme ucunuzun etrafına yerleştirin. Meme ucunuz ile ölçüm kartındaki delik arasında 0,5–2 mm boşluk olduğundan emin olun.
- 4 Hangi deliğin meme ucunuza en iyi şekilde uyduğunu görmek için farklı delikleri deneyin. Gerekirse aynada uyumu kontrol edin.
- 5 Meme ucunuza en uygun deliğe karşılık gelen göğüs kalkanını (ve aparatı) seçin.
- 6 Kutuda 21 mm ve 24 mm göğüs kalkanı, 19 mm aparat bulunmaktadır.
- 7 28 mm göğüs kalkanı ile 15 mm, 17 mm ve 26 mm aparat boyutları ayrıca ayrı olarak satın alınabilir (bkz. "Aksesuar ve yedek parçaların sipariş edilmesi").
- 8 Seçtiğiniz boyutu kullanarak sağımlı yapmaya başlayın ve konforunuzu dikkatle gözlemleyin. Sağımlı sonrasında meme ucunuzun boyutu biraz değişebilir. Sağımlı rahatsız edici hale gelirse meme ucunuzu yeniden ölçün ve gerekirse farklı bir boyuta geçin.

❗ Not: Sol ve sağ meme ucunuz için farklı boyutlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Meme uçları, sağımlı süreci boyunca da değişiklik gösterebilir. Örneğin,

doğumdan hemen sonra, birkaç aylık emzirme veya sağım sonrasında ya da ikinci bir hamileliğin ardından meme ucu boyutu farklı olabilir.

Göğüs pompasının montajı

⚠ Uyarı: Dikkat edin, göğüs pompası parçalarını kaynatıp dezenfekte ettikten sonra çok sıcak olabilirler. Yanmaları önlemek için göğüs pompasını dezenfekte edilmiş parçalar soğuduğunda takmaya başlayın.

⚠ Uyarı: Kontaminasyonu önlemek için göğüs pompası parçaları ve göğüslere dokunmadan önce ellerinizi sabun ve suyla iyice yıkayın. Kabin iç kısmına dokunmaktan kaçının.

Göğüs pompasının göğüsle ve anne sütüyle temas eden kısımlarını temizlediğinizden ve dezenfekte ettiğinizden emin olun. Tüm parçaları bir araya getirin ve temiz bir yüzey üzerine yerleştirin. Kullanmadan önce göğüs pompası parçalarını hasar açısından kontrol edin; gerekirse değiştirin.

❗ Not: Göğüs kalkanı, membran, aparat (kullanılıyorsa), valf ve silikon hortumun doğru şekilde yerleştirilmesi, göğüs pompasının uygun vakum oluşturması ve süt sızıntısı riskinin azaltılması için çok önemlidir.

- 1 Ellerinizi su ve sabunla iyice yıkayın.
- 2 Valfi kabin içine olabildiğince tam şekilde itin (Şek. 5).
- 3 Membranı kaba takın (Şek. 6).
- 4 Membran ve kabin üzerine ön kapağı takın (Şek. 7). Silikon hortumun yönünü belirlemek için ön kapağı dört farklı pozisyonundan birinde takabilirsiniz. Sizin için en rahat olan pozisyonu seçin. Membran kapağını yerine oturana kadar bastırın.
- 5 Bir aparat kullanıyorsanız önce aparatı (Şek. 8) göğüs kalkanına tamamen yerleştirin (Şek. 9).

❗ Not: Bir aparat kullanıyorsanız arada boşluk kalmaması için göğüs kalkanını kaba takmadan önce aparatı göğüs kalkanıyla birleştirin.

Aparatı, boyutu karşılık gelen göğüs kalkanına taktığınızdan emin olun. 15 mm, 17 mm, 19 mm aparat boyutları 21 mm göğüs kalkanına, aparat boyutu 26 mm ise 28 mm göğüs kalkanına uygundur. 24 mm göğüs kalkanı yalnızca aparatsız kullanılabilir.

- 6 Göğüs kalkanını (gerekirse aparatla birlikte) kaba takın (Şek. 10). Göğüs kalkanının iç kısmını kaba olabildiğince itin. Kalkanın kenarının kabin yanlarını tamamen kapladığından emin olun (Şek. 11).
- 7 Silikon hortumu ön kapağı (Şek. 12) ve motor birimine bağlayın (Şek. 13).

- 8** Göğüs pompası şarjliyen kablosuz olarak kullanılabilir. Göğüs pompasını bir güç kaynağına bağlı şekilde de kullanabilirsiniz. Sağım sırasında pil şarj olmaz.


❗ Not: Göğüs pompasını yanınızda taşıırken veya sağım hazırlığı yaparken, temiz kalması için göğüs kalkanının üzerine göğüs kalkanı (toz) kapağını yerleştirin (Şek. 14).

Motor birimini takma

Motor birimi farklı şekillerde takılabilir:


- 1 Verilen klipsi kullanarak motor birimini kıyafetinize takın. Klips motor birimine önceden monte edilmiştir. Klipsi kıyafetinizin üzerinden kaydırarak sıkıca takın (Şek. 15).
- 2 Verilen taşıma kablosunu vücudunuzun etrafına bakın (Şek. 16). Taşıma kablosunu klipse bağlayın. Taşıma kablosunu çapraz şekilde takın. Taşıma kablosunun ve silikon hortumların birbirine dolanmadığından emin olun. Taşıma kablosunun uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.

Motor ünitesi parça açıklaması

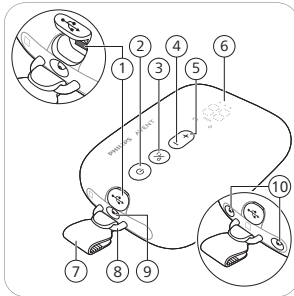

- 1 USB güç girişi
- 2 Duraklat işlevli açma/kapama düğmesi
- 3 Mod seçme düğmesi
- 4 'Düzeyi düşür' düğmesi
- 5 'Düzeyi artır' düğmesi
- 6 LED ekran
- 7 Klips (çıkarılabilir)
- 8 Halka
- 9 Tek göğüs pompası için kablo bağlantı noktası
- 10 Çiftli göğüs pompası için kablo bağlantı noktası

LED ekran açıklaması

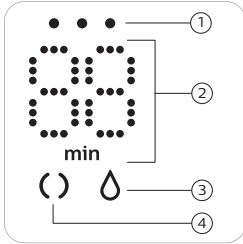

- 1 Pil göstergesi ışıkları
- 2 Zamanlayıcı (dakika) ve vakum düzeyi göstergesi
- 3 Sağma simgesi
- 4 Başlatma simgesi

Modların açıklaması

Göğüs pompasında 2 mod vardır. Aşağıda bu modların bir açıklamasını bulabilirsiniz.

Mod simgeleri	Mod	Açıklama	Çekim düzeyi sayısı
()	Başlatma modu 	Göğsü süt akışını başlatması için uyarma modu.	8 çekim düzeyi
	Sağma modu 	Süt akmaya başladıktan sonra etkin süt çıkarma modu. 90 saniyelik başlatma süresinden sonra cihaz, otomatik olarak sağma moduna geçer.	16 çekim düzeyi

	→		→		Ekrandaki sayı, geçen süreyi dakika cinsinden gösterir.
	→		→		Çekim düzeyini değiştirdiğinizde, ekran seçilen çekim düzeyini birkaç saniye boyunca görüntüler ve ardından tekrar geçen süreyi gösterir.

Tuşlara 8 saniye boyunca basmazsanız LED ekran kararır ve ardından kapanır. Herhangi bir tuşa bastığınızda LED ekran yeniden etkinleşir ve geçen süreyi gösterir.

Süt sağma talimatları

⚠ Uyarı: Vakumu serbest bırakmak için toplama kabını göğsünüzden ayırmadan önce göğüs pompasını mutlaka kapatın.

⚠ Uyarı: Hiç süt sağamıyorsanız beş dakikadan daha uzun süre pompalamayın. Bu durum süt kanallarınızda ağrıya ve hasara neden olabilir. Gün içinde başka bir zaman sağmayı deneyin.

⚠ Uyarı: İşlem çok rahatsız edici veya acı verici hâle gelirse göğüs pompasını kullanmayı bırakın ve sağlık uzmanınıza başvurun.

⚠ Dikkat: Cihazın oluşturduğu vakum düzeyi, ortamın atmosfer basıncına duyarlıdır. Yüksek rakımlarda oluşturulan vakum daha düşük olur.

- 1 Ellerinizi su ve sabunla iyice yıkayın. Sağım yapmadan önce göğsünüzü ve meme ucunuzu temizleyin.
- 2 Monte edilmiş toplama kabını sütyeninizin içine, göğsünüzün üzerine yerleştirin. Dökme ağzının (açıklığın) üstte olmasına dikkat edin (Şek. 17).
- 3 Meme ucunun, göğüs kalkanının tam ortasında olduğundan emin olun.
- 4 Cihaz açılana kadar açma/kapama düğmesini basılı tutun (Şek. 2). Gösterge ışıkları, cihazın başlatma modunda olduğunu göstermek için yanar.
- 5 Şeffaf kabin üst kısmından bakarak toplama kabının doğru yerleşip yerleşmediğini ve meme ucunun hareket edip etmediğini kontrol edebilirsiniz. Meme ucunuz göğüs kalkanının ortasında olmalı ve huni kısmına doğru ileri geri hareket etmelidir (Şek. 17).
- 6 Göğüs pompası, başlatma modunda başlar ve yavaşça vakumunu son kullanılan başlatma çekim düzeyine (veya ilk kez kullanıldığında düzey 5'e) yükseltir (Şek. 18).
- 7 Ekran, geçen süreyi gösterir (Şek. 19).
- 8 Çekim düzeyini tercihinize göre değiştirmek için "düzeyi artır" ve "düzeyi düşür" düğmelerini kullanın (Şek. 20).
- 9 90 saniye sonra, göğüs pompası yumuşak bir geçişle sağma moduna geçer ve vakumu, en son kullanılan sağma çekim düzeyine kadar kademeli olarak artırır (veya ilk kullanımda düzey 11'e kadar). (Şek. 21).
- 10 Süt akışı daha erken başlarsa veya 90 saniye sonunda süt akışı başlamazsa ve başlatma moduna geri dönmek isterseniz, modlar arasında mod seçim düğmesi ile seçim yapabilirsiniz (Şek. 22).

11 Duraklatmak istiyorsanız açma/kapama düğmesine kısaca basın. Devam etmek için açma/kapama düğmesine tekrar kısaca basın.

12 Kapatmak için açma/kapama düğmesine basılı tutun (Şek. 2).

ⓘ Not: Silikon hortumu toplama kaplarından birinden çıkararak, çiftli göğüs pompasını tekli göğüs pompası olarak kullanabilirsiniz. Kolaylık sağlamak için silikon hortumu hortum bağlantı parçasına takabilirsiniz (Şek. 23).

ⓘ Not: Toplama kapları, normal emzirme sütyeninizin içine takılabilir. Rahatsızlık veya ağrı hissederseniz daha esnek bir sütyen kullanmayı deneyin.

Kullanım sonrası


⚠ Uyarı: Hemen anne sütünü, soğutun veya dondurun veya bebeğinizi beslemeden önce en fazla 4 saat süreyle 16-29 °C sıcaklıkta tutun. Süt kalitesinde düşüşü önlemek için çözülmüş anne sütünü asla dondurmayın. Süt kalitesinin düşmesini ve donmuş sütün istenmeyen çözülmesini önlemek için asla taze anne sütünü donmuş anne sütüne eklemeyin.

- 1 Sağım işlemi tamamlandıktan sonra toplama kabını sütyeninizden çıkarın. Toplama kabını temiz ve düz bir yüzeyin üzerine yerleştirin (Şek. 24). Dökme ağzından süt dökülmemesine dikkat edin.
- 2 Anne sütünü saklamak için: Sağılmış sütü toplama kabından ayrı bir süt saklama kabına (örneğin bir biberon veya anne sütü saklama poşetine) aktarın (Şek. 25). Sağılmış anne sütünü toplama kabında saklamayın.
- 3 Göğüs ve anne sütüyle temas eden tüm parçaları sökün, temizleyin ve dezenfekte edin (bkz. "Temizlik ve dezenfeksiyon").

Uyumluluk

Philips Avent Eller Serbest Elektrikli Göğüs Pompasının motor birimi, Philips Avent Göğüs Pompası Kiti (SCF335, SCF337, SCF338) ile uyumludur.

Philips Avent Eller Serbest Elektrikli Göğüs Pompasının toplama kabı, şu Philips Avent göğüs pompası motor birimleriyle uyumludur: Advanced (SCF391, SCF393, SCF395, SCF397), Plus (SCF391, SCF393, SCF373), Premium (SCF392, SCF394, SCF396, SCF398), Premium Plus (SCF392, SCF394), Philips Avent Breast Feeding Starter Set Advanced (SCD340) ve Philips Avent Breast Feeding Starter Set Premium (SCD330).

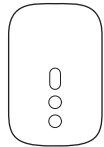

Cihazı, diğer Philips Avent göğüs pompası motor birimleriyle veya farklı markaların motor birimleriyle birlikte kullanmayın.

Aksesuar ve yedek parçaların sipariş edilmesi

Kullanım kolaylığı için, ek toplama kapları (örneğin işte ve evde kullanmak üzere), küçük veya büyük boy göğüs kalkanları ve aparatları ya da yedek parçalar satın almak için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya yetkili Philips satıcınıza başvurun. Ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmet Merkezi ile de iletişime geçebilirsiniz.

Geri dönüşüm

- Bu simge, elektrikli ürün ve pillerin normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir (Şek. 27).
- Ülkenizde elektrikli ürün ve pillerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin yürürlükte olan yönetmelikleri izleyin.

Dahili şarj edilebilir pili çıkarma

Ürün atıldığında, dahili şarj edilebilir pilin bir uzman tarafından çıkarılması gerekir. Dâhilî şarj edilebilir pillerin çıkarılmasına ilişkin talimatlara www.philips.com/support adresindeki ayrıntılı kullanım kılavuzundan çevrimiçi olarak ulaşılabilir.

Destek

Ürünle ilgili tüm destek, güç tüketimi bilgileri ve AB Uygunluk Beyanı için lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

Depolama

- Göğüs pompasını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın aksi halde renk kaybı olabilir. Göğüs pompası ve aksesuarlarını güvenli, temiz ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihaz sıcak veya soğuk bir ortamda saklanmışsa kullanmadan önce 30 dakika boyunca 20 °C sıcaklıktaki bir ortama yerleştirerek kullanım koşulları sıcaklığına (5 °C ila 40 °C) erişmesini bekleyin.
- Pil ömrünü korumak için göğüs pompasını uzun süre kullanmayacaksanız pili tamamen şarj edin.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Teknik özellikler

Motor ünitesi nominal girişi: 5 V doğru akım/1,8 A.

Lityum-iyon şarj edilebilir pil: 3,6 V, 2600 mAh, 9,4 Wh (dahili)

Otomatik kapama düğmesi: Otomatik kapanma: son kullanıcı etkileşiminden sonra 30 dakika, duraklatma modunda 15 dakika.

Çalışma koşulları: sıcaklık 5 °C – 40 °C, bağıl nem %15 – %90 (aralıkta yoğunlaşmaz).

Saklama ve taşıma koşulları: sıcaklık –20 °C – 45 °C, bağıl nem %90'a kadar (yoğunlaşmaz).

Çalışma ve saklama basıncı: 700 – 1060 hPa (< 3000 m rakım).

Elektrik şokuna karşı koruma: Class III.

Malzemeler — Motor birimi: MABS, ABS, silikon, TPE Toplama kabı:

polipropilen, silikon. Silikon hortum: silikon. Klips, hortum bağlantı parçası:

ABS. Taşıma kablosu: polyester, polipropilen, ABS















Giriş koruması: IP22.

Simge açıklamaları


Uyarı işaretleri ve simgeleri, bu ürünü güvenli ve doğru bir şekilde kullanmanızı sağlamak ve sizi ve başkalarını yaralanmalara karşı korumak için çok önemlidir.

Bu simgenin anlamı:

- uyarılar ve önlemler gibi önemli bilgileri belirtir (Şek. 26).
- elektrikli ürünlerin ve pillerin evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir (Şek. 27).

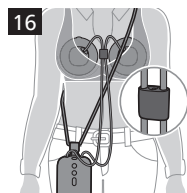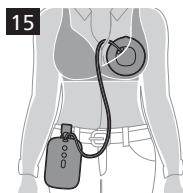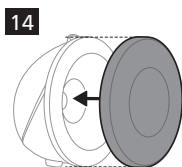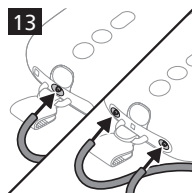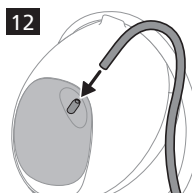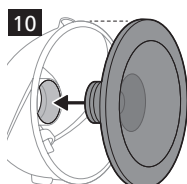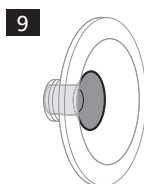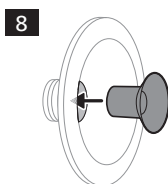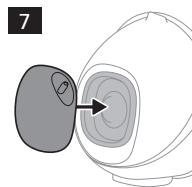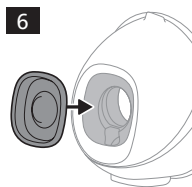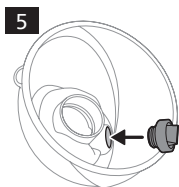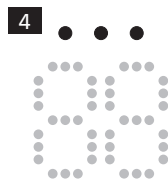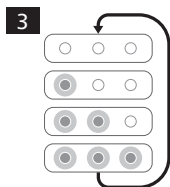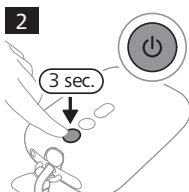

17

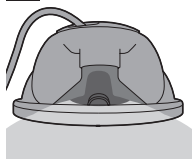


18



19




20

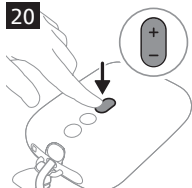


21




22

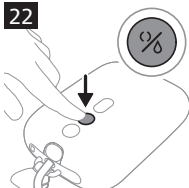

23

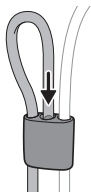

24

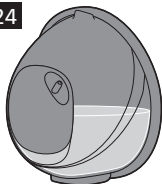

25



26



27





Philips Consumer Lifestyle B.V.

Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands / les Pays-Bas / Paesi Bassi

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. / Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. / I marchi commerciali e depositati sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V.

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved. / Tous droits réservés. / Tutti i diritti riservati.

3000.135.6521.3 (2025-10-16)

