


Upotreba inhalatora sa komorom za inhalaciju


Komore za inhalaciju djeluju s vašim inhalatorom kako bi lijek lakše stigao do vaših pluća. Korisni su ljudima svih dobi. Kornjača Nina uvijek upotrebljava komoru za inhalaciju sa svojim inhalatorom. Zamolite odraslu osobu da vam pomogne kod korištenja i čišćenja komore za inhalaciju.

Početak

- 1** Uklonite poklopac inhalatora i umetnite nastavak za usta u otvor na gumenom kraju komore za inhalaciju.

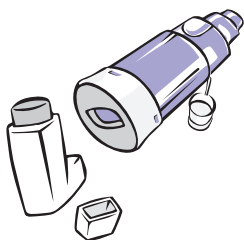

Ako upotrebljavate masku za lice
– čvrsto je postavite na nastavak za usta.

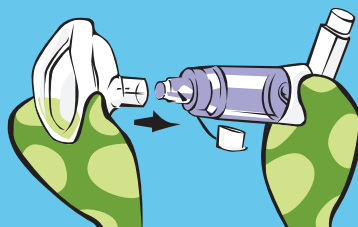

- 2** Protresite inhalator i komoru za inhalaciju četiri do pet puta.



- 3** Stavite komoru za inhalaciju u usta, čvrsto stisnite usnicama i izdahnite.



Uzimanje lijeka

- 4** Kako počinjete udisati kroz usta, pritisnite inhalator jedanput.

- 5** Nastavite udisati polako i što dublje možete.

- 6** Zadržite dah, brojite do 10, a zatim izdahnite.

- 7** Ako liječnik želi da raspršite još jedan oblačić, postupite po njegovim uputama.




Ako upotrebljavate masku za lice
– pritisnite je i držite preko usta i nosa. Raspršite jedan oblačić lijeka u komoru za inhalaciju te udahnite i izdahnite šest puta kroz usta.




Čišćenje komore za inhalaciju

- 1** Operite komoru za inhalaciju jednom tjedno.

- 2** Uklonite poklopac nastavka za usta.

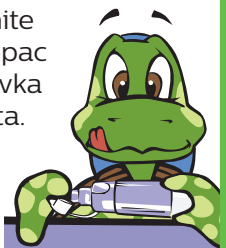

- 3** Okrenite nastavak za usta i podignite ga. Uklonite krajnji poklopac.

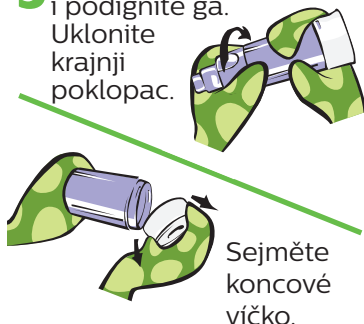

Sejměte koncové vičko.

- 4** Namočite te dijelove u toploj sapunastoј vodi kroz 10-ak minuta.



- 5** Isperite čistom vodom i pustite neka se osuše na zraku.

- 6** Dijelove ponovno spojite i čuvajte na sigurnom i suhom mjestu.

**Philips Healthcare dio je tvrtke
Royal Philips Electronics**

Obratite nam se

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Azija
+49 7031 463 2254

Europa, Bliski istok i Afrika
+49 7031 463 2254

Latinska Amerika
+55 11 2125 0744

Sjeverna Amerika
+1 425 487 7000
800 285 5585
(besplatan broj, samo u SAD-u)

Služba za korisnike
+1 724 387 4000
800 345 6443
(besplatan broj, samo u SAD-u)
Međunarodni ured tvrtke Philips
Respironics
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Azija i Pacifik
+65 6882 5282

Philips Home Healthcare Solutions
Australija
+61 (2) 9947 0440
1300 766 488
(besplatan broj, samo u Australiji)

Philips Respironics Kina
+86 021 24127311

Philips Respironics Njemačka
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Francuska
+33 2 51 89 36 00

Philips Respironics Italija
+39 039 203 1

Philips Respironics Švedska
+46 8 120 45 900

Philips Respironics Švicarska
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics Ujedinjeno
Kraljevstvo
+44 800 1300 845

Respironics New Jersey, Inc.
5 Wood Hollow Road
Parsippany, NJ 07054 SAD

www.philips.com/respironics

Respironics, Sami the Seal i Tucker the Turtle žigovi su tvrtke
Koninklijke Philips Electronics N.V. i njoj pridruženih tvrtki.
Sva prava pridržana.



Posjetite www.philips.com/asthma kako biste saznali više



© 2012. Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava pridržana.

Tvrtka Philips Healthcare pridržava pravo izmjene specifikacija i/ili prestanka proizvodnje proizvoda u bilo koje vrijeme, bez prethodne obavijesti ili obveze te neće biti odgovorna ni za kakve posljedice nastale upotrebom ovog dokumenta.

MCI 4104948 1101465 DD JUL 2012