

*“Si existe un problema se puede abordar de inmediato, en lugar de tener que esperar varias semanas para una cita”.*

David C., paciente en EncoreAnywhere

*“El acceso remoto a los datos a través de módem nos permite ser más eficientes y proporcionar terapias efectivas con más rapidez”*

Sara Parsons, fisióloga respiratoria  
Hospital St. George, Reino Unido



Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus respectivos propietarios.

© 2017 Koninklijke Philips N.V. Reservados todos los derechos. Philips Healthcare se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones o a interrumpir la fabricación de cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones, y no se considera responsable de las consecuencias derivadas del uso de esta publicación.

APR 8/25/17 PN655393

Información sobre el producto:  
[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)

**PHILIPS**  
**RESPIRONICS**

*EncoreAnywhere*

Conecte **con**  
**sus pacientes**

Un sistema de gestión de pacientes basado en una aplicación web tanto para pacientes en ventilación domiciliar o pacientes en terapia de SAHS.

## Introducción a EncoreAnywhere

Gestione de una forma remota y sencilla, las historias clínicas del paciente. Podrá generar informes, realizar cambios en la terapia y tener todos los datos centralizados de la terapia.

El modem inalámbrico envía a diario, los datos de la terapia que recoge el equipo de tratamiento. Esto proporciona una información diaria totalmente actualizada y permite intervenir en la terapia de forma proactiva y segura.

El modo inalámbrico del equipo tiene una conexión que permite transmitir y recibir datos de manera independiente

## Planifique el trabajo diario con 'Mi jornada'

La sección "Mi jornada" le permite priorizar automáticamente a los pacientes que requieren su atención médica.

En la sección " Mi Jornada" el clínico, puede definir parámetros para priorizar la atención de los pacientes.

Esto se logra definiendo cada variable de la terapia y sus límites, con ello se consigue segmentar a los pacientes que salgan de los límites prefijados y por lo tanto necesitan una intervención médica, rápida y remota.



EncoreAnywhere es compatible con:

### SUEÑO

DreamStation: CPAP, APAP, BiPAP, BiPAP AutoSV Advanced



### SUEÑO

System One REMstar : CPAP, APAP, BiPAP, BiPAP AutoSV Advanced



### VNI

Dreamstation, BiPAP S/T BiPAP AVAPS



### VNI

System One BiPAP S/T BiPAP AVAPS



### VNI

BiPAP A30, BiPAP A40



\*Equipos y conectividad sujetos a disponibilidad de acuerdo a su país.

## Una base de datos de bajo mantenimiento y alta seguridad

### Bajo mantenimiento

La tecnología basada en la web de EncoreAnywhere elimina la necesidad de espacio en el servidor hospitalario y de instalaciones locales.

Las actualizaciones son automáticas y transparentes al usuario, lo que evita cualquier tipo de inconveniente a los profesionales.

### Alta seguridad

La base de datos EncoreAnywhere está alojada en un centro de datos manejado por Philips en conjunto con un proveedor de servicios independiente, además, está sometido a auditorías y controles independientes. El centro de datos cumple plenamente las leyes de los países de América Latina sobre protección de datos, y aplica estrictas medidas de privacidad y seguridad.

La infraestructura funciona y se mantiene conforme a un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI).

## Opciones de EncoreAnywhere

Acceso e interacción a **todos los parámetros** de la terapia de sueño y ventilación.

- Acceso e interacción a parámetros de la terapia, especialmente diseñado para la gestión de la terapia de SAHS.
- Acceso ilimitado a la base de datos de EncoreAnywhere.
- Número ilimitado de informes clínicos.
- Número ilimitado de informes de actividad.
- Espacio ilimitado en el servidor
- Actualizaciones de software automáticas.
- Carga automática diaria de los datos de terapia.
- Cambios remotos de la prescripción.

Si desea más información, consulte a su representante de Philips Respironics.



### Seguridad en la toma de decisiones

EncoreAnywhere permite acceder a los datos de terapia a los usuarios autorizados, y sólo a estos, desde cualquier lugar con conexión a Internet.

### Sueño

Respiración de Cheyne-Stokes  
Apnea Central  
Apnea Obstructiva  
Hipopnea

### Para el sueño y la VNI

- Detalles diarios.
- Patrones de uso.
- Tendencias a corto plazo.
- Tendencias a largo plazo.
- Cumplimiento y adherencia.
- Estadísticas de la terapia.
- Presión de soporte.
- Horas de uso.
- Presión.
- IAH.
- Respiraciones por minuto.
- Fugas.


### VNI

Volumen corriente  
Respiraciones espontáneas

### ¿Cómo se actualizan los datos de terapia a EncoreAnywhere?


#### Actualización automática de datos de terapia

El dispositivo carga automáticamente los datos de terapia cada día. Los cambios de la prescripción y los mensajes instantáneos\* se pueden enviar de forma remota al dispositivo.

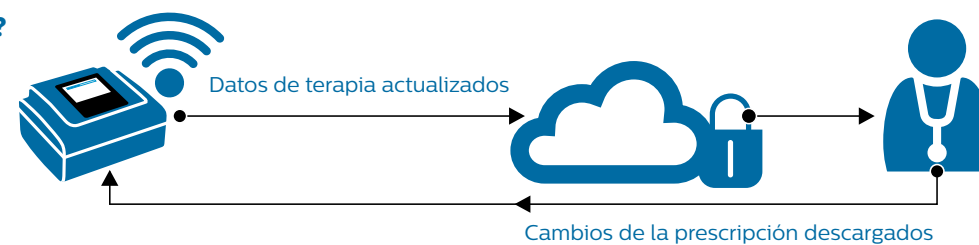

#### Actualización manual de los datos de terapia

Los datos de terapia almacenados en la tarjeta de datos del dispositivo se cargan manualmente a través del ordenador.

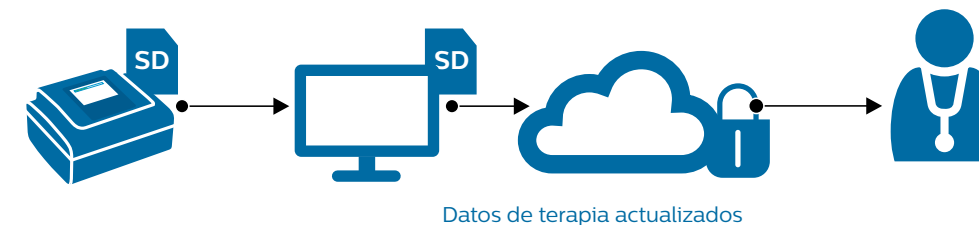

\* REMstar 60 Series y DreamStation

### Informes clínicos y de actividad

EncoreAnywhere ofrece informes personalizables para su uso y seguimiento por parte del personal clínico.

#### Información clínica

- Informe de uso del dispositivo y cumplimiento de la terapia.
- Configuración de la terapia del paciente e información del dispositivo.

#### Seguimiento

- Transmisión de información para el mantenimiento del equipo.
- Control del funcionamiento del equipo y del modem.

Los datos pueden exportarse fácilmente a Microsoft Excel y adaptarse para análisis más específicos.

