



Experiencia e innovación

ComfortGel Blue: la próxima generación de confort y tecnología que le ofrece todo lo que podía esperar y más.

Un nivel incluso más alto de confort para el paciente y una mejora de la experiencia global convierten a ComfortGel Blue en la mascarilla elegida por un número cada vez mayor de pacientes.

Fieles a nuestras mascarillas de gel azul, que han demostrado su eficacia con el paso del tiempo, hemos mantenido las características mundialmente reconocidas de confort y flexibilidad que espera de nosotros, a la vez que hemos mejorado incluso más el confort del paciente. Hemos incorporado una almohadilla de la frente aún mejor, diseñada

para ayudar a reducir los puntos de presión, y hemos desarrollado un orificio de exhalación de perfil más bajo con conector giratorio integrado, que dirige el flujo aéreo silenciosamente hacia arriba y lo aleja de la persona que duerme a su lado. También hemos adoptado una nueva formulación del gel. Todo ello pensando en mejorar la experiencia del paciente y también el cumplimiento. Además, el uso de ComfortGel Blue con el control de la resistencia System One de Philips Respironics proporcionará un tratamiento con PAP y un confort durante el tratamiento óptimos. ComfortGel Blue y nuestra gama completa de mascarillas llegan más lejos que nunca para ayudarle a lograr el ajuste del 100% de sus pacientes, el 100% de las veces.

PHILIPS

RESPIRONICS


sense and simplicity

Arnés de alta calidad de tamaño único con lengüetas de EZ Peel que se ajustan fácilmente en cuatro puntos para lograr un ajuste seguro y personalizado.

El Comfort Flap de silicona mejora el sello y se puede desmontar para facilitar la limpieza.

La almohadilla con tecnología de gel de nueva generación es blanda y se adapta a la cara del paciente para ofrecerle mayor confort.

Los acoplamientos del arnés con mecanismo de enganche esférico permiten un movimiento libre y una fácil retirada de la mascarilla.

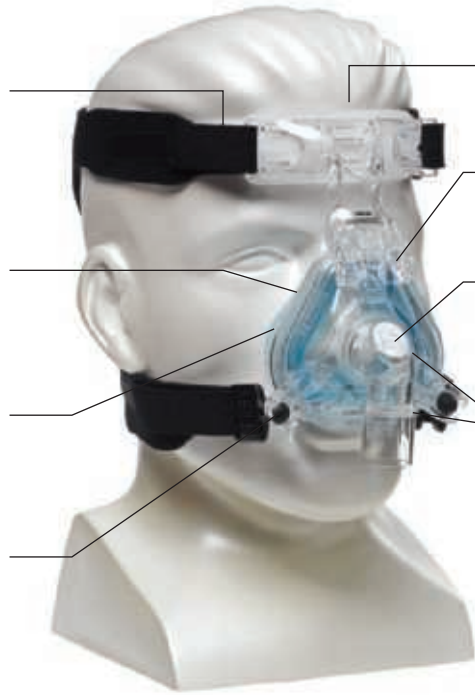


La almohadilla de la frente de alta calidad mejora el confort y el ajuste.

El StabilitySelector sube y baja para lograr el ángulo, sello y ajuste adecuados de la mascarilla.

Gracias a los microorificios de exhalación en ángulo, el funcionamiento es más silencioso y el aire se desvía de la persona que duerme junto al paciente.

Dos conectores giratorios de 360° permiten el libre movimiento del tubo.

El nombre del producto y el número de parte se incluyen en la placa facial para facilitar la identificación tanto a usted como a sus pacientes.

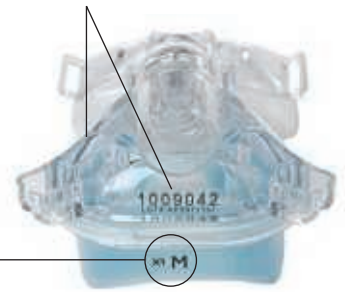

Los tamaños y los ajustes del control de la resistencia System One están impresos en la parte inferior de la almohadilla.

Información para pedidos				
Mascarilla ComfortGel Blue	Petite	Pequeño	Mediano	Grande
Mascarilla con arnés	1070067	1070066	1070065	1070064
Mascarilla con arnés, sin orificio de exhalación	1070071	1070070	1070069	1070068
DuoPack (incluye arnés y dos almohadillas del mismo tamaño)	1070075	1070074	1070073	1070072
FitPack: incluye arnés y almohadillas de tamaño pequeño y mediano	N/D		1070076	N/D
Almohadillas de repuesto	Petite	Pequeño	Mediano	Grande
Almohadilla y solapa ComfortGel Blue	1070108	1070107	1070106	1070105
Almohadilla ComfortGel Blue	1070104	1070103	1070102	1070101
Partes de repuesto				
Almohadilla de la frente de alta calidad			1040114	
Arnés de alta calidad			1033678	
Quick Clips con mecanismo de enganche esférico (2 por envase)			1009723	
Medidor de tamaño de ComfortGel Blue			1012040	

Respironics, ComfortGel, Comfort Flap, DuoPack, FitPack, Quick Clip, StabilitySelector y System One son marcas registradas de Respironics, Inc. y empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Visite www.philips.com/comfortgelblue



© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V. Reservados todos los derechos.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

MCI 4103556 PN448912

Philips Healthcare forma parte de Royal Philips Electronics

Philips Respironics Asia Pacifico
+65 6882 5282

Philips Respironics Sede Internacional
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Atención al cliente
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)
www.philips.com/respironics