

**PHILIPS**  
RESPIRONICS

InnoSpire Mini

# Disfrute de las cosas que de verdad importan

El nebulizador con compresor InnoSpire Mini permite al paciente, cuando y donde desee, nebulizar con total eficacia y comodidad.

InnoSpire Mini forma parte de la familia InnoSpire, que permite administrar fármacos a pacientes con la máxima fiabilidad.

Gracias a su tamaño compacto puede transportarse fácilmente y resulta en un compañero de viaje ideal. Además, al tratarse de un nebulizador reutilizable activado por inhalación su manejo es fácil.

#### **Nebulizador de tecnología probada**

InnoSpire Mini, junto con el dispositivo de mano reutilizable SideStream Plus, permite aplicar una aerosolterapia altamente eficaz con gran rapidez.

#### **Características principales**

- Se acopla a SideStream Plus.
- Compacto y ligero.
- Funciona con batería (opcional).
- Hasta 90 minutos de autonomía cuando funciona con batería.
- Múltiples opciones de carga.





## Administración fiable de aerosol

**SideStream Plus dispone de un sistema Venturi para proporcionar mayor flujo de aire, lo que agiliza la administración del fármaco y reduce los tiempos de tratamiento.**

Además, gracias a su diseño exclusivo con salida de aire tipo Diamond, minimiza el desgaste por uso frecuente y favorece la administración constante de aerosol de alta calidad.

# Su vida, su elección

InnoSpire Mini puede funcionar con la toma de pared normal o, de modo opcional, con una batería recargable de ion-litio que da al compresor una independencia de hasta 90 minutos. En sus desplazamientos en coche, también podrá utilizar InnoSpire Mini con un adaptador de 12 V CC. Lo que permite a los pacientes tratarse prácticamente en cualquier momento y lugar, según les resulte más cómodo.

Asimismo, el versátil InnoSpire Mini cumple con las normativas medioambientales de la FAA (Administración Federal de Aviación de los EE. UU.)\*\*\* relativas a equipos aerotransportados.

### SideStream Plus


Equipado con una válvula de baja resistencia para administrar tratamientos rápidos con menos residuos.

### La válvula se abre

La presión necesaria para abrir la válvula de inspiración es considerablemente inferior, una característica esencial para los pacientes con respiración débil.

### Filtro

Nuestro accesorio opcional de filtro ayuda a reducir la emisión innecesaria de medicamentos al aire ambiente, especialmente cuando se nebulizan antibióticos.

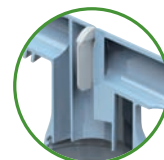

### Información sobre pedidos

### Nº de ref.

InnoSpire Mini sin batería – Enchufe UE** (con guía del usuario†)	1109291
InnoSpire Mini con batería – Enchufe UE** (con guía del usuario†)	1109292
InnoSpire Mini con batería – Enchufe UE** (con guía del usuario††)	1109438
InnoSpire Mini con batería – Enchufe UE** (con guía del usuario††)	1109294
InnoSpire Mini con batería – Enchufe para Reino Unido** (con guía del usuario††)	1111453

### Accesorios/piezas de repuesto

### Nº de ref.

Paquete de filtros de aire de repuesto para InnoSpire Mini	1109488
SideStream Plus con kit de pieza bucal reutilizable	1092001

### Datos de rendimiento

MMAD	4,77 µm
Fración respirable	51,44%
Tiempo de tratamiento (carga de 2,5 mL)	6,88 min

### Especificaciones técnicas

Presión máx. compresor	207 kPa (30 psi)
Velocidad media de flujo	3,4 lpm a 12,7 psi
Peso	Compresor: 420 g Batería: 172 g
Nivel de ruido	50 ± 4 dBA
Temperatura de funcionamiento	Entre 5 y 40 °C
Humedad en funcionamiento	Entre 10% y 95% de HR

\* Se puede cargar completamente en unas 6 horas.

\*\* Incluye batería recargable (excepto PN 1109291), adaptador para coche de 12 V CC, adaptador de CA, maletín de transporte y (4) filtros de repuesto.

\*\*\* Normas DO-160G sobre equipos aerotransportados y norma internacional para la seguridad básica y el funcionamiento esencial IEC 60601-1, tercera edición.

† Idiomas: EN, BG, CZ, EL, ES, HR, ID, IT, HU, PT, RO, SK, SL, SR, TR y KO.

† † Idiomas: EN, AR, DA, DE, EE, FI, FR, IL, KZ, LT, LV, NL, NO, PL, RU, SV y TH.

