



Un tamaño eficaz y cómodo

Cámara de inhalación con válvula ProChamber de Philips Respironics

Sencilla y compacta

Gracias a su tamaño (145 ml), la cámara ProChamber es cómoda de llevar y fácil de guardar. Su sencillo diseño, que no requiere montaje, hace que sea también fácil de usar.

Mascarilla desmontable

Nuestra mascarilla de silicona flexible se adapta fácilmente a la boquilla de la ProChamber y se puede retirar de forma sencilla cuando ya no es necesaria. Esto permite a los usuarios empezar a utilizar solo la boquilla mucho antes, para una administración óptima de la medicación.

Adaptador universal para MDI

Se adapta a cualquiera de los MDI más utilizados.

Características principales

- Tamaño compacto
- No requiere montaje
- Adaptador universal de MDI
- Mascarillas de silicona opcionales

PHILIPS

RESPIRONICS


sense and simplicity

Mejora la administración de la medicación inhalada

Las prestaciones clínicamente probadas de la ProChamber contribuyen a mejorar la administración de la medicación del inhalador a los pulmones en comparación con el uso de un MDI solo.

ProChamber es igual de eficaz que AeroChamber Plus a la hora de administrar un mayor porcentaje de partículas de fármaco dentro del rango respirable, y es significativamente más eficaz que un MDI solo*.

Fracción de partículas finas de Ventolin 90 µg/dosis**

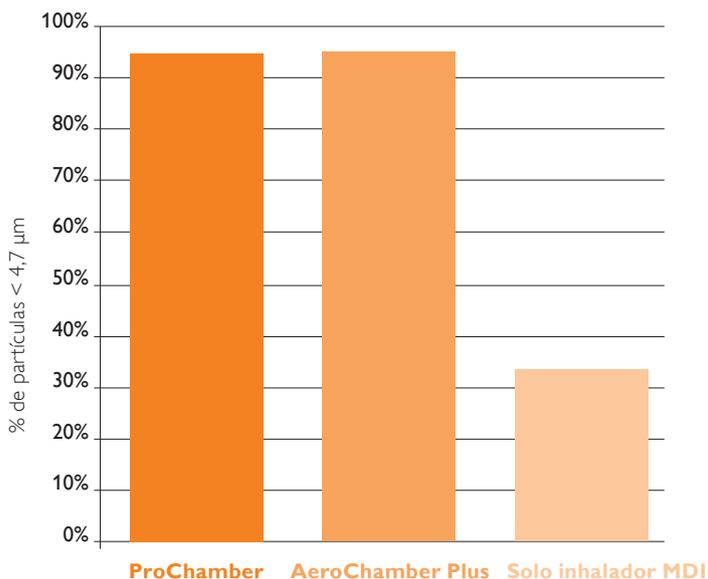

* ProChamber es igual de eficaz que AeroChamber Plus™ a la hora de administrar un porcentaje más elevado de partículas de fármaco < 4,7µm. ProChamber es significativamente más eficaz que un inhalador MDI solo.

** Datos de origen archivados en Respironics New Jersey, Inc.

Transparente

Permite al cuidador ver la inhalación y llevar un recuento de las respiraciones del usuario.

Información sobre vida útil

Recomendamos la sustitución al cabo de un año.

Limpieza

Una vez por semana, sumergir en agua tibia y jabonosa, aclarar y secar al aire.

Mascarillas desmontables

No contienen látex; disponibles en 3 tamaños.



Información para pedidos		
Descripción del producto	Cantidad	N° de referencia
ProChamber (no contiene látex)	10 por envase	1040191
Mascarillas		
	Cantidad	N° de parte
Mascarilla pediátrica de silicona pequeña	1	HS81110EU-001
Mascarilla pediátrica de silicona mediana	1	HS81210EU-001
Mascarilla de silicona grande	1	HS81310EU-001
Especificaciones del producto		
Dimensiones		
Longitud	14,6 cm	
Diámetro	5 cm	
Volumen	145 ml	
Boquilla	DE estándar de 22 mm	
Materiales		
Cuerpo principal	Copolíéster	
Válvula	Silicona	

Respironics y ProChamber son marcas comerciales de Respironics, Inc. Todos los derechos reservados. AeroChamber Plus™ es una marca comercial de Monaghan Medical Corporation, Plattsburgh, NY. Ventolin® es una marca registrada de GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC.

Visítenos en www.philips.com/respironics



© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V. Reservados todos los derechos.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

MCI 4104676 PN448922

Philips Healthcare forma parte de Royal Philips Electronics

Philips Respironics Sede Internacional
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Asia Pacífico
+65 6882 5282

Respironics New Jersey, Inc.
5 Wood Hollow Road
Parsippany, NJ 07054 USA

Atención al cliente
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)
www.philips.com/respironics