

Philips DreamStation Go Rese-CPAP

Samma PAP-prestanda på resan

Lättanvänd

Väger mindre än ett kilo

12 mm mikro-flexibel slang

HH1510



Rese-CPAP-maskinen

Vår smidiga design har 1/3 färre komponenter att packa än andra rese-PAP* och DreamStation Go erbjuder samma behandlings- och komfortfunktioner som uppskattas av över 5 miljoner PAP-användare.

Philips minsta PAP-enhet

- Kompakt format
- Inbyggd USB-laddningsport
- Snabb, enkel installation och enkel navigering

Uppfyller kraven enligt FAA*

- För flygresor*

Philips lättaste PAP väger mindre än ett kilo

- Övernattningsbatteri (säljs separat)

Philips minsta och lättaste slang**

- Mikro-flexibel slang

Lagra data för dina läkare och kliniker

- Bluetooth är standard på alla enheter
- MicroSD-kort säljs separat.

PHILIPS

Rese-CPAP

Samma PAP-prestanda på resan Lättanvänd, Väger mindre än ett kilo, 12 mm mikro-flexibel slang


Funktioner

Inbyggd strömförsörjning



Inbyggd strömförsörjning minskar antalet delar att bära. Med måtten 15 cm L x 15 cm B x 5,8 cm H får den enkelt plats även i en liten väska, lätt och diskret. Du kan ta med den överallt. En påse för masken och slangen medföljer.

Inbyggd USB-laddningsport

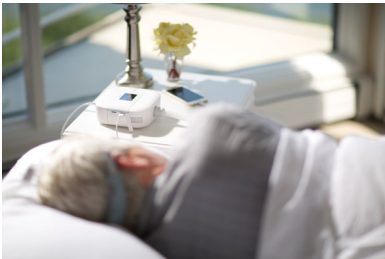

Möjliggör enkel laddning av mobiltelefoner och andra enheter och gör att uttag finns lediga för lampor, väckarklockor osv. Praktiskt på resan.

Uppfyller kraven enligt FAA



Det finns en kommentar längst ned på enheten som anger att den klassas som medicinsk utrustning och kan användas på flygplan. Detta kan vara praktiskt vid säkerhetskontrollen på flygplatsen. Enheten är lämplig för användning på flygplan när den drivs med nätström eller batterier. Kontakta flygbolaget före avgång för information om vilka strömkällor som är tillgängliga under flygresan. Enheten

kompenserar automatiskt för höjder upp till 2 286 meter. Inga manuella justeringar krävs.

Intuitiv färgpekskärm



Justera inställningarna för enheten och visa information om behandling med DreamStation Gos färgrika och intuitiva pekskärm. Dra nytta av MyStart-funktionen som du kan använda för att ställa in det starttryck för automatisk CPAP-behandling som känns bekvämast för dig. Om standardinställningen för lufttryck känns för hög eller för låg när du försöker somna kan du enkelt justera MyStart-tryckinställningen uppåt eller nedåt, vilket gör att du kan somna på ett bekvämare sätt.

Mikro-flexibel slang



Den nya 12 mm mikro-flexibla slangen medföljer DreamStation Go. Det är den minsta och lättaste slang som Philips någonsin kunnat erbjuda. Den är enklare att packa ned, mer flexibel och ger dig större rörelsefrihet när du sover. Den har snabba och enkla klickanslutningar på vardera änden av slangen. Slangen har också en smidig anslutning till DreamWear-masken och inkluderar en 22 mm ISO-adaptör för andra maskor.

HH1510/00

Övernattningsbatteri



Om du planerar att resa utan tillgång till el kan övernattningsbatteriet till DreamStation Go hjälpa dig att fortsätta med behandlingen utan avbrott. DreamStation Go inställd på 10 cm tryck har visat en genomsnittlig drifttid på 13 timmar*** när den drivs med Dreamstation Go övernattningsbatteriet. Batteriets drifttid kan variera på grund av högre CPAP-tryckinställningar, stort maskläckage, höjd över havet, temperatur, laddning av enheter med USB-porten och andra faktorer.

Bluetooth



Ger möjlighet att spåra och övervaka dina kombinerade framsteg med både bärbara PAP-enheter och PAP-enheter för hemmabruk.

MicroSD-kort säljs separat.



Kan lagra data som är viktiga för dina läkare och kliniker.

Specifikationer

Service

- Garanti: 2 år

Teknisk information

- Tryckintervall: 4 till 20 cm H₂O
- Trycklägen: CPAP, APAP
- Flex-trycklindring: 1 till 3
- Flex-lägen: C-Flex, C-Flex+, A-Flex
- Rampningstid: 0 till 45 min. (5 min. steg)
- Startrampningsstryck: Justerbar efter patienten,

smart rampning

- Mått: 15 cm L x 15 cm B x 5,8 cm H
- Vikt: 844 g (1,86 lb)
- Filter: Återanvändbart, pollen
- Enhetskonfiguration: Färgpekskärm
- Datalagringskapacitet: MicroSD-kort (tillval), I enheten: > 1 år
- Överensstämmelsemätare: Andningsdetektering
- Höjdhöjningskompensation: Automatisk
- Elektriska krav: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2018-04-26

Version: 2.2.1

12 NC: 000N DG5 02S15
UPC: 6 06959 04844 7

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Vid jämförelse med HDM Z1- och Somnetics Transcend-enheter (2016).

** Jämfört med Philips 22 mm prestandaslang.

*** PAP-testvillkor: CPAP-läge, tryck 10 cm H₂O, 12 mm slang, 37 LPM läckage, 23 °C rumstemperatur vid 503 m ö h.