

Philips OptiChamber  
Diamond  
Holdekammer med  
ventiler og avstandsstykke

Kompakt design 140 ml volum

For astmamedisin med inhalator  
For barn og voksne  
Valgfritt masketilbehør



HH1305

## Hjelper deg med å ta kontroll

Utformet for å forbedre medisinlevering

OptiChamber Diamond er utformet for å bidra til at medisin leveres til lungene. Det antistatiske materialet inni slangen gjør at aerosolen suspenderes lengre, noe som gir deg mer tid til å inhalere den.(1, 2)

### Effektiv behandling

- Få medisinen til lungene\*\*

### Utformet for ytelse

- Spesielle funksjoner gjør det enkelt å bruke og vedlikeholde
- Ventiler med lav motstand lar deg puste lett
- Antistatisk holdekammer med ventiler gir deg mer tid

### For vanlige medisiner

- For vanlige medisiner

### Komfort

- Den valgfrie masken tilpasser seg ansiktskonturene, slik at den passer bedre
- Munnstykke med én størrelse for alle

# PHILIPS

## Høydepunkter


### Få medisinen til lungene



OptiChamber Diamond er utformet for å forbedre aerosolleveringen til lungene, og det kan hjelpe deg med å maksimere effektiviteten til inhalerte behandlinger.

### Lettere pusting

Low resistance valves

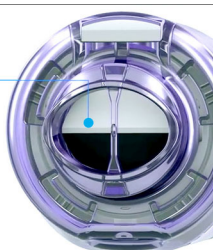

Ventiler med lav motstand åpner fritt, selv ved lav gjennomstrømming fra barn, slik at du eller barnet kan puste lett gjennom kammeret.\*

### Tid til å puste




Anti-static chamber

OptiChamber Diamond er utformet for å bidra til at medisin leveres til lungene. Det

antistatiske materialet inni slangen gjør at aerosolen suspenderes lengre, noe som gir deg mer tid til å inhalere den.\*1

### Enkel å bruke, enkelt vedlikehold

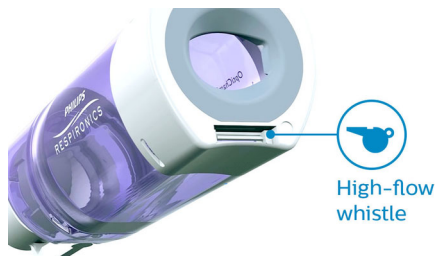

High-flow whistle

Adapteren holder inhalatoren ordentlig på plass, mens den innebygde fløyten gir deg beskjed hvis du puster inn for fort. Både munnstykket og adapteren kan enkelt fjernes før rengjøring.

### For voksne og barn



OptiChamber Diamond har et gradert munnstykke og kan brukes av både barn og voksne.

### Kompatibel



OptiChamber Diamond er utviklet for bruk med alle vanlige reseptbelagte legemidler.

### Komfort



Den avtakbare LiteTouch-ansiktsmasken har en myk pute med konturer som passer enkelt og hviler forsiktig på ansiktet for å gi mer behagelig behandling. SoftTouch-forseglingen bidrar til å redusere lekkasje.\*\*

# Spesifikasjoner

## Vedlikehold

- Rengjøring: Varmt vann og flytende såpe
- Levetidsdata: Skift ut etter ett år

## Produktdetaljer

- Lengde: 14,2 cm (5,6")

- Munnstykke: Grensesnitt med w 22 mm kontakter
- Volum: 140 ml

## Materiale

- Kammer: Akrylonitril-butadien-styren
- LiteTouch-maske: Polyester, silikon
- Ventiler: Silikon



Utgivelsesdato  
2018-08-01

Versjon: 10.1.2

12 NC: 0000 010 79820  
UPC: 3 83735 79820 7

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Slator L., von Hollen D., Sandell D., Hatley R.H.M. In vitro comparison of the Effect of Inhalation Delay and flow rate on the emitted dose from three valved holding chambers. *Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery*, 2014, 27(S1): 37-43.

\* (1) Berlinski A., von Hollen D., Hatley R.H.M., Hardaker L.E.A., Nikander K. Drug delivery in asthmatic children following coordinated and uncoordinated inhalation maneuvers: a randomized crossover trial. *Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery*, 2017, 30(3): 182-189.

\* \*\* Hatley R.H.M., von Hollen D., Sandell D., Slator L. In-vitro Characterization of the OptiChamber Diamond valved holding chamber. *Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery*, 2014, 27(S1): 24-36.

\* \*\*\* Tong, K. et al. An instrumented Valved Holding Chamber with facemask to measure application forces and flow in young asthmatic children. *Journal of Aerosol Med and Pulm Drug Del.* 2014; 27 (Suppl 1): S55-62.