



Philips InnoSpire Essence
Компрессорный
ингалятор

Компактный прибор для
применения дома

Быстрота и эффективность
В комплекте с SideStream
Disposable

НН1338

Надежная небулайзерная терапия

Подходит для последовательного лечения

При использовании InnoSpire Essence ингаляция отличается быстротой, эффективностью и надежностью для применения в домашних условиях.

Проверенная технология SideStream

- Проверенная ингаляционная технология
- Прочность в сочетании с надежностью

Быстрота процесса

- Время процедуры: 6–8 минут*

Для использования в домашних условиях

- Предназначена для непрерывного использования
- Совместимость с самыми назначаемыми ингаляционными препаратами

PHILIPS

Компрессорный ингалятор

Компактный прибор для применения дома Быстрота и эффективность, В комплекте с SideStream Disposable

Особенности

Для домашнего применения




Система InnoSpire Essence, предназначенная для непрерывного использования в домашних условиях, обеспечивает стабильное и надежное выполнение ингаляции высокого качества.

Стильное и мощное устройство



Система InnoSpire Essence подходит для частого использования в условиях вашего образа жизни. Вы можете быть уверены — она будет обеспечивать высокое качество распыления аэрозольного препарата в течение всего срока ее службы.

Проверенная ингаляционная технология

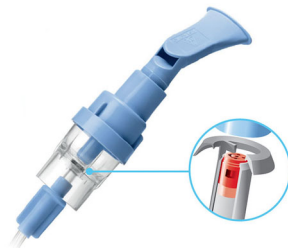

Сокращение времени процедуры: ингалятор SideStream специально разработан для максимального сокращения времени ингаляции. При прохождении воздуха в трубке InnoSpire Essence дополнительный поток воздуха поступает в верхнюю часть устройства для создания быстро движущегося потока аэрозольного препарата с возможностью оптимального вдоха. Ингаляция займет всего лишь 6 минут*. Стабильное выполнение ингаляции высокого качества: ингалятор SideStream предназначен для частого многократного использования; он также позволяет эффективно распылять прописанный препарат в течение всего срока его службы.

Универсальность



Возможность распыления большого числа препаратов, обычно используемых в сочетании с ингаляторами для лечения различных заболеваний органов дыхания.

Время процедуры

Использование системы InnoSpire Essence в сочетании с ингалятором SideStream обеспечивает быстрое введение лекарственных средств и сокращение времени процедуры.

HN1338/00

Характеристики

Обслуживание

- Гарантия: 3 года

Дизайн

- Компактный: Весит всего 1,5 кг

Содержимое упаковки

- Включает: Ингалятор SideStream Disposable, Компрессор InnoSpire Essence

Рабочие параметры

- Электрические параметры/мощность: 230 В / 50 Гц, 1 А
- Максимальная скорость потока: 8 л/мин
- Максимальное давление: 45 фунтов/кв. дюйм
- Режим работы: Непрерывный (30 мин. — вкл./выкл.)
- Скорость потока при эксплуатации: 6 л/мин при 10 фунт/кв. дюйм изб.

Сведения о продукте

- Вес: 1,5 кг
- Размер: 165 x 165 x 108 мм
- Уровень шума: 58 ±3 дБА
- Время процедуры (6–8 минут)*: * При 2,5 мл сальбутамола

Рабочие характеристики

- ММАД: 2,9 мкм
- Фракция мелкодисперсных частиц: 77% ниже 5 мкм
- Емкость ингалятора: 8 мл



Дата выпуска 2018-07-25

Версия: 3.0.1

12 NC: 8670 001 46077
EAN: 03 83730 26225 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* При использовании 2,5 мл сальбутамола