


Philips  
Opvarmet befugter

inklusive et vandkammer

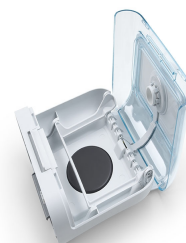

HH1414

# Giver god komfort

## Vidensdrevet innovation

Denne monterbare befugter tilfører luften fugt for at give komfort mens du sover, og er nem at bruge og håndtere. En opvarmet slange kan tilføjes for at holde på varmen i behandlingen, mens den løber gennem slangen til masken

### **Komfort gennem optimering af fugtighedsniveauer**

- Adaptiv tilstand

### **Dry Box-teknologi**

- For at reducere risikoen for vandskader

### **Brugervenligt design**

- Designet til at gøre den nem at bruge i det daglige

# PHILIPS

Opvarmet befugter  
inklusive et vandkammer

# Specifikationer

## Service

- Garanti: 2 år

## Kompatibilitet

- Slangemuligheder: 22 eller 15 mm

## Mål

- Bredde: 14,61 cm

- Højde: 17,78 cm
- Dybde: 8,26 cm


## Design

- Aftagelig befugter: Kan skilles ad ved transport
- Befugter og vandkammer: Forbedret komfort
- Forenklet design: Nem adgang til vandkammer
- Topmonteret slangetilkobling: Roterbar i 180 grader for at give bevægelsesfrihed

HH1414/00

# Vigtigste nyheder

## Dry Box-teknologi

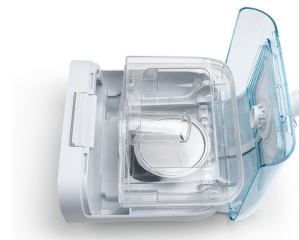

Isolerer vand fra enheden: i det tilfælde, at der trænger vand ud af vandkammeret, er Dry Box designet til at fange vandet inden for enhedens vægge for at forhindre, at vandet bevæger sig gennem enheden og befugterforbindelsen.

## Optimering af befugtning



Kan indstilles til standard fast opvarmning - for at opretholde et opvarmningsniveau gennem hele natten - eller i adaptiv tilstand for at lade enheden overvåge den omgivende temperatur, fugtighed og flow til patienten, så den kan justere opvarmningsniveauet efter behov.

## Enkel befugter



Topmonteret drejelig slangetilslutning, der roterer 180° for at give bevægelsesfrihed. Kompatibel med 22 eller 15 mm slange eller 15 mm opvarmet slange. Nem adgang til vandkammeret i ét stykke til påfyldning og rengøring. Kan forvarme



Udgivelsesdato  
2018-02-05

Version: 2.0.2

12 NC: 8670 001 40772  
UPC: 6 06959 02722 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)