




Philips  
Uppvärm� luftfuktare

inklusive en vattenkammare

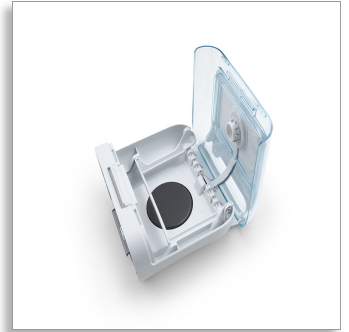

HH1414

# Gör det bekvämare för dig

## Genomtänkt innovation

Denna monterbara luftfuktare som är lätt att använda och hantera avger fukt medan du sover. En uppvärmd slang kan anslutas för att bibehålla värmen av behandlingsluften medan luften färdas genom slangen till masken

### **Komfort genom optimering av luftfuktighetsnivåer**

- Anpassningsläge

### **Dry Box-teknik**

- Minskar risken för vattenskador

### **Användarvänlig design**

- Utformad för att göra daglig användning enkel

# PHILIPS

Uppvärmd luftfuktare  
inklusive en vattenkammare

## Specifikationer

### Service

- Garanti: 2 år

### Kompatibilitet

- Slangalternativ: 22 eller 15 mm

### Mått

- Bredd: 14,61 cm
- Höjd: 17,78 cm
- Djup: 8,26 cm

### Design

- Löstagbar luftfuktare: Går att ta isär vid resa
- Luftfuktare och vattenkammare: Förbättrad komfort
- Förenklad design: Enkel åtkomst till vattenkammaren
- Toppmonterat slangutlopp: Kan roteras i 180° för fri rörlighet

HH1414/00

## Funktioner

### Dry Box-teknik



Isolerar vatten från enheten: om vatten skulle läcka från vattenkammaren är Dry Box utformad för att fånga upp vattnet innanför enhetens väggar och förhindra att vatten tar sig igenom enheten och luftfuktaranslutningen.

### Luftfuktningsoptimering



Kan ställas in på fast värme som standard – för att bibehålla en och samma uppvärmningsnivå hela natten – eller på anpassningsläge, så att enheten kan övervaka omgivningens temperatur, luftfuktigheten och patientflödet och ställa in uppvärmningsnivån efter behov.

### Enkel luftfuktare



Toppmonterad vridbar slanganslutning som kan roteras 180° för att ge rörelsefrihet. Kompatibel med 22 millimeters eller 15 millimeters eller 15 millimeters uppvärmd slang. Enkel åtkomst till vattenkammaren i en del för påfyllning och rengöring. Kapacitet för förvärmning



Publiceringsdatum  
2017-03-29

Version: 2.0.2

12 NC: 8670 001 40772  
UPC: 6 06959 02722 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)