

Philips Wisp  
Näsmask för barn med  
minimal kontakt

### Förpackning

Huvudband i barnstorlek  
och 3 kuddar

HH1038



## Unik design för unika patientbehov

En mask utformad för barn – från formen på ramen till kuddens form. Barn kan bekvämt bära masken under normala dagliga aktiviteter.

#### Design

- Ändrad form på kudden för att den ska passa ett barns ansikte och näsa
- För enklare maskjustering

#### Prestanda och komfort

- Mask särskilt utformad för barn

#### Barnvänligt mönster

- Roliga, barnvänliga mönster och mjuka tygmaterial

#### Fri sikt

- Läs, titta på TV eller bär glasögon

**PHILIPS**


## Funktioner

### Tyg med giraffmönster



Det lekfulla temat underlättar för barn att komma igång med behandlingen, och få dem att känna sig mer bekväma med masken.

### Större frihet

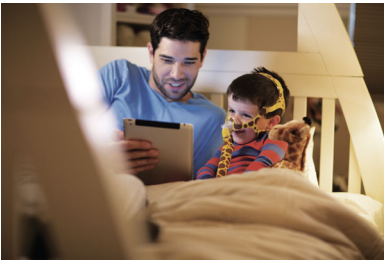

Den smidiga designen på Wisp eliminerar behovet av vaddering i pannan, vilket gör att barn bekvämt kan bära masken under normala dagliga aktiviteter.

### Innovativ Läckagekorrigerering



Läckagekorrigeringsspaken gör det möjligt att justera masken utan att ta bort den eller väcka barnet.

### Minimal kontakt, maximal komfort



Kudden, ramen och huvudbandet är utformade för att passa storleken och benstrukturen hos barnpatienter.

### Mjuk och bekväm



Alla tre kuddstorlekarna passar i samma ram

## Specifikationer

### Service

- Garanti: 90 dagar

### Design

- Kompakt: Prestanda och komfort

### Specifikationer

- Ljudtrycksnivå: 22,1 dBA
- Antal delar: Fem
- Kudd, material: Silikon
- Huvudbandsmaterial: UBL/polyuretanskum/nylon/spandex
- Slangmaterial: Termoplastisk polyesterelastomer
- Ram-material: Nylon/Spandex/polyuretan/skum/polyester/akryl
- Rengöringsinstruktioner: mask: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, Skölj noga och låt lufttorka
- Rengöring: huvudband och slang: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, skölj noggrant, häng upp för att torka
- Knärör/svivel, material:: Formlöst nylon
- Drifttryck: 4–20 cmH<sub>2</sub>O
- Snabbfästen/clips för huvudband, material: Formlöst nylon
- Slangens överdrag: Nylon/spandex

### Avsedd användning

- Patienter över 5 kg med ordination för CPAP, bi-level-behandling eller icke-invasiv ventilationsbehandling



Publiceringsdatum  
2017-03-22

Version: 2.0.1

12 NC: 0000 011 04961  
UPC: 6 06959 02673 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)