



Philips InnoSpire Mini  
Transportabel kompressor  
Forstøversystem

Utformet for periodisk bruk

Behandling i 6–8 minutter\*  
Oppladbart batteri  
SideStream Plus følger med



HH1302

## Et ideelt reisefølge

Kompakt og lett

InnoSpire Mini, en bærbar forstøver, lar deg forstøve medisinen din når og hvor du ønsker. Den er et ideelt reisefølge, og den kompakte størrelsen gjør deg fri til å få mest mulig ut av livet ditt.

### Bærbar

- Konsekvent terapi du kan stole på
- Kompakt og lett

### Flere strømalternativer

- Leveres med oppladbart batteri

### Utprøvd forstøverteknologi

- Omfatter SideStream Plus gjenbrukbar forstøver
- Behandling levert på 6–8 minutter\*
- Kompatibel med vanlige reseptbelagte forstøvermedisiner

**PHILIPS**

## Høydepunkter

### Allsidighet



I stand til å forstøve en rekke medisiner som jevnlig blir brukt med forstøvere til å behandle ulike respirasjonssykdommer.

### Periodisk bruk




Utformet for periodisk bruk (30 minutter på / 30 minutter av) og passer for hjemmet og reise. Philips InnoSpire Mini gir konsekvent levering av medikamenter for aerosolbehandling av høy kvalitet som du kan stole på.

### Flere strømalternativer



InnoSpire Mini kan få strøm fra en tradisjonelle stikkontakt eller et oppladbart litiumionbatteri som kan kjøre kompressoren i opptil 90 minutter mellom hver lading. InnoSpire Mini kan også drives av en 12 V DC biladapter når du er på farten.

### Bærbar

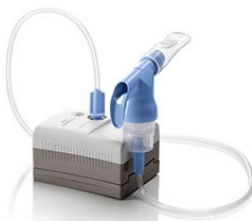

InnoSpire Mini-kompressor for forstøversystem gir pasienter muligheten til å effektivt forstøve de vanligste reseptbelagte aerosolmedikamentene. Siden du kan ta den med deg, er det mulig for deg og få behandlingen din nesten når som helst og hvor som helst.

### Utprøvd forstøverteknologi



SideStream Plus er utviklet for å trekke inn mer luft via et aktivt venturi-system, noe som igjen kan føre til rask levering av legemidler og kort behandlingstid. Den unike Diamond Jet-designen bidrar til å minimere slitasje fra hyppig bruk og bidrar til levering av en aerosol av høy kvalitet.

### Behandlingstid



InnoSpire Mini kombinert med SideStream-forstøveren er utformet for å gi rask levering av legemidler og kort behandlingstid.

## Spesifikasjoner

### Driftsparametere

- Maksimal strømningshastighet: 8 l/min
- Maksimalt trykk: 30 psi
- Driftsmodus: Periodisk (30 min av/på)

### Innhold i pakke

- Inkluderer: Brukerhåndbok, InnoSpire Mini kompressor

### Ytelsesdata

- MMAD: 4,77 µm
- Finpartikkelfraksjon: 51,44 % under 5 µm
- Batteriladetid: Omtrent 6 timer
- Antall behandlinger per lading: Opptil 12 behandlinger\*
- Driftstid med batteri: Opptil 90 minutter

### Produktdetaljer

- Garanti: Batteri: 6 måneder, Kompressor: 3 år
- Støynivå: 58 ± 4 dBa

### Erstatning

- SideStream Plus: Hver 6. måned



Utgivelsesdato  
2018-07-26

Versjon: 3.1.3

12 NC: 0000 011 09438  
UPC: 3 83730 09438 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Ved bruk av en dose Salbutamol på 2,5 ml