



Philips Amara View
Masque naso-buccal
Amara View

Pack

avec coussin de taille moyenne



HH1232

Vue dégagée

Offrant un champ de vision dégagé, le masque naso-buccal Amara View est équipé d'un coussinet innovant situé sous le nez, permettant d'éviter les marques rouges, irritations et sensations de gêne au niveau de l'arête nasale.

Champ visuel ouvert

- Champ de vision plus large que celui offert par les autres masques du marché

Conception innovante

- Coussin positionné sous le nez
- Design flexible à 4 éléments
- Harnais avec sangle de tête

Masque léger et compact

- Le masque naso-buccal le plus compact* et le plus léger** du marché

PHILIPS

Points forts

Masque léger et compact



Plus compact et plus léger que les masques naso-buccaux classiques, le masque Amara View couvre moins le visage du patient. Il est en effet dépourvu d'armature ou de coussin volumineux susceptible d'obstruer le champ de vision.

Design flexible à 4 éléments



Design flexible pour un assemblage et un nettoyage rapides, avec coussins interchangeables disponibles en trois tailles. Une armature modulable qui s'adapte à toutes les tailles de coussin. Tube de libération rapide pour une déconnexion simplifiée.

Harnais avec sangle de tête




Harnais avec sangles en tissu doux et confortable. La sangle de tête permet un ajustement simple et rapide.

Coussin positionné sous le nez



Conçu pour éviter les marques rouges et les irritations au niveau de l'arrête nasale dont souffrent de nombreux patients lors du port de masques naso-buccaux classiques

Vision dégagée

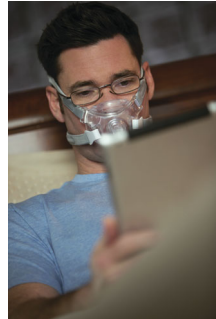

Vous pouvez porter vos lunettes, lire, regarder la télévision, utiliser un ordinateur ou une tablette, en toute simplicité, avant de vous endormir.

Caractéristiques

Entretien

- Garantie: 90 jours

Conception innovante

- Large champ de vision: Porter des lunettes, lire ou regarder la télévision

Contre-indications :

- Mauvais réflexe de toux: Déficience du sphincter cardiaque
- Chirurgie oculaire récente, yeux secs; hernie hiatale, reflux importants

Utilisation prévue

- À utiliser sur des patients > 30 kg: ayant une prescription de traitement par PPC

Caractéristiques

- Pression de fonctionnement: 5 à 30 cmh₂O
- Niveau de pression acoustique: 24,2 dBA
- Nombre d'éléments: Quatre
- Matériau du coussin: Silicone
- Matériau du harnais: Mélange UBL/maille
- Instructions de nettoyage : masque: Rincer abondamment, sécher à l'air libre
- Nettoyage : harnais, circuit: Laver à la main avec un détergent doux, Rincer abondamment, suspendre à l'air libre
- Matériau du circuit/des attaches du harnais: Élastomère de polyester thermoplastique
- Matériau du système de libération rapide: Polyoxyméthylène (acétal)
- Matériau de l'armature/du coude/du système de pivotement: Polycarbonate



Date de publication
2018-03-14

Version: 1.1.1

12 NC: 0000 010 90603
UPC: 6 06959 00914 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Tests internes : données archivées

* **N'inclut pas le tube de libération rapide Amara View

* L'achat de ce dispositif médical ne peut pas faire l'objet d'une demande de remboursement auprès du régime obligatoire de sécurité sociale.