

Philips DreamStation Go
Portables
Schlaftherapiegerät

Uneingeschränkte Leistung für
unterwegs

Einfache Bedienung
Mit einem Gewicht von nur gut
840 g
12-mm Micro-Flex Schlauch



HH1507



Innovative Schlaftherapie für unterwegs

Dank des schlanken Designs müssen 1/3 weniger Komponenten transportiert werden als bei anderen Schlaftherapie-Reisegeräten*. Dabei bietet die DreamStation Go dieselben Therapie- und Komfortfunktionen, denen bereits mehr als 5 Millionen Schlaftherapie-Patienten weltweit vertrauen.

Das kleinste Schlaftherapiegerät von Philips

- Mit integriertem USB-Ladeanschluss
- Kompaktes Design
- Schnelle, einfache Einrichtung und intuitive Navigation

Mit nur gut 840 g das leichteste Schlaftherapiegerät von Philips

- Reise-Akku (separat erhältlich)

Der dünnste und leichteste Schlauch von Philips**

- Micro-Flex Schlauch

Entspricht den Vorschriften der FAA*

- Für Flugreisen*

Speicherung von Daten für Ärzte und Klinikteam

- Bluetooth ist bei allen Geräten Standard
- Mit Philips DreamMapper kompatibel
- MicroSD-Karte separat erhältlich.

PHILIPS

Portables Schlaftherapiegerät

Uneingeschränkte Leistung für unterwegs Einfache Bedienung, Mit einem Gewicht von nur gut 840 g, 12-mm Micro-Flex Schlauch


Besonderheiten

Integriertes Netzteil



Die integrierte Stromversorgung erleichtert den Transport. Mit den Abmessungen von 15 cm x 15 cm x 5,8 cm (L x B x H) kann das leichte und kompakte Gerät sogar in einer kleinen Tasche untergebracht und so überall mitgeführt werden. Eine Tasche für Maske und Schlauch ist im Lieferumfang enthalten.

Mit integriertem USB-Ladeanschluss

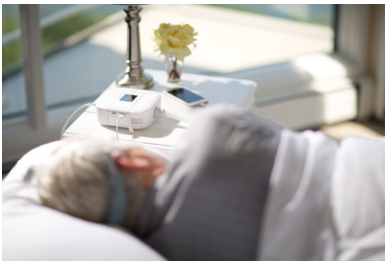

Zum einfachen Aufladen von Mobiltelefonen oder anderen Geräten, damit Sie die Steckdose für Lampen, Wecker usw. nutzen können. Ideal auf Reisen.

Entspricht den Vorschriften der FAA*



Um Sicherheitskontrollen an Flughäfen möglichst reibungslos verlaufen zu lassen, befindet sich auf der Unterseite der DreamStation Go ein Vermerk, dass es sich

um ein medizinisches Gerät handelt, das für die Nutzung im Flugzeug geeignet ist. Das Gerät ist flugtauglich, sofern es über eine Netzsteckdose oder einen Akku betrieben wird. Für Informationen zur Art der Stromversorgung an Bord wenden Sie sich bitte vor dem Abflug an die jeweilige Fluggesellschaft. Dieses Gerät bietet einen automatischen Höhenausgleich bis zu 2.286 Metern. Eine manuelle Einstellung ist nicht erforderlich.

Intuitiver Touchscreen mit Farbdisplay



Über den intuitiven Farb-Touchscreen der DreamStation Go lassen sich die Geräteeinstellungen anpassen und Therapieinformationen anzeigen. Nutzen Sie unsere MyStart Funktion, mit der Sie den für Sie angenehmsten Anfangsdruck für die Auto-CPAP-Therapie einstellen können. Sollte sich der voreingestellte Luftdruck beim Schlafengehen zu hoch oder zu niedrig anfühlen, können Sie die MyStart Druckeinstellung nach oben oder unten korrigieren, um entspannt einschlafen zu können.

Micro-Flex Schlauch



Der im Lieferumfang der DreamStation Go enthaltene neue 12-mm Micro-Flex Schlauch

HH1507/00

ist der kleinste und leichteste Schlauch, den Philips je angeboten hat. Er kann platzsparend verpackt werden, zeichnet sich durch mehr Flexibilität und Bewegungsfreiheit aus und erhöht damit Ihren Schlafkomfort. Schneller und einfacher Anschluss am Gerät durch Klickverbindung und eine schlanke Verbindung zu unserer DreamWear Maske. Im Lieferumfang ist zudem ein 22-mm-ISO-Adapter für andere gängige Masken enthalten.

Reise-Akku



Wenn Sie eine Reise planen, bei der die Stromversorgung nicht gesichert ist, erleichtert Ihnen der Reise-Akku der DreamStation Go die Einhaltung Ihrer Therapie. Die DreamStation Go lässt sich bei einer Druckeinstellung von 10 cm H₂O ca. 13 Stunden*** lang über den Reise-Akku versorgen. Die Akkulaufzeit kann bei höheren CPAP-Druckeinstellungen, nicht richtig sitzender Maske, in Abhängigkeit von Höhe und Temperatur oder bei Ladegeräten mit USB-Anschluss oder anderen Umständen abweichen.

Bluetooth



Damit können Sie Ihre Fortschritte am Heimtherapiegerät und dem tragbaren Schlaftherapiegerät verfolgen und überwachen.

Portables Schlaftherapiegerät

Uneingeschränkte Leistung für unterwegs Einfache Bedienung, Mit einem Gewicht von nur gut 840 g, 12-mm Micro-Flex Schlauch

HH1507/00

Daten

Service

- Gewährleistung: 2 Jahre

Technische Daten

- Druckbereich: 4 bis 20 cm H₂O
 - Druckmodus/Druckmodi: APAP
 - Flex-Druckentlastung: 1 bis 3
 - Flex-Modi: C-Flex, C-Flex+, A-Flex
 - Rampendauer: 0 bis 45 Minuten (in 5-min-Schritten)
 - Anfangsdruck: Auf den Patienten einstellbar,
- SmartRamp
- Abmessungen: 15 cm (L) x 15 cm (B) x 5,8 cm (H)
 - Gewicht: 844 g
 - Filter: Pollenfilter, wiederverwendbar
 - Einrichtung des Geräts: Farb-Touchscreen
 - Speicherkapazität: MicroSD-Karte (optional), Integriert: > 1 Jahr
 - Compliance-Messfunktion: Atmungserkennung
 - Höhenausgleich: Automatisch
 - Anforderungen an die Stromversorgung: 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz



Ausstellungsdatum
2018-09-23

Version: 2.5.1

12 NC: 000D EGS 02S13

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Im Vergleich zu HDM Z1 und Somnetics Transcend Geräten (2016).

** Im Vergleich zum Philips 22-mm Performance-Schlauch.

*** Laufzeit des DreamStation Go Reise-Akkus: CPAP-Modus, Druck 10 cm H₂O, 12-mm-Schlauch, 37 l/min Verlust, 23 °C Raumtemperatur und Höhe von 500 m über NN.