



Philips InnoSpire Deluxe  
Компрессорный

**ИНГАЛЯТОР**  
Надежное устройство для  
применения дома

Время процедуры: не более  
5 минут\*

\*При использовании 2,5 мл  
сальбутамола  
В комплекте с набором для  
ингаляции

HH1337

## Надежное и удобное устройство для ингаляции

InnoSpire Deluxe — удобный и надежный компрессионный ингалятор со встроенным отсеком, обеспечивающим организованное хранение принадлежностей для выполнения терапии.

### **Проверенная технология SideStream**

- Стабильный процесс образования аэрозоля высокого качества

### **Быстрота процесса**

- Время процедуры: не более 5 минут\*

### **Создан для вашего удобства**

- Прочная ручка для легкой транспортировки
- Все необходимое в одном месте

### **Для самых назначаемых препаратов**

- Совместимость с самыми назначаемыми ингаляционными препаратами

**PHILIPS**

## Компрессорный ингалятор

Надежное устройство для применения дома. Время процедуры: не более 5 минут\*, \*При использовании 2,5 мл сальбутамола, В комплекте с набором для ингаляции


# Особенности

### Удобство и надежность



Устройство InnoSpire Deluxe предназначено для облегчения процесса ингаляции; оно также имеет встроенный отсек, обеспечивающий организованное хранение всех необходимых принадлежностей.

### Проверенная ингаляционная технология

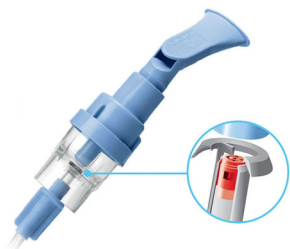


Ингалятор SideStream специально разработан для максимального сокращения времени ингаляции. При прохождении воздуха в трубке InnoSpire Deluxe дополнительный поток воздуха поступает в верхнюю часть устройства для создания быстро движущегося потока аэрозольного препарата с возможностью оптимального вдоха. Ингаляция займет не более 5 минут\*. Ингалятор SideStream предназначен для частого многократного использования; он позволяет эффективно распылять прописанный препарат в течение всего срока его службы.

### Прочная конструкция




InnoSpire Deluxe является достаточно легким устройством (около 2 кг), за счет чего пользователь может перемещать его в пределах своего дома. Благодаря специальному отсеку вы можете хранить все принадлежности внутри устройства, в результате чего все составляющие ингаляции всегда будут в одном месте.

### Время процедуры

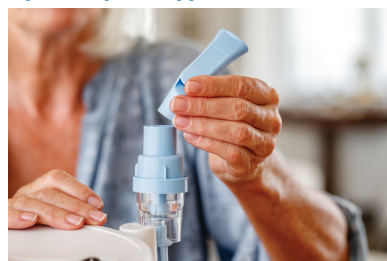

Использование в сочетании с ингалятором SideStream обеспечивает быстрое введение лекарственных средств и сокращение времени процедуры.

### Универсальность

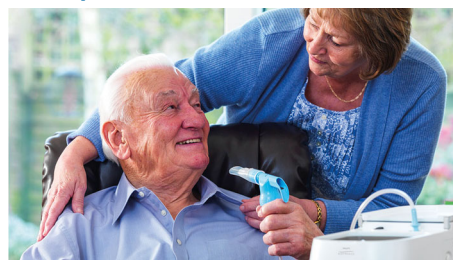

Возможность распыления большого числа препаратов, обычно используемых для лечения различных заболеваний органов дыхания.

HN1337/00

# Характеристики

### Обслуживание

- Гарантия: 3 года

### Дизайн

- Удобный отсек для хранения: 2,0 кг

### Рабочие параметры

- Максимальная скорость потока: 9,8 л/мин
- Максимальное давление: 360 кПа (52 фунта/кв. дюйм)
- Электропитание: 230 В / 50 Гц, 1 А
- Скорость потока: 7 л/мин при 10 фунтах/кв. дюйм изб.
- Устройство защиты от перегрева: Самовосстанавливающийся плавкий предохранитель
- Уровень громкости: 58 децибел

### Сведения о продукте

- Размер: 38 x 17 x 11 см
- Уровень шума: 58 ±3 дБА
- Время процедуры (до 5 мин\*): \* При 2,5 мл сальбутамола

### Характеристики ингалятора SideStream Plus

- ММАД: 3,42 мкм
- Фракция мелкодисперсных частиц: 67%
- Время (2,5 мл сальбутамола): 3,68 мин

### SideStream Reusable

- ММАД: 2,93 мкм
- Фракция мелкодисперсных частиц: 76,3%
- Время (2,5 мл сальбутамола): 4,12 мин



Дата выпуска 2018-07-25

Версия: 4.0.1

12 NC: 8670 001 46079  
EAN: 03 83730 10065 4

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* При использовании 2,5 мл сальбутамола