

Philips
Wisp CPAP-näsmask med
huvudband, Tygram

Förpackning
3 kuddar (S/M, L, XL)
med huvudband

HH1024



Prestanda har ett nytt utseende.

Wisps finurliga teknik för automatisk tätning följer dina rörelser och ger en överlägsen tätning och en utmärkt nattsömn.

Magnetiska knäppen

- Det sitter magneter i knäppena till huvudbandet och på maskkudden

Öppet synfält

- Läs, titta på TV eller bär glasögon

Kompakt design

- Wisp sitter bekvämt på fler än 98 % av användarna*

Prestanda och komfort

- Ger snabb och enkel montering och justering.

PHILIPS

Specifikationer

Varning: magnetiska störningar

- Var försiktig med pacemakers: Läs bruksanvisningen före användning.

Kompakt

- Enkel att ta på och justera: Tyst utandning

Specifikationer

- Ljudtrycksnivå: 19 dBA
- Antal delar: Sex
- Kudde, material: Silikon/polykarbonat
- Huvudbandsmaterial: Termoplastisk UBL/uretanskum/nylon/lycra/nylon
- Ram-material: Nylon/spandex/uretanskum
- Swivel, material: Silikon/polykarbonat
- Slangmaterial: Termoplastisk polyesterelastomer
- Rengöringsinstruktioner: mask: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, Skölj noga och låt lufttorka

- Rengöring: huvudband och slang: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, Skölj noggrant, häng upp för att torka
- Knärör/swivel, material: Polykarbonat
- Knäppen för huvudband, material: Acetalkopolymer
- Drifttryck: 4–20 cmH₂O

Service

- Garanti: 90 dagar

Avsedd användning

- För patienter över 30 kg: med CPAP-ordination

Design

- Komfort: Elastiskt huvudband
- Kompakt: Enkel att ta på och justera
- Patenterad design: Design med kudde på nästippen
- Tyst utandning: Knärör vridbart i 360 grader

HH1024/00

Funktioner

Större frihet




Wisp har en tunn design som eliminerar behovet av vaddering i pannan, vilket ger dig ett bättre synfält.

Kompakt design, naturlig passform



Kudden på nästippen är utformad för att ligga nedantill på näsryggen så att kontakten med ansiktet blir så liten som möjligt men samtidigt ger överlägsen tätning. * Bekräftelse via den antropometriska databasen

Minimal design, överlägsen tätning

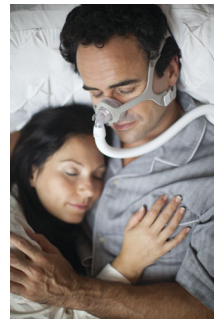

Designen och huvudbandets knäppen gör användningen och rengöringen enklare.

Magnetiska knäppen

Kontakta din läkare innan du använder denna mask. Vissa medicintekniska produkter kan påverkas av magnetiska fält. De magnetiska knäpparna i masken ska sitta minst 50 mm från alla aktiva medicinska enheter, med särskild hänsyn till implantat, såsom pacemakers, defibrillatorer och cochleaimplantat. Läs bruksanvisningen till respektive enhet för mer information.



Publiceringsdatum
2018-04-16

Version: 6.0.1

12 NC: 0000 010 94061
UPC: 6 06959 02127 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Bekräftelse via den antropometriska databasen