



Philips PersonalBest Piekstroommeter

Meting met kleurcodering in 3
zones

U hebt de touwtjes in handen
Geschikt voor kinderen en
volwassenen



HH1309

Uw astma bijhouden

Eenvoudige bewaking van uw piekflow

Met de lichte, onafhankelijke en draagbare Philips PersonalBest hebt u de bewaking van uw piekflow altijd in de hand. Het meten van uw piekflow vormt een belangrijk onderdeel van het beheer van uw astmasymptomen.

Gebruiksvriendelijke functies

- Snelle, eenvoudige aflezing ter ondersteuning van uw astma-actieplan
- Gebruiksvriendelijke techniek
- De beschermkoffer zorgt voor veiligheid

Nauwkeurige metingen

- Configureer het apparaat voor meting van uw persoonlijke bereik

Eenvoudige zorg

- Gewoon met water en zeep

PHILIPS


Kenmerken

Piekstroombewaking binnen handbereik




Dankzij het uitvouwbare handvat blijft uw hand uit de buurt van de indicatoren en is een goede techniek mogelijk voor een succesvolle aflezing.

Kleurcodering in drie zones

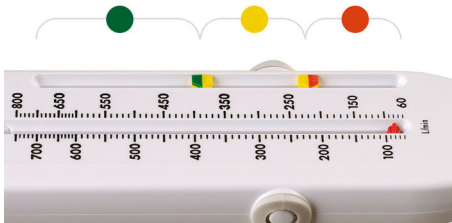

De kleurgecodeerde indicatoren geven drie meetzones aan waardoor u eenvoudig kunt zien of uw toestand of die van uw kind stabiel is of verslechtert.

Aanpasbare metingen

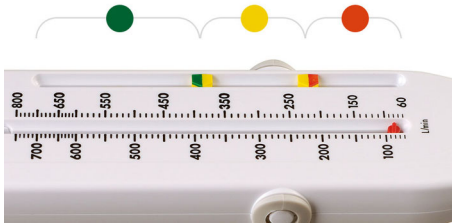

De kleurgecodeerde indicatoren kunnen door uw zorgverlener worden ingesteld om de volgende

percentages van uw persoonlijke beste piekflow weer te geven: groene zone 80-100% van persoonlijke beste waarde; gele zone 50-80% van persoonlijke beste waarde; rode zone 50% of minder van persoonlijke beste waarde

Opslag en bescherming



Het uitvouwbare handvat verandert in een stevige opslagkoffer, zodat uw meter goed wordt beschermd.

Eenvoudige reiniging



PersonalBest kan met warm water en milde vloeibare zeep of in het bovenste rek van de vaatwasser worden gereinigd en aan de lucht worden gedroogd.

Specificaties

Ontwerp

- Kleurgecodeerde indicatoren: Astmabeheer met 3 zones

Kalibratiegegevens

- Meetbereik: 60-800 l/min

Prestatiegegevens

- Nauwkeurigheid: +/- 10% of 10 l/min
- Herhaalbaarheid: Minder dan of gelijk aan 5% of 10 l/min
- Lineariteit: Minder dan of gelijk aan 5% of 10 l/min
- Stroomweerstand: Minder dan of gelijk aan 0,35 kPa/l/min
- Frequentiebereik: Minder dan of gelijk aan 12% of 15 l/min

Productgegevens

- Behuizing: ABS-plastic
- Afdekking en handvat: Polypropyleen
- Schaal: Warmtedruk, alcoholbestendig

Schaalresolutie

- 10 l/min: van 60 tot 700 l/min
- 20 l/min: van 700 tot 800 l/min

