

PHILIPS

Systém na odstraňovanie
chlípkov IPL

Lumea

Pre použitie len na tele

Oš. nôh od kol. d. za 15 min.

Životnosť > 100 000 svetelných
impulzov

Bezšnúrový dizajn



SC2004/11



Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chlípok pre jemnú pokožku v pohodlí domova

Philips Lumea IPL je najúčinnnejšie bezdrôtové riešenie IPL, ktoré zázračne zabraňuje dorastaniu chlípok na tele. Pravidelné pôsobenie jemných svetelných impulzov zaručí hodvábne hladkú pokožku každý deň.

Dlhotrvejúca hladkosť

- Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň
- Skvelé výsledky bez veľkej námahy

Odstraňovanie chlípok pomocou technológie IPL

- Prispôbená na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti
- Vhodné pre rôzne typy chlípok a pokožky

Jemné a účinné, dokonca aj pri citlivej pokožke

- Bezpečné a účinné použitie aj v citlivých oblastiach
- Väčší nástavec na telo pre rýchlejšie ošetrenie
- Päť nastaviteľných úrovní intenzity svetla
- Režim zábleskov pri kĺzaní pre jednoduchšie používanie

Maximálna sloboda, minimálne ťažkosti

- Praktické bezšnúrové používanie
- Žiadne náhradné diely, žiadne skryté náklady



asimpleswitch.com

Hlavné prvky

Dlhotrjavá hladkosť



Zariadenie Philips Lumea aplikuje na koreňky chĺpkov jemné pulzujúce svetlo. Pôsobením tohto procesu chĺpky prirodzene vypadnú a ich opätovný rast sa spomalí. Pravidelným používaním dosiahnete hladkú pokožku každý deň.

Skvelé výsledky bez veľkej námahy



Naše klinické štúdie preukázali výrazné zníženie množstva chĺpkov už po štyroch použitíach raz za dva týždne, výsledkom čoho je hladká pokožka bez chĺpkov. Na zachovanie týchto výsledkov stačí zopakovať použitie podľa potreby. Čas medzi jednotlivými použitiami sa môže líšiť v závislosti od individuálneho tempa rastu chĺpkov.

Technológia IPL



System Philips Lumea používa inovačnú svetelnú technológiu IPL (Intense Pulsed Light, intenzívne pulzujúce svetlo), ktorá je založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch krásy. Spoločnosť Philips prispôbila túto technológiu na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti. Spoločnosť Philips nadviazala úzku spoluprácu s poprednými svetovými dermatológmi s cieľom vyvinúť prelomový

system odstraňovania chĺpkov. Súčasťou tohto procesu bol aj rozsiahly spotrebiteľský výskum, ktorý trval viac než 10 rokov a zúčastnilo sa ho vyše 2000 žien.

Vhodné typy chĺpkov a pokožky

Suitable hair and skin tones

| Skin Tone | White | Beige | Light brown | Medium brown | Dark brown | Brownish black and darker |
|-------------|-------|-------|-------------|--------------|------------|---------------------------|
| Hair Color | | | | | | |
| Black | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| Dark brown | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| Brown | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| Dark blond | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| Light blond | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| Red | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| White/grey | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

System Philips Lumea účinne funguje pri (prirodzene) tmavších blond chĺpkoch, hnedých a čiernych chĺpkoch. Podobne ako v prípade iných svetelných zákrokov, system Philips Lumea NIE JE účinný pri svetlých blond chĺpkoch, ryšavých ani bielych či sivých chĺpkoch. System Philips Lumea NIE JE vhodný pre veľmi tmavú pokožku.

Päť úrovní intenzity svetla




System Philips Lumea ponúka päť nastaviteľných úrovní intenzity svetla pre jemné a účinné ošetrovanie. Ak sa system Philips Lumea používa správne, ošetrovanie svetlom pomocou technológie IPL je bezpečné a šetrné aj v prípade citlivej pokožky alebo v citlivých oblastiach tela.

Oblasti aplikácie



Môžete bezpečne používať na odstraňovanie chĺpkov v oblastiach pod líniou krku: nohy, podpažšie, oblasť bikín, ruky a brucho.

Praktické bezšnúrové používanie

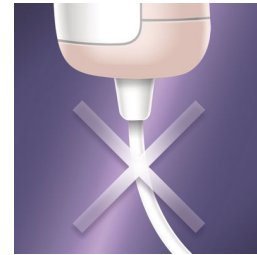

Jedinečný bezšnúrový dizajn systému Lumea je navrhnutý na maximálny dosah a jednoduché používanie.

Nie sú potrebné žiadne náhradné diely



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea predstavuje kompletne riešenie, ktoré bude fungovať hneď po vybalení. Navyše nie sú potrebné ani žiadne náhradné lampy či gély.



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú znižovať náklady, spotrebu energie a emisie CO₂. Akým spôsobom? Ponúkajú významný environmentálny prínos v jednej alebo viacerých hlavných oblastiach ekologických priorít spoločnosti Philips – energetickej efektívnosti, balenia, nebezpečných látok, hmotnosti, recyklovania a likvidácie, ako aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

Technické údaje

Technické špecifikácie

Svetelná fluencia (J/cm²): 2,5 - 5,6

Svetelné spektrum: > 570 nm

Vysoko výkonná lampa: Výstup > 100 000 zábleskov

Bezpečnostné a upraviteľné nastavenia

5 nastavení intenzity svetelnej energie:

Prispôsobiteľné typu pokožky

Zabudovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV žiarením

Integrovaný bezpečnostný systém: Zabraňuje neúmyselnej aktivácii zábleskov

Oblasti aplikácie

Oblasti tela: Nohy, Brucho, Oblasť bikín, Podpazušia

Druh použitia

Záblesky pri kĺzaní: Pre jednoduché používanie

Záblesky pri postupnom posúvaní: Na ošetrovanie zakrivených oblastí

Sieťové/bezšnúrové použitie: Bez šnúry

Nástavce

Nástavec na telo (4 cm²): Na použitie pod líniou krku

Čas aplikácie

Spodná časť nôh: 8 min

Podpazušie: 1 min

Oblasť bikín: 1 min

Pribalené príslušenstvo

Pomôcky na uskladnenie: Puzdro

Pokyny pre použitie: Stručná príručka spustenia, Návod na použitie

Nabíjacia jednotka: Multinapäťová nabíjačka

Príkon

Napätie: 100 - 240 V

Čas nabíjania: 100 min

Prevádzkový čas: Minimálne 370 zábleskov

Servis

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

