

PHILIPS

IPL-
hårfjerningsenhet

Lumea Prestige

Med SenseIQ-teknologi

Presisjonsområder, kroppen og
ansiktet

Med SmartSkin-sensor

Både trådløs bruk og bruk med
ledning



BRI953/00



Glatt og hårfri hud i seks måneder*

3 intelligente tilbehør som gir optimale resultater

Philips Lumea Prestige med SenseIQ-teknologi er vår mest effektive IPL. Lumea er utformet for praktisk behandling hjemme og passer perfekt til hver eneste kurve. I tillegg tilpasser Lumea programmer som er skreddersydd for alle kroppsområder.

Langvarig glatt hud med Lumea IPL-teknologi

- Avansert IPL-teknologi for hjemmebruk, utviklet i samarbeid med hudspesialister
- Beviselig skånsom og effektiv behandling
- Passer til en rekke hår- og hudtyper
- SenseIQ-teknologi for tilpasset hårfjerning
- Bruk med eller uten ledning

Profesjonell IPL-behandling for kroppsområdene dine

- Smart tilleggsutstyr som tilpasser programmer til alle kroppsområder
- Presisjonstilbehør for bikinilinje og armhuler
- Kroppstilbehør med buet utforming
- Ansiktstilbehør for presisjon med ekstra filter

Maksimal frihet, svært enkelt


- Med SmartSkin-sensor
- Lumea IPL-appen. Med deg gjennom hele prosessen
- Ingen ekstradelere, ingen skjulte kostnader



asimpleswitch.com


Høydepunkter

Lumea forhindrer gjenvekst av hår*

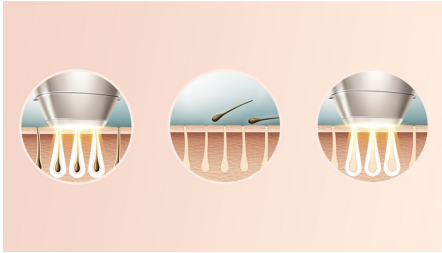


IPL står for intenst pulset lys. Philips Lumea bruker forsiktede lyspulser på hårrøten for å få hårsekken til å gå i dvale. Dette gjør at hårveksten gradvis reduseres. Hvis du gjentar behandlingen, blir huden din hårfri og silkemyk å ta på. Behandlingen for å unngå gjenvekst er sikker og skånsom, selv på sensitive områder. Philips Lumea er klinisk testet og utviklet i samarbeid med hudspesialister for en enkel og effektiv behandling hjemme hos deg selv.

Bevist effekt

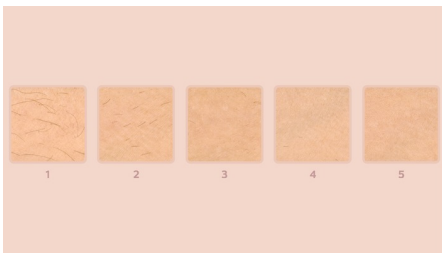

Objektive studier viser opptil 92 % hårreduksjon etter tre behandlinger**. Utfør de fire første behandlingene hver andre uke og de neste åtte behandlingene hver fjerde uke. Etter tolv behandlinger får du seks hårfrie måneder med glatt hud*.


Passende hår- og hudtyper

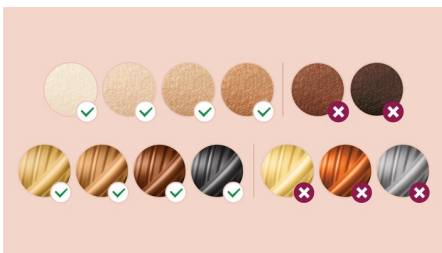

Philips Lumea Prestige er effektiv på en rekke hår- og hudtyper. Den fungerer på naturlig mørk blondt, brunt og svart hår og på hudfarger fra veldig hvit til mørkebrun. IPL-systemet trenger en kontrast mellom pigmentet i hårfargen og pigmentet i hudtonen, så derfor

(som med andre IPL-baserte behandlinger) kan ikke Lumea brukes til å behandle hvitt, grått, lys blondt eller rødt hår. Den passer heller ikke for veldig mørk hud.

SenseIQ-teknologi

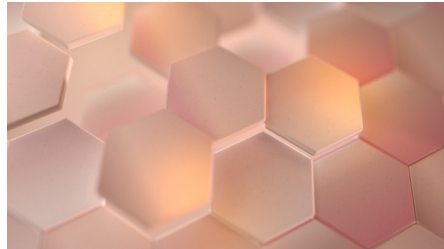

Senses. SmartSkin-sensoren fra Lumea registrerer hudtonen og angir den mest komfortable lysinnstillingen for deg. Tilpasser. Intelligente tilbehør justerer programmer som er skreddersydd for alle kroppsområder. Skånsom. SmartSkin-sensoren er utviklet i samarbeid med hudspesialister og er inspirert av deg for å kunne gi en skånsom hårfjerning som varer lenge, selv på ømfintlige områder***.

Behandling av kroppsområder



Kroppen din er unik. Og kroppens hud, kurver og konturer bør også behandles unikt. Lumea-tilbehøret for hele kroppen er formet slik at de passer perfekt til hver eneste kurve, og de tilpasser programmer som er skreddersydd for alle kroppsområdene dine. Behandlingsvinduerne er utformet for å gi best mulig kontakt med huden slik at lyset ikke slipper unna, noe som gir deg effektive og skånsomme behandlinger selv på ømfintlige eller sensitive områder.

Presisjonstilbehør



Det smarte presisjonstilbehøret er middels stort med et behandlingsvindu på 3 cm² for nøyaktig dekning av bikinilinen og armhulene. Den buede utformingen følger kroppens konturer tett for maksimal hudkontakt. Når tilbehøret klikkes på apparatet, får du et skreddersydd program for kroppsdelen.

Tilbehør til kropp



Det smarte kroppstilbehøret har vårt største behandlingsvindu på 4,1 cm², så det er perfekt for en rask behandling på større kroppsdeler som ben, armer og mage. Den buede utformingen følger kroppens konturer nøyaktig for maksimal hudkontakt. Klikk tilbehøret på, så får du et skreddersydd program for kroppsdelen. 83 % av alle kvinner ble fornøyd med hårreduksjonen på bena****.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO₂-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Spesifikasjoner

Bruksområder

Områder på kroppen: Armer, Ben, Mage

Ansiktsområder: Hake, Overleppe, Kjeveparti

Sensitive områder: Armhulene, Bikinilinje

Tekniske spesifikasjoner for tilbehøret

Tilbehør til kroppsbehandling: Vindusstørrelse: 4,1 cm², Form: Konveks bue, Tilpasset behandling for kroppen

Tilbehør til ansiktsbehandling: Form: Flat, Vindusstørrelse: 2 cm², ekstra filter, Tilpasset behandling for ansiktet

Tilbehør til presisjonsbehandling: Form: Konkav bue, presis, Vindusstørrelse: 3 cm², Tilpasset behandling for armhuler, Tilpasset behandling av bikinilinen

Programmodus

Glidende lysglimt: For rask bruk

Trykk og flash: For behandling på små områder

Kan brukes med og uten ledning: Både trådløs bruk og bruk med ledning

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Fem lysenergiinnstillinger: Kan tilpasses til hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktede lysglimt

Integrert UV-filter: Beskytter huden mot UV-stråler

Hudtonesensor: Gjenkjenner hudtypen

SmartSkin-sensor: Få rett innstilling på forespørsel

Påføringstid

Legger: 8,5 min.

Bikinilinje: to minutter

Armhule: 2,5 min.

Ansiktsområder: 1,5 min

Tekniske spesifikasjoner

Lampe med høy ytelse: Leverer >250 000 lysglimt****

Drift

Spenning: 100–240 V

Deler som medfølger

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Brukerveiledning: Brukerhåndbok

Lagring: Luksuriøs veske

Service

Garanti: 2-års global garanti

