

PHILIPS

IPL
hårfjerningssystem

Lumea Precision
Plus

Til bruk på kropp, ansikt,
bikinielinje

15 minutter for å behandle
leggene

Klinisk bevist resultat

120 dagers pengene-tilbake-
garanti



SC2008/11



Lumea IPL – Hårfri hud i opptil 8 uker for glatt hud hjemme

Unngå irritert hud og stikkende utvekst, Lumea IPL reduserer hårtilveksten og gir deg smidig hud i opptil 8 uker! Lumea IPL Precision Plus – den mest fleksible IPL-løsningen for ansikt, bein og bikinielinje.

Langvarig glatt hud

- Gled deg over glatt hud hver dag
- Effektiv uten problemer

Hårfjerning med IPL-teknologi

- Tilpasset for sikker bruk i ditt eget hjem
- Passer til en rekke hår- og hudtyper

Skånsom og effektiv på kroppen, i ansiktet og på bikinielinjen

- Trygg og effektiv, selv på sensitive områder
- Større kroppstilbehør for rask behandling
- Ansiktstilbehør for sikker ansiktsbehandling
- Tilbehør for spesialbehandling av håret ved bikinielinjen
- Fem justerbare innstillinger for lysenergi

Maksimal frihet, svært enkelt


- Trådløs og praktisk
- Ingen ekstradelere, ingen skjulte kostnader



asimpleswitch.com

Høydepunkter

Langvarig glatt hud

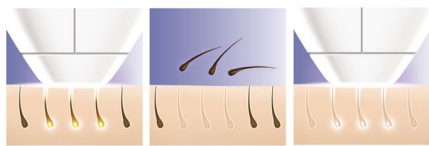

Philips Lumea bruker forsiktige lyspulser på hårrøttene. Resultatet er at håret faller av naturlig, og gjenveksten hemmes. Du kan gjenta denne behandlingen regelmessig for å opprettholde glatt hud hver dag.

Effektiv uten problemer



Våre kliniske studier viser betydelig hårreduksjon etter så lite som fire behandlinger annenhver uke, med glatt og hårfri hud som resultat. For å opprettholde disse resultatene gjentar du ganske enkelt behandlingen ved behov. Tiden mellom behandlingene kan variere basert på gjenveksten av hår hos den enkelte.

IPL-teknologi



Philips Lumea bruker en nyskapende lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light), som bygger på teknologien brukt av profesjonelle skjønnhetssalonger. Philips har tilpasset denne teknologien for sikker og effektiv bruk i ditt eget hjem. Philips samarbeidet tett med ledende hudspesialister for å utvikle vårt banebrytende hårfjerningssystem. I over 10 år har vi gjennomført omfattende forbrukerundersøkelser med over 2000 kvinner.

Passende hår- og hudtyper

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark blond	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Light blond	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Red	✗	✗	✗	✗	✗	✗
White/grey	✗	✗	✗	✗	✗	✗

● This product is suitable for you to use ☹ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type


Philips Lumea fungerer effektivt på (naturlig) mørkeblondt, brunt og svart hår. I likhet med andre lysbaserte behandlinger fungerer Philips Lumea IKKE effektivt på rødt, lyseblondt eller hvitt/grått hår. Philips Lumea passer heller IKKE for veldig mørk hud.

Bruksområder



Du kan trygt bruke produktet for å fjerne hår i ansiktet (overleppen, haken og kinnskjegget) og kroppsdeler som bena, under armene, bikinilinen, magen og armene.

Rask behandling på bena

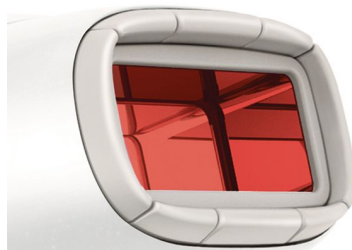

Større kroppstilbehør gir rask behandling på store områder som bena.

Ekstra sikkerhet for ansiktet



Ansiktstilbehøret har sitt eget spesialutformede, integrerte lysfilter for sikker og praktisk bruk på overleppen, haken og kinnskjegget. Den kan også brukes på andre

sensitive områder på kroppen, f.eks. under armene og andre steder der det er vanskelig å komme til.

Bikinilinetilbehør



Bikinilinetilbehør for effektiv behandling av håret ved bikinilinen. Håret i dette området er vanligvis sterkere og tykkere enn håret på bena.

Fem innstillinger for lysenergi



Philips Lumea har fem justerbare innstillinger for lysenergi som sørger for en behagelig, men effektiv behandling. Når den brukes på riktig måte, er IPL-behandlingen til Philips Lumea sikker og skånsom å bruke selv på sensitiv hud og sensitive områder på kroppen.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Lampe med høy ytelse: Leverer
> 140 000 lysglimt

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Fem lysenergiinnstillinger: Kan tilpasses til
hudtypen din

Integrert UV-filter: Beskytter huden mot UV-
stråler

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer
utilsiktede lysglimt

Bruksområder

Områder på kroppen: Ben, Armer, Mage,
Bikini linje, Armhulene

Ansiktsområder: Hake, Kinnskjegg, Overleppe

Programmodus

Glidende lysglimt: For praktisk påføring

Trinn og lysglimt: For behandling på kurvede
områder

Kan brukes med og uten ledning: Trådløs

Tilbehør

Kroppstilbehør (4 cm2): For bruk nedenfor
halsen

Bikini linjetilbehør (2 cm2): Spesialbehandling
bikini linjehår

Ansiktstilbehør (2 cm2): For sikker bruk i
ansiktet

Påføringstid

Legg: 8 min

Armhule: 1 min

Bikini linje: 1 min

Ansiktsområder: 1 min

Deler som medfølger

Lagring: Veske

Brukerveiledning: Hurtigstartveiledning,
Brukerhåndbok

Lader: Flerspenningslader

Drift

Spenning: 100–240 V

Ladetid: 100 min

Driftstid: Minst 370 lysglimt

Service

Garanti: 2-års global garanti

