

# PHILIPS

Sistema epilazione a  
luce pulsata

Lumea

Solo per il corpo

15 minuti per parte inferiore  
gambe

Durata >100.000 impulsi di luce

Design cordless



SC2001/01



## Previene la ricrescita

Sistema di epilazione a luce pulsata, per una pelle liscia ogni giorno

Il sistema di epilazione a luce pulsata Lumea di Philips è ideale per prevenire la ricrescita dei peli su tutto il corpo. L'applicazione regolare di delicati impulsi di luce consente di mantenere una pelle liscia come seta tutti i giorni.

### Liscia a lungo

- Pelle liscia ogni giorno
- Efficacia senza sforzo

### Rimozione dei peli con la tecnologia IPL a luce pulsata

- Adatto ad un uso sicuro nel comfort di casa tua
- Tipi di pelle e di peli compatibili

### Delicato ed efficace anche sulla pelle sensibile

- 5 impostazioni di intensità della luce
- Zone di applicazione

### Massima libertà, minimo sforzo

- Comodità senza fili
- Non necessita di parti di ricambio




asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# In evidenza

## Liscia a lungo

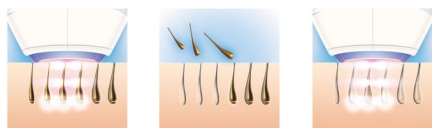

Philips Lumea applica delicati impulsi di luce alla radice del pelo. L'effetto che ne consegue è la caduta naturale del pelo e l'inibizione della ricrescita. Ripetendo il trattamento con regolarità, la pelle resterà liscia giorno dopo giorno.

## Efficacia senza sforzo



Studi clinici hanno dimostrato una significativa riduzione dei peli dopo due soli trattamenti eseguiti a distanza di due settimane, con risultati ottimali dopo quattro o cinque trattamenti eseguiti ogni due settimane. Per mantenere questi risultati è sufficiente ripetere i trattamenti ogni quattro/sei settimane. Il periodo di intervallo tra i trattamenti può variare in base alla ricrescita individuale.

## Tecnologia IPL



Il funzionamento di Philips Lumea è basato sull'innovativa tecnologia IPL (Intense Pulsed Light), che deriva da quella utilizzata nei centri estetici. Philips ha adattato questa tecnologia per un utilizzo sicuro ed efficace nel comfort di casa tua. Questo innovativo sistema di

rimozione dei peli superflui è stato sviluppato in collaborazione con dermatologi esperti ed è il frutto di oltre 10 anni di approfondite ricerche con oltre 1.500 volontari.

## Applicazione delicata



Philips Lumea ha cinque impostazioni di intensità della luce per garantire un'epilazione delicata ma efficace. Se utilizzato correttamente, il trattamento a luce pulsata Lumea di Philips è sicuro e delicato anche su peli e zone del corpo sensibili.

## Comodità senza fili



L'esclusivo design senza fili di Lumea è perfetto per il trattamento delle zone che vuoi, in qualsiasi momento.

## Non necessita di parti di ricambio



Philips Lumea è una soluzione completa, pronta per l'uso. Inoltre non richiede la sostituzione di lampadine né l'utilizzo di gel.

## Zone di applicazione



Può essere utilizzato in tutta tranquillità sulle zone del corpo al di sotto della nuca: gambe, ascelle, zona bikini, braccia e addome.

## Tipi di pelle e di peli compatibili



Philips Lumea è efficace sui peli di colore (naturale) biondo scuro, castano e nero. Come altri trattamenti basati sulla luce, Philips Lumea NON è efficace sui peli di colore rosso, biondo chiaro e grigio. Inoltre Philips Lumea NON è adatto alla pelle molto scura.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO<sub>2</sub>. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

# Specifiche

## Specifiche tecniche

**Lampadina ad alte prestazioni:** Assicura più di 80.000 flash

## Zone di applicazione

**Aree del corpo:** Gambe, Braccia, Ascelle, Ventre, Zona bikini

## Accessori

**Accessorio per il corpo (3 cm2):** Per l'uso al di sotto della nuca

## Accessori inclusi

**Caricabatterie:** Caricatore multitemperatura

**Istruzioni per l'uso:** DVD demo, Guida rapida, Manuale di istruzioni

**Conservazione:** Custodia

## Assorbimento

**Tempo di carica:** 100 min

**Tempo di funzionamento:** Minimo 320 impulsi di luce

**Voltaggio:** 100-240 V

## Impostazioni di sicurezza regolabili

**Filtro UV integrato:** Protegge la pelle dai raggi UV

**5 impostazioni di intensità della luce:**

Regolabile in base al tipo di pelle

**Sistema di sicurezza integrato:** Impedisce l'attivazione accidentale del flash

## Servizio

**Garanzia:** 2 anni di garanzia

## Modalità di applicazione

**Con filo/cordless:** Cordless

**Step and Flash:** Per il trattamento sulle zone curve

## Tempo di applicazione

**Ascelle:** 1 minuto

**Zona bikini:** 1 minuto

**Polpacci:** 8 min

