

PHILIPS

IPL-hårborttagningssystem:
presentutgåva

Lumea Essential

För användning endast på
kroppen

15 minuter för att behandla
underbenen

Livslängd >100 000 ljuspulser

Extra lång sladd



SC1991/04



Förhindra håråterväxt

För len hud varje dag

Philips Lumea IPL-hårborttagningssystem gör underverk och förhindrar håråterväxt på kroppen. Milda ljuspulser håller huden silkeslen varje dag. Presentutgåva: ladyshaver för behandling innan IPL-behandlingen ingår.

Varaktig mjukhet

- Len hud varje dag
- Effektivt utan ansträngning

Hårborttagning med IPL-teknik

- Anpassad för säkert hemmabruk

Säker, snabb och effektiv på kroppen

- Tillbehör för kroppen: snabb behandling (15 min. för båda underbenen)
- Justerbar för din hudtyp
- För användning på kroppen
- Fem justerbara ljusenergiinställningar

Lättanvänd

- Inga reservdelar, inga dolda kostnader
- Förbered dig på IPL-behandlingen med den EXTRA-rakapparaten.



asimpleswitch.com

Funktioner

Len hud varje dag



Philips Lumea tillämpar lätta ljuspulser på hårroten. På så sätt faller håret av naturligt och återväxten förhindras. Om du regelbundet upprepar behandlingen håller du huden len varje dag.

Effektivt utan ansträngning

Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter fyra behandlingar varannan vecka. Behandlingen ger dig en len och hårfri hud. För att bibehålla resultatet upprepar du bara behandlingen vid behov. Behandlingsintervallet kan variera beroende på just din takt för håråterväxt.

IPL-teknik

Philips Lumea använder en innovativ ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light) och har utvecklats från teknik som används i professionella skönhetsstudior. Philips har anpassat tekniken för säkert och effektivt hemmabruk. Philips har haft ett nära samarbete med ledande dermatologer för att utveckla det här banbrytande hårborttagningssystemet. I över 10 år har vi gjort utförliga kundundersökningar med mer än 2 000 frivilliga.

Stort tillbehör för kroppen, 4 cm²



Stort tillbehör för kroppen möjliggör en snabb behandling på större områden, till exempel benen.

Lämpliga hår- och hudtyper

Vello y tipos de piel adecuados / Tipos de pêlo e pele adequados

Tono de piel / Tomo de pele	1	2	3	4	5	6
Color de pelo / Cor do pêlo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Color de pelo / Cor do pêlo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Color de pelo / Cor do pêlo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Color de pelo / Cor do pêlo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Color de pelo / Cor do pêlo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Color de pelo / Cor do pêlo	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Puede utilizar este producto / Este produto é adequado para si
 Este producto no es seguro ni adecuado para su tono de piel y tipo de vello / Este produto não é adequado nem seguro para o seu tom de pele e a cor do seu pêlo


Philips Lumea fungerar effektivt på (naturligt) mörkblont, brunt och svart hår. Som med andra ljusbaserade behandlingar fungerar Philips Lumea INTE på rött, ljusblont eller vitt/grått hår. Philips Lumea lämpar sig heller INTE för mörk hud.

Tillämpningsområden



Du kan behandla och ta bort hår på kroppsdelar nedanför halsen: benen, under armarna, bikinilinjerna, armarna och magen.

5 lampenergiinställningar

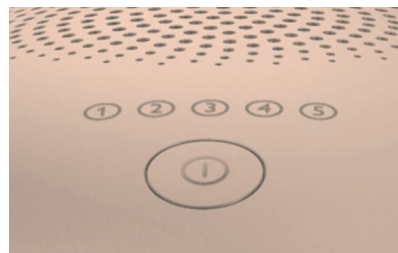

Philips Lumea har fem justerbara ljusenergiinställningar för att garantera en skonsam men effektiv behandling. Vid korrekt användning är Philips Lumeas IPL-behandling säker och skonsam, även på känslig hud och känsliga kroppsdelar.

Inga reservdelar krävs

Philips Lumea är en komplett lösning som levereras körklar. Framförallt krävs inga reservlampor eller någon gel.

Presentföremål: ladyshaver



Förbered dig på IPL-behandlingen med den EXTRA-rakapparaten. Med Philips kompakta ladyshaver kan du raka dig överallt på kroppen snabbt och enkelt. Du kan använda den i duschen och i torra förhållanden när det passar dig. Kompakt och batteridrivna.



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden – energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Högprestandalampa: Producerar > 100 000 ljussignaler

Säkerhetsinställning och justerbara inställningar

Integrerat säkerhetssystem: Förhindrar oavsiktliga ljussignaler

5 lampenergiinställningar: Justerbar för din hudtyp

Integrerat UV-filter: Skyddar din hud från UV-ljus

Tillämpningsområden

Kroppsdelar: Armar, Ben, Mage, Bikini, Under armarna

Tillbehör

Tillbehör för kroppsbehandling (4cm²): För användning nedanför halsen

Användningstid

Underben: 8 min

Under armarna: 1 min

Bikiniinje: 1 min

Medföljande tillbehör

Anvisningar för användning:

Snabbstartshandbok, Användarhandbok

Förvaring: Fodral

Adapter: 24 V/1500 mA

Effekt

Spänning: 100–240 V

Service

Garanti: 2 års global garanti

Programläge

Med och utan sladd: Med sladd

Applicera och blinka: För behandling på kurviga områden

