



Dispositivo di epilazione IPL

- Per il corpo, viso e zona bikini
- 15 minuti per parte inferiore gambe
- > 250.000 impulsi luminosi
- Design cordless

SC2009/00

Pelle sempre liscia*

Philips Lumea Prestige è la soluzione cordless IPL più efficace e risulta perfetta nel prevenire la ricrescita dei peli su viso e corpo. Delicati impulsi di luce, applicati regolarmente, mantengono la pelle liscia come la seta ogni giorno.

Vantaggi

Riduzione dei peli a lungo termine con la tecnologia IPL

- Adatta ad un uso sicuro ed efficace nel comfort di casa tua
- Pelle liscia ogni giorno
- Efficacia senza sforzo
- Adatto per numerosi tipi di peli e di pelle

Delicato ed efficace sul corpo, sul viso e nella zona bikini

- Sicuro ed efficace anche sulle zone delicate
- Ampia finestra di trattamento, per un'applicazione più veloce
- Accessorio per il viso per il trattamento viso sicuro

- Accessorio per il trattamento specifico dei peli della zona bikini
- Trattamento delicato

Massima libertà, minimo sforzo

- Comodità senza fili
- Nessuna parte di ricambio, nessun costo aggiuntivo
- 5 impostazioni di intensità della luce
- Lumea Prestige è fornito con un astuccio elegante

PHILIPS


Caratteristiche

Tecnologia IPL



Il funzionamento di Philips Lumea è basato sull'innovativa tecnologia IPL (Intense Pulsed Light), che deriva da quella utilizzata nei centri estetici. Philips ha adattato questa tecnologia per un utilizzo sicuro ed efficace nel comfort di casa tua. Questo innovativo sistema di rimozione dei peli superflui è stato sviluppato in collaborazione con dermatologi esperti ed è il frutto di oltre 10 anni di approfondite ricerche con oltre 2000 volontari.


Pelle liscia ogni giorno

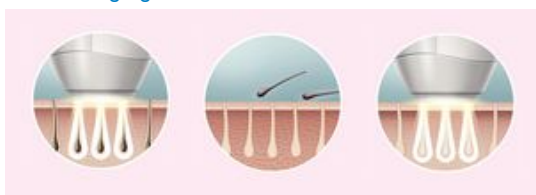


Philips Lumea emette dei delicati impulsi luminosi direttamente alla radice del pelo per una diminuzione graduale della ricrescita. La ripetizione del trattamento ti garantisce una pelle liscia al tatto.

Efficacia senza sforzo

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)

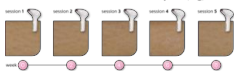


Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)

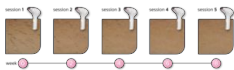


I nostri studi hanno dimostrato una significativa riduzione dei peli dopo quattro soli trattamenti eseguiti a distanza di due settimane, con pelle liscia e priva di peli. Per mantenere questi risultati è sufficiente ripetere i trattamenti quando è necessario. L'intervallo tra i trattamenti può variare in base alla ricrescita individuale. - Per ingrandire l'immagine, fai clic su di essa nella galleria nella parte superiore di questa pagina

Tipi di pelle e di peli compatibili

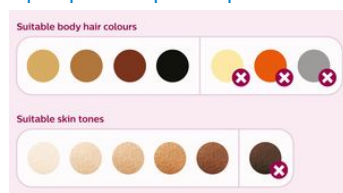

Philips Lumea è efficace sui peli di colore (naturale) biondo scuro, castano e nero. Come altri trattamenti basati sulla luce, Philips Lumea NON è efficace sui peli di colore rosso, biondo chiaro e grigio. Inoltre Philips Lumea NON è adatto alla pelle molto scura.

Zone di applicazione

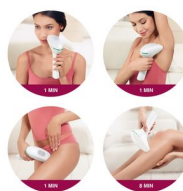

Può essere utilizzato in tutta tranquillità sul viso (labbro superiore, mento e basette) e su varie parti del corpo, comprese gambe, ascelle, zona bikini, addome e braccia.

Trattamento veloce sulle gambe



Ampia finestra di trattamento per l'applicazione rapida sulle aree più grandi come le gambe.

Maggiore sicurezza per il viso



Accessorio per il viso con filtro luce integrato per l'utilizzo comodo e sicuro su labbro superiore, mento e basette. Può essere anche utilizzato su altre zone sensibili del corpo, come le ascelle, e su altre zone difficili da raggiungere.

Accessorio zona bikini



Accessorio zona bikini per il trattamento efficace dei peli presenti in questa zona, generalmente più resistenti e spessi di quelli delle gambe.

Trattamento delicato



Delicato sulla pelle.

Comodità senza fili



L'esclusivo design senza fili di Lumea è perfetto per il trattamento delle zone che vuoi, in qualsiasi momento.

Non necessita di parti di ricambio



Philips Lumea è una soluzione completa, pronta per l'uso. Inoltre non richiede la sostituzione di lampadine né l'utilizzo di gel.

5 impostazioni di intensità della luce



Philips Lumea ha cinque impostazioni di intensità della luce per garantire un'epilazione delicata ma efficace. Se utilizzato correttamente, il trattamento a luce pulsata Lumea di Philips è sicuro e delicato anche su pelli e zone del corpo sensibili.

Custodia elegante

Philips Lumea Prestige è dotato di un astuccio elegante per riporre facilmente l'apparecchio.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Specifiche tecniche

Lampadina ad alte prestazioni	Assicura più di 250.000 impulsi di luce
-------------------------------	---

Zone di applicazione

Aree del corpo	Braccia Gambe Ventre Zona bikini Ascelle
Aree del viso	Mento Basette Labbro superiore

Accessori

Accessorio per il corpo (4 cm ²)	Per l'uso al di sotto della nuca
Accessorio zona bikini (2 cm ²)	Trattamento specifico della zona bikini
Accessorio per il viso (2 cm ²)	Per un'applicazione sicura sul viso

Accessori inclusi

Caricabatterie	Caricatore multitenzione
Istruzioni per l'uso	Manuale di istruzioni
Conservazione	Custodia elegante
Accessorio	Panno per la pulizia

Assorbimento

Tempo di carica	100 min
Tempo di funzionamento	Minimo 370 flash
Voltaggio	100-240 V

Impostazioni di sicurezza regolabili

Filtro UV integrato	Protegge la pelle dai raggi UV
5 impostazioni di intensità della luce	Regolabile in base al tipo di pelle
Sistema di sicurezza integrato	Impedisce l'attivazione accidentale del flash

Servizio

Garanzia	2 anni di garanzia
----------	--------------------

Tempo di applicazione

Polpacci	8 min
Ascelle	1 minuto
Zona bikini	1 minuto
Aree del viso	1 minuto

Modalità di applicazione

Slide and Flash	Per una pratica applicazione
Con filo/cordless	Cordless
Stamp e Flash	Per il trattamento sulle zone curve

Dimensioni dell'imballo

Altezza	19,00 cm
Larghezza	26,60 cm
Profondità	12,00 cm
Peso netto	0,86 Kg
Peso lordo	1,21 Kg
EAN	08710103747291
Numero di prodotti inclusi	1
Paese di origine	HU
Codice del sistema armonizzato	854370

Scatola esterna

Lunghezza	24,80 cm
Larghezza	19,70 cm
Altezza	28,00 cm
Peso lordo	2,58 Kg
EAN	18710103747298
Numero di confezioni consumatori	2



Dati soggetti a modifiche
2017, Settembre 9

Version: 5.6.1
EAN: 08710103747291

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.philips.com

* durante il programma di trattamento