

PHILIPS

Dispositivo IPL para depilação

Lumea Prestige

Com tecnologia SenseIQ

Áreas de precisão, corpo, rosto

Com sensor SmartSkin

Utilização com e sem fios



BRI954/00



Desfrute de uma pele macia sem pelos durante 6 meses*

3 acessórios inteligentes para resultados perfeitos

O Philips Lumea Prestige com tecnologia SenseIQ é o nosso sistema de IPL mais eficaz. Concebido para uma utilização cómoda em casa, os acessórios inteligentes do Lumea adequam-se na perfeição a todas as curvas do seu corpo e adaptam programas específicos para cada zona do corpo.

Pele macia e de longa duração com tecnologia de luz pulsada Lumea

- Tecnologia IPL avançada, desenvolvida em colaboração com dermatologistas
- Tratamento suave e eficaz comprovado
- Adequado para uma grande variedade de tipos de pelo e tons de pele
- Tecnologia SenseIQ para remoção de pelos personalizada
- Utilizar com ou sem fios

Tratamento por luz pulsada profissional para as zonas do corpo

- Acessórios inteligentes que adaptam os programas a cada zona do corpo
- Acessório de precisão para linha do biquíni e axilas
- Acessório corporal com design curvo
- Acessório de precisão para rosto com filtro adicional

Liberdade máxima, incómodo mínimo


- Com sensor SmartSkin
- Aplicação Lumea IPL. Consigo em todas as etapas
- Sem peças de substituição, sem custos ocultos



asimpleswitch.com


Destaques

A Lumea evita o crescimento do pelo*

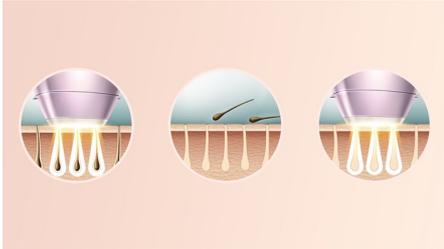

IPL significa luz intensa pulsada. A Philips Lumea aplica impulsos delicados de luz na raiz do pelo, colocando o folículo numa fase de repouso. Como consequência, a quantidade de pelo que cresce no seu corpo diminui gradualmente. A repetição do tratamento deixa a sua pele sem pelos e maravilhosamente suave. O tratamento para evitar o crescimento dos pelos é seguro e delicado, mesmo em áreas sensíveis. A Philips Lumea foi testada clinicamente e desenvolvida em colaboração com dermatologistas para um tratamento fácil e eficaz no conforto da sua casa.

Eficácia comprovada

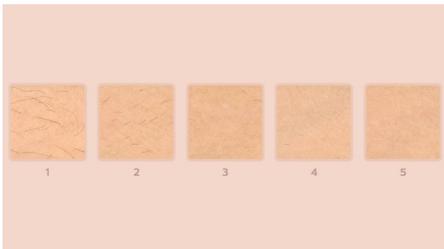

Estudos objetivos demonstram uma redução de pelos de até 92% após três tratamentos**. Realize os primeiros quatro tratamentos a cada duas semanas e os próximos oito tratamentos a cada quatro semanas. Após 12 tratamentos, pode desfrutar de seis meses de pele macia sem pelos*.

Tipos de pelo e pele adequados



O Philips Lumea Prestige é eficaz numa grande variedade de tipos de pelo e tons de pele. Funciona em pelo louro escuro natural,

castanho, e preto e em tons de pele desde muito claro a castanho escuro. Os tratamentos IPL necessitam de contraste entre o pigmento na cor do pelo e o pigmento no tom de pele, por isso (tais como outros tratamentos de IPL) o Lumea não pode ser utilizado para tratar pelo branco, grisalho, louro claro ou ruivo e não se adequa a pele morena escura.

Tecnologia SenseIQ



Deteta. O sensor SmartSkin do sistema Lumea deteta o seu tom de pele e indica qual definição de luz é mais confortável para si. Adapta. O acessório inteligente adapta programas personalizados para cada zona do corpo. Cuida. Desenvolvido em colaboração com dermatologistas e inspirado em si para remoção de pelos suave e de longa duração, mesmo em áreas sensíveis***.

Tratamento de zonas corporais



O seu corpo é único. E a sua pele, curvas e contornos devem ser tratados como tal. Os acessórios para todo o corpo Lumea adequam-se na perfeição a todas as curvas do seu corpo e adaptam programas específicos para cada zona do corpo. As janelas de tratamento foram concebidas para maximizar o contacto com a pele e para garantir que a luz é bem direcionada, assegurando tratamentos eficazes e suaves, mesmo em zonas delicadas ou sensíveis.

Acessório de precisão



O acessório inteligente de precisão é de tamanho médio, com janela de 3 cm², para uma cobertura precisa das áreas das axilas e linha do biquini. O design curvo segue os contornos do corpo para um contacto máximo com a pele. Quando o acessório é encaixado no dispositivo, adapta um programa personalizado a estas zonas do corpo.



asimpleswitch.com

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO₂. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

Especificações

Zonas de aplicação

Zonas do corpo: Braços, Pernas, Barriga

Áreas do rosto: Queixo, Buço, Maxilar

Áreas sensíveis: Axilas, Biquíni

Especificações técnicas dos acessórios

Acessório para tratamento corporal: Formato: curvo convexo, Tamanho da janela: 4,1 cm², Tratamento adaptado para corpo

Acessório para tratamento facial: Formato: plano, Tamanho da janela: 2 cm², filtro extra, Tratamento adaptado para rosto

Acessório para tratamento de precisão: Formato: curvo côncavo, preciso, Tamanho da janela: 3 cm², Tratamento adaptado para axilas, Tratamento adaptado para linha de biquíni

Modo de aplicação

Deslizar e pulsar: Para aplicação rápida

Posicionar e pulsar: Para tratamento em áreas pequenas

Utilização com fios/sem fios: Utilização com e sem fios

Segurança e definições ajustáveis

5 definições de energia da luz: Ajustável ao seu tipo de pele

Sistema de segurança integrado: Evitar impulsos de luz acidentais

Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios UV

Sensor de tom de pele: Detecta o seu tom de pele

Sensor SmartSkin: A regulação correcta sempre que desejar

Tempo de aplicação

Meia perna: 8,5 min.

Linha do biquíni: 2 min

Axilas: 2:30 min.

Áreas do rosto: 1:30 min.

Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: Proporciona > 250 000 impulsos de luz*****

Potência

Voltagem: 100-240 V

Itens incluídos

Adaptador: 19,5 V / 4000 mA

Instruções de utilização: Manual do utilizador

Armazenamento: Bolsa de luxo

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global

