

PHILIPS

Sistem za
odstranjevanje dlak IPL

Lumea

Za uporabo samo na telesu

15 min. za depilacijo sp. dela
nog

Za do 100.000 svetlobnih
impulzov

Brezžična zasnova



SC2001/01



Preprečite ponovno rast dlak

Odstranjevanje dlak z IPL: vsak dan uživajte v gladki koži

Aparat za odstranjevanje dlak Philips Lumea IPL čudežno preprečuje ponovno rast dlak po vsem telesu. Nežni svetlobni impulzi, ki jih uporabljate redno, vsak dan ohranjajo svileno gladko kožo.

Dolgotrajna gladkost

- Uživajte v gladki koži vsak dan
- Enostavno in učinkovito

Odstranjevanje dlak s tehnologijo IPL

- Prilagojeno za varno in udobno domačo uporabo
- Primerno vrste dlak in kože

Nežno in učinkovito, tudi na občutljivi koži

- Pet prilagodljivih nastavitvev svetlobne energije
- Območja uporabe

Popolna svoboda z malo truda

- Priročna brezžična uporaba
- Nadomestni deli niso potrebni




asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

Značilnosti

Dolgotrajna gladkost

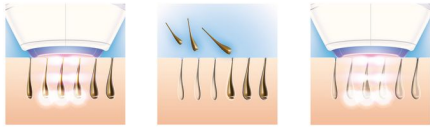

Philips Lumea korenino dlake osvetli z nežnim svetlobnim impulzom. Dlaka zato spontano odpade in ponovna rast dlake se ustavi. Redno izvajanje tega postopka zagotavlja, da boste vsak dan imeli gladko kožo.

Enostavno in učinkovito



Naše klinične raziskave so pokazale znatno zmanjšanje števila dlak že po dveh dvotedenskih postopkih, optimalne rezultate in gladko kožo pa po štirih do petih dvotedenskih postopkih. Da boste ohranili te rezultate, postopek ponavljajte vsakih štiri do šest tednov. Čas med postopki se lahko razlikuje glede na ponovno rast dlak.

Tehnologija IPL



Philips Lumea uporablja inovativno svetlobno tehnologijo, imenovano "intenzivna pulzna svetloba" (IPL), ki temelji na tehnologiji, ki jo uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih. Philips je to tehnologijo prilagodil tako, da omogoča varno in učinkovito domačo uporabo. Philips je v tesnem sodelovanju z vodilnimi

dermatologi razvil revolucionaren sistem za odstranjevanje dlak. Več kot 10 let smo izvajali obsežne raziskave s prek 1500 prostovoljci.

Nežna uporaba



Philips Lumea ima pet nastavitvev svetlobne energije za nežno in učinkovito odstranjevanje dlak. Če aparat Philips Lumea uporabljate pravilno, je odstranjevanje dlak z intenzivno pulzno svetlobo varno in nežno tudi na občutljivi koži in občutljivih predelih telesa.

Priložna brezžična uporaba



Edinstvena brezžična zasnova aparata Lumea je idealna za odstranjevanje dlak na zelenih predelih in kadar želite.

Nadomestni deli niso potrebni



Philips Lumea je popolna rešitev, ki jo lahko začnete uporabljati takoj. Kar je še pomembnejše, ne potrebujete nadomestnih sijalk ali gelov.

Območja uporabe



Zanesljivo odstranjujete dlake na predelih telesa pod vratom: noge, pazduhe, predel bikinija, roke in trebuh.

Primerne vrste dlak in kože



Philips Lumea je učinkovit na (naravno) temno blond, rjavih in črnih dlakah. Kot ostali načini svetlobnega odstranjevanja dlak tudi Philips Lumea NI učinkovit na rdečih, svetlo blond in belih/sivih dlakah. Philips Lumea NI primeren tudi za zelo temno kožo.



asimpleswitch.com

Philipsov zeleni logotip

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Tehnične specifikacije

Pretok svetlobe (J/cm²): 2–6,5 (odvisno od nastavitve)

Svetlobni spekter: > 570 nm

Visokozmogljiva sijalka: Zagotavlja do 80.000 osvetlitev

Območja uporabe

Predeli telesa: Noge, Roke, Pazduhe, Trebuh, Predel bikinija

Nastavki

Nastavek za telo (3 cm²): Za uporabo pod vratom

Priloženi predmeti

Polnilnik: Večnapetostni polnilnik

Navodila za uporabo: Predstavitveni DVD, Vodnik za hiter začetek, Uporabniški priročnik

Shranjevanje: Torbica

Napajanje

Čas polnjenja: 100 min

Čas delovanja: Najmanj 320 osvetlitev

Napetost: 100–240 V

Varnost in prilagodljive nastavitve

Vgrajen UV-filter: Kožo varuje pred UV-svetlobo

5 nastavitve svetlobne energije: Prilagodljivo

glede na vrsto kože

Vgrajeni varnostni sistem: Preprečuje nenamerno osvetljevanje

Servis

Garancija: 2-letna globalna garancija

Način uporabe

Žična/brezžična uporaba: Brezžično

Korak in osvetlitev: Za odstranjevanje dlak na neravnih predelih

Čas uporabe

Pazduha: 1 minuta

Predel bikinija: 1 minuta

Golen: 8 minut

