

PHILIPS

IPL-
hårborttagningssystem

Lumea

Precision



SC2002/00



Förhindra håråterväxt

Få len hud i ansiktet och på kroppen varje dag

Philips Lumea IPL-hårborttagningssystem gör underverk när det gäller att förhindra håråterväxt på hela kroppen. Lätta ljuspulser, som tillämpas regelbundet, håller huden silkeslen varje dag.

Varaktig mjukhet

- Len hud varje dag
- Effektivt utan ansträngning

Hårborttagning med IPL-teknik

- Anpassad för säkert hemmabruk
- Lämpliga hår- och hudtyper

Skonsam och effektiv applicering på ansiktet och på kroppen

- även på känslig hud och känsliga kroppsdelar
- Särskilt utformad för att ge extra skydd för ansiktet
- Tillämpningsområden

Maximal frihet, minimalt krångel


- Sladdlös bekvämlighet
- Inga reservdelar krävs



asimpleswitch.com

Funktioner

Varaktigt mjukhet

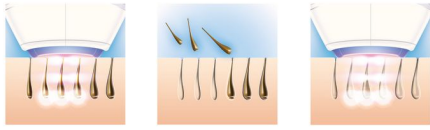

Philips Lumea tillämpar lätta ljuspulser på hårroten. På så sätt ramlar håret av naturligt och återväxten förhindras. Om du regelbundet upprepar behandlingen håller du huden len varje dag.

Effektivt utan ansträngning



Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter två behandlingar med en veckas mellanrum, och optimalt resultat efter fyra till fem behandlingar varannan vecka. Bibehåll resultaten genom att helt enkelt upprepa behandlingen var fjärde till sjätte vecka. Behandlingsintervallet kan variera beroende på just din takt för håråterväxt.

IPL-teknik



Philips Lumea använder en innovativ ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light) som har utvecklats från teknik som används i professionella skönhetsalonger. Philips har anpassat tekniken för säkert och effektivt hemmabruk. Philips har haft ett nära samarbete med ledande dermatologer för att utveckla det här

banbrytande hårborttagningssystemet. I över 10 år har vi gjort utförliga kundundersökningar med mer än 1 500 frivilliga.

Säker och skonsam att använda



Philips Lumea har fem justerbara lampenergiinställningar som säkerställer en skonsam men effektiv behandling. Om den utförs på rätt sätt är IPL-behandling med Philips Lumea säker och skonsam även för känslig hud och känsliga kroppsdelar. Behandlingstiden och hur ofta du behöver ladda batteriet beror på vald inställning och vilket område som behandlas.

Sladdlös bekvämlighet




Lumeas unika sladdlösa design passar perfekt för att behandla de områden du vill, när du vill.

Inga reservdelar krävs




Philips Lumea är en komplett lösning som levereras körklar. Och framförallt krävs inga reservlampor eller någon gel.

Tillämpningsområden

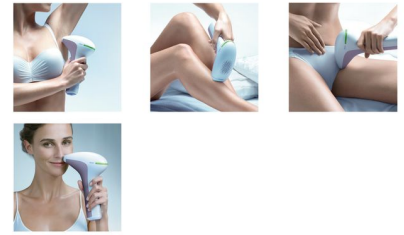

Den kan tryggt användas för hårborttagning på ansikte (överläpp, haka och polisonger) och kroppsdelar, inklusive ben, underarmar, bikinilinj, mage och armar.

Utformad för användning på ansikte och kropp

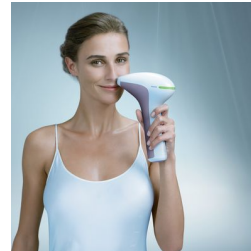

Det här precisionstillbehöret har utformats särskilt för användning på ansiktet. Det inkluderar ett extra inbyggt ljusfilter som ger ytterligare skydd för ansiktet. Den kan hantera ett litet behandlingsområde vilket lämpar sig särskilt för användning på överläppen och andra svåråtkomliga områden.

Lämpliga hår- och hudtyper



Philips Lumea fungerar effektivt på (naturligt) mörkblont, brunt och svart hår. Som med andra ljusbaserade behandlingar fungerar Philips Lumea INTE på rött, ljusblont eller vitt/grått hår. Philips Lumea lämpar sig heller INTE för mycket mörk hud.

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Ljusfluens (J/cm²): Tillbehör för kroppsbehandling: 2–6,5, Precisionstillbehör: 2–5,5

Ljusspektrum: Tillbehör för kroppsbehandling > 570 nm, Precisionstillbehör > 600 nm

Högprestandalampa: Producerar > 80 000 ljussignaler

Tillämpningsområden

Kroppsdelar: Ben, Armhålor, Bikinilinje, Armar, Mage

Ansiktets delar: Övertäpp, Haka, Polisonger

Tillbehör

Tillbehör för kroppsbehandling (3 cm²): För användning nedanför halsen

Precisionstillbehör (2 cm²): För säker användning på ansiktet

Medföljande tillbehör

Laddare: Flerspänningsladdare

Anvisningar för användning: Demo-DVD,

Komplett användarhandbok,

Snabbstartshandbok

Förvaring: Skönhetsväska

Effekt

Strömförsörjning: Laddningsbart batteri

Laddningstid: 100 minuter

Drifttid: Minst 320 ljussignaler

Spänning: 100–240 V

Säkerhetsinställning och justerbara inställningar

Integrerat UV-filtrer: Skyddar din hud från UV-ljus

Säkerhetsringsystem: Förhindrar oavsiktliga ljussignaler

5 lampenergiinställningar: Justerbar för din hudtyp

Service

Garanti: 2 års global garanti

