

PHILIPS

IPL-
hårfjerningsenhed

Lumea Prestige

Med SenseIQ-teknologi

Præcisionsområder, krop, ansigt

Med SmartSkin-sensor

Til brug med eller uden ledning



BRI953/00



Nyd 6 måneder med glat og hårfri hud*

3 intelligente tilbehørsdele – til optimale resultater

Philips Lumea Prestige med SenseIQ-teknologi er vores mest effektive IPL. Lumea er udviklet til bekvem og praktisk behandling i hjemmet og har intelligente tilbehørsdele, der passer perfekt til alle kroppens kurver og tilpasser programmer, der er skræddersyet til alle kropsområder.

Glat hud i lang tid med Lumea IPL-teknologi

- IPL-teknologi til brug derhjemme, er udviklet i samarbejde med dermatologer
- Dokumenteret blid og effektiv behandling
- Velegnet til en lang række hår- og hudtyper
- SenseIQ-teknologi til personlig tilpasset hårfjerning
- Kan bruges både uden eller med ledning

Professionel IPL-behandling til din krops områder

- Intelligent tilbehør tilpasser programmer til alle kropsområder
- Præcisionstilbehør til bikinilinen og armhulerne
- Kropstilbehør med konkavt design
- Præcisionstilbehør til ansigtet med ekstra filter

Maksimal frihed, minimalt besvær


- Med SmartSkin-sensor
- Lumea IPL-appen. Få hjælp hele vejen igennem
- Ingen udskiftelige dele, ingen skjulte udgifter



asimpleswitch.com

Vigtigste nyheder

Lumea forhindrer, at håret vokser ud igen*

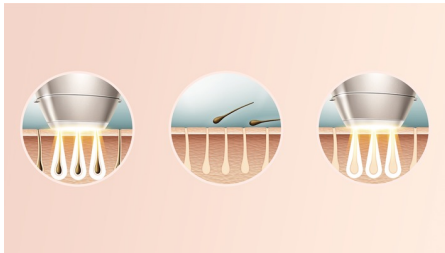


IPL står for Intense Pulsed Light (intense pulserende lys). Philips Lumea sender blide lysimpulser mod hårroden, og bringer folliklen i en hvilefase. Som følge heraf falder antallet af hår, som vokser ud på kroppen, gradvist. Gentagne behandlinger gør huden smuk uden hår og blød at røre ved. Behandling med henblik på at undgå hårgenvækst er sikker og nænsom, selv på følsomme områder. Philips Lumea er klinisk testet og udviklet i samarbejde med dermatologer med henblik på en nem og effektiv behandling i hjemmets trygge rammer.

Bevist effektivitet



Uafhængige undersøgelser viser, at man kan opnå op til 92 % reduktion af hår efter tre behandlinger**. Udfør de første fire behandlinger hver anden uge og de efterfølgende otte behandlinger hver fjerde uge. Efter 12 behandlinger kan du nyde seks måneder med hårfri og glat hud*.


Velegnede hår- og hudtyper

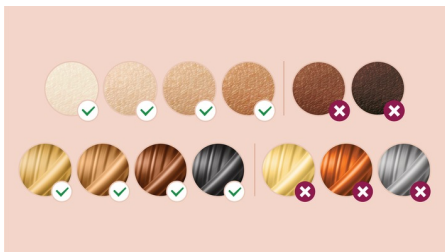

Philips Lumea Prestige er effektiv til en lang række hår- og hudtyper. Den fungerer på naturligt mørkblond, brunt og sort hår og på hudfarver fra meget hvid til mørkebrun. IPL skal

bruge kontrast mellem pigment i hårfarven og pigment i hudfarven, derfor (som med andre IPL-baserede behandlinger) kan Lumea ikke bruges til at behandle hvidt, gråt, lys blondt eller rødt hår – og er ikke velegnet til meget mørk hud.

SenseIQ-teknologi

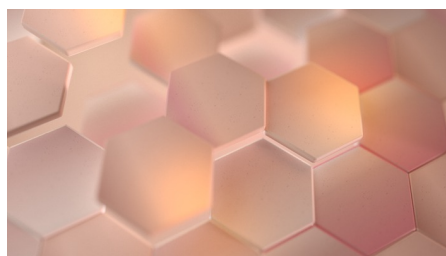

Registrerer. Lumeas SmartSkin-sensor registrerer din hudfarve og angiver den mest behagelige lysindstilling for dig. Tilpasser sig. Intelligent tilbehør tilpasser programmer, der er skræddersyet til alle områder på kroppen. Plejer. Udviklet i samarbejde med dermatologer og inspireret af dig for at opnå blid og holdbar hårfjerning, selv på følsomme områder***.

Behandling af kropsområder



Din krop er unik. Og dens hud, kurver og konturer skal også behandles unikt. Lumeas tilbehør til hele kroppen er formet, så det passer perfekt til alle kurver, og tilpasser programmer, der er skræddersyet til alle kropsområder. Behandlingsvinduerne er designet til at maksimere kontakten med huden for at sikre, at lyset ikke slipper ud, hvilket muliggør effektive og skånsomme behandlinger, selv på sarte eller følsomme områder.

Præcisionstilbehør



Det intelligente præcisionstilbehør har en mellemstor størrelse med et 3 cm² vindue til præcis dækning af bikinilinen og armhulerne. Det konkave design følger kroppens konturer tæt for at opnå maksimal hudkontakt. Når du klikker på tilbehøret på enheden, tilpasser det et skræddersyet program til disse kropsområder.

Kropstilbehør



Det intelligente kropstilbehør har vores største behandlingsvindue på 4,1 cm², så det er perfekt til hurtig behandling af større områder af kroppen, som f.eks. ben, arme og mave. Det konkave design følger kroppens konturer tæt for at opnå maksimal hudkontakt. Klik på tilbehøret, så tilpasser det et skræddersyet program specifikt til din krop. 83 % af kvinder er tilfredse med reduktionen i antallet af hår på benene****.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder - energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

Specifikationer

Anvendelsesområder

Områder af kroppen: Arme, Ben, Mave

Ansigtsområder: Hage, Overlæbe, Kæbelinje

Følsomme områder: Armhuler, Bikinilinj

Tekniske specifikationer for tilbehør

Kropsbehandlingstilbehør: Vinduesstørrelse:

4,1 cm², Form: Konvekst buet, Skræddersyet behandling til kroppen

Ansigtsbehandlingstilbehør: Form: Flad,

Vinduesstørrelse: 2 cm², ekstra filter,

Skræddersyet behandling til ansigtet

Præcisionsbehandlingstilbehør: Form: Konkavt

buet, præcis, Vinduesstørrelse: 3 cm²,

Skræddersyet behandling til armhulerne,

Skræddersyet behandling til bikinilinen

Programtilstand

Slide and Flash: For hurtig anvendelse

Stamp and Flash: Til behandling på små områder

Ledningsbaseret/ledningsfri brug: Til brug med eller uden ledning

Sikkerhed og justerbare indstillinger

5 lysenergiindstillinger: Justerbar i forhold til din hudtype

Integreret sikkerhedssystem: Undgå utilsigtede blink

Integreret UV-filter: Beskytter huden mod UV-lys

Hudfarvesensor: Registrerer din hudfarve

SmartSkin-sensor: Den rigtige indstilling ved behov

Anvendelsestid

Underben: 8,5 min

Bikinilinj: 2 min

Armhule: 2,5 min.

Ansigtsområder: 1,5 min.

Tekniske specifikationer

Højeffektivt lys: Giver > 250.000 blink*****

Strøm

Spænding: 100–240 V

Medfølgende dele

Adapter: 19,5 V / 4.000 mA

Brugervejledning: Brugervejledning

Opbevaring: Luksusetui

Service

Garanti: 2 års global reklamationsret

