



Épilateur à lumière pulsée

- Avec technologie SenselQ
- Zones de précision, corps, visage
- Avec capteur SmartSkin
- Fonctionne sans fil et sur secteur

BRI954/00

Une peau lisse pendant 6 mois*

3 embouts intelligents, pour des résultats optimaux

Le Philips Lumea Prestige avec technologie SenselQ est le plus efficace de nos épilateurs à lumière pulsée. Conçu pour permettre une utilisation pratique à domicile, il est équipé d'accessoires intelligents qui épousent parfaitement vos courbes et adaptent les programmes à chaque zone de votre corps.

Avantages

Une peau durablement lisse avec la technologie IPL Lumea

- Expert de la technologie de lumière pulsée à domicile, développée avec des experts de la peau
- Douceur et efficacité prouvées
- Convient à de nombreux types de peau et de poils
- Technologie SenselQ pour une épilation personnalisée
- Utilisation avec ou sans fil

Épilation à la lumière pulsée pour différentes zones du corps

- Des accessoires intelligents qui adaptent l'épilation à la zone du corps

- Embout de précision pour la zone du maillot et les aisselles
- Embout pour le corps de forme concave
- Embout précis pour le visage avec filtre supplémentaire

Liberté absolue, contraintes minimales

- Avec capteur SmartSkin
- Application Lumea IPL, avec vous à chaque instant
- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire


PHILIPS

Fonctions

Lumea prévient la repousse des poils*


IPL est l'abréviation de Intense Pulsed Light, ou lumière pulsée. Philips Lumea envoie de légères impulsions lumineuses à la racine du poil pour le forcer à passer en phase de repos, ce qui réduit progressivement la pilosité produite par votre corps. Des séances régulières laissent votre peau parfaitement nette et lisse. Cette technologie de prévention de la repousse des poils est une solution sûre et douce, même sur les zones sensibles. Philips Lumea a fait l'objet de tests cliniques et a été développé en collaboration avec des experts de la peau, pour une solution simple et efficace à domicile.

Efficacité prouvée

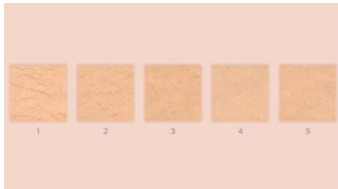

Des études objectives ont mis en évidence jusqu'à 92 % de réduction de la pilosité après trois séances**. Effectuez les quatre premières séances toutes les deux semaines, et les huit séances suivantes toutes les quatre semaines. Au bout de 12 séances, vous bénéficierez de six mois de peau douce*.

Types de peaux et de poils adaptés

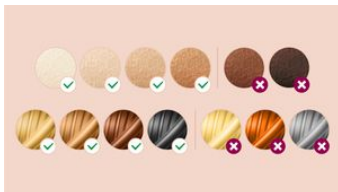

L'épilateur Philips Lumea Prestige est efficace sur de nombreux types de peau et de poils. Il fonctionne sur les poils naturellement blond foncé, bruns et noirs et sur les teints de peau allant de très blanc à marron foncé. La technologie de lumière pulsée nécessite un contraste entre la pigmentation du poil et de la peau. C'est pour cette raison que les appareils Lumea (comme les autres épilateurs à lumière pulsée) ne peuvent pas être utilisés sur les poils blancs, gris, blond clair ou roux, et ne sont pas adaptés aux peaux très foncées.

Technologie SenselQ



Détection. Le capteur SmartSkin détecte votre couleur de peau et indique le réglage d'intensité lumineuse le plus confortable. Adaptation. Les embouts intelligents adaptent les programmes en fonction de chaque zone du corps. Préservation. Développé pour vous en collaboration avec des dermatologues, il permet d'éliminer les poils durablement, tout en douceur, même sur les zones sensibles***.

Pour les zones du corps



Votre corps est unique. Sa peau, ses courbes et ses contours méritent une prise en charge tout aussi unique. Les accessoires pour tout le corps du Lumea sont profilés pour suivre parfaitement toutes vos courbes, et ils adaptent les programmes à chaque zone du corps. Les fenêtres de flashage

sont conçues pour maximiser le contact avec la peau afin qu'aucune lumière ne s'échappe, permettant ainsi une utilisation douce et efficace, même sur les zones sensibles ou délicates.

Embout de précision



L'embout de précision est de taille moyenne et doté d'une fenêtre de flashage de 3 cm² afin de permettre une utilisation précise sur la zone du maillot et les aisselles. Sa forme incurvée suit parfaitement les courbes du corps, maximisant le contact avec la peau. Lorsque cet embout est clipsé sur l'appareil, il déclenche un programme parfaitement adapté à ces zones du corps.

Embout pour le corps



L'embout intelligent pour le corps est doté de notre plus grande fenêtre de flashage (4,1 cm²), ce qui est idéal pour épiler rapidement de grandes zones du corps telles que les jambes, les bras et le ventre. Sa forme concave suit parfaitement les courbes du corps, maximisant le contact avec la peau. Clipsez cet embout pour qu'il déclenche un programme parfaitement adapté à la zone de votre corps. 83 % des femmes se disent satisfaites de la réduction de leur pilosité au niveau des jambes***.

Embout pour le visage



L'embout pour le visage a été conçu avec une petite fenêtre plate de 2 cm² vous permettant d'éliminer efficacement et en douceur votre pilosité faciale. Idéal pour la lèvre supérieure, le menton ou la mâchoire, cet embout intègre en outre un filtre supplémentaire. Lorsqu'il est fixé à l'appareil, cet embout intelligent adapte automatiquement le flashage à votre visage. 84 % des femmes se disent satisfaites de la réduction de leur pilosité faciale*.

Capteur SmartSkin



L'épilateur Philips Lumea Prestige avec technologie SenselQ offre cinq réglages d'intensité lumineuse. Le capteur SmartSkin détecte votre couleur de peau puis indique le réglage d'intensité lumineuse le plus confortable pour la zone concernée.


Lumea Prestige

Utilisation avec et sans fil



Le Lumea Prestige est le seul épilateur à lumière pulsée sans fil. Il permet d'atteindre facilement les zones du corps difficiles d'accès, sans être gêné par un cordon. Et comme il est sans fil, vous pourrez vous épiler facilement où vous le souhaitez chez vous.

Application Philips Lumea IPL

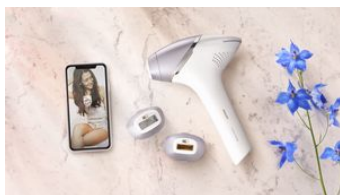

L'application gratuite Lumea IPL vous permet de garder la peau lisse jusqu'à six mois* encore plus facilement, à domicile. À chaque étape, cette application intuitive peut vous assister en fournissant des conseils et astuces portant sur votre technique, tandis que ses programmes personnalisés et son planning adaptatif offrent une gestion des dates optimales. Ainsi, vous serez toujours impeccable, le plus rapidement possible.

Aucune pièce de rechange nécessaire



Philips Lumea est une solution complète, vendue prête à l'emploi, qui ne nécessite ni pièce de rechange, ni consommable, ni gel. Pas même une lampe de rechange.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Zones d'application

Parties du corps	Bras Jambes Ventre
Parties du visage	Menton Lèvre supérieure Menton
Zones sensibles	Aisselles Maillot

Capteur de teint de peau	Détecte votre teint de peau
Capteur SmartSkin	Le réglage adapté à la demande

Durée d'utilisation

Demi-jambes	8,5 min
Maillot	2 min
Aisselle	2,5 min
Parties du visage	1,5 min

Caractéristiques techniques des accessoires

Accessoire corps	Forme : convexe Taille de la fenêtre : 4,1 cm ² Utilisation adaptée au corps
Accessoire visage	Forme : plate Taille de la fenêtre : 2 cm ² , filtre supplémentaire Utilisation adaptée au visage
Accessoire de précision	Forme : concave, précise Taille de la fenêtre : 3 cm ² Utilisation adaptée aux aisselles Utilisation adaptée à la zone du maillot

Spécificités techniques

Lampe haute performance	Produit > 250 000 flashes*****
-------------------------	--------------------------------

Alimentation

Tension	100-240 V
---------	-----------

Accessoires inclus

Adaptateur	19,5 V / 4 000 mA
Conditions d'utilisation	Mode d'emploi
Rangement	Étui de luxe

Mode d'application

Flash Continu & Manuel	Pour une utilisation rapide
Flash & Manuel	Pour une utilisation sur les petites zones
Utilisation avec ou sans fil	Fonctionne sans fil et sur secteur

Entretien

Garantie	Garantie mondiale de 2 ans
----------	----------------------------

Dimensions de l'emballage

Hauteur	19,00 cm
Largeur	26,50 cm
Profondeur	14,00 cm
Poids net	1,00 kg
Poids brut	1,64 kg
EAN	08710103776000
Nombre de produits inclus	1
Pays d'origine	SI

Sécurité et paramètres réglables

5 réglages d'intensité lumineuse	S'adapte à votre teint de peau
Système de sécurité intégré	Évite les flashes accidentels
Filtre UV intégré	Protège votre peau des rayons UV

Lumea Prestige

Code du système
harmonisé 854370

Hauteur 27,40 cm
Poids brut 3,48 kg
EAN 18710103776007
Nombre d'emballages 2

Carton externe

Longueur 28,80 cm
Largeur 20,00 cm

* Réduction médiane de la pilosité au bout de 12 séances : 78 % sur les jambes, 64 % sur le maillot, 65 % sur les aisselles
** Mesuré sur les jambes, au bout de 3 traitements, résultats de 92 % ou plus observés sur 27 femmes sur 55
*** En suivant le calendrier du programme
**** Étude menée aux Pays-Bas et en Autriche ; 56 femmes ; au bout de 3 séances sur les aisselles, le maillot, les jambes ; au bout de 2 séances sur le visage
***** La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale Philips de 2 ans



Les données sont sujettes
à changement
2019, décembre 13

Version: 9.3.1
EAN: 08710103776000

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com