

# PHILIPS

## IPL Lichtontharing

### Lumea Prestige

Voor lichaam, gezicht en  
bikinilijn

Behandeling onderbenen in 15  
minuten

> 250.000 lichtflitsen

Snoerloos ontwerp



SC2009/00



## Voortdurend een glad gevoel\*

Philips Lumea Prestige is de effectiefste draadloze IPL-oplossing om teruggroei van haar op het gezicht en het lichaam te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.

### Haar blijft lang weg met IPL-technologie

- Elke dag een zijdezachte huid
- Moeiteloos en effectief
- Aangepast voor veilig en effectief gebruik in uw eigen huis
- Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen

### Zacht en doeltreffend voor lichaam, gezicht en bikinilijn

- Veilig en effectief, zelfs op gevoelige gebieden
- Groot behandelvenster voor snel gebruik
- Hulpstuk voor veilige ontharing van het gezicht
- Hulpstuk voor zorgvuldige ontharing van de bikinilijn
- Zachte behandeling

### Maximale vrijheid, geen gedoe

- Snoerloos gemak
- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten
- Vijf instelbare lichtsterktes



asimpleswitch.com


# Kenmerken

## IPL technologie



Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.

## Elke dag een zijdezachte huid

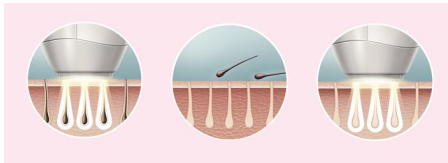

Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsjes naar de haarwortel. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad.

## Moeiteloos en effectief

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier behandelingen elke twee weken. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is

afhankelijk van hoe snel uw haar teruggroeit - U kunt deze afbeelding vergroten door boven aan deze pagina op de afbeelding te klikken in de fotogalerij

## Geschikte haar- en huidtypen




Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is Philips Lumea NIET geschikt voor een zeer donkere huid.

## Toepassingsgebieden



Ideaal voor het verwijderen van haar op het gezicht (bovenlip, kin en bakkebaarden) en lichaamsdelen zoals benen, oksels, de bikinilijn, buik en armen.

## Snelle behandeling van benen

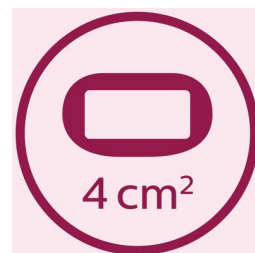

Groot behandelvenster voor snelle toepassing op grote gebieden, zoals de benen.

## Extra veiligheid voor het gezicht



Het hulpstuk voor het gezicht heeft een eigen, speciaal ontworpen geïntegreerd lichtfilter voor veilig en gemakkelijk gebruik op de bovenlip, kin en bakkebaarden. Het kan ook op andere gevoelige gebieden op het lichaam worden gebruikt, zoals de oksels en andere moeilijk te bereiken gebieden.

## Hulpstuk voor bikinilijn



Bikinilijnhulpstuk voor doeltreffende behandeling van de bikinilijn. Haar in dit gebied is doorgaans sterker en dikker dan haar op de benen.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Technische specificaties

**Lamp met hoge prestaties:** Kan meer dan 250.000 pulsen afgeven

## Toepassingsgebieden

**Lichaamszones:** Armen, Benen, Buik, Bikini, Oksels

**Delen van het gezicht:** Kin, Bakkebaarden, Bovenlip

## Accessoires

**Lichaamsopzetstuk (4 cm<sup>2</sup>):** Voor gebruik onder de neklijn

**Hulpstuk voor bikinilijn (2 cm<sup>2</sup>):** Speciale behandeling voor bikinilijn

**Hulpstuk voor gezicht (2 cm<sup>2</sup>):** Voor veilig gebruik op het gezicht

## Meegeleverde artikelen

**Docking station:** Oplader voor verschillende voltages

**Instructies voor gebruik:** Gebruiksaanwijzing

**Opbergen:** Luxe etui

**Accessoire:** Schoonmaakdoekje

## Vermogen

**Oplaadtijd:** 100 min.

**Gebruikstijd:** Minimaal 370 flitsen

**Voltage:** 100 - 240 V

## Veiligheid en aan te passen standen

**Geïntegreerd UV-filter:** Beschermt uw huid tegen UV-straling

**5 lichtsterktes:** Aanpasbaar aan uw huidtype

**Geïntegreerd veiligheidssysteem:** Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

## Service

**Garantie:** 2 jaar algemene garantie

## Behandeltijd

**Onderbeen:** 8 min.

**Okseel:** 1 min

**Bikinilijn:** 1 min

**Delen van het gezicht:** 1 min

## Toepassingsmodus

**Glij- en flitsmodus:** voor eenvoudig gebruik

**Met of zonder snoer te gebruiken:** Draadloos

**Stap en Flits:** Voor behandeling van lichaamscontouren

